



Brocas Descartáveis

Broca Automática

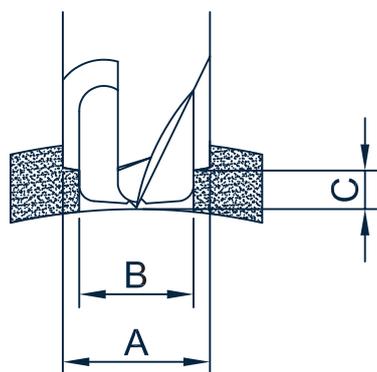


A Broca Automática da Biometal é indicada para realização do primeiro acesso em procedimentos de craniotomia através de orifícios de trepanação, tendo sua ação interrompida automaticamente ao entrar em contato com tecidos moles.

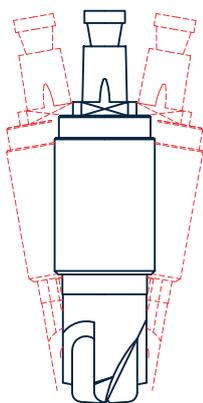


A ø 11 mm



A ø 14 mm

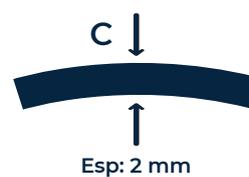

Esp: 2 mm

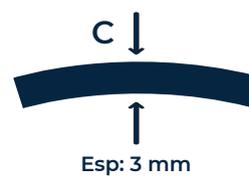



Esp: 3 mm

MODO DE USO (IMPORTÂNCIA DO POSICIONAMENTO CORRETO):

A fim de assegurar uma operação segura e eficaz, é de suma importância manter a posição precisa (90°) do perfurador em relação ao crânio. Essa posição deve ser constantemente mantida em mente durante todo o processo de perfuração.

A - Diâmetro Externo de Perfuração
B - Diâmetro Interno de Perfuração
C - Espessura mínima do crânio necessária para o sistema de parada automática atuar.

Tipos de Engates

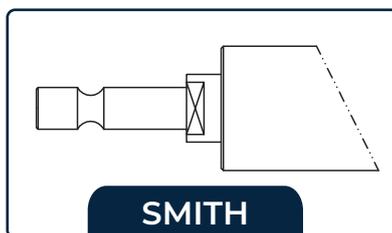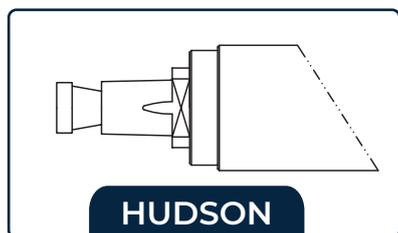

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
HUDSON: 80482490025
SMITH: 80482490003



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

