



LINHA ESTÉRIL  
NÃO REUTILIZÁVEL

INSTRUÇÃO  
DE USO

# BROCAS DIAMANTADAS Estéreis

## CADASTRO ANVISA nº 80482490024

*NOTA: Visando facilidade de acesso as informações, conforme IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, a **BIOMETAL** disponibiliza todas as INSTRUÇÕES DE USO de seus produtos através do endereço eletrônico <http://www.biometal.med.br>.*

É importante verificar a correlação adequada da revisão da INSTRUÇÃO DE USO, conforme orientação contidas no impresso “ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO” – que segue junto ao produto para saúde adquirido, e está replicado na última deste documento.

### Produtos Fabricados e Distribuídos por:



#### BIOMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 07.165.928/0001-75

Endereço: V LUIZ VARGA 2010 - GLEBA BEATRIZ - Cidade/UF: LIMEIRA/SP

CEP: 13.486-606

Fones: (19) 3495-2485 / (19) 3495 3296

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA VICELLI – CREA/SP 5063105420

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOME TÉCNICO: Brocas Cirúrgicas

CLASSE DE RISCO ANVISA: II

NOME COMERCIAL: BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS

MODELOS COMERCIAIS NESTE CADASTRO:

- BROCA DIAMANTADAS

MODELOS DE CONEXÃO / ENGATE:

- ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5, ER-6, ER-7, ER-8, ER-9, ER-10, ER-11, ER-12, ER-13, ER-14, ER-15, ER-16, ER-17, ER-18, ER-19, ER-20.

# INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024



## DIÂMETROS: Ø

- 0,60 / 0,70 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,30 / 2,50 / 2,70 / 2,90 / 3,10 / 3,50 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,00 / 7,00 mm

## COMPRIMENTOS:

- De 50,00 a 200,00 mm

## MATÉRIA PRIMA:

- Aço Inoxidável 420B, 440C, M340 (ASTM F899).













## PRODUTO ESTÉRIL - USO ÚNICO

**MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:** Óxido de Etileno ou Radiação GAMA (ver indicação do método aplicado na rotulagem do produto adquirido)

**VALIDADE:** 05 anos (após a data da esterilização)

## REPROCESSAMENTO PROIBIDO

### LEGENDA DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS EMBALAGENS

	Código do produto		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Código de lote		Manter ao abrigo do sol
	Data de Validade		Manter seco
	Data de Fabricação		Frágil, manusear com cuidado
	Consultar instruções de uso		Produto Estéril – Esterilizado utilizando óxido de etileno
	Produto de uso único		Esterilizado utilizando irradiação

## APRESENTAÇÃO

A família de BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS fabricadas pela BIOMETAL é composta por instrumentos de corte sem articulação, cuja finalidade é auxiliar na perfuração, corte ou fresagem dos tecidos ósseos durante diversas especialidades cirúrgicas.

Esses instrumentos devem ser utilizados em motores Cirúrgicos, conforme encaixe normatizados nos modelos ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5, ER-6, ER-7, ER-8, ER-9, ER-10, ER-11,

ER-12, ER-13, ER-14, ER-15, ER-16, ER-17, ER-18, ER-19, ER-20, que confirmam total compatibilidade para o uso das brocas cirúrgicas da BIOMETAL.

*É importante consultar-se esta instrução de uso, o rotulo do produto e a técnica operatória reserva ao médico para obter informações quanto as indicações e contraindicações de utilização, bem como aos riscos associados, modo de uso e alertas importantes.*

As BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS são produtos invasivos cirurgicamente e não reutilizáveis.

## COMPOSIÇÃO

Os materiais utilizados para fabricação dos instrumentos cirúrgicos foram selecionados em conformidade com as normas regulamentares vigentes.

São utilizados na fabricação dos instrumentais os aços inoxidáveis de acordo com a norma ASTM F899 - “Standard Specification for Wrought Stainless Steel for Surgical Instruments”: 420B, 440C, M340.

O processo de fabricação das brocas fabricadas pela BIOMETAL preserva as propriedades do metal, a estabilidade, e a resistência ao trabalho e a corrosão.

## INDICAÇÃO E FINALIDADE

As BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS são classificadas tecnicamente como instrumentos cirúrgicos, e podem ser empregadas para PERFURAÇÃO, CORTE ÓSSEO, DESBASTE ÓSSEO, ACABAMENTO DE ORIFÍCIOS ou POLIR tecidos ósseos e/ou outras estruturas de materiais (por exemplo: compósitos, cimentos cirúrgicos).

## CONTRAINDICAÇÃO

Os instrumentais cirúrgicos não devem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetados, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

## FORMA DE APRESENTAÇÃO

As BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS da BIOMETAL são comercializadas na condição estéril, embaladas unitariamente em sistema de duplo blister selado com papel Tyvek®, e acondicionadas em uma cartonagem – este sistema de embalagem promove proteção da condição estéril, bem como do produto até seu uso clínico.

Todas as BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS contêm informações gravadas a laser para fins de rastreabilidade:

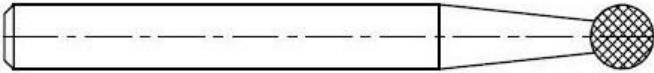
Sobre o Blister externo e sobre a cartonagem de cada unidade de BROCA DIAMANTADA da BIOMETAL é fixado um rótulo, que fornece os seguintes dados do produto: LOTE, DESCRIÇÃO, Nº CADASTRO ANVISA, NOME TÉCNICO E COMERCIAL, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE e MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO empregado.

Dentro de cada embalagem é disponibilizado de forma adicional:

- ➔ 3 VIAS da ETIQUETA DE RASTREABILIDADE = a serem utilizadas para fins de rastreabilidade e;
- ➔ 1 VIA do impresso “ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO” = contendo as informações necessárias que permite a posterior consulta de sua IU – INSTRUÇÃO DE USO.

## MODELOS COMERCIAIS

Os modelos da família das brocas serão diferenciados pelo comprimento, tipo de encaixe, e diâmetro. A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis:

BROCA DIAMANTADA	
<b>BIOMETAL</b>	
	
13.5.0106.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-1
13.5.0106.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-1

13.5.0106.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-1
13.5.0106.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-1
13.5.0106.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-1
13.5.0106.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-1
13.5.0106.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-1
13.5.0106.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-1
13.5.0106.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-1
13.5.0106.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-1
13.5.0106.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-1
13.5.0106.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-1
13.5.0106.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-1
13.5.0106.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-1
13.5.0106.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-1
13.5.0106.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-1
13.5.0107.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-1
13.5.0107.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-1
13.5.0107.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-1
13.5.0107.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-1
13.5.0107.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-1
13.5.0107.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-1
13.5.0107.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-1
13.5.0107.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-1
13.5.0107.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-1
13.5.0107.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-1
13.5.0107.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-1
13.5.0107.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-1
13.5.0107.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-1
13.5.0107.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-1
13.5.0107.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-1
13.5.0107.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-1
13.5.0108.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-1
13.5.0108.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-1
13.5.0108.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-1
13.5.0108.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-1
13.5.0108.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-1
13.5.0108.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-1
13.5.0108.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-1

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0108.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-1
13.5.0108.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-1
13.5.0108.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-1
13.5.0108.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-1
13.5.0108.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-1
13.5.0108.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-1
13.5.0108.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-1
13.5.0108.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-1
13.5.0108.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-1
13.5.0110.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-1
13.5.0110.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-1
13.5.0110.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-1
13.5.0110.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-1
13.5.0110.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-1
13.5.0110.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-1
13.5.0110.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-1
13.5.0110.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-1
13.5.0110.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-1
13.5.0110.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-1
13.5.0110.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-1
13.5.0110.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-1
13.5.0110.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-1
13.5.0110.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-1
13.5.0110.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-1
13.5.0110.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-1
13.5.0112.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-1
13.5.0112.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-1
13.5.0112.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-1
13.5.0112.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-1
13.5.0112.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-1
13.5.0112.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-1
13.5.0112.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-1
13.5.0112.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-1
13.5.0112.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-1
13.5.0112.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-1
13.5.0112.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-1
13.5.0112.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-1

13.5.0112.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-1
13.5.0112.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-1
13.5.0112.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-1
13.5.0112.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-1
13.5.0114.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-1
13.5.0114.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-1
13.5.0114.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-1
13.5.0114.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-1
13.5.0114.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-1
13.5.0114.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-1
13.5.0114.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-1
13.5.0114.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-1
13.5.0114.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-1
13.5.0114.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-1
13.5.0114.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-1
13.5.0114.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-1
13.5.0114.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-1
13.5.0114.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-1
13.5.0114.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-1
13.5.0114.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-1
13.5.0116.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-1
13.5.0116.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-1
13.5.0116.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-1
13.5.0116.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-1
13.5.0116.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-1
13.5.0116.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-1
13.5.0116.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-1
13.5.0116.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-1
13.5.0116.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-1
13.5.0116.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-1
13.5.0116.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-1
13.5.0116.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-1
13.5.0116.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-1
13.5.0116.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-1
13.5.0116.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-1
13.5.0116.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-1
13.5.0118.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-1



13.5.0118.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-1
13.5.0118.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-1
13.5.0118.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-1
13.5.0118.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-1
13.5.0118.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-1
13.5.0118.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-1
13.5.0118.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-1
13.5.0118.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-1
13.5.0118.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-1
13.5.0118.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-1
13.5.0118.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-1
13.5.0118.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-1
13.5.0118.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-1
13.5.0118.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-1
13.5.0118.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-1
13.5.0121.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-1
13.5.0121.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-1
13.5.0121.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-1
13.5.0121.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-1
13.5.0121.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-1
13.5.0121.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-1
13.5.0121.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-1
13.5.0121.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-1
13.5.0121.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-1
13.5.0121.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-1
13.5.0121.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-1
13.5.0121.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-1
13.5.0121.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-1
13.5.0121.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-1
13.5.0121.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-1
13.5.0121.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-1
13.5.0123.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-1
13.5.0123.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-1
13.5.0123.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-1
13.5.0123.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-1
13.5.0123.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-1
13.5.0123.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-1

13.5.0123.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-1
13.5.0123.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-1
13.5.0123.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-1
13.5.0123.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-1
13.5.0123.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-1
13.5.0123.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-1
13.5.0123.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-1
13.5.0123.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-1
13.5.0123.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-1
13.5.0123.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-1
13.5.0125.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-1
13.5.0125.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-1
13.5.0125.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-1
13.5.0125.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-1
13.5.0125.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-1
13.5.0125.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-1
13.5.0125.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-1
13.5.0125.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-1
13.5.0125.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-1
13.5.0125.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-1
13.5.0125.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-1
13.5.0125.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-1
13.5.0125.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-1
13.5.0125.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-1
13.5.0125.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-1
13.5.0125.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-1
13.5.0127.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-1
13.5.0127.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-1
13.5.0127.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-1
13.5.0127.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-1
13.5.0127.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-1
13.5.0127.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-1
13.5.0127.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-1
13.5.0127.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-1
13.5.0127.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-1
13.5.0127.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-1
13.5.0127.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-1

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0127.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-1
13.5.0127.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-1
13.5.0127.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-1
13.5.0127.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-1
13.5.0127.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-1
13.5.0129.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-1
13.5.0129.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-1
13.5.0129.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-1
13.5.0129.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-1
13.5.0129.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-1
13.5.0129.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-1
13.5.0129.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-1
13.5.0129.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-1
13.5.0129.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-1
13.5.0129.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-1
13.5.0129.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-1
13.5.0129.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-1
13.5.0129.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-1
13.5.0129.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-1
13.5.0129.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-1
13.5.0129.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-1
13.5.0131.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-1
13.5.0131.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-1
13.5.0131.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-1
13.5.0131.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-1
13.5.0131.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-1
13.5.0131.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-1
13.5.0131.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-1
13.5.0131.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-1
13.5.0131.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-1
13.5.0131.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-1
13.5.0131.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-1
13.5.0131.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-1
13.5.0131.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-1
13.5.0131.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-1
13.5.0131.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-1
13.5.0131.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-1

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0135.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-1
13.5.0135.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-1
13.5.0135.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-1
13.5.0135.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-1
13.5.0135.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-1
13.5.0135.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-1
13.5.0135.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-1
13.5.0135.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-1
13.5.0135.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-1
13.5.0135.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-1
13.5.0135.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-1
13.5.0135.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-1
13.5.0135.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-1
13.5.0135.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-1
13.5.0135.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-1
13.5.0135.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-1
13.5.0140.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-1
13.5.0140.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-1
13.5.0140.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-1
13.5.0140.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-1
13.5.0140.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-1
13.5.0140.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-1
13.5.0140.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-1
13.5.0140.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-1
13.5.0140.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-1
13.5.0140.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-1
13.5.0140.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-1
13.5.0140.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-1
13.5.0140.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-1
13.5.0140.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-1
13.5.0140.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-1
13.5.0140.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-1
13.5.0145.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-1
13.5.0145.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-1
13.5.0145.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-1
13.5.0145.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-1
13.5.0145.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-1

13.5.0145.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-1
13.5.0145.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-1
13.5.0145.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-1
13.5.0145.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-1
13.5.0145.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-1
13.5.0145.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-1
13.5.0145.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-1
13.5.0145.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-1
13.5.0145.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-1
13.5.0145.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-1
13.5.0145.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-1
13.5.0150.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-1
13.5.0150.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-1
13.5.0150.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-1
13.5.0150.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-1
13.5.0150.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-1
13.5.0150.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-1
13.5.0150.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-1
13.5.0150.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-1
13.5.0150.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-1
13.5.0150.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-1
13.5.0150.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-1
13.5.0150.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-1
13.5.0150.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-1
13.5.0150.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-1
13.5.0150.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-1
13.5.0150.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-1
13.5.0155.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-1
13.5.0155.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-1
13.5.0155.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-1
13.5.0155.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-1
13.5.0155.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-1
13.5.0155.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-1
13.5.0155.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-1
13.5.0155.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-1
13.5.0155.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-1
13.5.0155.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-1

13.5.0155.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-1
13.5.0155.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-1
13.5.0155.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-1
13.5.0155.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-1
13.5.0155.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-1
13.5.0155.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-1
13.5.0160.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-1
13.5.0160.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-1
13.5.0160.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-1
13.5.0160.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-1
13.5.0160.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-1
13.5.0160.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-1
13.5.0160.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-1
13.5.0160.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-1
13.5.0160.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-1
13.5.0160.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-1
13.5.0160.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-1
13.5.0160.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-1
13.5.0160.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-1
13.5.0160.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-1
13.5.0160.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-1
13.5.0160.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-1
13.5.0170.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-1
13.5.0170.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-1
13.5.0170.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-1
13.5.0170.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-1
13.5.0170.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-1
13.5.0170.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-1
13.5.0170.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-1
13.5.0170.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-1
13.5.0170.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-1
13.5.0170.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-1
13.5.0170.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-1
13.5.0170.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-1
13.5.0170.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-1
13.5.0170.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-1
13.5.0170.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-1

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0170.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-1
----------------	--------------------------------------

13.5.0206.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-2
13.5.0206.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-2
13.5.0206.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-2
13.5.0206.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-2
13.5.0206.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-2
13.5.0206.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-2
13.5.0206.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-2
13.5.0206.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-2
13.5.0206.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-2
13.5.0206.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-2
13.5.0206.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-2
13.5.0206.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-2
13.5.0206.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-2
13.5.0206.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-2
13.5.0206.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-2
13.5.0206.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-2
13.5.0207.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-2
13.5.0207.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-2
13.5.0207.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-2
13.5.0207.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-2
13.5.0207.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-2
13.5.0207.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-2
13.5.0207.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-2
13.5.0207.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-2
13.5.0207.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-2
13.5.0207.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-2
13.5.0207.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-2
13.5.0207.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-2
13.5.0207.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-2
13.5.0207.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-2
13.5.0207.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-2
13.5.0207.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-2
13.5.0208.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0208.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-2
13.5.0208.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-2
13.5.0208.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-2
13.5.0208.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-2
13.5.0208.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-2
13.5.0208.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-2
13.5.0208.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-2
13.5.0208.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-2
13.5.0208.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-2
13.5.0208.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-2
13.5.0208.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-2
13.5.0208.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-2
13.5.0208.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-2
13.5.0208.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-2
13.5.0208.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-2
13.5.0210.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-2
13.5.0210.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-2
13.5.0210.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-2
13.5.0210.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-2
13.5.0210.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-2
13.5.0210.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-2
13.5.0210.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-2
13.5.0210.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-2
13.5.0210.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-2
13.5.0210.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-2
13.5.0210.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-2
13.5.0210.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-2
13.5.0210.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-2
13.5.0210.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-2
13.5.0210.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-2
13.5.0210.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-2
13.5.0212.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-2
13.5.0212.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-2
13.5.0212.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-2
13.5.0212.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-2
13.5.0212.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-2
13.5.0212.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-2



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0212.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-2
13.5.0212.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-2
13.5.0212.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-2
13.5.0212.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-2
13.5.0212.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-2
13.5.0212.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-2
13.5.0212.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-2
13.5.0212.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-2
13.5.0212.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-2
13.5.0212.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-2
13.5.0214.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-2
13.5.0214.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-2
13.5.0214.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-2
13.5.0214.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-2
13.5.0214.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-2
13.5.0214.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-2
13.5.0214.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-2
13.5.0214.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-2
13.5.0214.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-2
13.5.0214.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-2
13.5.0214.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-2
13.5.0214.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-2
13.5.0214.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-2
13.5.0214.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-2
13.5.0214.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-2
13.5.0214.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-2
13.5.0216.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-2
13.5.0216.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-2
13.5.0216.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-2
13.5.0216.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-2
13.5.0216.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-2
13.5.0216.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-2
13.5.0216.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-2
13.5.0216.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-2
13.5.0216.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-2
13.5.0216.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-2
13.5.0216.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0216.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-2
13.5.0216.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-2
13.5.0216.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-2
13.5.0216.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-2
13.5.0216.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-2
13.5.0218.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-2
13.5.0218.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-2
13.5.0218.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-2
13.5.0218.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-2
13.5.0218.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-2
13.5.0218.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-2
13.5.0218.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-2
13.5.0218.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-2
13.5.0218.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-2
13.5.0218.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-2
13.5.0218.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-2
13.5.0218.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-2
13.5.0218.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-2
13.5.0218.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-2
13.5.0218.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-2
13.5.0218.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-2
13.5.0221.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-2
13.5.0221.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-2
13.5.0221.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-2
13.5.0221.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-2
13.5.0221.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-2
13.5.0221.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-2
13.5.0221.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-2
13.5.0221.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-2
13.5.0221.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-2
13.5.0221.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-2
13.5.0221.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-2
13.5.0221.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-2
13.5.0221.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-2
13.5.0221.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-2
13.5.0221.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-2
13.5.0221.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0223.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-2
13.5.0223.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-2
13.5.0223.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-2
13.5.0223.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-2
13.5.0223.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-2
13.5.0223.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-2
13.5.0223.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-2
13.5.0223.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-2
13.5.0223.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-2
13.5.0223.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-2
13.5.0223.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-2
13.5.0223.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-2
13.5.0223.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-2
13.5.0223.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-2
13.5.0223.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-2
13.5.0223.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-2
13.5.0225.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-2
13.5.0225.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-2
13.5.0225.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-2
13.5.0225.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-2
13.5.0225.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-2
13.5.0225.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-2
13.5.0225.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-2
13.5.0225.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-2
13.5.0225.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-2
13.5.0225.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-2
13.5.0225.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-2
13.5.0225.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-2
13.5.0225.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-2
13.5.0225.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-2
13.5.0225.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-2
13.5.0225.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-2
13.5.0227.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-2
13.5.0227.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-2
13.5.0227.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-2
13.5.0227.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-2
13.5.0227.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0227.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-2
13.5.0227.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-2
13.5.0227.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-2
13.5.0227.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-2
13.5.0227.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-2
13.5.0227.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-2
13.5.0227.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-2
13.5.0227.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-2
13.5.0227.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-2
13.5.0227.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-2
13.5.0227.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-2
13.5.0229.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-2
13.5.0229.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-2
13.5.0229.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-2
13.5.0229.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-2
13.5.0229.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-2
13.5.0229.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-2
13.5.0229.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-2
13.5.0229.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-2
13.5.0229.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-2
13.5.0229.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-2
13.5.0229.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-2
13.5.0229.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-2
13.5.0229.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-2
13.5.0229.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-2
13.5.0229.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-2
13.5.0229.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-2
13.5.0231.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-2
13.5.0231.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-2
13.5.0231.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-2
13.5.0231.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-2
13.5.0231.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-2
13.5.0231.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-2
13.5.0231.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-2
13.5.0231.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-2
13.5.0231.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-2
13.5.0231.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0231.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-2
13.5.0231.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-2
13.5.0231.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-2
13.5.0231.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-2
13.5.0231.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-2
13.5.0231.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-2
13.5.0235.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-2
13.5.0235.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-2
13.5.0235.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-2
13.5.0235.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-2
13.5.0235.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-2
13.5.0235.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-2
13.5.0235.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-2
13.5.0235.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-2
13.5.0235.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-2
13.5.0235.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-2
13.5.0235.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-2
13.5.0235.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-2
13.5.0235.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-2
13.5.0235.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-2
13.5.0235.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-2
13.5.0235.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-2
13.5.0240.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-2
13.5.0240.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-2
13.5.0240.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-2
13.5.0240.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-2
13.5.0240.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-2
13.5.0240.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-2
13.5.0240.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-2
13.5.0240.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-2
13.5.0240.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-2
13.5.0240.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-2
13.5.0240.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-2
13.5.0240.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-2
13.5.0240.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-2
13.5.0240.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-2
13.5.0240.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0240.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-2
13.5.0245.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-2
13.5.0245.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-2
13.5.0245.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-2
13.5.0245.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-2
13.5.0245.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-2
13.5.0245.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-2
13.5.0245.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-2
13.5.0245.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-2
13.5.0245.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-2
13.5.0245.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-2
13.5.0245.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-2
13.5.0245.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-2
13.5.0245.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-2
13.5.0245.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-2
13.5.0245.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-2
13.5.0245.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-2
13.5.0250.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-2
13.5.0250.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-2
13.5.0250.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-2
13.5.0250.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-2
13.5.0250.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-2
13.5.0250.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-2
13.5.0250.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-2
13.5.0250.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-2
13.5.0250.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-2
13.5.0250.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-2
13.5.0250.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-2
13.5.0250.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-2
13.5.0250.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-2
13.5.0250.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-2
13.5.0250.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-2
13.5.0250.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-2
13.5.0255.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-2
13.5.0255.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-2
13.5.0255.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-2
13.5.0255.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024



13.5.0255.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-2
13.5.0255.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-2
13.5.0255.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-2
13.5.0255.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-2
13.5.0255.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-2
13.5.0255.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-2
13.5.0255.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-2
13.5.0255.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-2
13.5.0255.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-2
13.5.0255.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-2
13.5.0255.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-2
13.5.0255.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-2
13.5.0260.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-2
13.5.0260.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-2
13.5.0260.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-2
13.5.0260.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-2
13.5.0260.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-2
13.5.0260.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-2
13.5.0260.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-2
13.5.0260.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-2
13.5.0260.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-2
13.5.0260.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-2
13.5.0260.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-2
13.5.0260.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-2
13.5.0260.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-2
13.5.0260.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-2
13.5.0260.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-2
13.5.0260.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-2
13.5.0270.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-2
13.5.0270.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-2
13.5.0270.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-2
13.5.0270.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-2
13.5.0270.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-2
13.5.0270.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-2
13.5.0270.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-2
13.5.0270.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-2
13.5.0270.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-2

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0270.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-2
13.5.0270.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-2
13.5.0270.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-2
13.5.0270.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-2
13.5.0270.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-2
13.5.0270.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-2
13.5.0270.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-2
13.5.0306.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-3
13.5.0306.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-3
13.5.0306.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-3
13.5.0306.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-3
13.5.0306.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-3
13.5.0306.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-3
13.5.0306.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-3
13.5.0306.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-3
13.5.0306.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-3
13.5.0306.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-3
13.5.0306.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-3
13.5.0306.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-3
13.5.0306.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-3
13.5.0306.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-3
13.5.0306.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-3
13.5.0306.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-3
13.5.0307.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-3
13.5.0307.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-3
13.5.0307.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-3
13.5.0307.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-3
13.5.0307.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-3
13.5.0307.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-3
13.5.0307.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-3
13.5.0307.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-3
13.5.0307.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-3
13.5.0307.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-3
13.5.0307.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-3
13.5.0307.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-3
13.5.0307.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-3
13.5.0307.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-3



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0307.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-3
13.5.0307.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-3
13.5.0308.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-3
13.5.0308.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-3
13.5.0308.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-3
13.5.0308.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-3
13.5.0308.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-3
13.5.0308.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-3
13.5.0308.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-3
13.5.0308.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-3
13.5.0308.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-3
13.5.0308.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-3
13.5.0308.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-3
13.5.0308.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-3
13.5.0308.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-3
13.5.0308.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-3
13.5.0308.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-3
13.5.0308.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-3
13.5.0310.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-3
13.5.0310.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-3
13.5.0310.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-3
13.5.0310.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-3
13.5.0310.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-3
13.5.0310.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-3
13.5.0310.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-3
13.5.0310.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-3
13.5.0310.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-3
13.5.0310.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-3
13.5.0310.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-3
13.5.0310.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-3
13.5.0310.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-3
13.5.0310.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-3
13.5.0310.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-3
13.5.0310.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-3
13.5.0312.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-3
13.5.0312.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-3
13.5.0312.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-3

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0312.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-3
13.5.0312.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-3
13.5.0312.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-3
13.5.0312.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-3
13.5.0312.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-3
13.5.0312.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-3
13.5.0312.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-3
13.5.0312.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-3
13.5.0312.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-3
13.5.0312.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-3
13.5.0312.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-3
13.5.0312.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-3
13.5.0312.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-3
13.5.0314.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-3
13.5.0314.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-3
13.5.0314.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-3
13.5.0314.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-3
13.5.0314.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-3
13.5.0314.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-3
13.5.0314.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-3
13.5.0314.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-3
13.5.0314.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-3
13.5.0314.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-3
13.5.0314.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-3
13.5.0314.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-3
13.5.0314.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-3
13.5.0314.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-3
13.5.0314.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-3
13.5.0314.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-3
13.5.0316.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-3
13.5.0316.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-3
13.5.0316.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-3
13.5.0316.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-3
13.5.0316.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-3
13.5.0316.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-3
13.5.0316.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-3
13.5.0316.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-3

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0316.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-3
13.5.0316.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-3
13.5.0316.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-3
13.5.0316.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-3
13.5.0316.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-3
13.5.0316.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-3
13.5.0316.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-3
13.5.0316.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-3
13.5.0318.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-3
13.5.0318.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-3
13.5.0318.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-3
13.5.0318.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-3
13.5.0318.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-3
13.5.0318.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-3
13.5.0318.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-3
13.5.0318.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-3
13.5.0318.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-3
13.5.0318.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-3
13.5.0318.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-3
13.5.0318.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-3
13.5.0318.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-3
13.5.0318.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-3
13.5.0318.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-3
13.5.0318.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-3
13.5.0321.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-3
13.5.0321.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-3
13.5.0321.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-3
13.5.0321.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-3
13.5.0321.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-3
13.5.0321.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-3
13.5.0321.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-3
13.5.0321.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-3
13.5.0321.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-3
13.5.0321.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-3
13.5.0321.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-3
13.5.0321.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-3
13.5.0321.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-3

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0321.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-3
13.5.0321.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-3
13.5.0321.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-3
13.5.0323.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-3
13.5.0323.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-3
13.5.0323.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-3
13.5.0323.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-3
13.5.0323.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-3
13.5.0323.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-3
13.5.0323.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-3
13.5.0323.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-3
13.5.0323.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-3
13.5.0323.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-3
13.5.0323.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-3
13.5.0323.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-3
13.5.0323.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-3
13.5.0323.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-3
13.5.0323.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-3
13.5.0323.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-3
13.5.0325.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-3
13.5.0325.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-3
13.5.0325.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-3
13.5.0325.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-3
13.5.0325.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-3
13.5.0325.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-3
13.5.0325.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-3
13.5.0325.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-3
13.5.0325.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-3
13.5.0325.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-3
13.5.0325.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-3
13.5.0325.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-3
13.5.0325.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-3
13.5.0325.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-3
13.5.0325.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-3
13.5.0325.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-3
13.5.0327.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-3
13.5.0327.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-3

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0327.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-3
13.5.0327.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-3
13.5.0327.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-3
13.5.0327.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-3
13.5.0327.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-3
13.5.0327.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-3
13.5.0327.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-3
13.5.0327.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-3
13.5.0327.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-3
13.5.0327.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-3
13.5.0327.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-3
13.5.0327.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-3
13.5.0327.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-3
13.5.0327.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-3
13.5.0329.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-3
13.5.0329.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-3
13.5.0329.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-3
13.5.0329.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-3
13.5.0329.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-3
13.5.0329.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-3
13.5.0329.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-3
13.5.0329.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-3
13.5.0329.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-3
13.5.0329.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-3
13.5.0329.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-3
13.5.0329.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-3
13.5.0329.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-3
13.5.0329.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-3
13.5.0329.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-3
13.5.0329.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-3
13.5.0331.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-3
13.5.0331.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-3
13.5.0331.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-3
13.5.0331.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-3
13.5.0331.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-3
13.5.0331.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-3
13.5.0331.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-3

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0331.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-3
13.5.0331.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-3
13.5.0331.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-3
13.5.0331.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-3
13.5.0331.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-3
13.5.0331.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-3
13.5.0331.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-3
13.5.0331.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-3
13.5.0331.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-3
13.5.0335.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-3
13.5.0335.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-3
13.5.0335.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-3
13.5.0335.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-3
13.5.0335.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-3
13.5.0335.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-3
13.5.0335.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-3
13.5.0335.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-3
13.5.0335.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-3
13.5.0335.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-3
13.5.0335.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-3
13.5.0335.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-3
13.5.0335.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-3
13.5.0335.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-3
13.5.0335.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-3
13.5.0335.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-3
13.5.0340.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-3
13.5.0340.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-3
13.5.0340.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-3
13.5.0340.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-3
13.5.0340.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-3
13.5.0340.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-3
13.5.0340.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-3
13.5.0340.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-3
13.5.0340.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-3
13.5.0340.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-3
13.5.0340.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-3
13.5.0340.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-3

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0340.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-3
13.5.0340.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-3
13.5.0340.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-3
13.5.0340.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-3
13.5.0345.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-3
13.5.0345.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-3
13.5.0345.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-3
13.5.0345.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-3
13.5.0345.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-3
13.5.0345.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-3
13.5.0345.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-3
13.5.0345.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-3
13.5.0345.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-3
13.5.0345.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-3
13.5.0345.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-3
13.5.0345.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-3
13.5.0345.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-3
13.5.0345.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-3
13.5.0345.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-3
13.5.0345.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-3
13.5.0350.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-3
13.5.0350.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-3
13.5.0350.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-3
13.5.0350.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-3
13.5.0350.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-3
13.5.0350.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-3
13.5.0350.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-3
13.5.0350.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-3
13.5.0350.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-3
13.5.0350.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-3
13.5.0350.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-3
13.5.0350.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-3
13.5.0350.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-3
13.5.0350.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-3
13.5.0350.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-3
13.5.0350.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-3
13.5.0355.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-3

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0355.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-3
13.5.0355.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-3
13.5.0355.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-3
13.5.0355.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-3
13.5.0355.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-3
13.5.0355.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-3
13.5.0355.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-3
13.5.0355.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-3
13.5.0355.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-3
13.5.0355.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-3
13.5.0355.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-3
13.5.0355.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-3
13.5.0355.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-3
13.5.0355.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-3
13.5.0355.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-3
13.5.0360.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-3
13.5.0360.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-3
13.5.0360.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-3
13.5.0360.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-3
13.5.0360.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-3
13.5.0360.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-3
13.5.0360.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-3
13.5.0360.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-3
13.5.0360.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-3
13.5.0360.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-3
13.5.0360.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-3
13.5.0360.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-3
13.5.0360.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-3
13.5.0360.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-3
13.5.0360.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-3
13.5.0360.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-3
13.5.0370.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-3
13.5.0370.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-3
13.5.0370.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-3
13.5.0370.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-3
13.5.0370.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-3
13.5.0370.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-3



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0370.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-3
13.5.0370.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-3
13.5.0370.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-3
13.5.0370.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-3
13.5.0370.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-3
13.5.0370.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-3
13.5.0370.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-3
13.5.0370.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-3
13.5.0370.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-3
13.5.0370.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-3
13.5.0406.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-4
13.5.0406.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-4
13.5.0406.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-4
13.5.0406.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-4
13.5.0406.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-4
13.5.0406.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-4
13.5.0406.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-4
13.5.0406.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-4
13.5.0406.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-4
13.5.0406.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-4
13.5.0406.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-4
13.5.0406.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-4
13.5.0406.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-4
13.5.0406.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-4
13.5.0406.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-4
13.5.0406.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-4
13.5.0407.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-4
13.5.0407.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-4
13.5.0407.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-4
13.5.0407.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-4
13.5.0407.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-4
13.5.0407.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-4
13.5.0407.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-4
13.5.0407.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-4
13.5.0407.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-4
13.5.0407.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-4
13.5.0407.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0407.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-4
13.5.0407.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-4
13.5.0407.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-4
13.5.0407.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-4
13.5.0407.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-4
13.5.0408.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-4
13.5.0408.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-4
13.5.0408.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-4
13.5.0408.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-4
13.5.0408.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-4
13.5.0408.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-4
13.5.0408.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-4
13.5.0408.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-4
13.5.0408.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-4
13.5.0408.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-4
13.5.0408.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-4
13.5.0408.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-4
13.5.0408.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-4
13.5.0408.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-4
13.5.0408.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-4
13.5.0408.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-4
13.5.0410.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-4
13.5.0410.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-4
13.5.0410.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-4
13.5.0410.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-4
13.5.0410.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-4
13.5.0410.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-4
13.5.0410.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-4
13.5.0410.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-4
13.5.0410.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-4
13.5.0410.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-4
13.5.0410.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-4
13.5.0410.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-4
13.5.0410.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-4
13.5.0410.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-4
13.5.0410.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-4
13.5.0410.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0412.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-4
13.5.0412.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-4
13.5.0412.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-4
13.5.0412.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-4
13.5.0412.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-4
13.5.0412.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-4
13.5.0412.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-4
13.5.0412.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-4
13.5.0412.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-4
13.5.0412.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-4
13.5.0412.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-4
13.5.0412.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-4
13.5.0412.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-4
13.5.0412.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-4
13.5.0412.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-4
13.5.0412.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-4
13.5.0414.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-4
13.5.0414.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-4
13.5.0414.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-4
13.5.0414.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-4
13.5.0414.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-4
13.5.0414.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-4
13.5.0414.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-4
13.5.0414.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-4
13.5.0414.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-4
13.5.0414.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-4
13.5.0414.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-4
13.5.0414.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-4
13.5.0414.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-4
13.5.0414.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-4
13.5.0414.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-4
13.5.0414.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-4
13.5.0416.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-4
13.5.0416.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-4
13.5.0416.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-4
13.5.0416.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-4
13.5.0416.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0416.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-4
13.5.0416.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-4
13.5.0416.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-4
13.5.0416.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-4
13.5.0416.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-4
13.5.0416.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-4
13.5.0416.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-4
13.5.0416.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-4
13.5.0416.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-4
13.5.0416.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-4
13.5.0416.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-4
13.5.0418.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-4
13.5.0418.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-4
13.5.0418.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-4
13.5.0418.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-4
13.5.0418.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-4
13.5.0418.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-4
13.5.0418.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-4
13.5.0418.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-4
13.5.0418.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-4
13.5.0418.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-4
13.5.0418.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-4
13.5.0418.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-4
13.5.0418.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-4
13.5.0418.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-4
13.5.0418.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-4
13.5.0418.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-4
13.5.0421.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-4
13.5.0421.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-4
13.5.0421.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-4
13.5.0421.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-4
13.5.0421.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-4
13.5.0421.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-4
13.5.0421.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-4
13.5.0421.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-4
13.5.0421.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-4
13.5.0421.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0421.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-4
13.5.0421.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-4
13.5.0421.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-4
13.5.0421.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-4
13.5.0421.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-4
13.5.0421.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-4
13.5.0423.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-4
13.5.0423.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-4
13.5.0423.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-4
13.5.0423.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-4
13.5.0423.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-4
13.5.0423.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-4
13.5.0423.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-4
13.5.0423.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-4
13.5.0423.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-4
13.5.0423.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-4
13.5.0423.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-4
13.5.0423.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-4
13.5.0423.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-4
13.5.0423.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-4
13.5.0423.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-4
13.5.0423.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-4
13.5.0425.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-4
13.5.0425.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-4
13.5.0425.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-4
13.5.0425.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-4
13.5.0425.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-4
13.5.0425.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-4
13.5.0425.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-4
13.5.0425.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-4
13.5.0425.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-4
13.5.0425.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-4
13.5.0425.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-4
13.5.0425.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-4
13.5.0425.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-4
13.5.0425.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-4
13.5.0425.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0425.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-4
13.5.0427.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-4
13.5.0427.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-4
13.5.0427.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-4
13.5.0427.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-4
13.5.0427.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-4
13.5.0427.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-4
13.5.0427.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-4
13.5.0427.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-4
13.5.0427.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-4
13.5.0427.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-4
13.5.0427.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-4
13.5.0427.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-4
13.5.0427.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-4
13.5.0427.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-4
13.5.0427.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-4
13.5.0427.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-4
13.5.0429.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-4
13.5.0429.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-4
13.5.0429.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-4
13.5.0429.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-4
13.5.0429.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-4
13.5.0429.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-4
13.5.0429.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-4
13.5.0429.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-4
13.5.0429.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-4
13.5.0429.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-4
13.5.0429.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-4
13.5.0429.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-4
13.5.0429.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-4
13.5.0429.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-4
13.5.0429.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-4
13.5.0429.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-4
13.5.0431.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-4
13.5.0431.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-4
13.5.0431.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-4
13.5.0431.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0431.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-4
13.5.0431.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-4
13.5.0431.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-4
13.5.0431.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-4
13.5.0431.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-4
13.5.0431.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-4
13.5.0431.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-4
13.5.0431.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-4
13.5.0431.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-4
13.5.0431.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-4
13.5.0431.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-4
13.5.0431.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-4
13.5.0435.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-4
13.5.0435.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-4
13.5.0435.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-4
13.5.0435.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-4
13.5.0435.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-4
13.5.0435.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-4
13.5.0435.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-4
13.5.0435.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-4
13.5.0435.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-4
13.5.0435.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-4
13.5.0435.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-4
13.5.0435.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-4
13.5.0435.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-4
13.5.0435.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-4
13.5.0435.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-4
13.5.0435.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-4
13.5.0440.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-4
13.5.0440.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-4
13.5.0440.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-4
13.5.0440.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-4
13.5.0440.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-4
13.5.0440.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-4
13.5.0440.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-4
13.5.0440.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-4
13.5.0440.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0440.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-4
13.5.0440.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-4
13.5.0440.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-4
13.5.0440.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-4
13.5.0440.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-4
13.5.0440.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-4
13.5.0440.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-4
13.5.0445.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-4
13.5.0445.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-4
13.5.0445.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-4
13.5.0445.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-4
13.5.0445.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-4
13.5.0445.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-4
13.5.0445.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-4
13.5.0445.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-4
13.5.0445.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-4
13.5.0445.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-4
13.5.0445.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-4
13.5.0445.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-4
13.5.0445.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-4
13.5.0445.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-4
13.5.0445.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-4
13.5.0445.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-4
13.5.0450.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-4
13.5.0450.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-4
13.5.0450.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-4
13.5.0450.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-4
13.5.0450.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-4
13.5.0450.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-4
13.5.0450.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-4
13.5.0450.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-4
13.5.0450.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-4
13.5.0450.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-4
13.5.0450.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-4
13.5.0450.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-4
13.5.0450.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-4
13.5.0450.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-4



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0450.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-4
13.5.0450.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-4
13.5.0455.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-4
13.5.0455.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-4
13.5.0455.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-4
13.5.0455.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-4
13.5.0455.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-4
13.5.0455.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-4
13.5.0455.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-4
13.5.0455.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-4
13.5.0455.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-4
13.5.0455.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-4
13.5.0455.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-4
13.5.0455.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-4
13.5.0455.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-4
13.5.0455.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-4
13.5.0455.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-4
13.5.0455.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-4
13.5.0460.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-4
13.5.0460.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-4
13.5.0460.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-4
13.5.0460.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-4
13.5.0460.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-4
13.5.0460.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-4
13.5.0460.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-4
13.5.0460.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-4
13.5.0460.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-4
13.5.0460.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-4
13.5.0460.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-4
13.5.0460.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-4
13.5.0460.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-4
13.5.0460.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-4
13.5.0460.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-4
13.5.0460.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-4
13.5.0470.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-4
13.5.0470.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-4
13.5.0470.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-4

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0470.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-4
13.5.0470.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-4
13.5.0470.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-4
13.5.0470.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-4
13.5.0470.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-4
13.5.0470.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-4
13.5.0470.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-4
13.5.0470.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-4
13.5.0470.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-4
13.5.0470.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-4
13.5.0470.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-4
13.5.0470.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-4
13.5.0470.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-4
13.5.0506.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-5
13.5.0506.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-5
13.5.0506.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-5
13.5.0506.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-5
13.5.0506.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-5
13.5.0506.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-5
13.5.0506.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-5
13.5.0506.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-5
13.5.0506.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-5
13.5.0506.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-5
13.5.0506.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-5
13.5.0506.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-5
13.5.0506.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-5
13.5.0506.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-5
13.5.0506.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-5
13.5.0506.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-5
13.5.0507.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-5
13.5.0507.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-5
13.5.0507.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-5
13.5.0507.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-5
13.5.0507.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-5
13.5.0507.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-5
13.5.0507.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-5
13.5.0507.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0507.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-5
13.5.0507.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-5
13.5.0507.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-5
13.5.0507.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-5
13.5.0507.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-5
13.5.0507.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-5
13.5.0507.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-5
13.5.0507.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-5
13.5.0508.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-5
13.5.0508.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-5
13.5.0508.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-5
13.5.0508.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-5
13.5.0508.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-5
13.5.0508.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-5
13.5.0508.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-5
13.5.0508.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-5
13.5.0508.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-5
13.5.0508.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-5
13.5.0508.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-5
13.5.0508.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-5
13.5.0508.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-5
13.5.0508.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-5
13.5.0508.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-5
13.5.0508.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-5
13.5.0510.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-5
13.5.0510.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-5
13.5.0510.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-5
13.5.0510.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-5
13.5.0510.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-5
13.5.0510.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-5
13.5.0510.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-5
13.5.0510.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-5
13.5.0510.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-5
13.5.0510.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-5
13.5.0510.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-5
13.5.0510.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-5
13.5.0510.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0510.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-5
13.5.0510.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-5
13.5.0510.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-5
13.5.0512.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-5
13.5.0512.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-5
13.5.0512.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-5
13.5.0512.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-5
13.5.0512.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-5
13.5.0512.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-5
13.5.0512.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-5
13.5.0512.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-5
13.5.0512.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-5
13.5.0512.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-5
13.5.0512.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-5
13.5.0512.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-5
13.5.0512.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-5
13.5.0512.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-5
13.5.0512.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-5
13.5.0512.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-5
13.5.0514.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-5
13.5.0514.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-5
13.5.0514.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-5
13.5.0514.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-5
13.5.0514.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-5
13.5.0514.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-5
13.5.0514.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-5
13.5.0514.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-5
13.5.0514.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-5
13.5.0514.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-5
13.5.0514.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-5
13.5.0514.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-5
13.5.0514.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-5
13.5.0514.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-5
13.5.0514.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-5
13.5.0514.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-5
13.5.0516.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-5
13.5.0516.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0516.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-5
13.5.0516.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-5
13.5.0516.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-5
13.5.0516.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-5
13.5.0516.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-5
13.5.0516.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-5
13.5.0516.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-5
13.5.0516.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-5
13.5.0516.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-5
13.5.0516.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-5
13.5.0516.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-5
13.5.0516.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-5
13.5.0516.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-5
13.5.0516.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-5
13.5.0518.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-5
13.5.0518.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-5
13.5.0518.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-5
13.5.0518.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-5
13.5.0518.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-5
13.5.0518.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-5
13.5.0518.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-5
13.5.0518.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-5
13.5.0518.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-5
13.5.0518.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-5
13.5.0518.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-5
13.5.0518.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-5
13.5.0518.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-5
13.5.0518.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-5
13.5.0518.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-5
13.5.0518.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-5
13.5.0521.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-5
13.5.0521.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-5
13.5.0521.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-5
13.5.0521.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-5
13.5.0521.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-5
13.5.0521.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-5
13.5.0521.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0521.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-5
13.5.0521.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-5
13.5.0521.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-5
13.5.0521.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-5
13.5.0521.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-5
13.5.0521.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-5
13.5.0521.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-5
13.5.0521.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-5
13.5.0521.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-5
13.5.0523.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-5
13.5.0523.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-5
13.5.0523.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-5
13.5.0523.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-5
13.5.0523.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-5
13.5.0523.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-5
13.5.0523.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-5
13.5.0523.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-5
13.5.0523.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-5
13.5.0523.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-5
13.5.0523.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-5
13.5.0523.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-5
13.5.0523.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-5
13.5.0523.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-5
13.5.0523.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-5
13.5.0523.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-5
13.5.0525.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-5
13.5.0525.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-5
13.5.0525.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-5
13.5.0525.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-5
13.5.0525.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-5
13.5.0525.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-5
13.5.0525.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-5
13.5.0525.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-5
13.5.0525.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-5
13.5.0525.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-5
13.5.0525.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-5
13.5.0525.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0525.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-5
13.5.0525.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-5
13.5.0525.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-5
13.5.0525.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-5
13.5.0527.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-5
13.5.0527.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-5
13.5.0527.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-5
13.5.0527.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-5
13.5.0527.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-5
13.5.0527.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-5
13.5.0527.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-5
13.5.0527.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-5
13.5.0527.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-5
13.5.0527.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-5
13.5.0527.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-5
13.5.0527.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-5
13.5.0527.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-5
13.5.0527.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-5
13.5.0527.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-5
13.5.0527.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-5
13.5.0529.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-5
13.5.0529.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-5
13.5.0529.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-5
13.5.0529.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-5
13.5.0529.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-5
13.5.0529.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-5
13.5.0529.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-5
13.5.0529.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-5
13.5.0529.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-5
13.5.0529.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-5
13.5.0529.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-5
13.5.0529.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-5
13.5.0529.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-5
13.5.0529.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-5
13.5.0529.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-5
13.5.0529.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-5
13.5.0531.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0531.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-5
13.5.0531.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-5
13.5.0531.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-5
13.5.0531.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-5
13.5.0531.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-5
13.5.0531.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-5
13.5.0531.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-5
13.5.0531.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-5
13.5.0531.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-5
13.5.0531.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-5
13.5.0531.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-5
13.5.0531.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-5
13.5.0531.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-5
13.5.0531.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-5
13.5.0531.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-5
13.5.0535.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-5
13.5.0535.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-5
13.5.0535.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-5
13.5.0535.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-5
13.5.0535.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-5
13.5.0535.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-5
13.5.0535.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-5
13.5.0535.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-5
13.5.0535.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-5
13.5.0535.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-5
13.5.0535.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-5
13.5.0535.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-5
13.5.0535.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-5
13.5.0535.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-5
13.5.0535.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-5
13.5.0535.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-5
13.5.0540.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-5
13.5.0540.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-5
13.5.0540.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-5
13.5.0540.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-5
13.5.0540.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-5
13.5.0540.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-5



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0540.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-5
13.5.0540.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-5
13.5.0540.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-5
13.5.0540.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-5
13.5.0540.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-5
13.5.0540.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-5
13.5.0540.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-5
13.5.0540.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-5
13.5.0540.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-5
13.5.0540.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-5
13.5.0545.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-5
13.5.0545.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-5
13.5.0545.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-5
13.5.0545.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-5
13.5.0545.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-5
13.5.0545.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-5
13.5.0545.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-5
13.5.0545.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-5
13.5.0545.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-5
13.5.0545.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-5
13.5.0545.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-5
13.5.0545.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-5
13.5.0545.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-5
13.5.0545.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-5
13.5.0545.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-5
13.5.0545.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-5
13.5.0550.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-5
13.5.0550.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-5
13.5.0550.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-5
13.5.0550.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-5
13.5.0550.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-5
13.5.0550.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-5
13.5.0550.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-5
13.5.0550.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-5
13.5.0550.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-5
13.5.0550.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-5
13.5.0550.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0550.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-5
13.5.0550.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-5
13.5.0550.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-5
13.5.0550.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-5
13.5.0550.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-5
13.5.0555.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-5
13.5.0555.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-5
13.5.0555.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-5
13.5.0555.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-5
13.5.0555.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-5
13.5.0555.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-5
13.5.0555.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-5
13.5.0555.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-5
13.5.0555.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-5
13.5.0555.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-5
13.5.0555.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-5
13.5.0555.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-5
13.5.0555.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-5
13.5.0555.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-5
13.5.0555.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-5
13.5.0555.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-5
13.5.0560.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-5
13.5.0560.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-5
13.5.0560.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-5
13.5.0560.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-5
13.5.0560.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-5
13.5.0560.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-5
13.5.0560.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-5
13.5.0560.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-5
13.5.0560.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-5
13.5.0560.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-5
13.5.0560.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-5
13.5.0560.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-5
13.5.0560.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-5
13.5.0560.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-5
13.5.0560.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-5
13.5.0560.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-5

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0570.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-5
13.5.0570.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-5
13.5.0570.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-5
13.5.0570.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-5
13.5.0570.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-5
13.5.0570.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-5
13.5.0570.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-5
13.5.0570.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-5
13.5.0570.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-5
13.5.0570.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-5
13.5.0570.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-5
13.5.0570.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-5
13.5.0570.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-5
13.5.0570.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-5
13.5.0570.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-5
13.5.0570.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-5
13.5.0606.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-6
13.5.0606.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-6
13.5.0606.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-6
13.5.0606.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-6
13.5.0606.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-6
13.5.0606.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-6
13.5.0606.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-6
13.5.0606.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-6
13.5.0606.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-6
13.5.0606.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-6
13.5.0606.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-6
13.5.0606.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-6
13.5.0606.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-6
13.5.0606.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-6
13.5.0606.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-6
13.5.0606.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-6
13.5.0607.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-6
13.5.0607.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-6
13.5.0607.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-6
13.5.0607.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-6
13.5.0607.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-6

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0607.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-6
13.5.0607.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-6
13.5.0607.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-6
13.5.0607.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-6
13.5.0607.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-6
13.5.0607.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-6
13.5.0607.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-6
13.5.0607.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-6
13.5.0607.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-6
13.5.0607.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-6
13.5.0607.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-6
13.5.0608.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-6
13.5.0608.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-6
13.5.0608.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-6
13.5.0608.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-6
13.5.0608.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-6
13.5.0608.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-6
13.5.0608.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-6
13.5.0608.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-6
13.5.0608.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-6
13.5.0608.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-6
13.5.0608.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-6
13.5.0608.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-6
13.5.0608.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-6
13.5.0608.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-6
13.5.0608.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-6
13.5.0608.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-6
13.5.0610.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-6
13.5.0610.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-6
13.5.0610.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-6
13.5.0610.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-6
13.5.0610.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-6
13.5.0610.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-6
13.5.0610.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-6
13.5.0610.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-6
13.5.0610.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-6
13.5.0610.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-6

13.5.0610.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-6
13.5.0610.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-6
13.5.0610.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-6
13.5.0610.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-6
13.5.0610.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-6
13.5.0610.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-6
13.5.0612.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-6
13.5.0612.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-6
13.5.0612.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-6
13.5.0612.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-6
13.5.0612.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-6
13.5.0612.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-6
13.5.0612.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-6
13.5.0612.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-6
13.5.0612.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-6
13.5.0612.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-6
13.5.0612.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-6
13.5.0612.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-6
13.5.0612.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-6
13.5.0612.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-6
13.5.0612.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-6
13.5.0612.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-6
13.5.0614.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-6
13.5.0614.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-6
13.5.0614.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-6
13.5.0614.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-6
13.5.0614.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-6
13.5.0614.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-6
13.5.0614.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-6
13.5.0614.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-6
13.5.0614.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-6
13.5.0614.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-6
13.5.0614.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-6
13.5.0614.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-6
13.5.0614.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-6
13.5.0614.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-6
13.5.0614.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-6

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0614.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-6
13.5.0616.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-6
13.5.0616.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-6
13.5.0616.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-6
13.5.0616.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-6
13.5.0616.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-6
13.5.0616.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-6
13.5.0616.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-6
13.5.0616.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-6
13.5.0616.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-6
13.5.0616.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-6
13.5.0616.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-6
13.5.0616.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-6
13.5.0616.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-6
13.5.0616.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-6
13.5.0616.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-6
13.5.0616.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-6
13.5.0618.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-6
13.5.0618.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-6
13.5.0618.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-6
13.5.0618.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-6
13.5.0618.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-6
13.5.0618.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-6
13.5.0618.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-6
13.5.0618.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-6
13.5.0618.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-6
13.5.0618.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-6
13.5.0618.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-6
13.5.0618.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-6
13.5.0618.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-6
13.5.0618.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-6
13.5.0618.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-6
13.5.0618.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-6
13.5.0621.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-6
13.5.0621.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-6
13.5.0621.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-6
13.5.0621.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-6

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0621.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-6
13.5.0621.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-6
13.5.0621.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-6
13.5.0621.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-6
13.5.0621.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-6
13.5.0621.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-6
13.5.0621.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-6
13.5.0621.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-6
13.5.0621.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-6
13.5.0621.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-6
13.5.0621.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-6
13.5.0621.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-6
13.5.0623.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-6
13.5.0623.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-6
13.5.0623.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-6
13.5.0623.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-6
13.5.0623.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-6
13.5.0623.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-6
13.5.0623.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-6
13.5.0623.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-6
13.5.0623.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-6
13.5.0623.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-6
13.5.0623.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-6
13.5.0623.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-6
13.5.0623.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-6
13.5.0623.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-6
13.5.0623.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-6
13.5.0623.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-6
13.5.0625.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-6
13.5.0625.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-6
13.5.0625.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-6
13.5.0625.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-6
13.5.0625.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-6
13.5.0625.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-6
13.5.0625.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-6
13.5.0625.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-6
13.5.0625.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-6

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0625.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-6
13.5.0625.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-6
13.5.0625.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-6
13.5.0625.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-6
13.5.0625.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-6
13.5.0625.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-6
13.5.0625.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-6
13.5.0627.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-6
13.5.0627.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-6
13.5.0627.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-6
13.5.0627.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-6
13.5.0627.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-6
13.5.0627.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-6
13.5.0627.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-6
13.5.0627.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-6
13.5.0627.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-6
13.5.0627.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-6
13.5.0627.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-6
13.5.0627.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-6
13.5.0627.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-6
13.5.0627.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-6
13.5.0627.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-6
13.5.0627.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-6
13.5.0629.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-6
13.5.0629.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-6
13.5.0629.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-6
13.5.0629.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-6
13.5.0629.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-6
13.5.0629.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-6
13.5.0629.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-6
13.5.0629.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-6
13.5.0629.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-6
13.5.0629.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-6
13.5.0629.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-6
13.5.0629.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-6
13.5.0629.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-6
13.5.0629.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-6



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0629.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-6
13.5.0629.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-6
13.5.0631.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-6
13.5.0631.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-6
13.5.0631.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-6
13.5.0631.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-6
13.5.0631.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-6
13.5.0631.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-6
13.5.0631.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-6
13.5.0631.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-6
13.5.0631.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-6
13.5.0631.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-6
13.5.0631.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-6
13.5.0631.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-6
13.5.0631.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-6
13.5.0631.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-6
13.5.0631.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-6
13.5.0631.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-6
13.5.0635.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-6
13.5.0635.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-6
13.5.0635.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-6
13.5.0635.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-6
13.5.0635.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-6
13.5.0635.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-6
13.5.0635.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-6
13.5.0635.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-6
13.5.0635.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-6
13.5.0635.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-6
13.5.0635.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-6
13.5.0635.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-6
13.5.0635.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-6
13.5.0635.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-6
13.5.0635.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-6
13.5.0635.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-6
13.5.0640.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-6
13.5.0640.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-6
13.5.0640.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-6

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0640.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-6
13.5.0640.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-6
13.5.0640.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-6
13.5.0640.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-6
13.5.0640.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-6
13.5.0640.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-6
13.5.0640.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-6
13.5.0640.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-6
13.5.0640.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-6
13.5.0640.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-6
13.5.0640.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-6
13.5.0640.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-6
13.5.0640.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-6
13.5.0645.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-6
13.5.0645.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-6
13.5.0645.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-6
13.5.0645.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-6
13.5.0645.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-6
13.5.0645.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-6
13.5.0645.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-6
13.5.0645.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-6
13.5.0645.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-6
13.5.0645.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-6
13.5.0645.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-6
13.5.0645.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-6
13.5.0645.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-6
13.5.0645.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-6
13.5.0645.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-6
13.5.0645.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-6
13.5.0650.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-6
13.5.0650.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-6
13.5.0650.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-6
13.5.0650.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-6
13.5.0650.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-6
13.5.0650.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-6
13.5.0650.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-6
13.5.0650.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-6

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0650.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-6
13.5.0650.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-6
13.5.0650.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-6
13.5.0650.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-6
13.5.0650.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-6
13.5.0650.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-6
13.5.0650.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-6
13.5.0650.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-6
13.5.0655.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-6
13.5.0655.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-6
13.5.0655.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-6
13.5.0655.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-6
13.5.0655.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-6
13.5.0655.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-6
13.5.0655.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-6
13.5.0655.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-6
13.5.0655.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-6
13.5.0655.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-6
13.5.0655.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-6
13.5.0655.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-6
13.5.0655.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-6
13.5.0655.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-6
13.5.0655.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-6
13.5.0655.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-6
13.5.0660.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-6
13.5.0660.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-6
13.5.0660.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-6
13.5.0660.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-6
13.5.0660.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-6
13.5.0660.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-6
13.5.0660.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-6
13.5.0660.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-6
13.5.0660.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-6
13.5.0660.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-6
13.5.0660.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-6
13.5.0660.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-6
13.5.0660.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-6

# INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024



13.5.0660.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-6
13.5.0660.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-6
13.5.0660.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-6
13.5.0670.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-6
13.5.0670.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-6
13.5.0670.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-6
13.5.0670.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-6
13.5.0670.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-6
13.5.0670.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-6
13.5.0670.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-6
13.5.0670.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-6
13.5.0670.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-6
13.5.0670.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-6
13.5.0670.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-6
13.5.0670.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-6
13.5.0670.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-6
13.5.0670.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-6
13.5.0670.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-6
13.5.0670.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-6
13.5.0706.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-7
13.5.0706.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-7
13.5.0706.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-7
13.5.0706.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-7
13.5.0706.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-7
13.5.0706.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-7
13.5.0706.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-7
13.5.0706.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-7
13.5.0706.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-7
13.5.0706.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-7
13.5.0706.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-7
13.5.0706.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-7
13.5.0706.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-7
13.5.0706.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-7
13.5.0706.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-7
13.5.0706.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-7
13.5.0707.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-7
13.5.0707.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0707.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-7
13.5.0707.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-7
13.5.0707.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-7
13.5.0707.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-7
13.5.0707.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-7
13.5.0707.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-7
13.5.0707.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-7
13.5.0707.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-7
13.5.0707.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-7
13.5.0707.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-7
13.5.0707.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-7
13.5.0707.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-7
13.5.0707.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-7
13.5.0707.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-7
13.5.0708.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-7
13.5.0708.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-7
13.5.0708.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-7
13.5.0708.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-7
13.5.0708.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-7
13.5.0708.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-7
13.5.0708.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-7
13.5.0708.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-7
13.5.0708.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-7
13.5.0708.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-7
13.5.0708.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-7
13.5.0708.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-7
13.5.0708.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-7
13.5.0708.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-7
13.5.0708.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-7
13.5.0708.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-7
13.5.0710.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-7
13.5.0710.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-7
13.5.0710.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-7
13.5.0710.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-7
13.5.0710.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-7
13.5.0710.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-7
13.5.0710.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024



13.5.0710.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-7
13.5.0710.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-7
13.5.0710.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-7
13.5.0710.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-7
13.5.0710.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-7
13.5.0710.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-7
13.5.0710.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-7
13.5.0710.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-7
13.5.0710.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-7
13.5.0712.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-7
13.5.0712.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-7
13.5.0712.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-7
13.5.0712.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-7
13.5.0712.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-7
13.5.0712.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-7
13.5.0712.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-7
13.5.0712.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-7
13.5.0712.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-7
13.5.0712.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-7
13.5.0712.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-7
13.5.0712.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-7
13.5.0712.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-7
13.5.0712.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-7
13.5.0712.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-7
13.5.0712.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-7
13.5.0714.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-7
13.5.0714.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-7
13.5.0714.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-7
13.5.0714.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-7
13.5.0714.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-7
13.5.0714.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-7
13.5.0714.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-7
13.5.0714.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-7
13.5.0714.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-7
13.5.0714.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-7
13.5.0714.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-7
13.5.0714.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0714.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-7
13.5.0714.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-7
13.5.0714.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-7
13.5.0714.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-7
13.5.0716.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-7
13.5.0716.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-7
13.5.0716.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-7
13.5.0716.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-7
13.5.0716.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-7
13.5.0716.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-7
13.5.0716.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-7
13.5.0716.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-7
13.5.0716.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-7
13.5.0716.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-7
13.5.0716.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-7
13.5.0716.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-7
13.5.0716.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-7
13.5.0716.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-7
13.5.0716.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-7
13.5.0716.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-7
13.5.0718.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-7
13.5.0718.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-7
13.5.0718.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-7
13.5.0718.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-7
13.5.0718.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-7
13.5.0718.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-7
13.5.0718.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-7
13.5.0718.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-7
13.5.0718.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-7
13.5.0718.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-7
13.5.0718.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-7
13.5.0718.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-7
13.5.0718.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-7
13.5.0718.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-7
13.5.0718.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-7
13.5.0718.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-7
13.5.0721.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0721.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-7
13.5.0721.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-7
13.5.0721.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-7
13.5.0721.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-7
13.5.0721.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-7
13.5.0721.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-7
13.5.0721.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-7
13.5.0721.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-7
13.5.0721.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-7
13.5.0721.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-7
13.5.0721.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-7
13.5.0721.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-7
13.5.0721.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-7
13.5.0721.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-7
13.5.0721.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-7
13.5.0723.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-7
13.5.0723.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-7
13.5.0723.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-7
13.5.0723.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-7
13.5.0723.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-7
13.5.0723.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-7
13.5.0723.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-7
13.5.0723.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-7
13.5.0723.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-7
13.5.0723.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-7
13.5.0723.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-7
13.5.0723.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-7
13.5.0723.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-7
13.5.0723.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-7
13.5.0723.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-7
13.5.0723.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-7
13.5.0725.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-7
13.5.0725.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-7
13.5.0725.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-7
13.5.0725.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-7
13.5.0725.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-7
13.5.0725.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-7



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0725.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-7
13.5.0725.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-7
13.5.0725.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-7
13.5.0725.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-7
13.5.0725.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-7
13.5.0725.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-7
13.5.0725.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-7
13.5.0725.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-7
13.5.0725.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-7
13.5.0725.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-7
13.5.0727.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-7
13.5.0727.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-7
13.5.0727.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-7
13.5.0727.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-7
13.5.0727.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-7
13.5.0727.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-7
13.5.0727.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-7
13.5.0727.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-7
13.5.0727.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-7
13.5.0727.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-7
13.5.0727.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-7
13.5.0727.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-7
13.5.0727.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-7
13.5.0727.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-7
13.5.0727.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-7
13.5.0727.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-7
13.5.0729.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-7
13.5.0729.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-7
13.5.0729.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-7
13.5.0729.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-7
13.5.0729.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-7
13.5.0729.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-7
13.5.0729.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-7
13.5.0729.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-7
13.5.0729.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-7
13.5.0729.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-7
13.5.0729.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0729.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-7
13.5.0729.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-7
13.5.0729.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-7
13.5.0729.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-7
13.5.0729.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-7
13.5.0731.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-7
13.5.0731.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-7
13.5.0731.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-7
13.5.0731.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-7
13.5.0731.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-7
13.5.0731.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-7
13.5.0731.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-7
13.5.0731.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-7
13.5.0731.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-7
13.5.0731.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-7
13.5.0731.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-7
13.5.0731.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-7
13.5.0731.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-7
13.5.0731.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-7
13.5.0731.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-7
13.5.0731.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-7
13.5.0735.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-7
13.5.0735.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-7
13.5.0735.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-7
13.5.0735.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-7
13.5.0735.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-7
13.5.0735.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-7
13.5.0735.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-7
13.5.0735.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-7
13.5.0735.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-7
13.5.0735.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-7
13.5.0735.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-7
13.5.0735.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-7
13.5.0735.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-7
13.5.0735.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-7
13.5.0735.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-7
13.5.0735.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0740.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-7
13.5.0740.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-7
13.5.0740.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-7
13.5.0740.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-7
13.5.0740.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-7
13.5.0740.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-7
13.5.0740.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-7
13.5.0740.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-7
13.5.0740.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-7
13.5.0740.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-7
13.5.0740.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-7
13.5.0740.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-7
13.5.0740.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-7
13.5.0740.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-7
13.5.0740.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-7
13.5.0740.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-7
13.5.0745.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-7
13.5.0745.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-7
13.5.0745.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-7
13.5.0745.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-7
13.5.0745.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-7
13.5.0745.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-7
13.5.0745.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-7
13.5.0745.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-7
13.5.0745.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-7
13.5.0745.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-7
13.5.0745.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-7
13.5.0745.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-7
13.5.0745.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-7
13.5.0745.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-7
13.5.0745.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-7
13.5.0745.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-7
13.5.0750.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-7
13.5.0750.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-7
13.5.0750.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-7
13.5.0750.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-7
13.5.0750.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0750.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-7
13.5.0750.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-7
13.5.0750.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-7
13.5.0750.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-7
13.5.0750.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-7
13.5.0750.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-7
13.5.0750.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-7
13.5.0750.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-7
13.5.0750.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-7
13.5.0750.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-7
13.5.0750.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-7
13.5.0755.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-7
13.5.0755.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-7
13.5.0755.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-7
13.5.0755.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-7
13.5.0755.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-7
13.5.0755.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-7
13.5.0755.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-7
13.5.0755.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-7
13.5.0755.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-7
13.5.0755.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-7
13.5.0755.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-7
13.5.0755.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-7
13.5.0755.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-7
13.5.0755.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-7
13.5.0755.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-7
13.5.0755.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-7
13.5.0760.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-7
13.5.0760.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-7
13.5.0760.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-7
13.5.0760.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-7
13.5.0760.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-7
13.5.0760.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-7
13.5.0760.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-7
13.5.0760.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-7
13.5.0760.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-7
13.5.0760.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-7

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0760.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-7
13.5.0760.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-7
13.5.0760.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-7
13.5.0760.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-7
13.5.0760.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-7
13.5.0760.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-7
13.5.0770.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-7
13.5.0770.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-7
13.5.0770.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-7
13.5.0770.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-7
13.5.0770.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-7
13.5.0770.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-7
13.5.0770.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-7
13.5.0770.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-7
13.5.0770.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-7
13.5.0770.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-7
13.5.0770.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-7
13.5.0770.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-7
13.5.0770.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-7
13.5.0770.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-7
13.5.0770.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-7
13.5.0770.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-7
13.5.0806.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-8
13.5.0806.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-8
13.5.0806.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-8
13.5.0806.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-8
13.5.0806.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-8
13.5.0806.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-8
13.5.0806.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-8
13.5.0806.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-8
13.5.0806.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-8
13.5.0806.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-8
13.5.0806.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-8
13.5.0806.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-8
13.5.0806.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-8
13.5.0806.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-8
13.5.0806.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-8

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0806.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-8
13.5.0807.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-8
13.5.0807.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-8
13.5.0807.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-8
13.5.0807.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-8
13.5.0807.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-8
13.5.0807.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-8
13.5.0807.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-8
13.5.0807.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-8
13.5.0807.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-8
13.5.0807.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-8
13.5.0807.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-8
13.5.0807.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-8
13.5.0807.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-8
13.5.0807.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-8
13.5.0807.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-8
13.5.0807.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-8
13.5.0808.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-8
13.5.0808.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-8
13.5.0808.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-8
13.5.0808.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-8
13.5.0808.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-8
13.5.0808.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-8
13.5.0808.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-8
13.5.0808.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-8
13.5.0808.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-8
13.5.0808.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-8
13.5.0808.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-8
13.5.0808.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-8
13.5.0808.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-8
13.5.0808.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-8
13.5.0808.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-8
13.5.0808.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-8
13.5.0810.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-8
13.5.0810.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-8
13.5.0810.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-8
13.5.0810.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-8

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0810.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-8
13.5.0810.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-8
13.5.0810.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-8
13.5.0810.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-8
13.5.0810.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-8
13.5.0810.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-8
13.5.0810.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-8
13.5.0810.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-8
13.5.0810.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-8
13.5.0810.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-8
13.5.0810.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-8
13.5.0810.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-8
13.5.0812.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-8
13.5.0812.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-8
13.5.0812.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-8
13.5.0812.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-8
13.5.0812.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-8
13.5.0812.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-8
13.5.0812.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-8
13.5.0812.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-8
13.5.0812.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-8
13.5.0812.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-8
13.5.0812.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-8
13.5.0812.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-8
13.5.0812.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-8
13.5.0812.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-8
13.5.0812.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-8
13.5.0812.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-8
13.5.0814.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-8
13.5.0814.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-8
13.5.0814.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-8
13.5.0814.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-8
13.5.0814.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-8
13.5.0814.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-8
13.5.0814.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-8
13.5.0814.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-8
13.5.0814.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-8

13.5.0814.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-8
13.5.0814.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-8
13.5.0814.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-8
13.5.0814.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-8
13.5.0814.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-8
13.5.0814.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-8
13.5.0814.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-8
13.5.0816.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-8
13.5.0816.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-8
13.5.0816.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-8
13.5.0816.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-8
13.5.0816.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-8
13.5.0816.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-8
13.5.0816.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-8
13.5.0816.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-8
13.5.0816.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-8
13.5.0816.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-8
13.5.0816.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-8
13.5.0816.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-8
13.5.0816.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-8
13.5.0816.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-8
13.5.0816.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-8
13.5.0816.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-8
13.5.0818.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-8
13.5.0818.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-8
13.5.0818.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-8
13.5.0818.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-8
13.5.0818.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-8
13.5.0818.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-8
13.5.0818.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-8
13.5.0818.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-8
13.5.0818.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-8
13.5.0818.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-8
13.5.0818.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-8
13.5.0818.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-8
13.5.0818.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-8
13.5.0818.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-8



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0818.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-8
13.5.0818.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-8
13.5.0821.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-8
13.5.0821.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-8
13.5.0821.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-8
13.5.0821.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-8
13.5.0821.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-8
13.5.0821.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-8
13.5.0821.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-8
13.5.0821.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-8
13.5.0821.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-8
13.5.0821.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-8
13.5.0821.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-8
13.5.0821.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-8
13.5.0821.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-8
13.5.0821.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-8
13.5.0821.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-8
13.5.0821.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-8
13.5.0823.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-8
13.5.0823.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-8
13.5.0823.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-8
13.5.0823.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-8
13.5.0823.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-8
13.5.0823.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-8
13.5.0823.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-8
13.5.0823.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-8
13.5.0823.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-8
13.5.0823.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-8
13.5.0823.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-8
13.5.0823.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-8
13.5.0823.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-8
13.5.0823.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-8
13.5.0823.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-8
13.5.0823.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-8
13.5.0825.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-8
13.5.0825.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-8
13.5.0825.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-8

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0825.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-8
13.5.0825.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-8
13.5.0825.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-8
13.5.0825.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-8
13.5.0825.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-8
13.5.0825.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-8
13.5.0825.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-8
13.5.0825.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-8
13.5.0825.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-8
13.5.0825.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-8
13.5.0825.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-8
13.5.0825.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-8
13.5.0825.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-8
13.5.0827.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-8
13.5.0827.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-8
13.5.0827.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-8
13.5.0827.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-8
13.5.0827.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-8
13.5.0827.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-8
13.5.0827.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-8
13.5.0827.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-8
13.5.0827.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-8
13.5.0827.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-8
13.5.0827.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-8
13.5.0827.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-8
13.5.0827.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-8
13.5.0827.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-8
13.5.0827.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-8
13.5.0827.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-8
13.5.0829.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-8
13.5.0829.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-8
13.5.0829.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-8
13.5.0829.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-8
13.5.0829.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-8
13.5.0829.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-8
13.5.0829.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-8
13.5.0829.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-8

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0829.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-8
13.5.0829.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-8
13.5.0829.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-8
13.5.0829.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-8
13.5.0829.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-8
13.5.0829.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-8
13.5.0829.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-8
13.5.0829.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-8
13.5.0831.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-8
13.5.0831.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-8
13.5.0831.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-8
13.5.0831.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-8
13.5.0831.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-8
13.5.0831.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-8
13.5.0831.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-8
13.5.0831.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-8
13.5.0831.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-8
13.5.0831.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-8
13.5.0831.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-8
13.5.0831.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-8
13.5.0831.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-8
13.5.0831.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-8
13.5.0831.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-8
13.5.0831.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-8
13.5.0835.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-8
13.5.0835.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-8
13.5.0835.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-8
13.5.0835.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-8
13.5.0835.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-8
13.5.0835.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-8
13.5.0835.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-8
13.5.0835.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-8
13.5.0835.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-8
13.5.0835.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-8
13.5.0835.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-8
13.5.0835.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-8
13.5.0835.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-8

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0835.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-8
13.5.0835.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-8
13.5.0835.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-8
13.5.0840.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-8
13.5.0840.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-8
13.5.0840.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-8
13.5.0840.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-8
13.5.0840.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-8
13.5.0840.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-8
13.5.0840.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-8
13.5.0840.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-8
13.5.0840.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-8
13.5.0840.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-8
13.5.0840.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-8
13.5.0840.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-8
13.5.0840.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-8
13.5.0840.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-8
13.5.0840.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-8
13.5.0840.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-8
13.5.0845.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-8
13.5.0845.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-8
13.5.0845.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-8
13.5.0845.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-8
13.5.0845.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-8
13.5.0845.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-8
13.5.0845.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-8
13.5.0845.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-8
13.5.0845.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-8
13.5.0845.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-8
13.5.0845.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-8
13.5.0845.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-8
13.5.0845.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-8
13.5.0845.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-8
13.5.0845.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-8
13.5.0845.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-8
13.5.0850.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-8
13.5.0850.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-8

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0850.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-8
13.5.0850.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-8
13.5.0850.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-8
13.5.0850.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-8
13.5.0850.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-8
13.5.0850.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-8
13.5.0850.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-8
13.5.0850.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-8
13.5.0850.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-8
13.5.0850.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-8
13.5.0850.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-8
13.5.0850.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-8
13.5.0850.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-8
13.5.0850.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-8
13.5.0855.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-8
13.5.0855.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-8
13.5.0855.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-8
13.5.0855.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-8
13.5.0855.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-8
13.5.0855.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-8
13.5.0855.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-8
13.5.0855.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-8
13.5.0855.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-8
13.5.0855.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-8
13.5.0855.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-8
13.5.0855.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-8
13.5.0855.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-8
13.5.0855.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-8
13.5.0855.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-8
13.5.0855.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-8
13.5.0860.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-8
13.5.0860.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-8
13.5.0860.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-8
13.5.0860.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-8
13.5.0860.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-8
13.5.0860.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-8
13.5.0860.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-8

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0860.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-8
13.5.0860.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-8
13.5.0860.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-8
13.5.0860.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-8
13.5.0860.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-8
13.5.0860.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-8
13.5.0860.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-8
13.5.0860.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-8
13.5.0860.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-8
13.5.0870.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-8
13.5.0870.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-8
13.5.0870.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-8
13.5.0870.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-8
13.5.0870.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-8
13.5.0870.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-8
13.5.0870.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-8
13.5.0870.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-8
13.5.0870.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-8
13.5.0870.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-8
13.5.0870.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-8
13.5.0870.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-8
13.5.0870.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-8
13.5.0870.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-8
13.5.0870.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-8
13.5.0870.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-8
13.5.0906.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-9
13.5.0906.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-9
13.5.0906.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-9
13.5.0906.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-9
13.5.0906.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-9
13.5.0906.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-9
13.5.0906.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-9
13.5.0906.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-9
13.5.0906.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-9
13.5.0906.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-9
13.5.0906.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-9
13.5.0906.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0906.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-9
13.5.0906.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-9
13.5.0906.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-9
13.5.0906.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-9
13.5.0907.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-9
13.5.0907.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-9
13.5.0907.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-9
13.5.0907.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-9
13.5.0907.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-9
13.5.0907.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-9
13.5.0907.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-9
13.5.0907.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-9
13.5.0907.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-9
13.5.0907.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-9
13.5.0907.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-9
13.5.0907.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-9
13.5.0907.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-9
13.5.0907.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-9
13.5.0907.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-9
13.5.0907.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-9
13.5.0908.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-9
13.5.0908.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-9
13.5.0908.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-9
13.5.0908.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-9
13.5.0908.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-9
13.5.0908.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-9
13.5.0908.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-9
13.5.0908.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-9
13.5.0908.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-9
13.5.0908.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-9
13.5.0908.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-9
13.5.0908.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-9
13.5.0908.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-9
13.5.0908.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-9
13.5.0908.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-9
13.5.0908.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-9
13.5.0910.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0910.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-9
13.5.0910.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-9
13.5.0910.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-9
13.5.0910.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-9
13.5.0910.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-9
13.5.0910.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-9
13.5.0910.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-9
13.5.0910.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-9
13.5.0910.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-9
13.5.0910.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-9
13.5.0910.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-9
13.5.0910.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-9
13.5.0910.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-9
13.5.0910.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-9
13.5.0910.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-9
13.5.0912.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-9
13.5.0912.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-9
13.5.0912.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-9
13.5.0912.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-9
13.5.0912.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-9
13.5.0912.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-9
13.5.0912.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-9
13.5.0912.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-9
13.5.0912.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-9
13.5.0912.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-9
13.5.0912.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-9
13.5.0912.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-9
13.5.0912.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-9
13.5.0912.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-9
13.5.0912.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-9
13.5.0912.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-9
13.5.0914.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-9
13.5.0914.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-9
13.5.0914.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-9
13.5.0914.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-9
13.5.0914.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-9
13.5.0914.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-9



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0914.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-9
13.5.0914.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-9
13.5.0914.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-9
13.5.0914.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-9
13.5.0914.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-9
13.5.0914.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-9
13.5.0914.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-9
13.5.0914.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-9
13.5.0914.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-9
13.5.0914.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-9
13.5.0916.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-9
13.5.0916.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-9
13.5.0916.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-9
13.5.0916.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-9
13.5.0916.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-9
13.5.0916.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-9
13.5.0916.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-9
13.5.0916.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-9
13.5.0916.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-9
13.5.0916.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-9
13.5.0916.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-9
13.5.0916.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-9
13.5.0916.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-9
13.5.0916.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-9
13.5.0916.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-9
13.5.0916.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-9
13.5.0918.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-9
13.5.0918.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-9
13.5.0918.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-9
13.5.0918.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-9
13.5.0918.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-9
13.5.0918.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-9
13.5.0918.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-9
13.5.0918.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-9
13.5.0918.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-9
13.5.0918.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-9
13.5.0918.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0918.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-9
13.5.0918.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-9
13.5.0918.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-9
13.5.0918.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-9
13.5.0918.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-9
13.5.0921.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-9
13.5.0921.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-9
13.5.0921.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-9
13.5.0921.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-9
13.5.0921.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-9
13.5.0921.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-9
13.5.0921.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-9
13.5.0921.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-9
13.5.0921.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-9
13.5.0921.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-9
13.5.0921.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-9
13.5.0921.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-9
13.5.0921.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-9
13.5.0921.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-9
13.5.0921.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-9
13.5.0921.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-9
13.5.0923.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-9
13.5.0923.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-9
13.5.0923.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-9
13.5.0923.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-9
13.5.0923.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-9
13.5.0923.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-9
13.5.0923.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-9
13.5.0923.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-9
13.5.0923.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-9
13.5.0923.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-9
13.5.0923.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-9
13.5.0923.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-9
13.5.0923.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-9
13.5.0923.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-9
13.5.0923.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-9
13.5.0923.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0925.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-9
13.5.0925.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-9
13.5.0925.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-9
13.5.0925.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-9
13.5.0925.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-9
13.5.0925.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-9
13.5.0925.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-9
13.5.0925.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-9
13.5.0925.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-9
13.5.0925.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-9
13.5.0925.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-9
13.5.0925.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-9
13.5.0925.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-9
13.5.0925.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-9
13.5.0925.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-9
13.5.0925.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-9
13.5.0927.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-9
13.5.0927.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-9
13.5.0927.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-9
13.5.0927.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-9
13.5.0927.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-9
13.5.0927.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-9
13.5.0927.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-9
13.5.0927.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-9
13.5.0927.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-9
13.5.0927.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-9
13.5.0927.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-9
13.5.0927.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-9
13.5.0927.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-9
13.5.0927.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-9
13.5.0927.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-9
13.5.0927.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-9
13.5.0929.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-9
13.5.0929.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-9
13.5.0929.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-9
13.5.0929.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-9
13.5.0929.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0929.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-9
13.5.0929.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-9
13.5.0929.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-9
13.5.0929.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-9
13.5.0929.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-9
13.5.0929.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-9
13.5.0929.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-9
13.5.0929.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-9
13.5.0929.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-9
13.5.0929.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-9
13.5.0929.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-9
13.5.0931.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-9
13.5.0931.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-9
13.5.0931.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-9
13.5.0931.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-9
13.5.0931.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-9
13.5.0931.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-9
13.5.0931.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-9
13.5.0931.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-9
13.5.0931.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-9
13.5.0931.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-9
13.5.0931.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-9
13.5.0931.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-9
13.5.0931.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-9
13.5.0931.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-9
13.5.0931.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-9
13.5.0931.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-9
13.5.0935.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-9
13.5.0935.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-9
13.5.0935.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-9
13.5.0935.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-9
13.5.0935.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-9
13.5.0935.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-9
13.5.0935.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-9
13.5.0935.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-9
13.5.0935.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-9
13.5.0935.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0935.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-9
13.5.0935.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-9
13.5.0935.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-9
13.5.0935.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-9
13.5.0935.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-9
13.5.0935.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-9
13.5.0940.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-9
13.5.0940.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-9
13.5.0940.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-9
13.5.0940.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-9
13.5.0940.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-9
13.5.0940.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-9
13.5.0940.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-9
13.5.0940.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-9
13.5.0940.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-9
13.5.0940.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-9
13.5.0940.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-9
13.5.0940.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-9
13.5.0940.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-9
13.5.0940.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-9
13.5.0940.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-9
13.5.0940.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-9
13.5.0945.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-9
13.5.0945.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-9
13.5.0945.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-9
13.5.0945.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-9
13.5.0945.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-9
13.5.0945.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-9
13.5.0945.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-9
13.5.0945.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-9
13.5.0945.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-9
13.5.0945.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-9
13.5.0945.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-9
13.5.0945.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-9
13.5.0945.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-9
13.5.0945.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-9
13.5.0945.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0945.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-9
13.5.0950.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-9
13.5.0950.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-9
13.5.0950.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-9
13.5.0950.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-9
13.5.0950.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-9
13.5.0950.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-9
13.5.0950.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-9
13.5.0950.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-9
13.5.0950.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-9
13.5.0950.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-9
13.5.0950.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-9
13.5.0950.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-9
13.5.0950.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-9
13.5.0950.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-9
13.5.0950.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-9
13.5.0950.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-9
13.5.0955.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-9
13.5.0955.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-9
13.5.0955.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-9
13.5.0955.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-9
13.5.0955.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-9
13.5.0955.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-9
13.5.0955.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-9
13.5.0955.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-9
13.5.0955.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-9
13.5.0955.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-9
13.5.0955.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-9
13.5.0955.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-9
13.5.0955.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-9
13.5.0955.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-9
13.5.0955.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-9
13.5.0955.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-9
13.5.0960.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-9
13.5.0960.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-9
13.5.0960.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-9
13.5.0960.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-9

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.0960.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-9
13.5.0960.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-9
13.5.0960.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-9
13.5.0960.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-9
13.5.0960.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-9
13.5.0960.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-9
13.5.0960.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-9
13.5.0960.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-9
13.5.0960.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-9
13.5.0960.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-9
13.5.0960.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-9
13.5.0960.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-9
13.5.0970.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-9
13.5.0970.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-9
13.5.0970.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-9
13.5.0970.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-9
13.5.0970.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-9
13.5.0970.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-9
13.5.0970.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-9
13.5.0970.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-9
13.5.0970.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-9
13.5.0970.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-9
13.5.0970.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-9
13.5.0970.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-9
13.5.0970.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-9
13.5.0970.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-9
13.5.0970.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-9
13.5.0970.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-9
13.5.1006.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-10
13.5.1006.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-10
13.5.1006.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-10
13.5.1006.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-10
13.5.1006.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-10
13.5.1006.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-10
13.5.1006.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-10
13.5.1006.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-10
13.5.1006.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1006.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-10
13.5.1006.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-10
13.5.1006.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-10
13.5.1006.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-10
13.5.1006.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-10
13.5.1006.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-10
13.5.1006.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-10
13.5.1007.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-10
13.5.1007.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-10
13.5.1007.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-10
13.5.1007.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-10
13.5.1007.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-10
13.5.1007.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-10
13.5.1007.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-10
13.5.1007.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-10
13.5.1007.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-10
13.5.1007.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-10
13.5.1007.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-10
13.5.1007.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-10
13.5.1007.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-10
13.5.1007.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-10
13.5.1007.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-10
13.5.1007.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-10
13.5.1008.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-10
13.5.1008.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-10
13.5.1008.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-10
13.5.1008.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-10
13.5.1008.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-10
13.5.1008.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-10
13.5.1008.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-10
13.5.1008.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-10
13.5.1008.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-10
13.5.1008.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-10
13.5.1008.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-10
13.5.1008.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-10
13.5.1008.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-10
13.5.1008.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-10



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1008.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-10
13.5.1008.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-10
13.5.1010.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-10
13.5.1010.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-10
13.5.1010.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-10
13.5.1010.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-10
13.5.1010.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-10
13.5.1010.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-10
13.5.1010.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-10
13.5.1010.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-10
13.5.1010.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-10
13.5.1010.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-10
13.5.1010.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-10
13.5.1010.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-10
13.5.1010.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-10
13.5.1010.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-10
13.5.1010.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-10
13.5.1010.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-10
13.5.1012.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-10
13.5.1012.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-10
13.5.1012.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-10
13.5.1012.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-10
13.5.1012.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-10
13.5.1012.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-10
13.5.1012.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-10
13.5.1012.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-10
13.5.1012.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-10
13.5.1012.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-10
13.5.1012.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-10
13.5.1012.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-10
13.5.1012.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-10
13.5.1012.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-10
13.5.1012.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-10
13.5.1012.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-10
13.5.1014.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-10
13.5.1014.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-10
13.5.1014.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1014.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-10
13.5.1014.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-10
13.5.1014.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-10
13.5.1014.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-10
13.5.1014.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-10
13.5.1014.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-10
13.5.1014.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-10
13.5.1014.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-10
13.5.1014.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-10
13.5.1014.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-10
13.5.1014.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-10
13.5.1014.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-10
13.5.1014.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-10
13.5.1016.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-10
13.5.1016.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-10
13.5.1016.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-10
13.5.1016.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-10
13.5.1016.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-10
13.5.1016.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-10
13.5.1016.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-10
13.5.1016.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-10
13.5.1016.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-10
13.5.1016.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-10
13.5.1016.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-10
13.5.1016.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-10
13.5.1016.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-10
13.5.1016.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-10
13.5.1016.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-10
13.5.1016.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-10
13.5.1018.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-10
13.5.1018.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-10
13.5.1018.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-10
13.5.1018.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-10
13.5.1018.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-10
13.5.1018.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-10
13.5.1018.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-10
13.5.1018.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1018.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-10
13.5.1018.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-10
13.5.1018.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-10
13.5.1018.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-10
13.5.1018.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-10
13.5.1018.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-10
13.5.1018.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-10
13.5.1018.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-10
13.5.1021.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-10
13.5.1021.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-10
13.5.1021.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-10
13.5.1021.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-10
13.5.1021.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-10
13.5.1021.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-10
13.5.1021.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-10
13.5.1021.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-10
13.5.1021.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-10
13.5.1021.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-10
13.5.1021.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-10
13.5.1021.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-10
13.5.1021.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-10
13.5.1021.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-10
13.5.1021.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-10
13.5.1021.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-10
13.5.1023.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-10
13.5.1023.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-10
13.5.1023.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-10
13.5.1023.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-10
13.5.1023.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-10
13.5.1023.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-10
13.5.1023.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-10
13.5.1023.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-10
13.5.1023.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-10
13.5.1023.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-10
13.5.1023.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-10
13.5.1023.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-10
13.5.1023.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1023.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-10
13.5.1023.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-10
13.5.1023.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-10
13.5.1025.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-10
13.5.1025.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-10
13.5.1025.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-10
13.5.1025.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-10
13.5.1025.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-10
13.5.1025.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-10
13.5.1025.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-10
13.5.1025.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-10
13.5.1025.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-10
13.5.1025.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-10
13.5.1025.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-10
13.5.1025.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-10
13.5.1025.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-10
13.5.1025.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-10
13.5.1025.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-10
13.5.1025.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-10
13.5.1027.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-10
13.5.1027.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-10
13.5.1027.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-10
13.5.1027.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-10
13.5.1027.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-10
13.5.1027.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-10
13.5.1027.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-10
13.5.1027.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-10
13.5.1027.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-10
13.5.1027.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-10
13.5.1027.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-10
13.5.1027.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-10
13.5.1027.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-10
13.5.1027.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-10
13.5.1027.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-10
13.5.1027.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-10
13.5.1029.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-10
13.5.1029.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1029.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-10
13.5.1029.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-10
13.5.1029.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-10
13.5.1029.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-10
13.5.1029.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-10
13.5.1029.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-10
13.5.1029.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-10
13.5.1029.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-10
13.5.1029.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-10
13.5.1029.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-10
13.5.1029.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-10
13.5.1029.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-10
13.5.1029.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-10
13.5.1029.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-10
13.5.1031.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-10
13.5.1031.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-10
13.5.1031.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-10
13.5.1031.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-10
13.5.1031.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-10
13.5.1031.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-10
13.5.1031.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-10
13.5.1031.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-10
13.5.1031.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-10
13.5.1031.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-10
13.5.1031.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-10
13.5.1031.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-10
13.5.1031.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-10
13.5.1031.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-10
13.5.1031.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-10
13.5.1031.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-10
13.5.1035.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-10
13.5.1035.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-10
13.5.1035.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-10
13.5.1035.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-10
13.5.1035.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-10
13.5.1035.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-10
13.5.1035.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1035.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-10
13.5.1035.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-10
13.5.1035.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-10
13.5.1035.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-10
13.5.1035.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-10
13.5.1035.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-10
13.5.1035.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-10
13.5.1035.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-10
13.5.1035.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-10
13.5.1040.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-10
13.5.1040.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-10
13.5.1040.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-10
13.5.1040.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-10
13.5.1040.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-10
13.5.1040.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-10
13.5.1040.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-10
13.5.1040.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-10
13.5.1040.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-10
13.5.1040.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-10
13.5.1040.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-10
13.5.1040.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-10
13.5.1040.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-10
13.5.1040.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-10
13.5.1040.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-10
13.5.1040.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-10
13.5.1045.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-10
13.5.1045.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-10
13.5.1045.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-10
13.5.1045.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-10
13.5.1045.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-10
13.5.1045.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-10
13.5.1045.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-10
13.5.1045.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-10
13.5.1045.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-10
13.5.1045.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-10
13.5.1045.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-10
13.5.1045.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1045.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-10
13.5.1045.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-10
13.5.1045.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-10
13.5.1045.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-10
13.5.1050.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-10
13.5.1050.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-10
13.5.1050.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-10
13.5.1050.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-10
13.5.1050.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-10
13.5.1050.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-10
13.5.1050.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-10
13.5.1050.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-10
13.5.1050.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-10
13.5.1050.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-10
13.5.1050.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-10
13.5.1050.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-10
13.5.1050.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-10
13.5.1050.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-10
13.5.1050.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-10
13.5.1050.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-10
13.5.1055.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-10
13.5.1055.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-10
13.5.1055.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-10
13.5.1055.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-10
13.5.1055.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-10
13.5.1055.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-10
13.5.1055.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-10
13.5.1055.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-10
13.5.1055.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-10
13.5.1055.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-10
13.5.1055.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-10
13.5.1055.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-10
13.5.1055.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-10
13.5.1055.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-10
13.5.1055.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-10
13.5.1055.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-10
13.5.1060.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-10

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1060.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-10
13.5.1060.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-10
13.5.1060.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-10
13.5.1060.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-10
13.5.1060.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-10
13.5.1060.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-10
13.5.1060.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-10
13.5.1060.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-10
13.5.1060.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-10
13.5.1060.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-10
13.5.1060.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-10
13.5.1060.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-10
13.5.1060.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-10
13.5.1060.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-10
13.5.1060.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-10
13.5.1070.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-10
13.5.1070.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-10
13.5.1070.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-10
13.5.1070.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-10
13.5.1070.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-10
13.5.1070.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-10
13.5.1070.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-10
13.5.1070.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-10
13.5.1070.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-10
13.5.1070.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-10
13.5.1070.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-10
13.5.1070.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-10
13.5.1070.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-10
13.5.1070.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-10
13.5.1070.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-10
13.5.1070.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-10
13.5.1106.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-11
13.5.1106.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-11
13.5.1106.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-11
13.5.1106.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-11
13.5.1106.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-11
13.5.1106.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-11



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1106.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-11
13.5.1106.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-11
13.5.1106.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-11
13.5.1106.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-11
13.5.1106.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-11
13.5.1106.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-11
13.5.1106.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-11
13.5.1106.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-11
13.5.1106.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-11
13.5.1106.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-11
13.5.1107.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-11
13.5.1107.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-11
13.5.1107.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-11
13.5.1107.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-11
13.5.1107.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-11
13.5.1107.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-11
13.5.1107.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-11
13.5.1107.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-11
13.5.1107.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-11
13.5.1107.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-11
13.5.1107.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-11
13.5.1107.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-11
13.5.1107.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-11
13.5.1107.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-11
13.5.1107.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-11
13.5.1107.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-11
13.5.1108.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-11
13.5.1108.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-11
13.5.1108.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-11
13.5.1108.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-11
13.5.1108.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-11
13.5.1108.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-11
13.5.1108.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-11
13.5.1108.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-11
13.5.1108.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-11
13.5.1108.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-11
13.5.1108.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-11

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1108.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-11
13.5.1108.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-11
13.5.1108.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-11
13.5.1108.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-11
13.5.1108.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-11
13.5.1110.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-11
13.5.1110.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-11
13.5.1110.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-11
13.5.1110.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-11
13.5.1110.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-11
13.5.1110.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-11
13.5.1110.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-11
13.5.1110.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-11
13.5.1110.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-11
13.5.1110.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-11
13.5.1110.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-11
13.5.1110.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-11
13.5.1110.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-11
13.5.1110.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-11
13.5.1110.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-11
13.5.1110.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-11
13.5.1112.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-11
13.5.1112.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-11
13.5.1112.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-11
13.5.1112.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-11
13.5.1112.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-11
13.5.1112.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-11
13.5.1112.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-11
13.5.1112.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-11
13.5.1112.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-11
13.5.1112.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-11
13.5.1112.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-11
13.5.1112.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-11
13.5.1112.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-11
13.5.1112.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-11
13.5.1112.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-11
13.5.1112.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-11

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1114.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-11
13.5.1114.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-11
13.5.1114.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-11
13.5.1114.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-11
13.5.1114.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-11
13.5.1114.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-11
13.5.1114.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-11
13.5.1114.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-11
13.5.1114.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-11
13.5.1114.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-11
13.5.1114.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-11
13.5.1114.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-11
13.5.1114.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-11
13.5.1114.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-11
13.5.1114.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-11
13.5.1114.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-11
13.5.1116.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-11
13.5.1116.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-11
13.5.1116.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-11
13.5.1116.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-11
13.5.1116.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-11
13.5.1116.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-11
13.5.1116.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-11
13.5.1116.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-11
13.5.1116.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-11
13.5.1116.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-11
13.5.1116.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-11
13.5.1116.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-11
13.5.1116.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-11
13.5.1116.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-11
13.5.1116.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-11
13.5.1116.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-11
13.5.1118.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-11
13.5.1118.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-11
13.5.1118.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-11
13.5.1118.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-11
13.5.1118.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-11

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1118.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-11
13.5.1118.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-11
13.5.1118.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-11
13.5.1118.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-11
13.5.1118.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-11
13.5.1118.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-11
13.5.1118.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-11
13.5.1118.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-11
13.5.1118.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-11
13.5.1118.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-11
13.5.1118.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-11
13.5.1121.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-11
13.5.1121.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-11
13.5.1121.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-11
13.5.1121.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-11
13.5.1121.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-11
13.5.1121.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-11
13.5.1121.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-11
13.5.1121.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-11
13.5.1121.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-11
13.5.1121.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-11
13.5.1121.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-11
13.5.1121.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-11
13.5.1121.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-11
13.5.1121.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-11
13.5.1121.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-11
13.5.1121.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-11
13.5.1123.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-11
13.5.1123.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-11
13.5.1123.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-11
13.5.1123.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-11
13.5.1123.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-11
13.5.1123.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-11
13.5.1123.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-11
13.5.1123.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-11
13.5.1123.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-11
13.5.1123.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-11

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1123.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-11
13.5.1123.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-11
13.5.1123.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-11
13.5.1123.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-11
13.5.1123.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-11
13.5.1123.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-11
13.5.1125.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-11
13.5.1125.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-11
13.5.1125.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-11
13.5.1125.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-11
13.5.1125.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-11
13.5.1125.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-11
13.5.1125.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-11
13.5.1125.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-11
13.5.1125.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-11
13.5.1125.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-11
13.5.1125.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-11
13.5.1125.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-11
13.5.1125.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-11
13.5.1125.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-11
13.5.1125.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-11
13.5.1125.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-11
13.5.1127.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-11
13.5.1127.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-11
13.5.1127.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-11
13.5.1127.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-11
13.5.1127.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-11
13.5.1127.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-11
13.5.1127.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-11
13.5.1127.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-11
13.5.1127.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-11
13.5.1127.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-11
13.5.1127.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-11
13.5.1127.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-11
13.5.1127.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-11
13.5.1127.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-11
13.5.1127.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-11

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1127.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-11
13.5.1129.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-11
13.5.1129.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-11
13.5.1129.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-11
13.5.1129.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-11
13.5.1129.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-11
13.5.1129.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-11
13.5.1129.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-11
13.5.1129.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-11
13.5.1129.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-11
13.5.1129.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-11
13.5.1129.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-11
13.5.1129.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-11
13.5.1129.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-11
13.5.1129.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-11
13.5.1129.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-11
13.5.1129.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-11
13.5.1131.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-11
13.5.1131.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-11
13.5.1131.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-11
13.5.1131.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-11
13.5.1131.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-11
13.5.1131.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-11
13.5.1131.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-11
13.5.1131.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-11
13.5.1131.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-11
13.5.1131.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-11
13.5.1131.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-11
13.5.1131.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-11
13.5.1131.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-11
13.5.1131.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-11
13.5.1131.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-11
13.5.1131.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-11
13.5.1135.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-11
13.5.1135.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-11
13.5.1135.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-11
13.5.1135.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-11

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1135.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-11
13.5.1135.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-11
13.5.1135.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-11
13.5.1135.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-11
13.5.1135.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-11
13.5.1135.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-11
13.5.1135.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-11
13.5.1135.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-11
13.5.1135.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-11
13.5.1135.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-11
13.5.1135.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-11
13.5.1135.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-11
13.5.1140.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-11
13.5.1140.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-11
13.5.1140.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-11
13.5.1140.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-11
13.5.1140.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-11
13.5.1140.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-11
13.5.1140.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-11
13.5.1140.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-11
13.5.1140.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-11
13.5.1140.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-11
13.5.1140.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-11
13.5.1140.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-11
13.5.1140.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-11
13.5.1140.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-11
13.5.1140.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-11
13.5.1140.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-11
13.5.1145.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-11
13.5.1145.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-11
13.5.1145.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-11
13.5.1145.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-11
13.5.1145.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-11
13.5.1145.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-11
13.5.1145.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-11
13.5.1145.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-11
13.5.1145.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-11

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1145.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-11
13.5.1145.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-11
13.5.1145.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-11
13.5.1145.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-11
13.5.1145.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-11
13.5.1145.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-11
13.5.1145.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-11
13.5.1150.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-11
13.5.1150.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-11
13.5.1150.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-11
13.5.1150.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-11
13.5.1150.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-11
13.5.1150.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-11
13.5.1150.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-11
13.5.1150.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-11
13.5.1150.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-11
13.5.1150.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-11
13.5.1150.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-11
13.5.1150.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-11
13.5.1150.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-11
13.5.1150.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-11
13.5.1150.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-11
13.5.1150.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-11
13.5.1155.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-11
13.5.1155.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-11
13.5.1155.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-11
13.5.1155.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-11
13.5.1155.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-11
13.5.1155.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-11
13.5.1155.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-11
13.5.1155.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-11
13.5.1155.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-11
13.5.1155.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-11
13.5.1155.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-11
13.5.1155.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-11
13.5.1155.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-11
13.5.1155.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-11



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1155.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-11
13.5.1155.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-11
13.5.1160.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-11
13.5.1160.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-11
13.5.1160.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-11
13.5.1160.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-11
13.5.1160.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-11
13.5.1160.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-11
13.5.1160.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-11
13.5.1160.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-11
13.5.1160.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-11
13.5.1160.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-11
13.5.1160.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-11
13.5.1160.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-11
13.5.1160.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-11
13.5.1160.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-11
13.5.1160.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-11
13.5.1160.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-11
13.5.1170.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-11
13.5.1170.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-11
13.5.1170.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-11
13.5.1170.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-11
13.5.1170.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-11
13.5.1170.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-11
13.5.1170.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-11
13.5.1170.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-11
13.5.1170.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-11
13.5.1170.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-11
13.5.1170.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-11
13.5.1170.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-11
13.5.1170.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-11
13.5.1170.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-11
13.5.1170.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-11
13.5.1170.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-11
13.5.1206.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-12
13.5.1206.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-12
13.5.1206.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1206.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-12
13.5.1206.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-12
13.5.1206.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-12
13.5.1206.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-12
13.5.1206.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-12
13.5.1206.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-12
13.5.1206.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-12
13.5.1206.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-12
13.5.1206.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-12
13.5.1206.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-12
13.5.1206.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-12
13.5.1206.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-12
13.5.1206.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-12
13.5.1207.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-12
13.5.1207.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-12
13.5.1207.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-12
13.5.1207.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-12
13.5.1207.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-12
13.5.1207.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-12
13.5.1207.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-12
13.5.1207.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-12
13.5.1207.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-12
13.5.1207.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-12
13.5.1207.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-12
13.5.1207.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-12
13.5.1207.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-12
13.5.1207.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-12
13.5.1207.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-12
13.5.1207.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-12
13.5.1208.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-12
13.5.1208.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-12
13.5.1208.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-12
13.5.1208.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-12
13.5.1208.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-12
13.5.1208.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-12
13.5.1208.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-12
13.5.1208.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1208.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-12
13.5.1208.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-12
13.5.1208.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-12
13.5.1208.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-12
13.5.1208.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-12
13.5.1208.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-12
13.5.1208.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-12
13.5.1208.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-12
13.5.1210.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-12
13.5.1210.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-12
13.5.1210.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-12
13.5.1210.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-12
13.5.1210.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-12
13.5.1210.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-12
13.5.1210.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-12
13.5.1210.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-12
13.5.1210.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-12
13.5.1210.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-12
13.5.1210.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-12
13.5.1210.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-12
13.5.1210.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-12
13.5.1210.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-12
13.5.1210.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-12
13.5.1210.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-12
13.5.1212.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-12
13.5.1212.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-12
13.5.1212.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-12
13.5.1212.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-12
13.5.1212.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-12
13.5.1212.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-12
13.5.1212.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-12
13.5.1212.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-12
13.5.1212.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-12
13.5.1212.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-12
13.5.1212.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-12
13.5.1212.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-12
13.5.1212.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1212.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-12
13.5.1212.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-12
13.5.1212.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-12
13.5.1214.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-12
13.5.1214.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-12
13.5.1214.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-12
13.5.1214.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-12
13.5.1214.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-12
13.5.1214.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-12
13.5.1214.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-12
13.5.1214.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-12
13.5.1214.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-12
13.5.1214.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-12
13.5.1214.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-12
13.5.1214.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-12
13.5.1214.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-12
13.5.1214.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-12
13.5.1214.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-12
13.5.1214.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-12
13.5.1216.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-12
13.5.1216.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-12
13.5.1216.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-12
13.5.1216.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-12
13.5.1216.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-12
13.5.1216.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-12
13.5.1216.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-12
13.5.1216.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-12
13.5.1216.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-12
13.5.1216.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-12
13.5.1216.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-12
13.5.1216.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-12
13.5.1216.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-12
13.5.1216.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-12
13.5.1216.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-12
13.5.1216.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-12
13.5.1218.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-12
13.5.1218.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1218.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-12
13.5.1218.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-12
13.5.1218.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-12
13.5.1218.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-12
13.5.1218.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-12
13.5.1218.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-12
13.5.1218.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-12
13.5.1218.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-12
13.5.1218.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-12
13.5.1218.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-12
13.5.1218.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-12
13.5.1218.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-12
13.5.1218.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-12
13.5.1218.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-12
13.5.1221.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-12
13.5.1221.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-12
13.5.1221.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-12
13.5.1221.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-12
13.5.1221.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-12
13.5.1221.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-12
13.5.1221.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-12
13.5.1221.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-12
13.5.1221.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-12
13.5.1221.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-12
13.5.1221.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-12
13.5.1221.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-12
13.5.1221.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-12
13.5.1221.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-12
13.5.1221.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-12
13.5.1221.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-12
13.5.1223.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-12
13.5.1223.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-12
13.5.1223.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-12
13.5.1223.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-12
13.5.1223.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-12
13.5.1223.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-12
13.5.1223.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1223.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-12
13.5.1223.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-12
13.5.1223.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-12
13.5.1223.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-12
13.5.1223.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-12
13.5.1223.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-12
13.5.1223.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-12
13.5.1223.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-12
13.5.1223.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-12
13.5.1225.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-12
13.5.1225.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-12
13.5.1225.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-12
13.5.1225.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-12
13.5.1225.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-12
13.5.1225.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-12
13.5.1225.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-12
13.5.1225.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-12
13.5.1225.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-12
13.5.1225.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-12
13.5.1225.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-12
13.5.1225.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-12
13.5.1225.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-12
13.5.1225.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-12
13.5.1225.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-12
13.5.1225.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-12
13.5.1227.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-12
13.5.1227.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-12
13.5.1227.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-12
13.5.1227.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-12
13.5.1227.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-12
13.5.1227.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-12
13.5.1227.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-12
13.5.1227.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-12
13.5.1227.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-12
13.5.1227.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-12
13.5.1227.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-12
13.5.1227.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1227.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-12
13.5.1227.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-12
13.5.1227.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-12
13.5.1227.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-12
13.5.1229.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-12
13.5.1229.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-12
13.5.1229.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-12
13.5.1229.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-12
13.5.1229.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-12
13.5.1229.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-12
13.5.1229.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-12
13.5.1229.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-12
13.5.1229.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-12
13.5.1229.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-12
13.5.1229.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-12
13.5.1229.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-12
13.5.1229.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-12
13.5.1229.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-12
13.5.1229.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-12
13.5.1229.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-12
13.5.1231.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-12
13.5.1231.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-12
13.5.1231.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-12
13.5.1231.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-12
13.5.1231.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-12
13.5.1231.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-12
13.5.1231.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-12
13.5.1231.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-12
13.5.1231.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-12
13.5.1231.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-12
13.5.1231.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-12
13.5.1231.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-12
13.5.1231.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-12
13.5.1231.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-12
13.5.1231.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-12
13.5.1231.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-12
13.5.1235.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1235.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-12
13.5.1235.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-12
13.5.1235.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-12
13.5.1235.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-12
13.5.1235.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-12
13.5.1235.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-12
13.5.1235.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-12
13.5.1235.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-12
13.5.1235.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-12
13.5.1235.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-12
13.5.1235.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-12
13.5.1235.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-12
13.5.1235.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-12
13.5.1235.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-12
13.5.1235.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-12
13.5.1240.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-12
13.5.1240.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-12
13.5.1240.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-12
13.5.1240.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-12
13.5.1240.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-12
13.5.1240.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-12
13.5.1240.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-12
13.5.1240.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-12
13.5.1240.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-12
13.5.1240.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-12
13.5.1240.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-12
13.5.1240.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-12
13.5.1240.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-12
13.5.1240.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-12
13.5.1240.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-12
13.5.1240.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-12
13.5.1245.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-12
13.5.1245.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-12
13.5.1245.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-12
13.5.1245.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-12
13.5.1245.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-12
13.5.1245.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-12



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1245.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-12
13.5.1245.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-12
13.5.1245.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-12
13.5.1245.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-12
13.5.1245.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-12
13.5.1245.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-12
13.5.1245.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-12
13.5.1245.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-12
13.5.1245.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-12
13.5.1245.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-12
13.5.1250.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-12
13.5.1250.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-12
13.5.1250.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-12
13.5.1250.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-12
13.5.1250.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-12
13.5.1250.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-12
13.5.1250.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-12
13.5.1250.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-12
13.5.1250.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-12
13.5.1250.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-12
13.5.1250.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-12
13.5.1250.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-12
13.5.1250.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-12
13.5.1250.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-12
13.5.1250.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-12
13.5.1250.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-12
13.5.1255.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-12
13.5.1255.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-12
13.5.1255.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-12
13.5.1255.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-12
13.5.1255.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-12
13.5.1255.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-12
13.5.1255.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-12
13.5.1255.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-12
13.5.1255.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-12
13.5.1255.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-12
13.5.1255.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1255.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-12
13.5.1255.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-12
13.5.1255.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-12
13.5.1255.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-12
13.5.1255.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-12
13.5.1260.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-12
13.5.1260.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-12
13.5.1260.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-12
13.5.1260.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-12
13.5.1260.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-12
13.5.1260.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-12
13.5.1260.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-12
13.5.1260.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-12
13.5.1260.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-12
13.5.1260.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-12
13.5.1260.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-12
13.5.1260.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-12
13.5.1260.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-12
13.5.1260.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-12
13.5.1260.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-12
13.5.1260.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-12
13.5.1270.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-12
13.5.1270.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-12
13.5.1270.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-12
13.5.1270.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-12
13.5.1270.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-12
13.5.1270.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-12
13.5.1270.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-12
13.5.1270.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-12
13.5.1270.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-12
13.5.1270.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-12
13.5.1270.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-12
13.5.1270.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-12
13.5.1270.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-12
13.5.1270.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-12
13.5.1270.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-12
13.5.1270.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-12

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1306.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-13
13.5.1306.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-13
13.5.1306.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-13
13.5.1306.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-13
13.5.1306.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-13
13.5.1306.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-13
13.5.1306.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-13
13.5.1306.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-13
13.5.1306.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-13
13.5.1306.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-13
13.5.1306.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-13
13.5.1306.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-13
13.5.1306.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-13
13.5.1306.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-13
13.5.1306.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-13
13.5.1306.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-13
13.5.1307.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-13
13.5.1307.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-13
13.5.1307.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-13
13.5.1307.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-13
13.5.1307.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-13
13.5.1307.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-13
13.5.1307.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-13
13.5.1307.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-13
13.5.1307.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-13
13.5.1307.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-13
13.5.1307.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-13
13.5.1307.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-13
13.5.1307.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-13
13.5.1307.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-13
13.5.1307.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-13
13.5.1307.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-13
13.5.1308.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-13
13.5.1308.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-13
13.5.1308.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-13
13.5.1308.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-13
13.5.1308.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1308.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-13
13.5.1308.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-13
13.5.1308.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-13
13.5.1308.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-13
13.5.1308.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-13
13.5.1308.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-13
13.5.1308.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-13
13.5.1308.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-13
13.5.1308.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-13
13.5.1308.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-13
13.5.1308.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-13
13.5.1310.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-13
13.5.1310.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-13
13.5.1310.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-13
13.5.1310.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-13
13.5.1310.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-13
13.5.1310.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-13
13.5.1310.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-13
13.5.1310.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-13
13.5.1310.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-13
13.5.1310.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-13
13.5.1310.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-13
13.5.1310.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-13
13.5.1310.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-13
13.5.1310.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-13
13.5.1310.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-13
13.5.1310.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-13
13.5.1312.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-13
13.5.1312.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-13
13.5.1312.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-13
13.5.1312.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-13
13.5.1312.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-13
13.5.1312.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-13
13.5.1312.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-13
13.5.1312.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-13
13.5.1312.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-13
13.5.1312.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1312.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-13
13.5.1312.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-13
13.5.1312.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-13
13.5.1312.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-13
13.5.1312.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-13
13.5.1312.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-13
13.5.1314.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-13
13.5.1314.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-13
13.5.1314.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-13
13.5.1314.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-13
13.5.1314.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-13
13.5.1314.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-13
13.5.1314.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-13
13.5.1314.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-13
13.5.1314.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-13
13.5.1314.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-13
13.5.1314.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-13
13.5.1314.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-13
13.5.1314.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-13
13.5.1314.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-13
13.5.1314.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-13
13.5.1314.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-13
13.5.1316.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-13
13.5.1316.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-13
13.5.1316.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-13
13.5.1316.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-13
13.5.1316.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-13
13.5.1316.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-13
13.5.1316.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-13
13.5.1316.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-13
13.5.1316.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-13
13.5.1316.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-13
13.5.1316.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-13
13.5.1316.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-13
13.5.1316.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-13
13.5.1316.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-13
13.5.1316.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1316.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-13
13.5.1318.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-13
13.5.1318.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-13
13.5.1318.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-13
13.5.1318.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-13
13.5.1318.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-13
13.5.1318.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-13
13.5.1318.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-13
13.5.1318.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-13
13.5.1318.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-13
13.5.1318.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-13
13.5.1318.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-13
13.5.1318.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-13
13.5.1318.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-13
13.5.1318.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-13
13.5.1318.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-13
13.5.1318.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-13
13.5.1321.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-13
13.5.1321.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-13
13.5.1321.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-13
13.5.1321.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-13
13.5.1321.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-13
13.5.1321.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-13
13.5.1321.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-13
13.5.1321.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-13
13.5.1321.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-13
13.5.1321.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-13
13.5.1321.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-13
13.5.1321.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-13
13.5.1321.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-13
13.5.1321.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-13
13.5.1321.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-13
13.5.1321.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-13
13.5.1323.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-13
13.5.1323.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-13
13.5.1323.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-13
13.5.1323.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1323.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-13
13.5.1323.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-13
13.5.1323.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-13
13.5.1323.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-13
13.5.1323.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-13
13.5.1323.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-13
13.5.1323.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-13
13.5.1323.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-13
13.5.1323.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-13
13.5.1323.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-13
13.5.1323.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-13
13.5.1323.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-13
13.5.1325.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-13
13.5.1325.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-13
13.5.1325.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-13
13.5.1325.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-13
13.5.1325.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-13
13.5.1325.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-13
13.5.1325.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-13
13.5.1325.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-13
13.5.1325.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-13
13.5.1325.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-13
13.5.1325.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-13
13.5.1325.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-13
13.5.1325.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-13
13.5.1325.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-13
13.5.1325.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-13
13.5.1325.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-13
13.5.1327.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-13
13.5.1327.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-13
13.5.1327.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-13
13.5.1327.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-13
13.5.1327.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-13
13.5.1327.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-13
13.5.1327.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-13
13.5.1327.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-13
13.5.1327.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1327.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-13
13.5.1327.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-13
13.5.1327.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-13
13.5.1327.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-13
13.5.1327.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-13
13.5.1327.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-13
13.5.1327.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-13
13.5.1329.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-13
13.5.1329.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-13
13.5.1329.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-13
13.5.1329.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-13
13.5.1329.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-13
13.5.1329.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-13
13.5.1329.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-13
13.5.1329.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-13
13.5.1329.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-13
13.5.1329.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-13
13.5.1329.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-13
13.5.1329.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-13
13.5.1329.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-13
13.5.1329.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-13
13.5.1329.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-13
13.5.1329.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-13
13.5.1331.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-13
13.5.1331.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-13
13.5.1331.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-13
13.5.1331.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-13
13.5.1331.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-13
13.5.1331.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-13
13.5.1331.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-13
13.5.1331.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-13
13.5.1331.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-13
13.5.1331.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-13
13.5.1331.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-13
13.5.1331.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-13
13.5.1331.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-13
13.5.1331.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-13



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1331.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-13
13.5.1331.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-13
13.5.1335.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-13
13.5.1335.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-13
13.5.1335.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-13
13.5.1335.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-13
13.5.1335.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-13
13.5.1335.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-13
13.5.1335.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-13
13.5.1335.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-13
13.5.1335.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-13
13.5.1335.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-13
13.5.1335.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-13
13.5.1335.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-13
13.5.1335.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-13
13.5.1335.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-13
13.5.1335.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-13
13.5.1335.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-13
13.5.1340.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-13
13.5.1340.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-13
13.5.1340.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-13
13.5.1340.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-13
13.5.1340.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-13
13.5.1340.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-13
13.5.1340.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-13
13.5.1340.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-13
13.5.1340.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-13
13.5.1340.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-13
13.5.1340.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-13
13.5.1340.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-13
13.5.1340.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-13
13.5.1340.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-13
13.5.1340.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-13
13.5.1340.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-13
13.5.1345.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-13
13.5.1345.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-13
13.5.1345.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1345.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-13
13.5.1345.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-13
13.5.1345.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-13
13.5.1345.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-13
13.5.1345.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-13
13.5.1345.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-13
13.5.1345.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-13
13.5.1345.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-13
13.5.1345.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-13
13.5.1345.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-13
13.5.1345.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-13
13.5.1345.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-13
13.5.1345.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-13
13.5.1350.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-13
13.5.1350.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-13
13.5.1350.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-13
13.5.1350.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-13
13.5.1350.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-13
13.5.1350.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-13
13.5.1350.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-13
13.5.1350.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-13
13.5.1350.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-13
13.5.1350.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-13
13.5.1350.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-13
13.5.1350.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-13
13.5.1350.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-13
13.5.1350.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-13
13.5.1350.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-13
13.5.1350.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-13
13.5.1355.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-13
13.5.1355.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-13
13.5.1355.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-13
13.5.1355.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-13
13.5.1355.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-13
13.5.1355.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-13
13.5.1355.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-13
13.5.1355.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1355.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-13
13.5.1355.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-13
13.5.1355.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-13
13.5.1355.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-13
13.5.1355.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-13
13.5.1355.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-13
13.5.1355.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-13
13.5.1355.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-13
13.5.1360.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-13
13.5.1360.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-13
13.5.1360.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-13
13.5.1360.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-13
13.5.1360.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-13
13.5.1360.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-13
13.5.1360.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-13
13.5.1360.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-13
13.5.1360.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-13
13.5.1360.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-13
13.5.1360.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-13
13.5.1360.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-13
13.5.1360.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-13
13.5.1360.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-13
13.5.1360.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-13
13.5.1360.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-13
13.5.1370.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-13
13.5.1370.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-13
13.5.1370.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-13
13.5.1370.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-13
13.5.1370.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-13
13.5.1370.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-13
13.5.1370.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-13
13.5.1370.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-13
13.5.1370.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-13
13.5.1370.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-13
13.5.1370.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-13
13.5.1370.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-13
13.5.1370.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-13

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1370.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-13
13.5.1370.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-13
13.5.1370.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-13
13.5.1406.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-14
13.5.1406.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-14
13.5.1406.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-14
13.5.1406.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-14
13.5.1406.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-14
13.5.1406.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-14
13.5.1406.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-14
13.5.1406.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-14
13.5.1406.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-14
13.5.1406.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-14
13.5.1406.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-14
13.5.1406.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-14
13.5.1406.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-14
13.5.1406.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-14
13.5.1406.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-14
13.5.1406.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-14
13.5.1407.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-14
13.5.1407.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-14
13.5.1407.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-14
13.5.1407.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-14
13.5.1407.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-14
13.5.1407.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-14
13.5.1407.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-14
13.5.1407.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-14
13.5.1407.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-14
13.5.1407.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-14
13.5.1407.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-14
13.5.1407.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-14
13.5.1407.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-14
13.5.1407.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-14
13.5.1407.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-14
13.5.1407.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-14
13.5.1408.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-14
13.5.1408.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1408.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-14
13.5.1408.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-14
13.5.1408.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-14
13.5.1408.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-14
13.5.1408.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-14
13.5.1408.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-14
13.5.1408.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-14
13.5.1408.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-14
13.5.1408.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-14
13.5.1408.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-14
13.5.1408.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-14
13.5.1408.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-14
13.5.1408.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-14
13.5.1408.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-14
13.5.1410.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-14
13.5.1410.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-14
13.5.1410.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-14
13.5.1410.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-14
13.5.1410.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-14
13.5.1410.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-14
13.5.1410.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-14
13.5.1410.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-14
13.5.1410.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-14
13.5.1410.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-14
13.5.1410.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-14
13.5.1410.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-14
13.5.1410.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-14
13.5.1410.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-14
13.5.1410.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-14
13.5.1410.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-14
13.5.1412.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-14
13.5.1412.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-14
13.5.1412.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-14
13.5.1412.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-14
13.5.1412.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-14
13.5.1412.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-14
13.5.1412.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1412.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-14
13.5.1412.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-14
13.5.1412.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-14
13.5.1412.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-14
13.5.1412.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-14
13.5.1412.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-14
13.5.1412.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-14
13.5.1412.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-14
13.5.1412.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-14
13.5.1414.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-14
13.5.1414.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-14
13.5.1414.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-14
13.5.1414.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-14
13.5.1414.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-14
13.5.1414.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-14
13.5.1414.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-14
13.5.1414.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-14
13.5.1414.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-14
13.5.1414.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-14
13.5.1414.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-14
13.5.1414.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-14
13.5.1414.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-14
13.5.1414.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-14
13.5.1414.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-14
13.5.1414.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-14
13.5.1416.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-14
13.5.1416.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-14
13.5.1416.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-14
13.5.1416.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-14
13.5.1416.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-14
13.5.1416.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-14
13.5.1416.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-14
13.5.1416.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-14
13.5.1416.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-14
13.5.1416.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-14
13.5.1416.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-14
13.5.1416.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1416.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-14
13.5.1416.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-14
13.5.1416.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-14
13.5.1416.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-14
13.5.1418.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-14
13.5.1418.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-14
13.5.1418.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-14
13.5.1418.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-14
13.5.1418.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-14
13.5.1418.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-14
13.5.1418.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-14
13.5.1418.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-14
13.5.1418.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-14
13.5.1418.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-14
13.5.1418.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-14
13.5.1418.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-14
13.5.1418.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-14
13.5.1418.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-14
13.5.1418.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-14
13.5.1418.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-14
13.5.1421.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-14
13.5.1421.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-14
13.5.1421.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-14
13.5.1421.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-14
13.5.1421.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-14
13.5.1421.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-14
13.5.1421.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-14
13.5.1421.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-14
13.5.1421.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-14
13.5.1421.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-14
13.5.1421.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-14
13.5.1421.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-14
13.5.1421.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-14
13.5.1421.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-14
13.5.1421.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-14
13.5.1421.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-14
13.5.1423.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1423.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-14
13.5.1423.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-14
13.5.1423.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-14
13.5.1423.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-14
13.5.1423.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-14
13.5.1423.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-14
13.5.1423.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-14
13.5.1423.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-14
13.5.1423.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-14
13.5.1423.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-14
13.5.1423.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-14
13.5.1423.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-14
13.5.1423.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-14
13.5.1423.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-14
13.5.1423.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-14
13.5.1425.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-14
13.5.1425.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-14
13.5.1425.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-14
13.5.1425.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-14
13.5.1425.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-14
13.5.1425.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-14
13.5.1425.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-14
13.5.1425.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-14
13.5.1425.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-14
13.5.1425.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-14
13.5.1425.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-14
13.5.1425.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-14
13.5.1425.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-14
13.5.1425.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-14
13.5.1425.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-14
13.5.1425.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-14
13.5.1427.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-14
13.5.1427.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-14
13.5.1427.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-14
13.5.1427.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-14
13.5.1427.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-14
13.5.1427.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-14



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1427.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-14
13.5.1427.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-14
13.5.1427.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-14
13.5.1427.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-14
13.5.1427.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-14
13.5.1427.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-14
13.5.1427.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-14
13.5.1427.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-14
13.5.1427.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-14
13.5.1427.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-14
13.5.1429.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-14
13.5.1429.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-14
13.5.1429.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-14
13.5.1429.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-14
13.5.1429.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-14
13.5.1429.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-14
13.5.1429.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-14
13.5.1429.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-14
13.5.1429.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-14
13.5.1429.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-14
13.5.1429.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-14
13.5.1429.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-14
13.5.1429.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-14
13.5.1429.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-14
13.5.1429.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-14
13.5.1429.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-14
13.5.1431.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-14
13.5.1431.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-14
13.5.1431.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-14
13.5.1431.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-14
13.5.1431.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-14
13.5.1431.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-14
13.5.1431.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-14
13.5.1431.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-14
13.5.1431.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-14
13.5.1431.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-14
13.5.1431.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1431.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-14
13.5.1431.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-14
13.5.1431.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-14
13.5.1431.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-14
13.5.1431.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-14
13.5.1435.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-14
13.5.1435.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-14
13.5.1435.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-14
13.5.1435.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-14
13.5.1435.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-14
13.5.1435.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-14
13.5.1435.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-14
13.5.1435.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-14
13.5.1435.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-14
13.5.1435.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-14
13.5.1435.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-14
13.5.1435.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-14
13.5.1435.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-14
13.5.1435.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-14
13.5.1435.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-14
13.5.1435.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-14
13.5.1440.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-14
13.5.1440.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-14
13.5.1440.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-14
13.5.1440.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-14
13.5.1440.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-14
13.5.1440.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-14
13.5.1440.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-14
13.5.1440.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-14
13.5.1440.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-14
13.5.1440.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-14
13.5.1440.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-14
13.5.1440.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-14
13.5.1440.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-14
13.5.1440.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-14
13.5.1440.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-14
13.5.1440.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1445.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-14
13.5.1445.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-14
13.5.1445.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-14
13.5.1445.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-14
13.5.1445.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-14
13.5.1445.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-14
13.5.1445.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-14
13.5.1445.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-14
13.5.1445.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-14
13.5.1445.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-14
13.5.1445.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-14
13.5.1445.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-14
13.5.1445.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-14
13.5.1445.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-14
13.5.1445.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-14
13.5.1445.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-14
13.5.1450.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-14
13.5.1450.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-14
13.5.1450.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-14
13.5.1450.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-14
13.5.1450.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-14
13.5.1450.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-14
13.5.1450.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-14
13.5.1450.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-14
13.5.1450.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-14
13.5.1450.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-14
13.5.1450.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-14
13.5.1450.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-14
13.5.1450.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-14
13.5.1450.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-14
13.5.1450.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-14
13.5.1450.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-14
13.5.1455.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-14
13.5.1455.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-14
13.5.1455.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-14
13.5.1455.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-14
13.5.1455.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1455.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-14
13.5.1455.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-14
13.5.1455.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-14
13.5.1455.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-14
13.5.1455.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-14
13.5.1455.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-14
13.5.1455.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-14
13.5.1455.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-14
13.5.1455.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-14
13.5.1455.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-14
13.5.1455.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-14
13.5.1460.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-14
13.5.1460.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-14
13.5.1460.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-14
13.5.1460.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-14
13.5.1460.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-14
13.5.1460.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-14
13.5.1460.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-14
13.5.1460.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-14
13.5.1460.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-14
13.5.1460.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-14
13.5.1460.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-14
13.5.1460.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-14
13.5.1460.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-14
13.5.1460.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-14
13.5.1460.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-14
13.5.1460.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-14
13.5.1470.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-14
13.5.1470.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-14
13.5.1470.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-14
13.5.1470.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-14
13.5.1470.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-14
13.5.1470.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-14
13.5.1470.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-14
13.5.1470.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-14
13.5.1470.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-14
13.5.1470.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-14

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1470.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-14
13.5.1470.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-14
13.5.1470.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-14
13.5.1470.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-14
13.5.1470.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-14
13.5.1470.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-14
13.5.1506.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-15
13.5.1506.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-15
13.5.1506.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-15
13.5.1506.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-15
13.5.1506.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-15
13.5.1506.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-15
13.5.1506.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-15
13.5.1506.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-15
13.5.1506.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-15
13.5.1506.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-15
13.5.1506.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-15
13.5.1506.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-15
13.5.1506.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-15
13.5.1506.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-15
13.5.1506.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-15
13.5.1506.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-15
13.5.1507.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-15
13.5.1507.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-15
13.5.1507.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-15
13.5.1507.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-15
13.5.1507.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-15
13.5.1507.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-15
13.5.1507.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-15
13.5.1507.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-15
13.5.1507.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-15
13.5.1507.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-15
13.5.1507.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-15
13.5.1507.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-15
13.5.1507.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-15
13.5.1507.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-15
13.5.1507.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1507.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-15
13.5.1508.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-15
13.5.1508.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-15
13.5.1508.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-15
13.5.1508.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-15
13.5.1508.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-15
13.5.1508.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-15
13.5.1508.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-15
13.5.1508.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-15
13.5.1508.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-15
13.5.1508.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-15
13.5.1508.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-15
13.5.1508.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-15
13.5.1508.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-15
13.5.1508.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-15
13.5.1508.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-15
13.5.1508.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-15
13.5.1510.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-15
13.5.1510.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-15
13.5.1510.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-15
13.5.1510.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-15
13.5.1510.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-15
13.5.1510.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-15
13.5.1510.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-15
13.5.1510.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-15
13.5.1510.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-15
13.5.1510.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-15
13.5.1510.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-15
13.5.1510.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-15
13.5.1510.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-15
13.5.1510.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-15
13.5.1510.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-15
13.5.1510.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-15
13.5.1512.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-15
13.5.1512.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-15
13.5.1512.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-15
13.5.1512.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1512.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-15
13.5.1512.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-15
13.5.1512.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-15
13.5.1512.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-15
13.5.1512.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-15
13.5.1512.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-15
13.5.1512.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-15
13.5.1512.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-15
13.5.1512.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-15
13.5.1512.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-15
13.5.1512.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-15
13.5.1512.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-15
13.5.1514.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-15
13.5.1514.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-15
13.5.1514.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-15
13.5.1514.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-15
13.5.1514.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-15
13.5.1514.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-15
13.5.1514.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-15
13.5.1514.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-15
13.5.1514.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-15
13.5.1514.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-15
13.5.1514.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-15
13.5.1514.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-15
13.5.1514.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-15
13.5.1514.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-15
13.5.1514.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-15
13.5.1514.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-15
13.5.1516.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-15
13.5.1516.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-15
13.5.1516.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-15
13.5.1516.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-15
13.5.1516.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-15
13.5.1516.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-15
13.5.1516.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-15
13.5.1516.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-15
13.5.1516.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1516.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-15
13.5.1516.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-15
13.5.1516.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-15
13.5.1516.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-15
13.5.1516.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-15
13.5.1516.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-15
13.5.1516.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-15
13.5.1518.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-15
13.5.1518.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-15
13.5.1518.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-15
13.5.1518.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-15
13.5.1518.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-15
13.5.1518.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-15
13.5.1518.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-15
13.5.1518.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-15
13.5.1518.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-15
13.5.1518.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-15
13.5.1518.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-15
13.5.1518.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-15
13.5.1518.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-15
13.5.1518.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-15
13.5.1518.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-15
13.5.1518.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-15
13.5.1521.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-15
13.5.1521.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-15
13.5.1521.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-15
13.5.1521.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-15
13.5.1521.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-15
13.5.1521.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-15
13.5.1521.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-15
13.5.1521.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-15
13.5.1521.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-15
13.5.1521.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-15
13.5.1521.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-15
13.5.1521.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-15
13.5.1521.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-15
13.5.1521.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-15



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1521.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-15
13.5.1521.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-15
13.5.1523.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-15
13.5.1523.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-15
13.5.1523.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-15
13.5.1523.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-15
13.5.1523.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-15
13.5.1523.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-15
13.5.1523.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-15
13.5.1523.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-15
13.5.1523.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-15
13.5.1523.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-15
13.5.1523.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-15
13.5.1523.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-15
13.5.1523.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-15
13.5.1523.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-15
13.5.1523.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-15
13.5.1523.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-15
13.5.1525.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-15
13.5.1525.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-15
13.5.1525.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-15
13.5.1525.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-15
13.5.1525.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-15
13.5.1525.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-15
13.5.1525.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-15
13.5.1525.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-15
13.5.1525.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-15
13.5.1525.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-15
13.5.1525.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-15
13.5.1525.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-15
13.5.1525.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-15
13.5.1525.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-15
13.5.1525.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-15
13.5.1525.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-15
13.5.1527.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-15
13.5.1527.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-15
13.5.1527.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1527.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-15
13.5.1527.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-15
13.5.1527.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-15
13.5.1527.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-15
13.5.1527.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-15
13.5.1527.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-15
13.5.1527.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-15
13.5.1527.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-15
13.5.1527.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-15
13.5.1527.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-15
13.5.1527.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-15
13.5.1527.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-15
13.5.1527.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-15
13.5.1529.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-15
13.5.1529.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-15
13.5.1529.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-15
13.5.1529.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-15
13.5.1529.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-15
13.5.1529.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-15
13.5.1529.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-15
13.5.1529.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-15
13.5.1529.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-15
13.5.1529.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-15
13.5.1529.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-15
13.5.1529.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-15
13.5.1529.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-15
13.5.1529.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-15
13.5.1529.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-15
13.5.1529.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-15
13.5.1531.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-15
13.5.1531.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-15
13.5.1531.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-15
13.5.1531.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-15
13.5.1531.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-15
13.5.1531.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-15
13.5.1531.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-15
13.5.1531.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1531.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-15
13.5.1531.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-15
13.5.1531.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-15
13.5.1531.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-15
13.5.1531.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-15
13.5.1531.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-15
13.5.1531.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-15
13.5.1531.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-15
13.5.1535.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-15
13.5.1535.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-15
13.5.1535.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-15
13.5.1535.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-15
13.5.1535.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-15
13.5.1535.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-15
13.5.1535.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-15
13.5.1535.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-15
13.5.1535.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-15
13.5.1535.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-15
13.5.1535.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-15
13.5.1535.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-15
13.5.1535.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-15
13.5.1535.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-15
13.5.1535.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-15
13.5.1535.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-15
13.5.1540.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-15
13.5.1540.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-15
13.5.1540.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-15
13.5.1540.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-15
13.5.1540.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-15
13.5.1540.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-15
13.5.1540.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-15
13.5.1540.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-15
13.5.1540.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-15
13.5.1540.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-15
13.5.1540.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-15
13.5.1540.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-15
13.5.1540.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1540.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-15
13.5.1540.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-15
13.5.1540.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-15
13.5.1545.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-15
13.5.1545.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-15
13.5.1545.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-15
13.5.1545.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-15
13.5.1545.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-15
13.5.1545.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-15
13.5.1545.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-15
13.5.1545.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-15
13.5.1545.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-15
13.5.1545.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-15
13.5.1545.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-15
13.5.1545.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-15
13.5.1545.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-15
13.5.1545.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-15
13.5.1545.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-15
13.5.1545.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-15
13.5.1550.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-15
13.5.1550.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-15
13.5.1550.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-15
13.5.1550.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-15
13.5.1550.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-15
13.5.1550.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-15
13.5.1550.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-15
13.5.1550.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-15
13.5.1550.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-15
13.5.1550.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-15
13.5.1550.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-15
13.5.1550.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-15
13.5.1550.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-15
13.5.1550.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-15
13.5.1550.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-15
13.5.1550.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-15
13.5.1555.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-15
13.5.1555.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1555.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-15
13.5.1555.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-15
13.5.1555.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-15
13.5.1555.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-15
13.5.1555.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-15
13.5.1555.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-15
13.5.1555.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-15
13.5.1555.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-15
13.5.1555.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-15
13.5.1555.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-15
13.5.1555.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-15
13.5.1555.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-15
13.5.1555.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-15
13.5.1555.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-15
13.5.1560.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-15
13.5.1560.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-15
13.5.1560.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-15
13.5.1560.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-15
13.5.1560.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-15
13.5.1560.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-15
13.5.1560.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-15
13.5.1560.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-15
13.5.1560.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-15
13.5.1560.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-15
13.5.1560.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-15
13.5.1560.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-15
13.5.1560.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-15
13.5.1560.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-15
13.5.1560.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-15
13.5.1560.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-15
13.5.1570.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-15
13.5.1570.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-15
13.5.1570.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-15
13.5.1570.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-15
13.5.1570.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-15
13.5.1570.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-15
13.5.1570.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-15

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1570.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-15
13.5.1570.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-15
13.5.1570.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-15
13.5.1570.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-15
13.5.1570.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-15
13.5.1570.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-15
13.5.1570.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-15
13.5.1570.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-15
13.5.1570.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-15
13.5.1606.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-16
13.5.1606.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-16
13.5.1606.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-16
13.5.1606.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-16
13.5.1606.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-16
13.5.1606.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-16
13.5.1606.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-16
13.5.1606.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-16
13.5.1606.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-16
13.5.1606.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-16
13.5.1606.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-16
13.5.1606.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-16
13.5.1606.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-16
13.5.1606.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-16
13.5.1606.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-16
13.5.1606.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-16
13.5.1607.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-16
13.5.1607.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-16
13.5.1607.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-16
13.5.1607.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-16
13.5.1607.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-16
13.5.1607.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-16
13.5.1607.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-16
13.5.1607.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-16
13.5.1607.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-16
13.5.1607.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-16
13.5.1607.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-16
13.5.1607.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1607.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-16
13.5.1607.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-16
13.5.1607.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-16
13.5.1607.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-16
13.5.1608.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-16
13.5.1608.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-16
13.5.1608.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-16
13.5.1608.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-16
13.5.1608.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-16
13.5.1608.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-16
13.5.1608.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-16
13.5.1608.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-16
13.5.1608.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-16
13.5.1608.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-16
13.5.1608.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-16
13.5.1608.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-16
13.5.1608.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-16
13.5.1608.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-16
13.5.1608.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-16
13.5.1608.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-16
13.5.1610.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-16
13.5.1610.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-16
13.5.1610.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-16
13.5.1610.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-16
13.5.1610.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-16
13.5.1610.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-16
13.5.1610.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-16
13.5.1610.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-16
13.5.1610.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-16
13.5.1610.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-16
13.5.1610.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-16
13.5.1610.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-16
13.5.1610.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-16
13.5.1610.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-16
13.5.1610.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-16
13.5.1610.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-16
13.5.1612.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1612.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-16
13.5.1612.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-16
13.5.1612.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-16
13.5.1612.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-16
13.5.1612.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-16
13.5.1612.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-16
13.5.1612.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-16
13.5.1612.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-16
13.5.1612.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-16
13.5.1612.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-16
13.5.1612.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-16
13.5.1612.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-16
13.5.1612.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-16
13.5.1612.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-16
13.5.1612.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-16
13.5.1614.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-16
13.5.1614.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-16
13.5.1614.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-16
13.5.1614.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-16
13.5.1614.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-16
13.5.1614.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-16
13.5.1614.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-16
13.5.1614.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-16
13.5.1614.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-16
13.5.1614.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-16
13.5.1614.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-16
13.5.1614.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-16
13.5.1614.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-16
13.5.1614.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-16
13.5.1614.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-16
13.5.1614.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-16
13.5.1616.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-16
13.5.1616.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-16
13.5.1616.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-16
13.5.1616.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-16
13.5.1616.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-16
13.5.1616.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-16



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1616.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-16
13.5.1616.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-16
13.5.1616.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-16
13.5.1616.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-16
13.5.1616.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-16
13.5.1616.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-16
13.5.1616.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-16
13.5.1616.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-16
13.5.1616.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-16
13.5.1616.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-16
13.5.1618.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-16
13.5.1618.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-16
13.5.1618.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-16
13.5.1618.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-16
13.5.1618.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-16
13.5.1618.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-16
13.5.1618.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-16
13.5.1618.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-16
13.5.1618.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-16
13.5.1618.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-16
13.5.1618.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-16
13.5.1618.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-16
13.5.1618.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-16
13.5.1618.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-16
13.5.1618.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-16
13.5.1618.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-16
13.5.1621.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-16
13.5.1621.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-16
13.5.1621.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-16
13.5.1621.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-16
13.5.1621.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-16
13.5.1621.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-16
13.5.1621.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-16
13.5.1621.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-16
13.5.1621.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-16
13.5.1621.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-16
13.5.1621.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1621.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-16
13.5.1621.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-16
13.5.1621.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-16
13.5.1621.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-16
13.5.1621.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-16
13.5.1623.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-16
13.5.1623.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-16
13.5.1623.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-16
13.5.1623.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-16
13.5.1623.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-16
13.5.1623.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-16
13.5.1623.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-16
13.5.1623.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-16
13.5.1623.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-16
13.5.1623.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-16
13.5.1623.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-16
13.5.1623.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-16
13.5.1623.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-16
13.5.1623.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-16
13.5.1623.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-16
13.5.1623.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-16
13.5.1625.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-16
13.5.1625.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-16
13.5.1625.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-16
13.5.1625.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-16
13.5.1625.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-16
13.5.1625.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-16
13.5.1625.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-16
13.5.1625.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-16
13.5.1625.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-16
13.5.1625.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-16
13.5.1625.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-16
13.5.1625.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-16
13.5.1625.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-16
13.5.1625.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-16
13.5.1625.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-16
13.5.1625.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1627.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-16
13.5.1627.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-16
13.5.1627.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-16
13.5.1627.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-16
13.5.1627.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-16
13.5.1627.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-16
13.5.1627.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-16
13.5.1627.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-16
13.5.1627.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-16
13.5.1627.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-16
13.5.1627.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-16
13.5.1627.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-16
13.5.1627.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-16
13.5.1627.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-16
13.5.1627.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-16
13.5.1627.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-16
13.5.1629.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-16
13.5.1629.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-16
13.5.1629.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-16
13.5.1629.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-16
13.5.1629.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-16
13.5.1629.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-16
13.5.1629.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-16
13.5.1629.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-16
13.5.1629.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-16
13.5.1629.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-16
13.5.1629.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-16
13.5.1629.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-16
13.5.1629.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-16
13.5.1629.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-16
13.5.1629.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-16
13.5.1629.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-16
13.5.1631.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-16
13.5.1631.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-16
13.5.1631.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-16
13.5.1631.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-16
13.5.1631.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1631.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-16
13.5.1631.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-16
13.5.1631.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-16
13.5.1631.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-16
13.5.1631.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-16
13.5.1631.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-16
13.5.1631.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-16
13.5.1631.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-16
13.5.1631.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-16
13.5.1631.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-16
13.5.1631.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-16
13.5.1635.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-16
13.5.1635.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-16
13.5.1635.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-16
13.5.1635.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-16
13.5.1635.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-16
13.5.1635.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-16
13.5.1635.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-16
13.5.1635.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-16
13.5.1635.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-16
13.5.1635.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-16
13.5.1635.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-16
13.5.1635.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-16
13.5.1635.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-16
13.5.1635.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-16
13.5.1635.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-16
13.5.1635.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-16
13.5.1640.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-16
13.5.1640.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-16
13.5.1640.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-16
13.5.1640.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-16
13.5.1640.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-16
13.5.1640.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-16
13.5.1640.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-16
13.5.1640.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-16
13.5.1640.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-16
13.5.1640.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1640.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-16
13.5.1640.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-16
13.5.1640.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-16
13.5.1640.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-16
13.5.1640.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-16
13.5.1640.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-16
13.5.1645.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-16
13.5.1645.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-16
13.5.1645.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-16
13.5.1645.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-16
13.5.1645.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-16
13.5.1645.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-16
13.5.1645.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-16
13.5.1645.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-16
13.5.1645.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-16
13.5.1645.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-16
13.5.1645.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-16
13.5.1645.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-16
13.5.1645.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-16
13.5.1645.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-16
13.5.1645.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-16
13.5.1645.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-16
13.5.1650.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-16
13.5.1650.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-16
13.5.1650.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-16
13.5.1650.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-16
13.5.1650.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-16
13.5.1650.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-16
13.5.1650.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-16
13.5.1650.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-16
13.5.1650.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-16
13.5.1650.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-16
13.5.1650.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-16
13.5.1650.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-16
13.5.1650.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-16
13.5.1650.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-16
13.5.1650.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1650.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-16
13.5.1655.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-16
13.5.1655.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-16
13.5.1655.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-16
13.5.1655.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-16
13.5.1655.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-16
13.5.1655.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-16
13.5.1655.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-16
13.5.1655.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-16
13.5.1655.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-16
13.5.1655.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-16
13.5.1655.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-16
13.5.1655.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-16
13.5.1655.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-16
13.5.1655.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-16
13.5.1655.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-16
13.5.1655.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-16
13.5.1660.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-16
13.5.1660.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-16
13.5.1660.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-16
13.5.1660.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-16
13.5.1660.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-16
13.5.1660.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-16
13.5.1660.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-16
13.5.1660.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-16
13.5.1660.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-16
13.5.1660.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-16
13.5.1660.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-16
13.5.1660.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-16
13.5.1660.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-16
13.5.1660.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-16
13.5.1660.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-16
13.5.1660.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-16
13.5.1670.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-16
13.5.1670.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-16
13.5.1670.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-16
13.5.1670.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-16

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1670.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-16
13.5.1670.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-16
13.5.1670.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-16
13.5.1670.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-16
13.5.1670.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-16
13.5.1670.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-16
13.5.1670.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-16
13.5.1670.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-16
13.5.1670.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-16
13.5.1670.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-16
13.5.1670.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-16
13.5.1670.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-16
13.5.1706.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-17
13.5.1706.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-17
13.5.1706.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-17
13.5.1706.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-17
13.5.1706.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-17
13.5.1706.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-17
13.5.1706.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-17
13.5.1706.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-17
13.5.1706.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-17
13.5.1706.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-17
13.5.1706.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-17
13.5.1706.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-17
13.5.1706.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-17
13.5.1706.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-17
13.5.1706.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-17
13.5.1706.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-17
13.5.1707.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-17
13.5.1707.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-17
13.5.1707.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-17
13.5.1707.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-17
13.5.1707.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-17
13.5.1707.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-17
13.5.1707.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-17
13.5.1707.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-17
13.5.1707.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1707.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-17
13.5.1707.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-17
13.5.1707.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-17
13.5.1707.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-17
13.5.1707.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-17
13.5.1707.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-17
13.5.1707.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-17
13.5.1708.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-17
13.5.1708.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-17
13.5.1708.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-17
13.5.1708.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-17
13.5.1708.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-17
13.5.1708.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-17
13.5.1708.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-17
13.5.1708.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-17
13.5.1708.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-17
13.5.1708.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-17
13.5.1708.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-17
13.5.1708.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-17
13.5.1708.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-17
13.5.1708.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-17
13.5.1708.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-17
13.5.1708.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-17
13.5.1710.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-17
13.5.1710.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-17
13.5.1710.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-17
13.5.1710.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-17
13.5.1710.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-17
13.5.1710.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-17
13.5.1710.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-17
13.5.1710.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-17
13.5.1710.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-17
13.5.1710.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-17
13.5.1710.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-17
13.5.1710.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-17
13.5.1710.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-17
13.5.1710.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-17



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1710.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-17
13.5.1710.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-17
13.5.1712.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-17
13.5.1712.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-17
13.5.1712.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-17
13.5.1712.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-17
13.5.1712.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-17
13.5.1712.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-17
13.5.1712.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-17
13.5.1712.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-17
13.5.1712.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-17
13.5.1712.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-17
13.5.1712.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-17
13.5.1712.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-17
13.5.1712.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-17
13.5.1712.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-17
13.5.1712.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-17
13.5.1712.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-17
13.5.1714.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-17
13.5.1714.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-17
13.5.1714.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-17
13.5.1714.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-17
13.5.1714.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-17
13.5.1714.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-17
13.5.1714.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-17
13.5.1714.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-17
13.5.1714.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-17
13.5.1714.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-17
13.5.1714.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-17
13.5.1714.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-17
13.5.1714.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-17
13.5.1714.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-17
13.5.1714.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-17
13.5.1714.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-17
13.5.1716.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-17
13.5.1716.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-17
13.5.1716.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1716.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-17
13.5.1716.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-17
13.5.1716.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-17
13.5.1716.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-17
13.5.1716.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-17
13.5.1716.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-17
13.5.1716.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-17
13.5.1716.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-17
13.5.1716.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-17
13.5.1716.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-17
13.5.1716.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-17
13.5.1716.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-17
13.5.1716.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-17
13.5.1718.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-17
13.5.1718.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-17
13.5.1718.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-17
13.5.1718.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-17
13.5.1718.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-17
13.5.1718.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-17
13.5.1718.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-17
13.5.1718.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-17
13.5.1718.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-17
13.5.1718.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-17
13.5.1718.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-17
13.5.1718.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-17
13.5.1718.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-17
13.5.1718.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-17
13.5.1718.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-17
13.5.1718.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-17
13.5.1721.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-17
13.5.1721.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-17
13.5.1721.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-17
13.5.1721.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-17
13.5.1721.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-17
13.5.1721.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-17
13.5.1721.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-17
13.5.1721.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1721.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-17
13.5.1721.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-17
13.5.1721.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-17
13.5.1721.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-17
13.5.1721.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-17
13.5.1721.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-17
13.5.1721.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-17
13.5.1721.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-17
13.5.1723.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-17
13.5.1723.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-17
13.5.1723.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-17
13.5.1723.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-17
13.5.1723.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-17
13.5.1723.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-17
13.5.1723.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-17
13.5.1723.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-17
13.5.1723.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-17
13.5.1723.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-17
13.5.1723.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-17
13.5.1723.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-17
13.5.1723.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-17
13.5.1723.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-17
13.5.1723.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-17
13.5.1723.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-17
13.5.1725.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-17
13.5.1725.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-17
13.5.1725.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-17
13.5.1725.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-17
13.5.1725.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-17
13.5.1725.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-17
13.5.1725.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-17
13.5.1725.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-17
13.5.1725.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-17
13.5.1725.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-17
13.5.1725.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-17
13.5.1725.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-17
13.5.1725.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1725.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-17
13.5.1725.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-17
13.5.1725.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-17
13.5.1727.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-17
13.5.1727.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-17
13.5.1727.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-17
13.5.1727.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-17
13.5.1727.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-17
13.5.1727.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-17
13.5.1727.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-17
13.5.1727.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-17
13.5.1727.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-17
13.5.1727.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-17
13.5.1727.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-17
13.5.1727.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-17
13.5.1727.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-17
13.5.1727.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-17
13.5.1727.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-17
13.5.1727.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-17
13.5.1729.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-17
13.5.1729.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-17
13.5.1729.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-17
13.5.1729.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-17
13.5.1729.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-17
13.5.1729.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-17
13.5.1729.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-17
13.5.1729.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-17
13.5.1729.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-17
13.5.1729.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-17
13.5.1729.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-17
13.5.1729.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-17
13.5.1729.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-17
13.5.1729.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-17
13.5.1729.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-17
13.5.1729.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-17
13.5.1731.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-17
13.5.1731.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1731.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-17
13.5.1731.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-17
13.5.1731.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-17
13.5.1731.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-17
13.5.1731.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-17
13.5.1731.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-17
13.5.1731.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-17
13.5.1731.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-17
13.5.1731.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-17
13.5.1731.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-17
13.5.1731.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-17
13.5.1731.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-17
13.5.1731.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-17
13.5.1731.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-17
13.5.1735.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-17
13.5.1735.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-17
13.5.1735.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-17
13.5.1735.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-17
13.5.1735.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-17
13.5.1735.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-17
13.5.1735.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-17
13.5.1735.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-17
13.5.1735.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-17
13.5.1735.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-17
13.5.1735.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-17
13.5.1735.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-17
13.5.1735.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-17
13.5.1735.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-17
13.5.1735.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-17
13.5.1735.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-17
13.5.1740.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-17
13.5.1740.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-17
13.5.1740.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-17
13.5.1740.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-17
13.5.1740.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-17
13.5.1740.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-17
13.5.1740.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1740.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-17
13.5.1740.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-17
13.5.1740.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-17
13.5.1740.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-17
13.5.1740.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-17
13.5.1740.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-17
13.5.1740.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-17
13.5.1740.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-17
13.5.1740.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-17
13.5.1745.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-17
13.5.1745.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-17
13.5.1745.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-17
13.5.1745.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-17
13.5.1745.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-17
13.5.1745.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-17
13.5.1745.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-17
13.5.1745.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-17
13.5.1745.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-17
13.5.1745.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-17
13.5.1745.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-17
13.5.1745.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-17
13.5.1745.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-17
13.5.1745.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-17
13.5.1745.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-17
13.5.1745.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-17
13.5.1750.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-17
13.5.1750.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-17
13.5.1750.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-17
13.5.1750.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-17
13.5.1750.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-17
13.5.1750.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-17
13.5.1750.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-17
13.5.1750.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-17
13.5.1750.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-17
13.5.1750.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-17
13.5.1750.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-17
13.5.1750.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1750.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-17
13.5.1750.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-17
13.5.1750.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-17
13.5.1750.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-17
13.5.1755.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-17
13.5.1755.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-17
13.5.1755.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-17
13.5.1755.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-17
13.5.1755.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-17
13.5.1755.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-17
13.5.1755.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-17
13.5.1755.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-17
13.5.1755.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-17
13.5.1755.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-17
13.5.1755.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-17
13.5.1755.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-17
13.5.1755.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-17
13.5.1755.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-17
13.5.1755.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-17
13.5.1755.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-17
13.5.1760.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-17
13.5.1760.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-17
13.5.1760.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-17
13.5.1760.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-17
13.5.1760.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-17
13.5.1760.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-17
13.5.1760.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-17
13.5.1760.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-17
13.5.1760.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-17
13.5.1760.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-17
13.5.1760.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-17
13.5.1760.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-17
13.5.1760.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-17
13.5.1760.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-17
13.5.1760.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-17
13.5.1760.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-17
13.5.1770.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-17

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1770.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-17
13.5.1770.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-17
13.5.1770.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-17
13.5.1770.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-17
13.5.1770.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-17
13.5.1770.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-17
13.5.1770.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-17
13.5.1770.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-17
13.5.1770.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-17
13.5.1770.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-17
13.5.1770.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-17
13.5.1770.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-17
13.5.1770.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-17
13.5.1770.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-17
13.5.1770.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-17
13.5.1806.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-18
13.5.1806.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-18
13.5.1806.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-18
13.5.1806.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-18
13.5.1806.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-18
13.5.1806.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-18
13.5.1806.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-18
13.5.1806.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-18
13.5.1806.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-18
13.5.1806.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-18
13.5.1806.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-18
13.5.1806.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-18
13.5.1806.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-18
13.5.1806.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-18
13.5.1806.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-18
13.5.1806.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-18
13.5.1807.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-18
13.5.1807.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-18
13.5.1807.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-18
13.5.1807.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-18
13.5.1807.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-18
13.5.1807.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-18



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1807.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-18
13.5.1807.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-18
13.5.1807.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-18
13.5.1807.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-18
13.5.1807.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-18
13.5.1807.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-18
13.5.1807.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-18
13.5.1807.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-18
13.5.1807.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-18
13.5.1807.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-18
13.5.1808.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-18
13.5.1808.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-18
13.5.1808.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-18
13.5.1808.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-18
13.5.1808.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-18
13.5.1808.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-18
13.5.1808.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-18
13.5.1808.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-18
13.5.1808.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-18
13.5.1808.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-18
13.5.1808.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-18
13.5.1808.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-18
13.5.1808.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-18
13.5.1808.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-18
13.5.1808.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-18
13.5.1808.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-18
13.5.1810.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-18
13.5.1810.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-18
13.5.1810.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-18
13.5.1810.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-18
13.5.1810.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-18
13.5.1810.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-18
13.5.1810.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-18
13.5.1810.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-18
13.5.1810.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-18
13.5.1810.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-18
13.5.1810.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-18

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1810.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-18
13.5.1810.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-18
13.5.1810.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-18
13.5.1810.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-18
13.5.1810.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-18
13.5.1812.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-18
13.5.1812.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-18
13.5.1812.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-18
13.5.1812.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-18
13.5.1812.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-18
13.5.1812.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-18
13.5.1812.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-18
13.5.1812.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-18
13.5.1812.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-18
13.5.1812.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-18
13.5.1812.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-18
13.5.1812.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-18
13.5.1812.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-18
13.5.1812.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-18
13.5.1812.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-18
13.5.1812.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-18
13.5.1814.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-18
13.5.1814.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-18
13.5.1814.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-18
13.5.1814.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-18
13.5.1814.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-18
13.5.1814.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-18
13.5.1814.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-18
13.5.1814.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-18
13.5.1814.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-18
13.5.1814.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-18
13.5.1814.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-18
13.5.1814.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-18
13.5.1814.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-18
13.5.1814.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-18
13.5.1814.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-18
13.5.1814.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-18

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1816.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-18
13.5.1816.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-18
13.5.1816.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-18
13.5.1816.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-18
13.5.1816.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-18
13.5.1816.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-18
13.5.1816.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-18
13.5.1816.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-18
13.5.1816.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-18
13.5.1816.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-18
13.5.1816.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-18
13.5.1816.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-18
13.5.1816.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-18
13.5.1816.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-18
13.5.1816.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-18
13.5.1816.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-18
13.5.1818.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-18
13.5.1818.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-18
13.5.1818.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-18
13.5.1818.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-18
13.5.1818.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-18
13.5.1818.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-18
13.5.1818.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-18
13.5.1818.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-18
13.5.1818.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-18
13.5.1818.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-18
13.5.1818.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-18
13.5.1818.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-18
13.5.1818.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-18
13.5.1818.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-18
13.5.1818.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-18
13.5.1818.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-18
13.5.1821.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-18
13.5.1821.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-18
13.5.1821.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-18
13.5.1821.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-18
13.5.1821.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-18

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1821.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-18
13.5.1821.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-18
13.5.1821.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-18
13.5.1821.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-18
13.5.1821.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-18
13.5.1821.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-18
13.5.1821.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-18
13.5.1821.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-18
13.5.1821.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-18
13.5.1821.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-18
13.5.1821.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-18
13.5.1823.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-18
13.5.1823.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-18
13.5.1823.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-18
13.5.1823.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-18
13.5.1823.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-18
13.5.1823.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-18
13.5.1823.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-18
13.5.1823.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-18
13.5.1823.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-18
13.5.1823.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-18
13.5.1823.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-18
13.5.1823.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-18
13.5.1823.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-18
13.5.1823.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-18
13.5.1823.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-18
13.5.1823.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-18
13.5.1825.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-18
13.5.1825.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-18
13.5.1825.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-18
13.5.1825.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-18
13.5.1825.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-18
13.5.1825.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-18
13.5.1825.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-18
13.5.1825.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-18
13.5.1825.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-18
13.5.1825.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-18

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1825.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-18
13.5.1825.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-18
13.5.1825.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-18
13.5.1825.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-18
13.5.1825.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-18
13.5.1825.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-18
13.5.1827.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-18
13.5.1827.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-18
13.5.1827.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-18
13.5.1827.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-18
13.5.1827.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-18
13.5.1827.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-18
13.5.1827.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-18
13.5.1827.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-18
13.5.1827.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-18
13.5.1827.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-18
13.5.1827.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-18
13.5.1827.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-18
13.5.1827.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-18
13.5.1827.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-18
13.5.1827.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-18
13.5.1827.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-18
13.5.1829.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-18
13.5.1829.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-18
13.5.1829.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-18
13.5.1829.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-18
13.5.1829.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-18
13.5.1829.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-18
13.5.1829.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-18
13.5.1829.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-18
13.5.1829.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-18
13.5.1829.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-18
13.5.1829.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-18
13.5.1829.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-18
13.5.1829.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-18
13.5.1829.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-18
13.5.1829.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-18

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1829.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-18
13.5.1831.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-18
13.5.1831.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-18
13.5.1831.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-18
13.5.1831.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-18
13.5.1831.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-18
13.5.1831.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-18
13.5.1831.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-18
13.5.1831.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-18
13.5.1831.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-18
13.5.1831.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-18
13.5.1831.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-18
13.5.1831.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-18
13.5.1831.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-18
13.5.1831.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-18
13.5.1831.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-18
13.5.1831.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-18
13.5.1835.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-18
13.5.1835.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-18
13.5.1835.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-18
13.5.1835.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-18
13.5.1835.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-18
13.5.1835.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-18
13.5.1835.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-18
13.5.1835.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-18
13.5.1835.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-18
13.5.1835.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-18
13.5.1835.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-18
13.5.1835.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-18
13.5.1835.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-18
13.5.1835.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-18
13.5.1835.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-18
13.5.1835.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-18
13.5.1840.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-18
13.5.1840.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-18
13.5.1840.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-18
13.5.1840.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-18

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1840.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-18
13.5.1840.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-18
13.5.1840.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-18
13.5.1840.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-18
13.5.1840.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-18
13.5.1840.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-18
13.5.1840.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-18
13.5.1840.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-18
13.5.1840.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-18
13.5.1840.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-18
13.5.1840.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-18
13.5.1840.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-18
13.5.1845.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-18
13.5.1845.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-18
13.5.1845.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-18
13.5.1845.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-18
13.5.1845.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-18
13.5.1845.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-18
13.5.1845.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-18
13.5.1845.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-18
13.5.1845.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-18
13.5.1845.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-18
13.5.1845.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-18
13.5.1845.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-18
13.5.1845.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-18
13.5.1845.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-18
13.5.1845.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-18
13.5.1845.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-18
13.5.1850.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-18
13.5.1850.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-18
13.5.1850.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-18
13.5.1850.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-18
13.5.1850.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-18
13.5.1850.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-18
13.5.1850.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-18
13.5.1850.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-18
13.5.1850.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-18

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1850.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-18
13.5.1850.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-18
13.5.1850.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-18
13.5.1850.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-18
13.5.1850.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-18
13.5.1850.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-18
13.5.1850.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-18
13.5.1855.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-18
13.5.1855.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-18
13.5.1855.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-18
13.5.1855.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-18
13.5.1855.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-18
13.5.1855.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-18
13.5.1855.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-18
13.5.1855.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-18
13.5.1855.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-18
13.5.1855.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-18
13.5.1855.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-18
13.5.1855.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-18
13.5.1855.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-18
13.5.1855.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-18
13.5.1855.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-18
13.5.1855.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-18
13.5.1860.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-18
13.5.1860.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-18
13.5.1860.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-18
13.5.1860.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-18
13.5.1860.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-18
13.5.1860.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-18
13.5.1860.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-18
13.5.1860.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-18
13.5.1860.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-18
13.5.1860.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-18
13.5.1860.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-18
13.5.1860.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-18
13.5.1860.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-18
13.5.1860.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-18



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1860.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-18
13.5.1860.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-18
13.5.1870.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-18
13.5.1870.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-18
13.5.1870.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-18
13.5.1870.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-18
13.5.1870.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-18
13.5.1870.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-18
13.5.1870.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-18
13.5.1870.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-18
13.5.1870.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-18
13.5.1870.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-18
13.5.1870.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-18
13.5.1870.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-18
13.5.1870.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-18
13.5.1870.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-18
13.5.1870.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-18
13.5.1870.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-18
13.5.1906.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-19
13.5.1906.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-19
13.5.1906.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-19
13.5.1906.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-19
13.5.1906.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-19
13.5.1906.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-19
13.5.1906.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-19
13.5.1906.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-19
13.5.1906.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-19
13.5.1906.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-19
13.5.1906.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-19
13.5.1906.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-19
13.5.1906.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-19
13.5.1906.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-19
13.5.1906.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-19
13.5.1906.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-19
13.5.1907.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-19
13.5.1907.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-19
13.5.1907.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1907.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-19
13.5.1907.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-19
13.5.1907.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-19
13.5.1907.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-19
13.5.1907.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-19
13.5.1907.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-19
13.5.1907.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-19
13.5.1907.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-19
13.5.1907.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-19
13.5.1907.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-19
13.5.1907.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-19
13.5.1907.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-19
13.5.1907.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-19
13.5.1908.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-19
13.5.1908.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-19
13.5.1908.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-19
13.5.1908.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-19
13.5.1908.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-19
13.5.1908.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-19
13.5.1908.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-19
13.5.1908.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-19
13.5.1908.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-19
13.5.1908.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-19
13.5.1908.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-19
13.5.1908.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-19
13.5.1908.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-19
13.5.1908.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-19
13.5.1908.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-19
13.5.1908.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-19
13.5.1910.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-19
13.5.1910.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-19
13.5.1910.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-19
13.5.1910.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-19
13.5.1910.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-19
13.5.1910.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-19
13.5.1910.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-19
13.5.1910.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1910.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-19
13.5.1910.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-19
13.5.1910.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-19
13.5.1910.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-19
13.5.1910.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-19
13.5.1910.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-19
13.5.1910.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-19
13.5.1910.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-19
13.5.1912.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-19
13.5.1912.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-19
13.5.1912.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-19
13.5.1912.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-19
13.5.1912.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-19
13.5.1912.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-19
13.5.1912.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-19
13.5.1912.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-19
13.5.1912.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-19
13.5.1912.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-19
13.5.1912.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-19
13.5.1912.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-19
13.5.1912.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-19
13.5.1912.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-19
13.5.1912.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-19
13.5.1912.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-19
13.5.1914.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-19
13.5.1914.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-19
13.5.1914.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-19
13.5.1914.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-19
13.5.1914.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-19
13.5.1914.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-19
13.5.1914.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-19
13.5.1914.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-19
13.5.1914.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-19
13.5.1914.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-19
13.5.1914.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-19
13.5.1914.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-19
13.5.1914.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1914.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-19
13.5.1914.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-19
13.5.1914.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-19
13.5.1916.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-19
13.5.1916.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-19
13.5.1916.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-19
13.5.1916.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-19
13.5.1916.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-19
13.5.1916.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-19
13.5.1916.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-19
13.5.1916.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-19
13.5.1916.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-19
13.5.1916.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-19
13.5.1916.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-19
13.5.1916.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-19
13.5.1916.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-19
13.5.1916.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-19
13.5.1916.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-19
13.5.1916.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-19
13.5.1918.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-19
13.5.1918.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-19
13.5.1918.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-19
13.5.1918.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-19
13.5.1918.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-19
13.5.1918.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-19
13.5.1918.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-19
13.5.1918.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-19
13.5.1918.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-19
13.5.1918.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-19
13.5.1918.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-19
13.5.1918.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-19
13.5.1918.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-19
13.5.1918.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-19
13.5.1918.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-19
13.5.1918.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-19
13.5.1921.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-19
13.5.1921.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1921.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-19
13.5.1921.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-19
13.5.1921.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-19
13.5.1921.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-19
13.5.1921.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-19
13.5.1921.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-19
13.5.1921.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-19
13.5.1921.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-19
13.5.1921.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-19
13.5.1921.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-19
13.5.1921.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-19
13.5.1921.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-19
13.5.1921.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-19
13.5.1921.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-19
13.5.1923.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-19
13.5.1923.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-19
13.5.1923.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-19
13.5.1923.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-19
13.5.1923.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-19
13.5.1923.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-19
13.5.1923.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-19
13.5.1923.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-19
13.5.1923.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-19
13.5.1923.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-19
13.5.1923.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-19
13.5.1923.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-19
13.5.1923.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-19
13.5.1923.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-19
13.5.1923.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-19
13.5.1923.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-19
13.5.1925.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-19
13.5.1925.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-19
13.5.1925.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-19
13.5.1925.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-19
13.5.1925.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-19
13.5.1925.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-19
13.5.1925.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1925.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-19
13.5.1925.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-19
13.5.1925.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-19
13.5.1925.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-19
13.5.1925.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-19
13.5.1925.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-19
13.5.1925.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-19
13.5.1925.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-19
13.5.1925.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-19
13.5.1927.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-19
13.5.1927.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-19
13.5.1927.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-19
13.5.1927.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-19
13.5.1927.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-19
13.5.1927.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-19
13.5.1927.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-19
13.5.1927.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-19
13.5.1927.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-19
13.5.1927.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-19
13.5.1927.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-19
13.5.1927.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-19
13.5.1927.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-19
13.5.1927.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-19
13.5.1927.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-19
13.5.1927.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-19
13.5.1929.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-19
13.5.1929.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-19
13.5.1929.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-19
13.5.1929.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-19
13.5.1929.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-19
13.5.1929.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-19
13.5.1929.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-19
13.5.1929.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-19
13.5.1929.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-19
13.5.1929.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-19
13.5.1929.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-19
13.5.1929.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1929.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-19
13.5.1929.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-19
13.5.1929.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-19
13.5.1929.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-19
13.5.1931.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-19
13.5.1931.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-19
13.5.1931.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-19
13.5.1931.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-19
13.5.1931.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-19
13.5.1931.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-19
13.5.1931.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-19
13.5.1931.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-19
13.5.1931.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-19
13.5.1931.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-19
13.5.1931.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-19
13.5.1931.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-19
13.5.1931.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-19
13.5.1931.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-19
13.5.1931.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-19
13.5.1931.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-19
13.5.1935.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-19
13.5.1935.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-19
13.5.1935.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-19
13.5.1935.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-19
13.5.1935.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-19
13.5.1935.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-19
13.5.1935.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-19
13.5.1935.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-19
13.5.1935.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-19
13.5.1935.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-19
13.5.1935.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-19
13.5.1935.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-19
13.5.1935.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-19
13.5.1935.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-19
13.5.1935.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-19
13.5.1935.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-19
13.5.1940.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1940.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-19
13.5.1940.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-19
13.5.1940.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-19
13.5.1940.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-19
13.5.1940.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-19
13.5.1940.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-19
13.5.1940.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-19
13.5.1940.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-19
13.5.1940.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-19
13.5.1940.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-19
13.5.1940.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-19
13.5.1940.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-19
13.5.1940.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-19
13.5.1940.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-19
13.5.1940.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-19
13.5.1945.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-19
13.5.1945.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-19
13.5.1945.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-19
13.5.1945.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-19
13.5.1945.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-19
13.5.1945.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-19
13.5.1945.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-19
13.5.1945.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-19
13.5.1945.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-19
13.5.1945.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-19
13.5.1945.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-19
13.5.1945.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-19
13.5.1945.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-19
13.5.1945.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-19
13.5.1945.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-19
13.5.1945.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-19
13.5.1950.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-19
13.5.1950.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-19
13.5.1950.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-19
13.5.1950.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-19
13.5.1950.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-19
13.5.1950.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-19



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1950.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-19
13.5.1950.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-19
13.5.1950.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-19
13.5.1950.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-19
13.5.1950.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-19
13.5.1950.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-19
13.5.1950.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-19
13.5.1950.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-19
13.5.1950.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-19
13.5.1950.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-19
13.5.1955.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-19
13.5.1955.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-19
13.5.1955.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-19
13.5.1955.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-19
13.5.1955.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-19
13.5.1955.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-19
13.5.1955.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-19
13.5.1955.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-19
13.5.1955.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-19
13.5.1955.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-19
13.5.1955.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-19
13.5.1955.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-19
13.5.1955.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-19
13.5.1955.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-19
13.5.1955.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-19
13.5.1955.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-19
13.5.1960.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-19
13.5.1960.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-19
13.5.1960.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-19
13.5.1960.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-19
13.5.1960.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-19
13.5.1960.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-19
13.5.1960.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-19
13.5.1960.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-19
13.5.1960.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-19
13.5.1960.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-19
13.5.1960.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-19

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.1960.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-19
13.5.1960.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-19
13.5.1960.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-19
13.5.1960.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-19
13.5.1960.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-19
13.5.1970.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-19
13.5.1970.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-19
13.5.1970.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-19
13.5.1970.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-19
13.5.1970.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-19
13.5.1970.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-19
13.5.1970.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-19
13.5.1970.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-19
13.5.1970.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-19
13.5.1970.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-19
13.5.1970.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-19
13.5.1970.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-19
13.5.1970.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-19
13.5.1970.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-19
13.5.1970.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-19
13.5.1970.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-19
13.5.2006.050E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 50.0 ER-20
13.5.2006.060E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 60.0 ER-20
13.5.2006.070E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 70.0 ER-20
13.5.2006.080E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 80.0 ER-20
13.5.2006.090E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 90.0 ER-20
13.5.2006.100E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 100.0 ER-20
13.5.2006.110E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 110.0 ER-20
13.5.2006.120E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 120.0 ER-20
13.5.2006.130E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 130.0 ER-20
13.5.2006.140E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 140.0 ER-20
13.5.2006.150E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 150.0 ER-20
13.5.2006.160E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 160.0 ER-20
13.5.2006.170E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 170.0 ER-20
13.5.2006.180E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 180.0 ER-20
13.5.2006.190E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 190.0 ER-20
13.5.2006.200E	Broca Diamantada Ø 0.60 x 200.0 ER-20

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2007.050E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 50.0 ER-20
13.5.2007.060E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 60.0 ER-20
13.5.2007.070E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 70.0 ER-20
13.5.2007.080E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 80.0 ER-20
13.5.2007.090E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 90.0 ER-20
13.5.2007.100E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 100.0 ER-20
13.5.2007.110E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 110.0 ER-20
13.5.2007.120E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 120.0 ER-20
13.5.2007.130E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 130.0 ER-20
13.5.2007.140E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 140.0 ER-20
13.5.2007.150E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 150.0 ER-20
13.5.2007.160E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 160.0 ER-20
13.5.2007.170E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 170.0 ER-20
13.5.2007.180E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 180.0 ER-20
13.5.2007.190E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 190.0 ER-20
13.5.2007.200E	Broca Diamantada Ø 0.70 x 200.0 ER-20
13.5.2008.050E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 50.0 ER-20
13.5.2008.060E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 60.0 ER-20
13.5.2008.070E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 70.0 ER-20
13.5.2008.080E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 80.0 ER-20
13.5.2008.090E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 90.0 ER-20
13.5.2008.100E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 100.0 ER-20
13.5.2008.110E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 110.0 ER-20
13.5.2008.120E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 120.0 ER-20
13.5.2008.130E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 130.0 ER-20
13.5.2008.140E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 140.0 ER-20
13.5.2008.150E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 150.0 ER-20
13.5.2008.160E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 160.0 ER-20
13.5.2008.170E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 170.0 ER-20
13.5.2008.180E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 180.0 ER-20
13.5.2008.190E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 190.0 ER-20
13.5.2008.200E	Broca Diamantada Ø 0.80 x 200.0 ER-20
13.5.2010.050E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 50.0 ER-20
13.5.2010.060E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 60.0 ER-20
13.5.2010.070E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 70.0 ER-20
13.5.2010.080E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 80.0 ER-20
13.5.2010.090E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 90.0 ER-20

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2010.100E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 100.0 ER-20
13.5.2010.110E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 110.0 ER-20
13.5.2010.120E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 120.0 ER-20
13.5.2010.130E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 130.0 ER-20
13.5.2010.140E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 140.0 ER-20
13.5.2010.150E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 150.0 ER-20
13.5.2010.160E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 160.0 ER-20
13.5.2010.170E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 170.0 ER-20
13.5.2010.180E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 180.0 ER-20
13.5.2010.190E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 190.0 ER-20
13.5.2010.200E	Broca Diamantada Ø 1.00 x 200.0 ER-20
13.5.2012.050E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 50.0 ER-20
13.5.2012.060E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 60.0 ER-20
13.5.2012.070E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 70.0 ER-20
13.5.2012.080E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 80.0 ER-20
13.5.2012.090E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 90.0 ER-20
13.5.2012.100E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 100.0 ER-20
13.5.2012.110E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 110.0 ER-20
13.5.2012.120E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 120.0 ER-20
13.5.2012.130E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 130.0 ER-20
13.5.2012.140E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 140.0 ER-20
13.5.2012.150E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 150.0 ER-20
13.5.2012.160E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 160.0 ER-20
13.5.2012.170E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 170.0 ER-20
13.5.2012.180E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 180.0 ER-20
13.5.2012.190E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 190.0 ER-20
13.5.2012.200E	Broca Diamantada Ø 1.20 x 200.0 ER-20
13.5.2014.050E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 50.0 ER-20
13.5.2014.060E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 60.0 ER-20
13.5.2014.070E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 70.0 ER-20
13.5.2014.080E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 80.0 ER-20
13.5.2014.090E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 90.0 ER-20
13.5.2014.100E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 100.0 ER-20
13.5.2014.110E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 110.0 ER-20
13.5.2014.120E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 120.0 ER-20
13.5.2014.130E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 130.0 ER-20
13.5.2014.140E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 140.0 ER-20

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2014.150E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 150.0 ER-20
13.5.2014.160E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 160.0 ER-20
13.5.2014.170E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 170.0 ER-20
13.5.2014.180E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 180.0 ER-20
13.5.2014.190E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 190.0 ER-20
13.5.2014.200E	Broca Diamantada Ø 1.40 x 200.0 ER-20
13.5.2016.050E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 50.0 ER-20
13.5.2016.060E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 60.0 ER-20
13.5.2016.070E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 70.0 ER-20
13.5.2016.080E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 80.0 ER-20
13.5.2016.090E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 90.0 ER-20
13.5.2016.100E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 100.0 ER-20
13.5.2016.110E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 110.0 ER-20
13.5.2016.120E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 120.0 ER-20
13.5.2016.130E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 130.0 ER-20
13.5.2016.140E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 140.0 ER-20
13.5.2016.150E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 150.0 ER-20
13.5.2016.160E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 160.0 ER-20
13.5.2016.170E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 170.0 ER-20
13.5.2016.180E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 180.0 ER-20
13.5.2016.190E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 190.0 ER-20
13.5.2016.200E	Broca Diamantada Ø 1.60 x 200.0 ER-20
13.5.2018.050E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 50.0 ER-20
13.5.2018.060E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 60.0 ER-20
13.5.2018.070E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 70.0 ER-20
13.5.2018.080E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 80.0 ER-20
13.5.2018.090E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 90.0 ER-20
13.5.2018.100E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 100.0 ER-20
13.5.2018.110E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 110.0 ER-20
13.5.2018.120E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 120.0 ER-20
13.5.2018.130E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 130.0 ER-20
13.5.2018.140E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 140.0 ER-20
13.5.2018.150E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 150.0 ER-20
13.5.2018.160E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 160.0 ER-20
13.5.2018.170E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 170.0 ER-20
13.5.2018.180E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 180.0 ER-20
13.5.2018.190E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 190.0 ER-20

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2018.200E	Broca Diamantada Ø 1.80 x 200.0 ER-20
13.5.2021.050E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 50.0 ER-20
13.5.2021.060E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 60.0 ER-20
13.5.2021.070E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 70.0 ER-20
13.5.2021.080E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 80.0 ER-20
13.5.2021.090E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 90.0 ER-20
13.5.2021.100E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 100.0 ER-20
13.5.2021.110E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 110.0 ER-20
13.5.2021.120E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 120.0 ER-20
13.5.2021.130E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 130.0 ER-20
13.5.2021.140E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 140.0 ER-20
13.5.2021.150E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 150.0 ER-20
13.5.2021.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-20
13.5.2021.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-20
13.5.2021.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-20
13.5.2021.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-20
13.5.2021.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-20
13.5.2023.050E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 50.0 ER-20
13.5.2023.060E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 60.0 ER-20
13.5.2023.070E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 70.0 ER-20
13.5.2023.080E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 80.0 ER-20
13.5.2023.090E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 90.0 ER-20
13.5.2023.100E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 100.0 ER-20
13.5.2023.110E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 110.0 ER-20
13.5.2023.120E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 120.0 ER-20
13.5.2023.130E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 130.0 ER-20
13.5.2023.140E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 140.0 ER-20
13.5.2023.150E	Broca Diamantada Ø 2.30 x 150.0 ER-20
13.5.2023.160E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 160.0 ER-20
13.5.2023.170E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 170.0 ER-20
13.5.2023.180E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 180.0 ER-20
13.5.2023.190E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 190.0 ER-20
13.5.2023.200E	Broca Diamantada Ø 2.10 x 200.0 ER-20
13.5.2025.050E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 50.0 ER-20
13.5.2025.060E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 60.0 ER-20
13.5.2025.070E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 70.0 ER-20
13.5.2025.080E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 80.0 ER-20

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2025.090E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 90.0 ER-20
13.5.2025.100E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 100.0 ER-20
13.5.2025.110E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 110.0 ER-20
13.5.2025.120E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 120.0 ER-20
13.5.2025.130E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 130.0 ER-20
13.5.2025.140E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 140.0 ER-20
13.5.2025.150E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 150.0 ER-20
13.5.2025.160E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 160.0 ER-20
13.5.2025.170E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 170.0 ER-20
13.5.2025.180E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 180.0 ER-20
13.5.2025.190E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 190.0 ER-20
13.5.2025.200E	Broca Diamantada Ø 2.50 x 200.0 ER-20
13.5.2027.050E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 50.0 ER-20
13.5.2027.060E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 60.0 ER-20
13.5.2027.070E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 70.0 ER-20
13.5.2027.080E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 80.0 ER-20
13.5.2027.090E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 90.0 ER-20
13.5.2027.100E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 100.0 ER-20
13.5.2027.110E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 110.0 ER-20
13.5.2027.120E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 120.0 ER-20
13.5.2027.130E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 130.0 ER-20
13.5.2027.140E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 140.0 ER-20
13.5.2027.150E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 150.0 ER-20
13.5.2027.160E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 160.0 ER-20
13.5.2027.170E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 170.0 ER-20
13.5.2027.180E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 180.0 ER-20
13.5.2027.190E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 190.0 ER-20
13.5.2027.200E	Broca Diamantada Ø 2.70 x 200.0 ER-20
13.5.2029.050E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 50.0 ER-20
13.5.2029.060E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 60.0 ER-20
13.5.2029.070E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 70.0 ER-20
13.5.2029.080E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 80.0 ER-20
13.5.2029.090E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 90.0 ER-20
13.5.2029.100E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 100.0 ER-20
13.5.2029.110E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 110.0 ER-20
13.5.2029.120E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 120.0 ER-20
13.5.2029.130E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 130.0 ER-20

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2029.140E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 140.0 ER-20
13.5.2029.150E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 150.0 ER-20
13.5.2029.160E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 160.0 ER-20
13.5.2029.170E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 170.0 ER-20
13.5.2029.180E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 180.0 ER-20
13.5.2029.190E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 190.0 ER-20
13.5.2029.200E	Broca Diamantada Ø 2.90 x 200.0 ER-20
13.5.2031.050E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 50.0 ER-20
13.5.2031.060E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 60.0 ER-20
13.5.2031.070E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 70.0 ER-20
13.5.2031.080E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 80.0 ER-20
13.5.2031.090E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 90.0 ER-20
13.5.2031.100E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 100.0 ER-20
13.5.2031.110E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 110.0 ER-20
13.5.2031.120E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 120.0 ER-20
13.5.2031.130E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 130.0 ER-20
13.5.2031.140E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 140.0 ER-20
13.5.2031.150E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 150.0 ER-20
13.5.2031.160E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 160.0 ER-20
13.5.2031.170E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 170.0 ER-20
13.5.2031.180E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 180.0 ER-20
13.5.2031.190E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 190.0 ER-20
13.5.2031.200E	Broca Diamantada Ø 3.10 x 200.0 ER-20
13.5.2035.050E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 50.0 ER-20
13.5.2035.060E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 60.0 ER-20
13.5.2035.070E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 70.0 ER-20
13.5.2035.080E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 80.0 ER-20
13.5.2035.090E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 90.0 ER-20
13.5.2035.100E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 100.0 ER-20
13.5.2035.110E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 110.0 ER-20
13.5.2035.120E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 120.0 ER-20
13.5.2035.130E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 130.0 ER-20
13.5.2035.140E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 140.0 ER-20
13.5.2035.150E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 150.0 ER-20
13.5.2035.160E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 160.0 ER-20
13.5.2035.170E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 170.0 ER-20
13.5.2035.180E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 180.0 ER-20



# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2035.190E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 190.0 ER-20
13.5.2035.200E	Broca Diamantada Ø 3.50 x 200.0 ER-20
13.5.2040.050E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 50.0 ER-20
13.5.2040.060E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 60.0 ER-20
13.5.2040.070E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 70.0 ER-20
13.5.2040.080E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 80.0 ER-20
13.5.2040.090E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 90.0 ER-20
13.5.2040.100E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 100.0 ER-20
13.5.2040.110E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 110.0 ER-20
13.5.2040.120E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 120.0 ER-20
13.5.2040.130E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 130.0 ER-20
13.5.2040.140E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 140.0 ER-20
13.5.2040.150E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 150.0 ER-20
13.5.2040.160E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 160.0 ER-20
13.5.2040.170E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 170.0 ER-20
13.5.2040.180E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 180.0 ER-20
13.5.2040.190E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 190.0 ER-20
13.5.2040.200E	Broca Diamantada Ø 4.00 x 200.0 ER-20
13.5.2045.050E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 50.0 ER-20
13.5.2045.060E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 60.0 ER-20
13.5.2045.070E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 70.0 ER-20
13.5.2045.080E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 80.0 ER-20
13.5.2045.090E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 90.0 ER-20
13.5.2045.100E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 100.0 ER-20
13.5.2045.110E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 110.0 ER-20
13.5.2045.120E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 120.0 ER-20
13.5.2045.130E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 130.0 ER-20
13.5.2045.140E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 140.0 ER-20
13.5.2045.150E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 150.0 ER-20
13.5.2045.160E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 160.0 ER-20
13.5.2045.170E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 170.0 ER-20
13.5.2045.180E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 180.0 ER-20
13.5.2045.190E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 190.0 ER-20
13.5.2045.200E	Broca Diamantada Ø 4.50 x 200.0 ER-20
13.5.2050.050E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 50.0 ER-20
13.5.2050.060E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 60.0 ER-20
13.5.2050.070E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 70.0 ER-20

# INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490024

13.5.2050.080E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 80.0 ER-20
13.5.2050.090E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 90.0 ER-20
13.5.2050.100E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 100.0 ER-20
13.5.2050.110E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 110.0 ER-20
13.5.2050.120E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 120.0 ER-20
13.5.2050.130E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 130.0 ER-20
13.5.2050.140E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 140.0 ER-20
13.5.2050.150E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 150.0 ER-20
13.5.2050.160E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 160.0 ER-20
13.5.2050.170E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 170.0 ER-20
13.5.2050.180E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 180.0 ER-20
13.5.2050.190E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 190.0 ER-20
13.5.2050.200E	Broca Diamantada Ø 5.00 x 200.0 ER-20
13.5.2055.050E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 50.0 ER-20
13.5.2055.060E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 60.0 ER-20
13.5.2055.070E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 70.0 ER-20
13.5.2055.080E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 80.0 ER-20
13.5.2055.090E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 90.0 ER-20
13.5.2055.100E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 100.0 ER-20
13.5.2055.110E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 110.0 ER-20
13.5.2055.120E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 120.0 ER-20
13.5.2055.130E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 130.0 ER-20
13.5.2055.140E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 140.0 ER-20
13.5.2055.150E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 150.0 ER-20
13.5.2055.160E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 160.0 ER-20
13.5.2055.170E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 170.0 ER-20
13.5.2055.180E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 180.0 ER-20
13.5.2055.190E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 190.0 ER-20
13.5.2055.200E	Broca Diamantada Ø 5.50 x 200.0 ER-20
13.5.2060.050E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 50.0 ER-20
13.5.2060.060E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 60.0 ER-20
13.5.2060.070E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 70.0 ER-20
13.5.2060.080E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 80.0 ER-20
13.5.2060.090E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 90.0 ER-20
13.5.2060.100E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 100.0 ER-20
13.5.2060.110E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 110.0 ER-20
13.5.2060.120E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 120.0 ER-20

13.5.2060.130E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 130.0 ER-20
13.5.2060.140E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 140.0 ER-20
13.5.2060.150E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 150.0 ER-20
13.5.2060.160E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 160.0 ER-20
13.5.2060.170E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 170.0 ER-20
13.5.2060.180E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 180.0 ER-20
13.5.2060.190E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 190.0 ER-20
13.5.2060.200E	Broca Diamantada Ø 6.00 x 200.0 ER-20
13.5.2070.050E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 50.0 ER-20
13.5.2070.060E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 60.0 ER-20
13.5.2070.070E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 70.0 ER-20
13.5.2070.080E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 80.0 ER-20
13.5.2070.090E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 90.0 ER-20
13.5.2070.100E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 100.0 ER-20
13.5.2070.110E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 110.0 ER-20
13.5.2070.120E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 120.0 ER-20
13.5.2070.130E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 130.0 ER-20
13.5.2070.140E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 140.0 ER-20
13.5.2070.150E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 150.0 ER-20
13.5.2070.160E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 160.0 ER-20
13.5.2070.170E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 170.0 ER-20
13.5.2070.180E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 180.0 ER-20
13.5.2070.190E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 190.0 ER-20
13.5.2070.200E	Broca Diamantada Ø 7.00 x 200.0 ER-20

## IMPORTANTE

As BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS da BIOMETAL devem ser conectadas motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião as respectivas modalidades de uso.

Durante seu uso, o desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso fora do especificado, podem prejudicar a evolução do procedimento e danos aos instrumentos e/ou paciente.

As brocas são componentes metálicos que estão sujeitas a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessário a inspeção e revisão das condições de uso durante o procedimento cirúrgico.

Esteja alerta a caso ocorra variações no desempenho pretendido, como: perda de precisão, instabilidade ou falta de corte.

Caso ocorra estas negativas variações no desempenho, a Broca deve imediatamente ser substituída por outra unidade.

Assegure-se de que a broca esteja devidamente encaixada e travada na peça de mão antes de acionar o motor cirúrgico.

## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

As BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS somente devem ser utilizadas, após uma análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura completa destas INSTRUÇÕES DE USO do produto.

Sempre verificar se a esterilização se encontra dentro do prazo de validade, no rótulo do produto. Caso a mesma não esteja dentro do período de validade, não utilizar.

A esterilização será garantida somente se a embalagem não estiver danificada, em caso de danos não utilizar o produto.

A vida útil dos instrumentais está diretamente relacionada ao número de vezes que são utilizados e da maneira como são conservados, para isso são necessários alguns cuidados conforme descritos abaixo:

- ✓ *As BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS devem ser conectadas motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião as respectivas modalidades de uso – por isso realize o planejamento prévio antes do procedimento cirúrgico.*
- ✓ *Os instrumentos cirúrgicos devem ser utilizados especificamente para os fins propostos;*
- ✓ *Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgaste ao longo de sua utilização normal, portanto o uso inapropriado, abuso ou força excessiva dos instrumentos pode causar a quebra deles em procedimentos;*
- ✓ *O instrumental deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenas porções, evitando-se batidas ou quedas;*
- ✓ *O uso de irrigação durante a operação com BROCAS DIAMANTADAS reduzirá a possibilidade à necrose térmica;*
- ✓ *O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do material;*
- ✓ *Manipule com cuidado;*

- ✓ *A má seleção, colocação, posicionamento e fixação das BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS em motores cirúrgicos podem acarretar resultados indesejados. O cirurgião deve se familiarizar com o produto, sua técnica de manuseio em cirurgia antes de sua utilização. Este é um produto não biocompatível, não absorvente, que tem como finalidade auxiliar procedimentos e/ou a implantação cirúrgica de implantes;*
- ✓ *Para manuseio dos instrumentos após uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais locais do país para manuseio de produtos potencialmente contaminantes;*
- ✓ *Deve-se evitar inclinar ou efetuar movimento de avalanche durante a cirurgia.*

## MANIPULAÇÃO

Manipular as Brocas esterilizadas de acordo com procedimentos assépticos adequados.

Proteger as brocas de contato acidental, quebras, sobreposição com outros materiais – visando evitar danos a superfície.

Inspeccionar visualmente toda broca antes da sua utilização cirúrgica.

## TRANSPORTE

Os Instrumentais devem ser transportados com cuidado, evitando-se quedas e atritos que possam causar defeitos no acabamento da superfície da peça.

Manter o instrumental sempre nas embalagens originais, até o momento de sua utilização, sob a responsabilidade da equipe médico/hospitalar designada para este fim, lembrando-se que essa deve sempre se atentar para a integridade da embalagem.

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide rótulo.

## ARMAZENAMENTO

Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, à umidade ou a substâncias contaminantes.

Os instrumentos cirúrgicos não devem ser armazenados diretamente ao chão (altura mínima = 20 cm), assim, recomenda-se a utilização de prateleiras.

O armazenamento em prateleiras altas e próximas de lâmpadas não deve ser realizado (para não ressecar a embalagem ou apagar o rótulo), além de não poderem ser armazenados em

áreas onde sejam utilizadas substâncias contaminantes como inseticidas, pesticidas ou materiais de limpeza.

Cuidados no recebimento, estocagem e transporte devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos estabelecidos pela ANVISA.

## INSTRUÇÕES DE USO

As BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS são instrumentais cirúrgicos destinados ao uso temporário.

*Remover o instrumental de sua embalagem somente no momento da sua utilização e manusear em campos estéreis para assegurar a esterilidade.*

Após abrir a embalagem, inserir a BROCA DIAMANTADA somente em peça de mão que atendam aos requisitos das normas aplicáveis para produtos para saúde.

Utilizar a BROCA DIAMANTADA somente para as indicações recomendadas.

Durante o uso, movimentar a BROCA DIAMANTADA continuamente de modo a evitar o aquecimento localizado e consequente quebra e riscos ao paciente.

Uma boa pressão a ser aplicadas nas BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS é na escala de 2N – que corresponde a uma pressão efetuada ao se escrever com caneta tinteira ou esferográfica.

*Não há contra indicações e nem efeitos colaterais.*

*Pode ocorrer quebra do instrumental devido ao excesso de força ou rotação empregada, assim como partículas metálicas podem se soltar. Em caso de reações alérgicas, o paciente deve passar por acompanhamento clínico periódico para verificar possíveis efeitos adversos.*

## RESTRIÇÕES DE USO

Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Não utilizar as BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS se houver sinais de danos.

O produto somente deve ser utilizado por profissional habilitado, recomenda-se médico cirurgião.

Quaisquer complicações devidas a indicações erradas, a uma seleção incorreta da técnica operatória, assim como complicações devidas a limites do método de tratamento aplicado ou a falta de assepsia clínica não são responsabilidade desta fabricante.

## DESCARTE DO PRODUTO

A BIOMETAL recomenda o descarte após o uso.

Para manuseio dos instrumentos após uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais vigentes do país para manuseio de produtos potencialmente contaminantes.

## RASTREABILIDADE

Para garantir a rastreabilidade, recomenda-se ao cirurgião ou sua Equipe o registro no prontuário do paciente das informações acerca das BROCAS ESTÉREIS utilizadas.

As informações necessárias para rastreabilidade são as relativas ao produto utilizado, cirurgia e paciente, conforme abaixo:

- ✓ Nome do paciente;
- ✓ Nome do cirurgião;
- ✓ Nome do Hospital;
- ✓ Nome do Fabricante;
- ✓ Nome do Fornecedor;
- ✓ Data da cirurgia;
- ✓ Código do produto;
- ✓ Número de lote do produto;
- ✓ Quantidades utilizadas;
- ✓ Registro do produto na ANVISA

As informações necessárias para a rastreabilidade do produto, a seguir, encontram-se gravadas na peça e/ou podem ser obtidas através da ETIQUETA DE RASTREABILIDADE e RÓTULO FIXADO NA EMBALAGEM DO PRODUTO.

A BIOMETAL disponibiliza de forma adicional 3 VIAS da ETIQUETA DE RASTREABILIDADES autoadesiva e avulsas, com as mesmas informações do rótulo aprovado pela ANVISA, destinados à rastreabilidade do produto.

Os rótulos autoadesivos devem ser devidamente distribuídos de forma a garantir a rastreabilidade do produto.

*Caso seja observado algum EVENTO ADVERSO ou haja necessidade de realização de QUEIXA TÉCNICA deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA, que pode ser encontrado no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no endereço [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br), link NOTIVISA.*

*Nota: Se algum instrumento objeto de desvios de qualidade necessitar e for devolvido ao fabricante BIOMETAL e/ou as Empresas Distribuidoras, este item deve ser descontaminado e esterilizado, e ser acompanhado com a evidência relevante destes processos.*

## **FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:**

BIOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.165.928/0001-75

Endereço: V LUIZ VARGA 2010 - GLEBA BEATRIZ

Cidade/UF: LIMEIRA/SP

CEP: 13.486-606

Fones: (19) 3495-2485 / (19) 3495 3296

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA VICELLI – CREA/SP 5063105420

**CADASTRO ANVISA Nº: 80482490024**

**REVISÃO: 01**