



LINHA ESTÉRIL
NÃO REUTILIZÁVEL

INSTRUÇÃO
DE USO

CADASTRO ANVISA
nº 80482490025

Brocas
Cortantes,
Fresas e
Lâminas Estéreis

CADASTRO ANVISA nº 80482490025

*NOTA: Visando facilidade de acesso as informações, conforme IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, a **BIOMETAL** disponibiliza todas as INSTRUÇÕES DE USO de seus produtos através do endereço eletrônico <http://www.biometal.med.br>; e também através de consulta pública no site da ANVISA = <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351404414201687/?numeroRegistro=80482490025>.*

É importante verificar a correlação adequada da revisão da INSTRUÇÃO DE USO, conforme orientação contidas no impresso “ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO” – que segue junto ao produto para saúde adquirido, e está replicado na última deste documento.

Produtos Fabricados e Distribuídos por:



BIOMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 07.165.928/0001-75

Endereço: V LUIZ VARGA 2010 - GLEBA BEATRIZ - LIMEIRA/SP

CEP: 13.486-606

Fones: (19) 3495-2485 / (19) 3495 3296

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA VICELLI – CREA/SP 5063105420

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

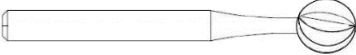




NOME TÉCNICO: Brocas Cirúrgicas

CLASSE DE RISCO ANVISA: II – médio baixo

NOME COMERCIAL: Brocas Cortantes, Fresas e Lâminas Estéreis

MODELOS COMERCIAIS NESTE CADASTRO:

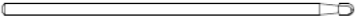



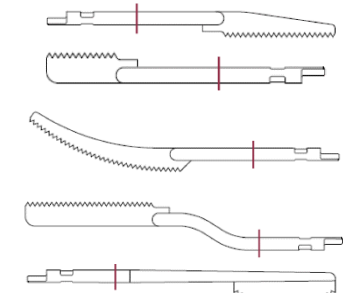
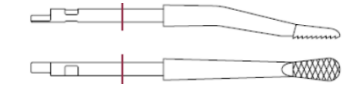
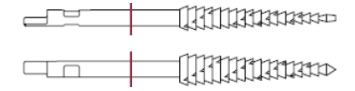
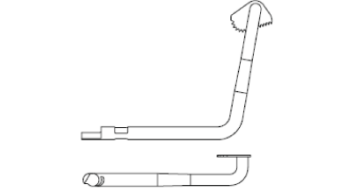
TABELA 1 – MODELOS COMERCIAIS

IMAGEM ILUSTRATIVA	MODELO COMERCIAL	MEDIDAS		ENGATES
		Ø (mm)	Comprimentos (mm)	
	BROCA CORTANTE	Ø 0,60 / 0,70 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,8- 2,10 / 2,30 / 2,50 2,70 / 2,90 3,10 / 3,50 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,0 / 7,0 mm	50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5, ER-6, ER-7, ER-8, ER-9, ER-10, ER-11, ER-12, ER-13, ER-14, ER-15, ER-16, ER-17, ER-18, ER-19, ER-20
	FRESA CRANIÓTOMO	Ø 1,60 mm	12 / 13 / 16 / 20 / 22 / 25 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5, ER-6, ER-7, ER-8, ER-9, ER-10, ER-11, ER-12, ER-13, ER-14, ER-15, ER-16, ER-17, ER-18, ER-19, ER-20
	FRESA DE RASPAGEM	Ø 2,90 / 4,30 / 5,0 mm	13 / 13,2 / 15 mm x 65 / 80 mm	ER-01
	FRESA PARA OSTEOTOMIA	Ø 2,00 / 2,20 mm	8 / 12 / 11 / 13 X 65 / 80 mm	ER-01
	BROCA DE CORTE LATERAL	Ø 0,80 / 1,00 / 1,10 / 1,20 / 1,50 / 1,60 / 2,0 / 2,10	4,0 / 4,2 / 4,3 / 4,6 / 4,8 / 5,0 / 5,1 / 7,6 X 40 / 44,5 / 45 / 50 / 50,8 / 60 / 70 / 73 / 80 / 90 / 95 / 100 mm	ER-01

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025


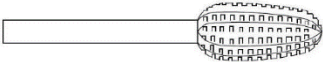
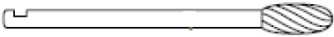




	BROCA CABEÇA DE FOSFORO	\varnothing 1,80 / 3,10 / 4,0.	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5, ER-6, ER-7, ER-8, ER-9, ER-10
	BROCA LINDEMANN	\varnothing 1,4 / 2,2 mm	40 / 45 / 50 / 55 / 65 / 70 / 80 / 90 / 100 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5
	BROCA C/ STOP	\varnothing 1,1 / mm	70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5, ER-6, ER-7, ER-9, ER-10.
	LÂMINA PERCUTÂNEA EXPANSÍVEL	24,0 x 278,0 mm		ER-1, ER-2, ER-3
	LÂMINA RECÍPROCANTE	0,60 x 27,0 mm 0,40 x 22,5 mm		ER-1, ER-2, ER-3
	RASPA CORTE RETO	5,0 x 11,0 mm 7,0 x 14,0 mm		ER-1, ER-2, ER-3
	RASPA INTRAMEDULAR	5,3 / 6,5 / 9,5 / 11 mm X 24,5 / 30,5 / 32 / 47,5 mm		ER-1, ER-2, ER-3
	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA / ESQUERDA	0,40 / 0,60 mm		ER-1, ER-2, ER-3

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



	BROCA CORTANTE – BUD	Ø 4,0 / 4,5 / 5,0 mm	40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5
	BROCA CORTANTE CILÍNDRICA	Ø 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0	40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5
	BROCA CORTANTE OVAL	Ø 4,0 / 4,5 / 5,0	40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5
	BROCA CORTANTE PEAR	Ø 4,0 / 4,5 / 5,0	40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 mm	ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5
	BROCA AUTOMÁTICA PARA TREPANAÇÃO	Ø 9,00 / 11,00 / 14,00 mm	único	HUDSON SMITH

PRODUTO ESTÉRIL

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:












- ✓ Óxido de Etileno, ou

VALIDADE: 05 anos - após a data da esterilização.

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

TABELA 2 – LEGENDA DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS EMBALAGENS

	Código do produto		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Código de lote		Manter ao abrigo do sol
	Data de Validade		Manter seco
	Data de Fabricação		Frágil, manusear com cuidado
	Consultar instruções de uso		Produto Estéril – Esterilizado utilizando óxido de etileno
	Produto de uso único		

APRESENTAÇÃO

Todos os materiais que integram o CADASTRO ANVISA nº 80482490025 são instrumentos de corte sem articulação, cuja finalidade é auxiliar na perfuração, corte ou fresagem dos tecidos ósseos durante diversas especialidades cirúrgicas.

Esses instrumentos devem ser utilizados em motores Cirúrgicos, conforme encaixe normatizados nos modelos ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-5, ER-6, ER-7, ER-8, ER-9, ER-10, ER-11, ER-12, ER-13, ER-14, ER-15, ER-16, ER-17, ER-18, ER-19, ER, que confirmam total compatibilidade para o uso das brocas cirúrgicas da BIOMETAL.

É importante consultar-se esta INSTRUÇÃO DE USO, o rótulo do produto e a técnica operatória reserva ao médico para obter informações quanto as indicações e contraindicações de utilização, bem como aos riscos associados, modo de uso e alertas importantes.

Todos os materiais que integram o CADASTRO ANVISA nº 80482490025 são produtos invasivos cirurgicamente e não reutilizáveis.

COMPOSIÇÃO

Os materiais utilizados para fabricação dos instrumentos cirúrgicos foram selecionados em conformidade com as normas regulamentares vigentes.

São utilizados na fabricação dos instrumentais os aços inoxidáveis de acordo com a norma ASTM F899 - “Standard Specification for Wrought Stainless Steel for Surgical Instruments”.

O processo de fabricação preserva as propriedades do metal, a estabilidade, e a resistência ao trabalho e a corrosão.

INDICAÇÃO E FINALIDADE

Todos os materiais que integram o CADASTRO ANVISA nº 80482490025 são classificadas tecnicamente como instrumentos cirúrgicos, e podem ser empregadas para PERFURAÇÃO, CORTE ÓSSEO, DESBASTE ÓSSEO, ACABAMENTO DE ORIFÍCIOS ou POLIR tecidos ósseos e/ou outras estruturas de materiais (por exemplo: compósitos, cimentos cirúrgicos).

CONTRAINDICAÇÃO

Os instrumentais cirúrgicos não devem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetados, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os produtos são comercializados na condição estéril, embaladas unitariamente em sistema de DUPLO BLISTER SELADO COM PAPEL TYVEK®, e acondicionadas em uma CARTONAGEM – este sistema de embalagem promove proteção da condição estéril, bem como do produto até seu uso clínico.

Toda linha de brocas, fresas e lâminas fabricados na BIOMETAL contém informações gravadas a laser para fins de rastreabilidade.

Sobre o BLISTER EXTERNO e sobre a CARTONAGEM de cada unidade é fixado um rótulo, que fornece os seguintes dados do produto: LOTE, DESCRIÇÃO completa, Nº CADASTRO ANVISA,

NOME TÉCNICO E COMERCIAL, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE e MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO empregado.

Dentro de cada embalagem é disponibilizado de forma adicional:

- ➔ 3 VIAS da ETIQUETA DE RASTREABILIDADE = a serem utilizadas para fins de rastreabilidade e;
- ➔ 1 VIA do impresso “ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO” = contendo as informações necessárias que permite a posterior consulta de sua IU – INSTRUÇÃO DE USO.

MODELOS COMERCIAIS

A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis contemplados no atual CADASTRO ANVISA nº 80482490025:

CODIGO	DESCRIÇÃO
14.5.0106.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-1
14.5.0106.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-1
14.5.0106.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-1
14.5.0106.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-1
14.5.0106.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-1
14.5.0106.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-1
14.5.0106.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-1
14.5.0106.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-1
14.5.0106.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-1
14.5.0106.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-1
14.5.0106.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-1
14.5.0106.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-1
14.5.0106.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-1
14.5.0106.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-1
14.5.0106.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-1
14.5.0106.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-1
14.5.0107.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-1
14.5.0107.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-1
14.5.0107.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-1
14.5.0107.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-1
14.5.0107.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-1
14.5.0107.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-1
14.5.0107.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0107.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-1
14.5.0107.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-1
14.5.0107.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-1
14.5.0107.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-1
14.5.0107.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-1
14.5.0107.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-1
14.5.0107.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-1
14.5.0107.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-1
14.5.0107.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-1
14.5.0108.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-1
14.5.0108.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-1
14.5.0108.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-1
14.5.0108.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-1
14.5.0108.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-1
14.5.0108.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-1
14.5.0108.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-1
14.5.0108.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-1
14.5.0108.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-1
14.5.0108.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-1
14.5.0108.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-1
14.5.0108.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-1
14.5.0108.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-1
14.5.0108.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-1
14.5.0108.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-1
14.5.0108.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-1
14.5.0110.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-1
14.5.0110.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-1
14.5.0110.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-1
14.5.0110.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-1
14.5.0110.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-1
14.5.0110.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-1
14.5.0110.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-1
14.5.0110.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-1
14.5.0110.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-1
14.5.0110.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-1
14.5.0110.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-1
14.5.0110.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-1
14.5.0110.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-1
14.5.0110.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-1
14.5.0110.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-1
14.5.0110.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-1
14.5.0112.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-1
14.5.0112.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-1
14.5.0112.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0112.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-1
14.5.0112.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-1
14.5.0112.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-1
14.5.0112.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-1
14.5.0112.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-1
14.5.0112.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-1
14.5.0112.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-1
14.5.0112.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-1
14.5.0112.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-1
14.5.0112.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-1
14.5.0112.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-1
14.5.0112.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-1
14.5.0112.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-1
14.5.0114.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-1
14.5.0114.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-1
14.5.0114.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-1
14.5.0114.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-1
14.5.0114.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-1
14.5.0114.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-1
14.5.0114.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-1
14.5.0114.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-1
14.5.0114.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-1
14.5.0114.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-1
14.5.0114.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-1
14.5.0114.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-1
14.5.0114.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-1
14.5.0114.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-1
14.5.0114.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-1
14.5.0114.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-1
14.5.0116.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-1
14.5.0116.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-1
14.5.0116.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-1
14.5.0116.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-1
14.5.0116.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-1
14.5.0116.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-1
14.5.0116.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-1
14.5.0116.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-1
14.5.0116.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-1
14.5.0116.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-1
14.5.0116.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-1
14.5.0116.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-1
14.5.0116.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-1
14.5.0116.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-1
14.5.0116.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0116.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-1
14.5.0118.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-1
14.5.0118.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-1
14.5.0118.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-1
14.5.0118.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-1
14.5.0118.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-1
14.5.0118.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-1
14.5.0118.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-1
14.5.0118.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-1
14.5.0118.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-1
14.5.0118.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-1
14.5.0118.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-1
14.5.0118.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-1
14.5.0118.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-1
14.5.0118.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-1
14.5.0118.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-1
14.5.0118.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-1
14.5.0121.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-1
14.5.0121.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-1
14.5.0121.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-1
14.5.0121.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-1
14.5.0121.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-1
14.5.0121.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-1
14.5.0121.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-1
14.5.0121.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-1
14.5.0121.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-1
14.5.0121.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-1
14.5.0121.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-1
14.5.0121.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-1
14.5.0121.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-1
14.5.0121.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-1
14.5.0121.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-1
14.5.0121.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-1
14.5.0123.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-1
14.5.0123.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-1
14.5.0123.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-1
14.5.0123.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-1
14.5.0123.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-1
14.5.0123.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-1
14.5.0123.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-1
14.5.0123.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-1
14.5.0123.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-1
14.5.0123.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-1
14.5.0123.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0123.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-1
14.5.0123.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-1
14.5.0123.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-1
14.5.0123.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-1
14.5.0123.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-1
14.5.0125.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-1
14.5.0125.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-1
14.5.0125.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-1
14.5.0125.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-1
14.5.0125.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-1
14.5.0125.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-1
14.5.0125.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-1
14.5.0125.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-1
14.5.0125.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-1
14.5.0125.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-1
14.5.0125.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-1
14.5.0125.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-1
14.5.0125.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-1
14.5.0125.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-1
14.5.0125.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-1
14.5.0125.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-1
14.5.0127.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-1
14.5.0127.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-1
14.5.0127.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-1
14.5.0127.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-1
14.5.0127.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-1
14.5.0127.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-1
14.5.0127.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-1
14.5.0127.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-1
14.5.0127.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-1
14.5.0127.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-1
14.5.0127.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-1
14.5.0127.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-1
14.5.0127.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-1
14.5.0127.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-1
14.5.0127.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-1
14.5.0127.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-1
14.5.0129.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-1
14.5.0129.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-1
14.5.0129.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-1
14.5.0129.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-1
14.5.0129.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-1
14.5.0129.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-1
14.5.0129.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0129.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-1
14.5.0129.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-1
14.5.0129.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-1
14.5.0129.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-1
14.5.0129.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-1
14.5.0129.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-1
14.5.0129.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-1
14.5.0129.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-1
14.5.0129.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-1
14.5.0131.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-1
14.5.0131.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-1
14.5.0131.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-1
14.5.0131.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-1
14.5.0131.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-1
14.5.0131.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-1
14.5.0131.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-1
14.5.0131.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-1
14.5.0131.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-1
14.5.0131.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-1
14.5.0131.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-1
14.5.0131.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-1
14.5.0131.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-1
14.5.0131.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-1
14.5.0131.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-1
14.5.0131.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-1
14.5.0135.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-1
14.5.0135.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-1
14.5.0135.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-1
14.5.0135.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-1
14.5.0135.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-1
14.5.0135.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-1
14.5.0135.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-1
14.5.0135.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-1
14.5.0135.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-1
14.5.0135.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-1
14.5.0135.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-1
14.5.0135.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-1
14.5.0135.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-1
14.5.0135.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-1
14.5.0135.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-1
14.5.0135.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-1
14.5.0140.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-1
14.5.0140.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-1
14.5.0140.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0140.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-1
14.5.0140.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-1
14.5.0140.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-1
14.5.0140.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-1
14.5.0140.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-1
14.5.0140.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-1
14.5.0140.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-1
14.5.0140.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-1
14.5.0140.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-1
14.5.0140.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-1
14.5.0140.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-1
14.5.0140.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-1
14.5.0140.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-1
14.5.0145.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-1
14.5.0145.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-1
14.5.0145.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-1
14.5.0145.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-1
14.5.0145.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-1
14.5.0145.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-1
14.5.0145.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-1
14.5.0145.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-1
14.5.0145.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-1
14.5.0145.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-1
14.5.0145.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-1
14.5.0145.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-1
14.5.0145.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-1
14.5.0145.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-1
14.5.0145.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-1
14.5.0145.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-1
14.5.0150.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-1
14.5.0150.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-1
14.5.0150.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-1
14.5.0150.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-1
14.5.0150.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-1
14.5.0150.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-1
14.5.0150.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-1
14.5.0150.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-1
14.5.0150.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-1
14.5.0150.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-1
14.5.0150.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-1
14.5.0150.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-1
14.5.0150.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-1
14.5.0150.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-1
14.5.0150.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0150.200E	Broca Cortante Ø 5,00 x 200,0 ER-1
14.5.0155.050E	Broca Cortante Ø 5,50 x 50,0 ER-1
14.5.0155.060E	Broca Cortante Ø 5,50 x 60,0 ER-1
14.5.0155.070E	Broca Cortante Ø 5,50 x 70,0 ER-1
14.5.0155.080E	Broca Cortante Ø 5,50 x 80,0 ER-1
14.5.0155.090E	Broca Cortante Ø 5,50 x 90,0 ER-1
14.5.0155.100E	Broca Cortante Ø 5,50 x 100,0 ER-1
14.5.0155.110E	Broca Cortante Ø 5,50 x 110,0 ER-1
14.5.0155.120E	Broca Cortante Ø 5,50 x 120,0 ER-1
14.5.0155.130E	Broca Cortante Ø 5,50 x 130,0 ER-1
14.5.0155.140E	Broca Cortante Ø 5,50 x 140,0 ER-1
14.5.0155.150E	Broca Cortante Ø 5,50 x 150,0 ER-1
14.5.0155.160E	Broca Cortante Ø 5,50 x 160,0 ER-1
14.5.0155.170E	Broca Cortante Ø 5,50 x 170,0 ER-1
14.5.0155.180E	Broca Cortante Ø 5,50 x 180,0 ER-1
14.5.0155.190E	Broca Cortante Ø 5,50 x 190,0 ER-1
14.5.0155.200E	Broca Cortante Ø 5,50 x 200,0 ER-1
14.5.0160.050E	Broca Cortante Ø 6,00 x 50,0 ER-1
14.5.0160.060E	Broca Cortante Ø 6,00 x 60,0 ER-1
14.5.0160.070E	Broca Cortante Ø 6,00 x 70,0 ER-1
14.5.0160.080E	Broca Cortante Ø 6,00 x 80,0 ER-1
14.5.0160.090E	Broca Cortante Ø 6,00 x 90,0 ER-1
14.5.0160.100E	Broca Cortante Ø 6,00 x 100,0 ER-1
14.5.0160.110E	Broca Cortante Ø 6,00 x 110,0 ER-1
14.5.0160.120E	Broca Cortante Ø 6,00 x 120,0 ER-1
14.5.0160.130E	Broca Cortante Ø 6,00 x 130,0 ER-1
14.5.0160.140E	Broca Cortante Ø 6,00 x 140,0 ER-1
14.5.0160.150E	Broca Cortante Ø 6,00 x 150,0 ER-1
14.5.0160.160E	Broca Cortante Ø 6,00 x 160,0 ER-1
14.5.0160.170E	Broca Cortante Ø 6,00 x 170,0 ER-1
14.5.0160.180E	Broca Cortante Ø 6,00 x 180,0 ER-1
14.5.0160.190E	Broca Cortante Ø 6,00 x 190,0 ER-1
14.5.0160.200E	Broca Cortante Ø 6,00 x 200,0 ER-1
14.5.0170.050E	Broca Cortante Ø 7,00 x 50,0 ER-1
14.5.0170.060E	Broca Cortante Ø 7,00 x 60,0 ER-1
14.5.0170.070E	Broca Cortante Ø 7,00 x 70,0 ER-1
14.5.0170.080E	Broca Cortante Ø 7,00 x 80,0 ER-1
14.5.0170.090E	Broca Cortante Ø 7,00 x 90,0 ER-1
14.5.0170.100E	Broca Cortante Ø 7,00 x 100,0 ER-1
14.5.0170.110E	Broca Cortante Ø 7,00 x 110,0 ER-1
14.5.0170.120E	Broca Cortante Ø 7,00 x 120,0 ER-1
14.5.0170.130E	Broca Cortante Ø 7,00 x 130,0 ER-1
14.5.0170.140E	Broca Cortante Ø 7,00 x 140,0 ER-1
14.5.0170.150E	Broca Cortante Ø 7,00 x 150,0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0170.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-1
14.5.0170.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-1
14.5.0170.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-1
14.5.0170.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-1
14.5.0170.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-1
14.5.0206.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-2
14.5.0206.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-2
14.5.0206.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-2
14.5.0206.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-2
14.5.0206.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-2
14.5.0206.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-2
14.5.0206.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-2
14.5.0206.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-2
14.5.0206.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-2
14.5.0206.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-2
14.5.0206.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-2
14.5.0206.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-2
14.5.0206.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-2
14.5.0206.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-2
14.5.0206.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-2
14.5.0206.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-2
14.5.0207.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-2
14.5.0207.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-2
14.5.0207.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-2
14.5.0207.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-2
14.5.0207.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-2
14.5.0207.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-2
14.5.0207.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-2
14.5.0207.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-2
14.5.0207.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-2
14.5.0207.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-2
14.5.0207.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-2
14.5.0207.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-2
14.5.0207.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-2
14.5.0207.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-2
14.5.0207.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-2
14.5.0207.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-2
14.5.0208.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-2
14.5.0208.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-2
14.5.0208.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-2
14.5.0208.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-2
14.5.0208.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-2
14.5.0208.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-2
14.5.0208.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0208.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-2
14.5.0208.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-2
14.5.0208.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-2
14.5.0208.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-2
14.5.0208.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-2
14.5.0208.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-2
14.5.0208.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-2
14.5.0208.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-2
14.5.0208.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-2
14.5.0210.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-2
14.5.0210.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-2
14.5.0210.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-2
14.5.0210.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-2
14.5.0210.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-2
14.5.0210.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-2
14.5.0210.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-2
14.5.0210.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-2
14.5.0210.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-2
14.5.0210.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-2
14.5.0210.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-2
14.5.0210.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-2
14.5.0210.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-2
14.5.0210.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-2
14.5.0210.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-2
14.5.0210.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-2
14.5.0212.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-2
14.5.0212.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-2
14.5.0212.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-2
14.5.0212.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-2
14.5.0212.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-2
14.5.0212.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-2
14.5.0212.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-2
14.5.0212.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-2
14.5.0212.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-2
14.5.0212.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-2
14.5.0212.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-2
14.5.0212.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-2
14.5.0212.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-2
14.5.0212.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-2
14.5.0212.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-2
14.5.0212.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-2
14.5.0214.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-2
14.5.0214.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-2
14.5.0214.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0214.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-2
14.5.0214.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-2
14.5.0214.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-2
14.5.0214.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-2
14.5.0214.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-2
14.5.0214.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-2
14.5.0214.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-2
14.5.0214.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-2
14.5.0214.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-2
14.5.0214.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-2
14.5.0214.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-2
14.5.0214.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-2
14.5.0214.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-2
14.5.0216.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-2
14.5.0216.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-2
14.5.0216.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-2
14.5.0216.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-2
14.5.0216.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-2
14.5.0216.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-2
14.5.0216.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-2
14.5.0216.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-2
14.5.0216.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-2
14.5.0216.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-2
14.5.0216.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-2
14.5.0216.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-2
14.5.0216.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-2
14.5.0216.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-2
14.5.0216.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-2
14.5.0216.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-2
14.5.0218.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-2
14.5.0218.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-2
14.5.0218.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-2
14.5.0218.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-2
14.5.0218.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-2
14.5.0218.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-2
14.5.0218.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-2
14.5.0218.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-2
14.5.0218.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-2
14.5.0218.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-2
14.5.0218.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-2
14.5.0218.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-2
14.5.0218.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-2
14.5.0218.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-2
14.5.0218.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0218.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-2
14.5.0221.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-2
14.5.0221.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-2
14.5.0221.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-2
14.5.0221.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-2
14.5.0221.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-2
14.5.0221.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-2
14.5.0221.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-2
14.5.0221.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-2
14.5.0221.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-2
14.5.0221.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-2
14.5.0221.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-2
14.5.0221.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-2
14.5.0221.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-2
14.5.0221.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-2
14.5.0221.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-2
14.5.0221.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-2
14.5.0223.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-2
14.5.0223.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-2
14.5.0223.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-2
14.5.0223.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-2
14.5.0223.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-2
14.5.0223.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-2
14.5.0223.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-2
14.5.0223.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-2
14.5.0223.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-2
14.5.0223.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-2
14.5.0223.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-2
14.5.0223.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-2
14.5.0223.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-2
14.5.0223.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-2
14.5.0223.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-2
14.5.0223.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-2
14.5.0225.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-2
14.5.0225.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-2
14.5.0225.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-2
14.5.0225.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-2
14.5.0225.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-2
14.5.0225.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-2
14.5.0225.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-2
14.5.0225.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-2
14.5.0225.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-2
14.5.0225.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-2
14.5.0225.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0225.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-2
14.5.0225.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-2
14.5.0225.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-2
14.5.0225.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-2
14.5.0225.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-2
14.5.0227.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-2
14.5.0227.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-2
14.5.0227.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-2
14.5.0227.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-2
14.5.0227.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-2
14.5.0227.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-2
14.5.0227.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-2
14.5.0227.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-2
14.5.0227.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-2
14.5.0227.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-2
14.5.0227.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-2
14.5.0227.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-2
14.5.0227.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-2
14.5.0227.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-2
14.5.0227.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-2
14.5.0227.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-2
14.5.0229.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-2
14.5.0229.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-2
14.5.0229.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-2
14.5.0229.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-2
14.5.0229.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-2
14.5.0229.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-2
14.5.0229.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-2
14.5.0229.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-2
14.5.0229.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-2
14.5.0229.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-2
14.5.0229.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-2
14.5.0229.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-2
14.5.0229.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-2
14.5.0229.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-2
14.5.0229.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-2
14.5.0229.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-2
14.5.0231.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-2
14.5.0231.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-2
14.5.0231.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-2
14.5.0231.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-2
14.5.0231.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-2
14.5.0231.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-2
14.5.0231.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0231.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-2
14.5.0231.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-2
14.5.0231.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-2
14.5.0231.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-2
14.5.0231.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-2
14.5.0231.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-2
14.5.0231.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-2
14.5.0231.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-2
14.5.0231.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-2
14.5.0235.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-2
14.5.0235.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-2
14.5.0235.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-2
14.5.0235.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-2
14.5.0235.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-2
14.5.0235.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-2
14.5.0235.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-2
14.5.0235.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-2
14.5.0235.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-2
14.5.0235.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-2
14.5.0235.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-2
14.5.0235.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-2
14.5.0235.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-2
14.5.0235.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-2
14.5.0235.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-2
14.5.0235.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-2
14.5.0240.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-2
14.5.0240.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-2
14.5.0240.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-2
14.5.0240.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-2
14.5.0240.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-2
14.5.0240.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-2
14.5.0240.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-2
14.5.0240.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-2
14.5.0240.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-2
14.5.0240.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-2
14.5.0240.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-2
14.5.0240.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-2
14.5.0240.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-2
14.5.0240.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-2
14.5.0240.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-2
14.5.0240.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-2
14.5.0245.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-2
14.5.0245.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-2
14.5.0245.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0245.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-2
14.5.0245.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-2
14.5.0245.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-2
14.5.0245.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-2
14.5.0245.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-2
14.5.0245.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-2
14.5.0245.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-2
14.5.0245.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-2
14.5.0245.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-2
14.5.0245.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-2
14.5.0245.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-2
14.5.0245.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-2
14.5.0245.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-2
14.5.0250.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-2
14.5.0250.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-2
14.5.0250.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-2
14.5.0250.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-2
14.5.0250.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-2
14.5.0250.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-2
14.5.0250.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-2
14.5.0250.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-2
14.5.0250.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-2
14.5.0250.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-2
14.5.0250.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-2
14.5.0250.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-2
14.5.0250.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-2
14.5.0250.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-2
14.5.0250.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-2
14.5.0250.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-2
14.5.0255.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-2
14.5.0255.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-2
14.5.0255.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-2
14.5.0255.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-2
14.5.0255.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-2
14.5.0255.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-2
14.5.0255.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-2
14.5.0255.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-2
14.5.0255.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-2
14.5.0255.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-2
14.5.0255.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-2
14.5.0255.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-2
14.5.0255.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-2
14.5.0255.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-2
14.5.0255.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0255.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-2
14.5.0260.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-2
14.5.0260.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-2
14.5.0260.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-2
14.5.0260.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-2
14.5.0260.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-2
14.5.0260.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-2
14.5.0260.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-2
14.5.0260.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-2
14.5.0260.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-2
14.5.0260.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-2
14.5.0260.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-2
14.5.0260.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-2
14.5.0260.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-2
14.5.0260.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-2
14.5.0260.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-2
14.5.0260.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-2
14.5.0270.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-2
14.5.0270.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-2
14.5.0270.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-2
14.5.0270.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-2
14.5.0270.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-2
14.5.0270.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-2
14.5.0270.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-2
14.5.0270.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-2
14.5.0270.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-2
14.5.0270.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-2
14.5.0270.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-2
14.5.0270.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-2
14.5.0270.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-2
14.5.0270.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-2
14.5.0270.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-2
14.5.0270.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-2
14.5.0306.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-3
14.5.0306.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-3
14.5.0306.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-3
14.5.0306.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-3
14.5.0306.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-3
14.5.0306.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-3
14.5.0306.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-3
14.5.0306.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-3
14.5.0306.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-3
14.5.0306.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-3
14.5.0306.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0306.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-3
14.5.0306.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-3
14.5.0306.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-3
14.5.0306.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-3
14.5.0306.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-3
14.5.0307.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-3
14.5.0307.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-3
14.5.0307.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-3
14.5.0307.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-3
14.5.0307.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-3
14.5.0307.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-3
14.5.0307.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-3
14.5.0307.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-3
14.5.0307.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-3
14.5.0307.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-3
14.5.0307.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-3
14.5.0307.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-3
14.5.0307.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-3
14.5.0307.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-3
14.5.0307.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-3
14.5.0307.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-3
14.5.0308.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-3
14.5.0308.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-3
14.5.0308.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-3
14.5.0308.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-3
14.5.0308.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-3
14.5.0308.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-3
14.5.0308.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-3
14.5.0308.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-3
14.5.0308.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-3
14.5.0308.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-3
14.5.0308.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-3
14.5.0308.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-3
14.5.0308.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-3
14.5.0308.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-3
14.5.0308.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-3
14.5.0308.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-3
14.5.0310.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-3
14.5.0310.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-3
14.5.0310.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-3
14.5.0310.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-3
14.5.0310.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-3
14.5.0310.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-3
14.5.0310.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0310.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-3
14.5.0310.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-3
14.5.0310.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-3
14.5.0310.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-3
14.5.0310.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-3
14.5.0310.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-3
14.5.0310.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-3
14.5.0310.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-3
14.5.0310.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-3
14.5.0312.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-3
14.5.0312.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-3
14.5.0312.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-3
14.5.0312.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-3
14.5.0312.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-3
14.5.0312.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-3
14.5.0312.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-3
14.5.0312.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-3
14.5.0312.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-3
14.5.0312.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-3
14.5.0312.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-3
14.5.0312.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-3
14.5.0312.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-3
14.5.0312.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-3
14.5.0312.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-3
14.5.0312.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-3
14.5.0314.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-3
14.5.0314.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-3
14.5.0314.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-3
14.5.0314.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-3
14.5.0314.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-3
14.5.0314.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-3
14.5.0314.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-3
14.5.0314.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-3
14.5.0314.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-3
14.5.0314.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-3
14.5.0314.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-3
14.5.0314.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-3
14.5.0314.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-3
14.5.0314.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-3
14.5.0314.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-3
14.5.0314.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-3
14.5.0316.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-3
14.5.0316.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-3
14.5.0316.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0316.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-3
14.5.0316.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-3
14.5.0316.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-3
14.5.0316.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-3
14.5.0316.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-3
14.5.0316.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-3
14.5.0316.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-3
14.5.0316.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-3
14.5.0316.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-3
14.5.0316.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-3
14.5.0316.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-3
14.5.0316.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-3
14.5.0316.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-3
14.5.0318.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-3
14.5.0318.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-3
14.5.0318.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-3
14.5.0318.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-3
14.5.0318.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-3
14.5.0318.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-3
14.5.0318.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-3
14.5.0318.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-3
14.5.0318.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-3
14.5.0318.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-3
14.5.0318.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-3
14.5.0318.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-3
14.5.0318.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-3
14.5.0318.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-3
14.5.0318.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-3
14.5.0318.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-3
14.5.0321.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-3
14.5.0321.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-3
14.5.0321.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-3
14.5.0321.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-3
14.5.0321.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-3
14.5.0321.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-3
14.5.0321.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-3
14.5.0321.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-3
14.5.0321.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-3
14.5.0321.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-3
14.5.0321.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-3
14.5.0321.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-3
14.5.0321.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-3
14.5.0321.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-3
14.5.0321.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0321.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-3
14.5.0323.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-3
14.5.0323.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-3
14.5.0323.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-3
14.5.0323.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-3
14.5.0323.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-3
14.5.0323.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-3
14.5.0323.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-3
14.5.0323.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-3
14.5.0323.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-3
14.5.0323.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-3
14.5.0323.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-3
14.5.0323.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-3
14.5.0323.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-3
14.5.0323.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-3
14.5.0323.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-3
14.5.0323.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-3
14.5.0325.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-3
14.5.0325.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-3
14.5.0325.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-3
14.5.0325.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-3
14.5.0325.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-3
14.5.0325.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-3
14.5.0325.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-3
14.5.0325.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-3
14.5.0325.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-3
14.5.0325.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-3
14.5.0325.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-3
14.5.0325.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-3
14.5.0325.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-3
14.5.0325.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-3
14.5.0325.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-3
14.5.0325.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-3
14.5.0327.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-3
14.5.0327.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-3
14.5.0327.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-3
14.5.0327.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-3
14.5.0327.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-3
14.5.0327.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-3
14.5.0327.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-3
14.5.0327.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-3
14.5.0327.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-3
14.5.0327.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-3
14.5.0327.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0327.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-3
14.5.0327.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-3
14.5.0327.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-3
14.5.0327.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-3
14.5.0327.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-3
14.5.0329.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-3
14.5.0329.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-3
14.5.0329.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-3
14.5.0329.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-3
14.5.0329.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-3
14.5.0329.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-3
14.5.0329.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-3
14.5.0329.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-3
14.5.0329.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-3
14.5.0329.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-3
14.5.0329.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-3
14.5.0329.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-3
14.5.0329.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-3
14.5.0329.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-3
14.5.0329.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-3
14.5.0329.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-3
14.5.0331.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-3
14.5.0331.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-3
14.5.0331.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-3
14.5.0331.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-3
14.5.0331.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-3
14.5.0331.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-3
14.5.0331.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-3
14.5.0331.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-3
14.5.0331.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-3
14.5.0331.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-3
14.5.0331.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-3
14.5.0331.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-3
14.5.0331.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-3
14.5.0331.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-3
14.5.0331.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-3
14.5.0331.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-3
14.5.0335.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-3
14.5.0335.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-3
14.5.0335.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-3
14.5.0335.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-3
14.5.0335.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-3
14.5.0335.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-3
14.5.0335.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0335.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-3
14.5.0335.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-3
14.5.0335.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-3
14.5.0335.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-3
14.5.0335.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-3
14.5.0335.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-3
14.5.0335.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-3
14.5.0335.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-3
14.5.0335.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-3
14.5.0340.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-3
14.5.0340.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-3
14.5.0340.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-3
14.5.0340.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-3
14.5.0340.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-3
14.5.0340.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-3
14.5.0340.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-3
14.5.0340.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-3
14.5.0340.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-3
14.5.0340.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-3
14.5.0340.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-3
14.5.0340.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-3
14.5.0340.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-3
14.5.0340.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-3
14.5.0340.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-3
14.5.0340.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-3
14.5.0345.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-3
14.5.0345.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-3
14.5.0345.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-3
14.5.0345.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-3
14.5.0345.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-3
14.5.0345.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-3
14.5.0345.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-3
14.5.0345.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-3
14.5.0345.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-3
14.5.0345.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-3
14.5.0345.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-3
14.5.0345.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-3
14.5.0345.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-3
14.5.0345.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-3
14.5.0345.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-3
14.5.0345.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-3
14.5.0350.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-3
14.5.0350.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-3
14.5.0350.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0350.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-3
14.5.0350.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-3
14.5.0350.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-3
14.5.0350.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-3
14.5.0350.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-3
14.5.0350.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-3
14.5.0350.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-3
14.5.0350.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-3
14.5.0350.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-3
14.5.0350.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-3
14.5.0350.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-3
14.5.0350.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-3
14.5.0350.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-3
14.5.0355.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-3
14.5.0355.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-3
14.5.0355.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-3
14.5.0355.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-3
14.5.0355.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-3
14.5.0355.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-3
14.5.0355.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-3
14.5.0355.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-3
14.5.0355.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-3
14.5.0355.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-3
14.5.0355.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-3
14.5.0355.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-3
14.5.0355.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-3
14.5.0355.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-3
14.5.0355.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-3
14.5.0355.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-3
14.5.0360.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-3
14.5.0360.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-3
14.5.0360.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-3
14.5.0360.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-3
14.5.0360.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-3
14.5.0360.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-3
14.5.0360.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-3
14.5.0360.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-3
14.5.0360.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-3
14.5.0360.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-3
14.5.0360.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-3
14.5.0360.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-3
14.5.0360.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-3
14.5.0360.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-3
14.5.0360.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.0360.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-3
14.5.0370.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-3
14.5.0370.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-3
14.5.0370.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-3
14.5.0370.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-3
14.5.0370.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-3
14.5.0370.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-3
14.5.0370.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-3
14.5.0370.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-3
14.5.0370.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-3
14.5.0370.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-3
14.5.0370.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-3
14.5.0370.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-3
14.5.0370.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-3
14.5.0370.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-3
14.5.0370.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-3
14.5.0370.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-3
14.5.0406.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-4
14.5.0406.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-4
14.5.0406.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-4
14.5.0406.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-4
14.5.0406.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-4
14.5.0406.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-4
14.5.0406.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-4
14.5.0406.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-4
14.5.0406.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-4
14.5.0406.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-4
14.5.0406.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-4
14.5.0406.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-4
14.5.0406.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-4
14.5.0406.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-4
14.5.0406.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-4
14.5.0406.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-4
14.5.0407.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-4
14.5.0407.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-4
14.5.0407.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-4
14.5.0407.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-4
14.5.0407.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-4
14.5.0407.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-4
14.5.0407.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-4
14.5.0407.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-4
14.5.0407.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-4
14.5.0407.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-4
14.5.0407.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0407.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-4
14.5.0407.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-4
14.5.0407.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-4
14.5.0407.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-4
14.5.0407.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-4
14.5.0408.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-4
14.5.0408.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-4
14.5.0408.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-4
14.5.0408.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-4
14.5.0408.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-4
14.5.0408.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-4
14.5.0408.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-4
14.5.0408.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-4
14.5.0408.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-4
14.5.0408.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-4
14.5.0408.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-4
14.5.0408.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-4
14.5.0408.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-4
14.5.0408.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-4
14.5.0408.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-4
14.5.0408.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-4
14.5.0410.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-4
14.5.0410.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-4
14.5.0410.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-4
14.5.0410.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-4
14.5.0410.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-4
14.5.0410.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-4
14.5.0410.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-4
14.5.0410.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-4
14.5.0410.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-4
14.5.0410.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-4
14.5.0410.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-4
14.5.0410.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-4
14.5.0410.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-4
14.5.0410.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-4
14.5.0410.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-4
14.5.0410.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-4
14.5.0412.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-4
14.5.0412.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-4
14.5.0412.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-4
14.5.0412.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-4
14.5.0412.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-4
14.5.0412.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-4
14.5.0412.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0412.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-4
14.5.0412.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-4
14.5.0412.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-4
14.5.0412.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-4
14.5.0412.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-4
14.5.0412.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-4
14.5.0412.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-4
14.5.0412.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-4
14.5.0412.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-4
14.5.0414.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-4
14.5.0414.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-4
14.5.0414.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-4
14.5.0414.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-4
14.5.0414.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-4
14.5.0414.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-4
14.5.0414.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-4
14.5.0414.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-4
14.5.0414.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-4
14.5.0414.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-4
14.5.0414.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-4
14.5.0414.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-4
14.5.0414.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-4
14.5.0414.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-4
14.5.0414.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-4
14.5.0414.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-4
14.5.0416.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-4
14.5.0416.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-4
14.5.0416.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-4
14.5.0416.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-4
14.5.0416.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-4
14.5.0416.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-4
14.5.0416.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-4
14.5.0416.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-4
14.5.0416.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-4
14.5.0416.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-4
14.5.0416.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-4
14.5.0416.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-4
14.5.0416.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-4
14.5.0416.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-4
14.5.0416.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-4
14.5.0416.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-4
14.5.0418.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-4
14.5.0418.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-4
14.5.0418.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.0418.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-4
14.5.0418.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-4
14.5.0418.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-4
14.5.0418.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-4
14.5.0418.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-4
14.5.0418.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-4
14.5.0418.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-4
14.5.0418.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-4
14.5.0418.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-4
14.5.0418.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-4
14.5.0418.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-4
14.5.0418.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-4
14.5.0418.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-4
14.5.0421.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-4
14.5.0421.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-4
14.5.0421.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-4
14.5.0421.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-4
14.5.0421.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-4
14.5.0421.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-4
14.5.0421.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-4
14.5.0421.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-4
14.5.0421.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-4
14.5.0421.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-4
14.5.0421.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-4
14.5.0421.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-4
14.5.0421.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-4
14.5.0421.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-4
14.5.0421.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-4
14.5.0421.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-4
14.5.0423.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-4
14.5.0423.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-4
14.5.0423.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-4
14.5.0423.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-4
14.5.0423.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-4
14.5.0423.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-4
14.5.0423.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-4
14.5.0423.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-4
14.5.0423.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-4
14.5.0423.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-4
14.5.0423.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-4
14.5.0423.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-4
14.5.0423.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-4
14.5.0423.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-4
14.5.0423.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0423.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-4
14.5.0425.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-4
14.5.0425.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-4
14.5.0425.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-4
14.5.0425.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-4
14.5.0425.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-4
14.5.0425.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-4
14.5.0425.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-4
14.5.0425.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-4
14.5.0425.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-4
14.5.0425.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-4
14.5.0425.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-4
14.5.0425.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-4
14.5.0425.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-4
14.5.0425.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-4
14.5.0425.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-4
14.5.0425.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-4
14.5.0427.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-4
14.5.0427.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-4
14.5.0427.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-4
14.5.0427.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-4
14.5.0427.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-4
14.5.0427.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-4
14.5.0427.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-4
14.5.0427.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-4
14.5.0427.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-4
14.5.0427.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-4
14.5.0427.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-4
14.5.0427.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-4
14.5.0427.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-4
14.5.0427.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-4
14.5.0427.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-4
14.5.0427.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-4
14.5.0429.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-4
14.5.0429.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-4
14.5.0429.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-4
14.5.0429.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-4
14.5.0429.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-4
14.5.0429.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-4
14.5.0429.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-4
14.5.0429.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-4
14.5.0429.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-4
14.5.0429.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-4
14.5.0429.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0429.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-4
14.5.0429.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-4
14.5.0429.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-4
14.5.0429.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-4
14.5.0429.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-4
14.5.0431.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-4
14.5.0431.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-4
14.5.0431.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-4
14.5.0431.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-4
14.5.0431.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-4
14.5.0431.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-4
14.5.0431.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-4
14.5.0431.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-4
14.5.0431.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-4
14.5.0431.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-4
14.5.0431.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-4
14.5.0431.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-4
14.5.0431.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-4
14.5.0431.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-4
14.5.0431.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-4
14.5.0431.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-4
14.5.0435.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-4
14.5.0435.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-4
14.5.0435.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-4
14.5.0435.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-4
14.5.0435.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-4
14.5.0435.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-4
14.5.0435.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-4
14.5.0435.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-4
14.5.0435.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-4
14.5.0435.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-4
14.5.0435.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-4
14.5.0435.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-4
14.5.0435.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-4
14.5.0435.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-4
14.5.0435.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-4
14.5.0435.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-4
14.5.0440.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-4
14.5.0440.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-4
14.5.0440.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-4
14.5.0440.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-4
14.5.0440.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-4
14.5.0440.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-4
14.5.0440.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0440.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-4
14.5.0440.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-4
14.5.0440.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-4
14.5.0440.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-4
14.5.0440.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-4
14.5.0440.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-4
14.5.0440.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-4
14.5.0440.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-4
14.5.0440.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-4
14.5.0445.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-4
14.5.0445.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-4
14.5.0445.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-4
14.5.0445.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-4
14.5.0445.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-4
14.5.0445.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-4
14.5.0445.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-4
14.5.0445.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-4
14.5.0445.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-4
14.5.0445.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-4
14.5.0445.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-4
14.5.0445.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-4
14.5.0445.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-4
14.5.0445.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-4
14.5.0445.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-4
14.5.0445.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-4
14.5.0450.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-4
14.5.0450.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-4
14.5.0450.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-4
14.5.0450.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-4
14.5.0450.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-4
14.5.0450.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-4
14.5.0450.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-4
14.5.0450.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-4
14.5.0450.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-4
14.5.0450.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-4
14.5.0450.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-4
14.5.0450.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-4
14.5.0450.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-4
14.5.0450.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-4
14.5.0450.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-4
14.5.0450.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-4
14.5.0455.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-4
14.5.0455.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-4
14.5.0455.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0455.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-4
14.5.0455.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-4
14.5.0455.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-4
14.5.0455.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-4
14.5.0455.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-4
14.5.0455.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-4
14.5.0455.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-4
14.5.0455.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-4
14.5.0455.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-4
14.5.0455.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-4
14.5.0455.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-4
14.5.0455.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-4
14.5.0455.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-4
14.5.0460.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-4
14.5.0460.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-4
14.5.0460.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-4
14.5.0460.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-4
14.5.0460.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-4
14.5.0460.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-4
14.5.0460.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-4
14.5.0460.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-4
14.5.0460.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-4
14.5.0460.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-4
14.5.0460.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-4
14.5.0460.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-4
14.5.0460.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-4
14.5.0460.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-4
14.5.0460.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-4
14.5.0460.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-4
14.5.0470.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-4
14.5.0470.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-4
14.5.0470.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-4
14.5.0470.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-4
14.5.0470.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-4
14.5.0470.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-4
14.5.0470.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-4
14.5.0470.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-4
14.5.0470.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-4
14.5.0470.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-4
14.5.0470.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-4
14.5.0470.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-4
14.5.0470.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-4
14.5.0470.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-4
14.5.0470.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0470.200E	Broca Cortante Ø 7,00 x 200,0 ER-4
14.5.0506.050E	Broca Cortante Ø 0,60 x 50,0 ER-5
14.5.0506.060E	Broca Cortante Ø 0,60 x 60,0 ER-5
14.5.0506.070E	Broca Cortante Ø 0,60 x 70,0 ER-5
14.5.0506.080E	Broca Cortante Ø 0,60 x 80,0 ER-5
14.5.0506.090E	Broca Cortante Ø 0,60 x 90,0 ER-5
14.5.0506.100E	Broca Cortante Ø 0,60 x 100,0 ER-5
14.5.0506.110E	Broca Cortante Ø 0,60 x 110,0 ER-5
14.5.0506.120E	Broca Cortante Ø 0,60 x 120,0 ER-5
14.5.0506.130E	Broca Cortante Ø 0,60 x 130,0 ER-5
14.5.0506.140E	Broca Cortante Ø 0,60 x 140,0 ER-5
14.5.0506.150E	Broca Cortante Ø 0,60 x 150,0 ER-5
14.5.0506.160E	Broca Cortante Ø 0,60 x 160,0 ER-5
14.5.0506.170E	Broca Cortante Ø 0,60 x 170,0 ER-5
14.5.0506.180E	Broca Cortante Ø 0,60 x 180,0 ER-5
14.5.0506.190E	Broca Cortante Ø 0,60 x 190,0 ER-5
14.5.0506.200E	Broca Cortante Ø 0,60 x 200,0 ER-5
14.5.0507.050E	Broca Cortante Ø 0,70 x 50,0 ER-5
14.5.0507.060E	Broca Cortante Ø 0,70 x 60,0 ER-5
14.5.0507.070E	Broca Cortante Ø 0,70 x 70,0 ER-5
14.5.0507.080E	Broca Cortante Ø 0,70 x 80,0 ER-5
14.5.0507.090E	Broca Cortante Ø 0,70 x 90,0 ER-5
14.5.0507.100E	Broca Cortante Ø 0,70 x 100,0 ER-5
14.5.0507.110E	Broca Cortante Ø 0,70 x 110,0 ER-5
14.5.0507.120E	Broca Cortante Ø 0,70 x 120,0 ER-5
14.5.0507.130E	Broca Cortante Ø 0,70 x 130,0 ER-5
14.5.0507.140E	Broca Cortante Ø 0,70 x 140,0 ER-5
14.5.0507.150E	Broca Cortante Ø 0,70 x 150,0 ER-5
14.5.0507.160E	Broca Cortante Ø 0,70 x 160,0 ER-5
14.5.0507.170E	Broca Cortante Ø 0,70 x 170,0 ER-5
14.5.0507.180E	Broca Cortante Ø 0,70 x 180,0 ER-5
14.5.0507.190E	Broca Cortante Ø 0,70 x 190,0 ER-5
14.5.0507.200E	Broca Cortante Ø 0,70 x 200,0 ER-5
14.5.0508.050E	Broca Cortante Ø 0,80 x 50,0 ER-5
14.5.0508.060E	Broca Cortante Ø 0,80 x 60,0 ER-5
14.5.0508.070E	Broca Cortante Ø 0,80 x 70,0 ER-5
14.5.0508.080E	Broca Cortante Ø 0,80 x 80,0 ER-5
14.5.0508.090E	Broca Cortante Ø 0,80 x 90,0 ER-5
14.5.0508.100E	Broca Cortante Ø 0,80 x 100,0 ER-5
14.5.0508.110E	Broca Cortante Ø 0,80 x 110,0 ER-5
14.5.0508.120E	Broca Cortante Ø 0,80 x 120,0 ER-5
14.5.0508.130E	Broca Cortante Ø 0,80 x 130,0 ER-5
14.5.0508.140E	Broca Cortante Ø 0,80 x 140,0 ER-5
14.5.0508.150E	Broca Cortante Ø 0,80 x 150,0 ER-5

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0508.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-5
14.5.0508.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-5
14.5.0508.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-5
14.5.0508.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-5
14.5.0508.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-5
14.5.0510.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-5
14.5.0510.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-5
14.5.0510.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-5
14.5.0510.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-5
14.5.0510.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-5
14.5.0510.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-5
14.5.0510.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-5
14.5.0510.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-5
14.5.0510.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-5
14.5.0510.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-5
14.5.0510.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-5
14.5.0510.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-5
14.5.0510.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-5
14.5.0510.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-5
14.5.0510.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-5
14.5.0510.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-5
14.5.0512.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-5
14.5.0512.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-5
14.5.0512.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-5
14.5.0512.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-5
14.5.0512.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-5
14.5.0512.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-5
14.5.0512.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-5
14.5.0512.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-5
14.5.0512.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-5
14.5.0512.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-5
14.5.0512.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-5
14.5.0512.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-5
14.5.0512.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-5
14.5.0512.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-5
14.5.0512.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-5
14.5.0512.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-5
14.5.0514.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-5
14.5.0514.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-5
14.5.0514.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-5
14.5.0514.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-5
14.5.0514.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-5
14.5.0514.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-5
14.5.0514.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-5

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0514.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-5
14.5.0514.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-5
14.5.0514.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-5
14.5.0514.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-5
14.5.0514.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-5
14.5.0514.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-5
14.5.0514.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-5
14.5.0514.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-5
14.5.0514.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-5
14.5.0516.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-5
14.5.0516.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-5
14.5.0516.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-5
14.5.0516.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-5
14.5.0516.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-5
14.5.0516.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-5
14.5.0516.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-5
14.5.0516.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-5
14.5.0516.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-5
14.5.0516.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-5
14.5.0516.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-5
14.5.0516.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-5
14.5.0516.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-5
14.5.0516.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-5
14.5.0516.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-5
14.5.0516.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-5
14.5.0518.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-5
14.5.0518.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-5
14.5.0518.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-5
14.5.0518.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-5
14.5.0518.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-5
14.5.0518.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-5
14.5.0518.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-5
14.5.0518.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-5
14.5.0518.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-5
14.5.0518.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-5
14.5.0518.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-5
14.5.0518.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-5
14.5.0518.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-5
14.5.0518.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-5
14.5.0518.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-5
14.5.0518.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-5
14.5.0521.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-5
14.5.0521.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-5
14.5.0521.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-5

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.0521.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-5
14.5.0521.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-5
14.5.0521.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-5
14.5.0521.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-5
14.5.0521.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-5
14.5.0521.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-5
14.5.0521.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-5
14.5.0521.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-5
14.5.0521.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-5
14.5.0521.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-5
14.5.0521.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-5
14.5.0521.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-5
14.5.0521.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-5
14.5.0523.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-5
14.5.0523.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-5
14.5.0523.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-5
14.5.0523.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-5
14.5.0523.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-5
14.5.0523.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-5
14.5.0523.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-5
14.5.0523.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-5
14.5.0523.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-5
14.5.0523.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-5
14.5.0523.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-5
14.5.0523.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-5
14.5.0523.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-5
14.5.0523.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-5
14.5.0523.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-5
14.5.0523.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-5
14.5.0525.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-5
14.5.0525.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-5
14.5.0525.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-5
14.5.0525.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-5
14.5.0525.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-5
14.5.0525.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-5
14.5.0525.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-5
14.5.0525.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-5
14.5.0525.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-5
14.5.0525.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-5
14.5.0525.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-5
14.5.0525.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-5
14.5.0525.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-5
14.5.0525.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-5
14.5.0525.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-5

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0525.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-5
14.5.0527.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-5
14.5.0527.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-5
14.5.0527.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-5
14.5.0527.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-5
14.5.0527.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-5
14.5.0527.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-5
14.5.0527.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-5
14.5.0527.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-5
14.5.0527.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-5
14.5.0527.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-5
14.5.0527.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-5
14.5.0527.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-5
14.5.0527.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-5
14.5.0527.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-5
14.5.0527.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-5
14.5.0527.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-5
14.5.0529.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-5
14.5.0529.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-5
14.5.0529.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-5
14.5.0529.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-5
14.5.0529.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-5
14.5.0529.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-5
14.5.0529.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-5
14.5.0529.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-5
14.5.0529.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-5
14.5.0529.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-5
14.5.0529.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-5
14.5.0529.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-5
14.5.0529.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-5
14.5.0529.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-5
14.5.0529.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-5
14.5.0529.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-5
14.5.0531.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-5
14.5.0531.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-5
14.5.0531.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-5
14.5.0531.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-5
14.5.0531.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-5
14.5.0531.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-5
14.5.0531.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-5
14.5.0531.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-5
14.5.0531.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-5
14.5.0531.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-5
14.5.0531.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-5

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0531.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-5
14.5.0531.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-5
14.5.0531.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-5
14.5.0531.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-5
14.5.0531.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-5
14.5.0535.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-5
14.5.0535.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-5
14.5.0535.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-5
14.5.0535.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-5
14.5.0535.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-5
14.5.0535.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-5
14.5.0535.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-5
14.5.0535.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-5
14.5.0535.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-5
14.5.0535.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-5
14.5.0535.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-5
14.5.0535.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-5
14.5.0535.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-5
14.5.0535.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-5
14.5.0535.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-5
14.5.0535.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-5
14.5.0540.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-5
14.5.0540.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-5
14.5.0540.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-5
14.5.0540.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-5
14.5.0540.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-5
14.5.0540.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-5
14.5.0540.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-5
14.5.0540.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-5
14.5.0540.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-5
14.5.0540.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-5
14.5.0540.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-5
14.5.0540.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-5
14.5.0540.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-5
14.5.0540.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-5
14.5.0540.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-5
14.5.0540.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-5
14.5.0545.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-5
14.5.0545.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-5
14.5.0545.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-5
14.5.0545.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-5
14.5.0545.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-5
14.5.0545.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-5
14.5.0545.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-5

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0545.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-5
14.5.0545.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-5
14.5.0545.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-5
14.5.0545.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-5
14.5.0545.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-5
14.5.0545.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-5
14.5.0545.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-5
14.5.0545.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-5
14.5.0545.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-5
14.5.0550.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-5
14.5.0550.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-5
14.5.0550.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-5
14.5.0550.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-5
14.5.0550.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-5
14.5.0550.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-5
14.5.0550.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-5
14.5.0550.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-5
14.5.0550.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-5
14.5.0550.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-5
14.5.0550.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-5
14.5.0550.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-5
14.5.0550.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-5
14.5.0550.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-5
14.5.0550.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-5
14.5.0550.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-5
14.5.0555.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-5
14.5.0555.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-5
14.5.0555.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-5
14.5.0555.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-5
14.5.0555.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-5
14.5.0555.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-5
14.5.0555.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-5
14.5.0555.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-5
14.5.0555.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-5
14.5.0555.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-5
14.5.0555.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-5
14.5.0555.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-5
14.5.0555.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-5
14.5.0555.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-5
14.5.0555.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-5
14.5.0555.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-5
14.5.0560.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-5
14.5.0560.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-5
14.5.0560.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-5

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0560.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-5
14.5.0560.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-5
14.5.0560.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-5
14.5.0560.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-5
14.5.0560.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-5
14.5.0560.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-5
14.5.0560.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-5
14.5.0560.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-5
14.5.0560.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-5
14.5.0560.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-5
14.5.0560.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-5
14.5.0560.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-5
14.5.0560.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-5
14.5.0570.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-5
14.5.0570.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-5
14.5.0570.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-5
14.5.0570.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-5
14.5.0570.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-5
14.5.0570.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-5
14.5.0570.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-5
14.5.0570.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-5
14.5.0570.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-5
14.5.0570.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-5
14.5.0570.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-5
14.5.0570.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-5
14.5.0570.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-5
14.5.0570.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-5
14.5.0570.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-5
14.5.0570.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-5
14.5.0606.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-6
14.5.0606.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-6
14.5.0606.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-6
14.5.0606.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-6
14.5.0606.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-6
14.5.0606.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-6
14.5.0606.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-6
14.5.0606.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-6
14.5.0606.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-6
14.5.0606.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-6
14.5.0606.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-6
14.5.0606.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-6
14.5.0606.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-6
14.5.0606.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-6
14.5.0606.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0606.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-6
14.5.0607.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-6
14.5.0607.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-6
14.5.0607.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-6
14.5.0607.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-6
14.5.0607.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-6
14.5.0607.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-6
14.5.0607.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-6
14.5.0607.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-6
14.5.0607.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-6
14.5.0607.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-6
14.5.0607.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-6
14.5.0607.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-6
14.5.0607.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-6
14.5.0607.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-6
14.5.0607.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-6
14.5.0607.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-6
14.5.0608.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-6
14.5.0608.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-6
14.5.0608.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-6
14.5.0608.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-6
14.5.0608.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-6
14.5.0608.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-6
14.5.0608.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-6
14.5.0608.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-6
14.5.0608.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-6
14.5.0608.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-6
14.5.0608.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-6
14.5.0608.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-6
14.5.0608.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-6
14.5.0608.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-6
14.5.0608.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-6
14.5.0608.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-6
14.5.0610.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-6
14.5.0610.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-6
14.5.0610.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-6
14.5.0610.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-6
14.5.0610.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-6
14.5.0610.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-6
14.5.0610.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-6
14.5.0610.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-6
14.5.0610.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-6
14.5.0610.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-6
14.5.0610.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0610.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-6
14.5.0610.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-6
14.5.0610.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-6
14.5.0610.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-6
14.5.0610.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-6
14.5.0612.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-6
14.5.0612.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-6
14.5.0612.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-6
14.5.0612.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-6
14.5.0612.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-6
14.5.0612.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-6
14.5.0612.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-6
14.5.0612.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-6
14.5.0612.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-6
14.5.0612.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-6
14.5.0612.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-6
14.5.0612.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-6
14.5.0612.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-6
14.5.0612.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-6
14.5.0612.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-6
14.5.0612.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-6
14.5.0614.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-6
14.5.0614.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-6
14.5.0614.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-6
14.5.0614.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-6
14.5.0614.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-6
14.5.0614.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-6
14.5.0614.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-6
14.5.0614.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-6
14.5.0614.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-6
14.5.0614.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-6
14.5.0614.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-6
14.5.0614.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-6
14.5.0614.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-6
14.5.0614.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-6
14.5.0614.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-6
14.5.0614.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-6
14.5.0616.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-6
14.5.0616.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-6
14.5.0616.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-6
14.5.0616.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-6
14.5.0616.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-6
14.5.0616.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-6
14.5.0616.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0616.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-6
14.5.0616.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-6
14.5.0616.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-6
14.5.0616.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-6
14.5.0616.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-6
14.5.0616.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-6
14.5.0616.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-6
14.5.0616.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-6
14.5.0616.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-6
14.5.0618.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-6
14.5.0618.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-6
14.5.0618.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-6
14.5.0618.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-6
14.5.0618.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-6
14.5.0618.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-6
14.5.0618.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-6
14.5.0618.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-6
14.5.0618.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-6
14.5.0618.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-6
14.5.0618.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-6
14.5.0618.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-6
14.5.0618.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-6
14.5.0618.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-6
14.5.0618.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-6
14.5.0618.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-6
14.5.0621.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-6
14.5.0621.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-6
14.5.0621.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-6
14.5.0621.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-6
14.5.0621.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-6
14.5.0621.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-6
14.5.0621.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-6
14.5.0621.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-6
14.5.0621.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-6
14.5.0621.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-6
14.5.0621.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-6
14.5.0621.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-6
14.5.0621.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-6
14.5.0621.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-6
14.5.0621.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-6
14.5.0621.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-6
14.5.0623.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-6
14.5.0623.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-6
14.5.0623.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0623.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-6
14.5.0623.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-6
14.5.0623.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-6
14.5.0623.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-6
14.5.0623.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-6
14.5.0623.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-6
14.5.0623.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-6
14.5.0623.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-6
14.5.0623.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-6
14.5.0623.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-6
14.5.0623.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-6
14.5.0623.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-6
14.5.0623.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-6
14.5.0625.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-6
14.5.0625.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-6
14.5.0625.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-6
14.5.0625.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-6
14.5.0625.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-6
14.5.0625.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-6
14.5.0625.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-6
14.5.0625.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-6
14.5.0625.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-6
14.5.0625.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-6
14.5.0625.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-6
14.5.0625.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-6
14.5.0625.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-6
14.5.0625.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-6
14.5.0625.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-6
14.5.0625.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-6
14.5.0627.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-6
14.5.0627.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-6
14.5.0627.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-6
14.5.0627.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-6
14.5.0627.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-6
14.5.0627.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-6
14.5.0627.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-6
14.5.0627.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-6
14.5.0627.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-6
14.5.0627.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-6
14.5.0627.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-6
14.5.0627.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-6
14.5.0627.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-6
14.5.0627.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-6
14.5.0627.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0627.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-6
14.5.0629.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-6
14.5.0629.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-6
14.5.0629.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-6
14.5.0629.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-6
14.5.0629.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-6
14.5.0629.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-6
14.5.0629.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-6
14.5.0629.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-6
14.5.0629.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-6
14.5.0629.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-6
14.5.0629.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-6
14.5.0629.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-6
14.5.0629.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-6
14.5.0629.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-6
14.5.0629.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-6
14.5.0629.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-6
14.5.0631.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-6
14.5.0631.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-6
14.5.0631.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-6
14.5.0631.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-6
14.5.0631.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-6
14.5.0631.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-6
14.5.0631.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-6
14.5.0631.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-6
14.5.0631.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-6
14.5.0631.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-6
14.5.0631.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-6
14.5.0631.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-6
14.5.0631.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-6
14.5.0631.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-6
14.5.0631.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-6
14.5.0631.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-6
14.5.0635.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-6
14.5.0635.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-6
14.5.0635.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-6
14.5.0635.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-6
14.5.0635.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-6
14.5.0635.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-6
14.5.0635.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-6
14.5.0635.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-6
14.5.0635.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-6
14.5.0635.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-6
14.5.0635.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0635.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-6
14.5.0635.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-6
14.5.0635.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-6
14.5.0635.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-6
14.5.0635.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-6
14.5.0640.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-6
14.5.0640.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-6
14.5.0640.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-6
14.5.0640.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-6
14.5.0640.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-6
14.5.0640.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-6
14.5.0640.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-6
14.5.0640.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-6
14.5.0640.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-6
14.5.0640.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-6
14.5.0640.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-6
14.5.0640.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-6
14.5.0640.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-6
14.5.0640.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-6
14.5.0640.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-6
14.5.0640.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-6
14.5.0645.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-6
14.5.0645.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-6
14.5.0645.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-6
14.5.0645.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-6
14.5.0645.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-6
14.5.0645.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-6
14.5.0645.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-6
14.5.0645.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-6
14.5.0645.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-6
14.5.0645.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-6
14.5.0645.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-6
14.5.0645.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-6
14.5.0645.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-6
14.5.0645.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-6
14.5.0645.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-6
14.5.0645.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-6
14.5.0650.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-6
14.5.0650.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-6
14.5.0650.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-6
14.5.0650.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-6
14.5.0650.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-6
14.5.0650.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-6
14.5.0650.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0650.120E	Broca Cortante Ø 5,00 x 120,0 ER-6
14.5.0650.130E	Broca Cortante Ø 5,00 x 130,0 ER-6
14.5.0650.140E	Broca Cortante Ø 5,00 x 140,0 ER-6
14.5.0650.150E	Broca Cortante Ø 5,00 x 150,0 ER-6
14.5.0650.160E	Broca Cortante Ø 5,00 x 160,0 ER-6
14.5.0650.170E	Broca Cortante Ø 5,00 x 170,0 ER-6
14.5.0650.180E	Broca Cortante Ø 5,00 x 180,0 ER-6
14.5.0650.190E	Broca Cortante Ø 5,00 x 190,0 ER-6
14.5.0650.200E	Broca Cortante Ø 5,00 x 200,0 ER-6
14.5.0655.050E	Broca Cortante Ø 5,50 x 50,0 ER-6
14.5.0655.060E	Broca Cortante Ø 5,50 x 60,0 ER-6
14.5.0655.070E	Broca Cortante Ø 5,50 x 70,0 ER-6
14.5.0655.080E	Broca Cortante Ø 5,50 x 80,0 ER-6
14.5.0655.090E	Broca Cortante Ø 5,50 x 90,0 ER-6
14.5.0655.100E	Broca Cortante Ø 5,50 x 100,0 ER-6
14.5.0655.110E	Broca Cortante Ø 5,50 x 110,0 ER-6
14.5.0655.120E	Broca Cortante Ø 5,50 x 120,0 ER-6
14.5.0655.130E	Broca Cortante Ø 5,50 x 130,0 ER-6
14.5.0655.140E	Broca Cortante Ø 5,50 x 140,0 ER-6
14.5.0655.150E	Broca Cortante Ø 5,50 x 150,0 ER-6
14.5.0655.160E	Broca Cortante Ø 5,50 x 160,0 ER-6
14.5.0655.170E	Broca Cortante Ø 5,50 x 170,0 ER-6
14.5.0655.180E	Broca Cortante Ø 5,50 x 180,0 ER-6
14.5.0655.190E	Broca Cortante Ø 5,50 x 190,0 ER-6
14.5.0655.200E	Broca Cortante Ø 5,50 x 200,0 ER-6
14.5.0660.050E	Broca Cortante Ø 6,00 x 50,0 ER-6
14.5.0660.060E	Broca Cortante Ø 6,00 x 60,0 ER-6
14.5.0660.070E	Broca Cortante Ø 6,00 x 70,0 ER-6
14.5.0660.080E	Broca Cortante Ø 6,00 x 80,0 ER-6
14.5.0660.090E	Broca Cortante Ø 6,00 x 90,0 ER-6
14.5.0660.100E	Broca Cortante Ø 6,00 x 100,0 ER-6
14.5.0660.110E	Broca Cortante Ø 6,00 x 110,0 ER-6
14.5.0660.120E	Broca Cortante Ø 6,00 x 120,0 ER-6
14.5.0660.130E	Broca Cortante Ø 6,00 x 130,0 ER-6
14.5.0660.140E	Broca Cortante Ø 6,00 x 140,0 ER-6
14.5.0660.150E	Broca Cortante Ø 6,00 x 150,0 ER-6
14.5.0660.160E	Broca Cortante Ø 6,00 x 160,0 ER-6
14.5.0660.170E	Broca Cortante Ø 6,00 x 170,0 ER-6
14.5.0660.180E	Broca Cortante Ø 6,00 x 180,0 ER-6
14.5.0660.190E	Broca Cortante Ø 6,00 x 190,0 ER-6
14.5.0660.200E	Broca Cortante Ø 6,00 x 200,0 ER-6
14.5.0670.050E	Broca Cortante Ø 7,00 x 50,0 ER-6
14.5.0670.060E	Broca Cortante Ø 7,00 x 60,0 ER-6
14.5.0670.070E	Broca Cortante Ø 7,00 x 70,0 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0670.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-6
14.5.0670.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-6
14.5.0670.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-6
14.5.0670.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-6
14.5.0670.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-6
14.5.0670.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-6
14.5.0670.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-6
14.5.0670.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-6
14.5.0670.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-6
14.5.0670.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-6
14.5.0670.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-6
14.5.0670.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-6
14.5.0670.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-6
14.5.0706.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-7
14.5.0706.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-7
14.5.0706.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-7
14.5.0706.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-7
14.5.0706.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-7
14.5.0706.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-7
14.5.0706.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-7
14.5.0706.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-7
14.5.0706.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-7
14.5.0706.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-7
14.5.0706.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-7
14.5.0706.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-7
14.5.0706.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-7
14.5.0706.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-7
14.5.0706.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-7
14.5.0706.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-7
14.5.0707.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-7
14.5.0707.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-7
14.5.0707.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-7
14.5.0707.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-7
14.5.0707.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-7
14.5.0707.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-7
14.5.0707.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-7
14.5.0707.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-7
14.5.0707.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-7
14.5.0707.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-7
14.5.0707.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-7
14.5.0707.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-7
14.5.0707.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-7
14.5.0707.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-7
14.5.0707.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0707.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-7
14.5.0708.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-7
14.5.0708.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-7
14.5.0708.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-7
14.5.0708.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-7
14.5.0708.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-7
14.5.0708.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-7
14.5.0708.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-7
14.5.0708.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-7
14.5.0708.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-7
14.5.0708.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-7
14.5.0708.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-7
14.5.0708.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-7
14.5.0708.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-7
14.5.0708.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-7
14.5.0708.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-7
14.5.0708.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-7
14.5.0710.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-7
14.5.0710.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-7
14.5.0710.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-7
14.5.0710.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-7
14.5.0710.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-7
14.5.0710.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-7
14.5.0710.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-7
14.5.0710.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-7
14.5.0710.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-7
14.5.0710.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-7
14.5.0710.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-7
14.5.0710.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-7
14.5.0710.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-7
14.5.0710.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-7
14.5.0710.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-7
14.5.0710.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-7
14.5.0712.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-7
14.5.0712.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-7
14.5.0712.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-7
14.5.0712.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-7
14.5.0712.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-7
14.5.0712.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-7
14.5.0712.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-7
14.5.0712.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-7
14.5.0712.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-7
14.5.0712.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-7
14.5.0712.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0712.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-7
14.5.0712.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-7
14.5.0712.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-7
14.5.0712.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-7
14.5.0712.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-7
14.5.0714.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-7
14.5.0714.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-7
14.5.0714.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-7
14.5.0714.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-7
14.5.0714.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-7
14.5.0714.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-7
14.5.0714.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-7
14.5.0714.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-7
14.5.0714.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-7
14.5.0714.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-7
14.5.0714.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-7
14.5.0714.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-7
14.5.0714.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-7
14.5.0714.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-7
14.5.0714.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-7
14.5.0714.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-7
14.5.0716.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-7
14.5.0716.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-7
14.5.0716.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-7
14.5.0716.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-7
14.5.0716.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-7
14.5.0716.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-7
14.5.0716.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-7
14.5.0716.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-7
14.5.0716.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-7
14.5.0716.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-7
14.5.0716.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-7
14.5.0716.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-7
14.5.0716.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-7
14.5.0716.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-7
14.5.0716.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-7
14.5.0716.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-7
14.5.0718.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-7
14.5.0718.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-7
14.5.0718.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-7
14.5.0718.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-7
14.5.0718.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-7
14.5.0718.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-7
14.5.0718.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0718.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-7
14.5.0718.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-7
14.5.0718.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-7
14.5.0718.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-7
14.5.0718.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-7
14.5.0718.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-7
14.5.0718.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-7
14.5.0718.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-7
14.5.0718.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-7
14.5.0721.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-7
14.5.0721.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-7
14.5.0721.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-7
14.5.0721.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-7
14.5.0721.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-7
14.5.0721.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-7
14.5.0721.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-7
14.5.0721.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-7
14.5.0721.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-7
14.5.0721.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-7
14.5.0721.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-7
14.5.0721.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-7
14.5.0721.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-7
14.5.0721.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-7
14.5.0721.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-7
14.5.0721.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-7
14.5.0723.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-7
14.5.0723.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-7
14.5.0723.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-7
14.5.0723.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-7
14.5.0723.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-7
14.5.0723.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-7
14.5.0723.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-7
14.5.0723.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-7
14.5.0723.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-7
14.5.0723.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-7
14.5.0723.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-7
14.5.0723.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-7
14.5.0723.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-7
14.5.0723.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-7
14.5.0723.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-7
14.5.0723.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-7
14.5.0725.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-7
14.5.0725.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-7
14.5.0725.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0725.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-7
14.5.0725.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-7
14.5.0725.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-7
14.5.0725.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-7
14.5.0725.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-7
14.5.0725.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-7
14.5.0725.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-7
14.5.0725.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-7
14.5.0725.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-7
14.5.0725.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-7
14.5.0725.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-7
14.5.0725.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-7
14.5.0725.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-7
14.5.0727.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-7
14.5.0727.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-7
14.5.0727.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-7
14.5.0727.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-7
14.5.0727.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-7
14.5.0727.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-7
14.5.0727.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-7
14.5.0727.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-7
14.5.0727.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-7
14.5.0727.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-7
14.5.0727.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-7
14.5.0727.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-7
14.5.0727.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-7
14.5.0727.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-7
14.5.0727.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-7
14.5.0727.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-7
14.5.0729.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-7
14.5.0729.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-7
14.5.0729.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-7
14.5.0729.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-7
14.5.0729.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-7
14.5.0729.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-7
14.5.0729.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-7
14.5.0729.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-7
14.5.0729.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-7
14.5.0729.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-7
14.5.0729.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-7
14.5.0729.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-7
14.5.0729.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-7
14.5.0729.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-7
14.5.0729.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0729.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-7
14.5.0731.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-7
14.5.0731.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-7
14.5.0731.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-7
14.5.0731.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-7
14.5.0731.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-7
14.5.0731.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-7
14.5.0731.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-7
14.5.0731.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-7
14.5.0731.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-7
14.5.0731.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-7
14.5.0731.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-7
14.5.0731.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-7
14.5.0731.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-7
14.5.0731.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-7
14.5.0731.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-7
14.5.0731.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-7
14.5.0735.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-7
14.5.0735.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-7
14.5.0735.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-7
14.5.0735.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-7
14.5.0735.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-7
14.5.0735.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-7
14.5.0735.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-7
14.5.0735.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-7
14.5.0735.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-7
14.5.0735.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-7
14.5.0735.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-7
14.5.0735.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-7
14.5.0735.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-7
14.5.0735.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-7
14.5.0735.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-7
14.5.0735.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-7
14.5.0740.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-7
14.5.0740.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-7
14.5.0740.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-7
14.5.0740.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-7
14.5.0740.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-7
14.5.0740.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-7
14.5.0740.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-7
14.5.0740.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-7
14.5.0740.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-7
14.5.0740.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-7
14.5.0740.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0740.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-7
14.5.0740.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-7
14.5.0740.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-7
14.5.0740.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-7
14.5.0740.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-7
14.5.0745.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-7
14.5.0745.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-7
14.5.0745.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-7
14.5.0745.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-7
14.5.0745.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-7
14.5.0745.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-7
14.5.0745.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-7
14.5.0745.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-7
14.5.0745.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-7
14.5.0745.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-7
14.5.0745.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-7
14.5.0745.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-7
14.5.0745.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-7
14.5.0745.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-7
14.5.0745.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-7
14.5.0745.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-7
14.5.0750.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-7
14.5.0750.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-7
14.5.0750.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-7
14.5.0750.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-7
14.5.0750.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-7
14.5.0750.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-7
14.5.0750.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-7
14.5.0750.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-7
14.5.0750.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-7
14.5.0750.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-7
14.5.0750.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-7
14.5.0750.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-7
14.5.0750.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-7
14.5.0750.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-7
14.5.0750.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-7
14.5.0750.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-7
14.5.0755.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-7
14.5.0755.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-7
14.5.0755.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-7
14.5.0755.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-7
14.5.0755.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-7
14.5.0755.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-7
14.5.0755.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0755.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-7
14.5.0755.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-7
14.5.0755.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-7
14.5.0755.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-7
14.5.0755.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-7
14.5.0755.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-7
14.5.0755.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-7
14.5.0755.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-7
14.5.0755.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-7
14.5.0760.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-7
14.5.0760.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-7
14.5.0760.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-7
14.5.0760.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-7
14.5.0760.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-7
14.5.0760.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-7
14.5.0760.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-7
14.5.0760.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-7
14.5.0760.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-7
14.5.0760.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-7
14.5.0760.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-7
14.5.0760.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-7
14.5.0760.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-7
14.5.0760.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-7
14.5.0760.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-7
14.5.0760.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-7
14.5.0770.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-7
14.5.0770.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-7
14.5.0770.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-7
14.5.0770.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-7
14.5.0770.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-7
14.5.0770.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-7
14.5.0770.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-7
14.5.0770.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-7
14.5.0770.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-7
14.5.0770.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-7
14.5.0770.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-7
14.5.0770.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-7
14.5.0770.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-7
14.5.0770.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-7
14.5.0770.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-7
14.5.0770.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-7
14.5.0806.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-8
14.5.0806.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-8
14.5.0806.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0806.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-8
14.5.0806.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-8
14.5.0806.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-8
14.5.0806.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-8
14.5.0806.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-8
14.5.0806.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-8
14.5.0806.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-8
14.5.0806.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-8
14.5.0806.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-8
14.5.0806.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-8
14.5.0806.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-8
14.5.0806.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-8
14.5.0806.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-8
14.5.0807.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-8
14.5.0807.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-8
14.5.0807.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-8
14.5.0807.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-8
14.5.0807.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-8
14.5.0807.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-8
14.5.0807.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-8
14.5.0807.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-8
14.5.0807.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-8
14.5.0807.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-8
14.5.0807.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-8
14.5.0807.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-8
14.5.0807.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-8
14.5.0807.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-8
14.5.0807.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-8
14.5.0807.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-8
14.5.0808.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-8
14.5.0808.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-8
14.5.0808.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-8
14.5.0808.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-8
14.5.0808.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-8
14.5.0808.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-8
14.5.0808.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-8
14.5.0808.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-8
14.5.0808.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-8
14.5.0808.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-8
14.5.0808.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-8
14.5.0808.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-8
14.5.0808.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-8
14.5.0808.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-8
14.5.0808.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0808.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-8
14.5.0810.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-8
14.5.0810.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-8
14.5.0810.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-8
14.5.0810.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-8
14.5.0810.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-8
14.5.0810.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-8
14.5.0810.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-8
14.5.0810.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-8
14.5.0810.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-8
14.5.0810.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-8
14.5.0810.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-8
14.5.0810.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-8
14.5.0810.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-8
14.5.0810.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-8
14.5.0810.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-8
14.5.0810.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-8
14.5.0812.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-8
14.5.0812.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-8
14.5.0812.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-8
14.5.0812.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-8
14.5.0812.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-8
14.5.0812.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-8
14.5.0812.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-8
14.5.0812.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-8
14.5.0812.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-8
14.5.0812.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-8
14.5.0812.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-8
14.5.0812.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-8
14.5.0812.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-8
14.5.0812.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-8
14.5.0812.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-8
14.5.0812.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-8
14.5.0814.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-8
14.5.0814.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-8
14.5.0814.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-8
14.5.0814.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-8
14.5.0814.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-8
14.5.0814.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-8
14.5.0814.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-8
14.5.0814.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-8
14.5.0814.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-8
14.5.0814.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-8
14.5.0814.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0814.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-8
14.5.0814.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-8
14.5.0814.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-8
14.5.0814.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-8
14.5.0814.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-8
14.5.0816.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-8
14.5.0816.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-8
14.5.0816.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-8
14.5.0816.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-8
14.5.0816.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-8
14.5.0816.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-8
14.5.0816.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-8
14.5.0816.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-8
14.5.0816.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-8
14.5.0816.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-8
14.5.0816.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-8
14.5.0816.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-8
14.5.0816.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-8
14.5.0816.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-8
14.5.0816.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-8
14.5.0816.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-8
14.5.0818.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-8
14.5.0818.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-8
14.5.0818.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-8
14.5.0818.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-8
14.5.0818.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-8
14.5.0818.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-8
14.5.0818.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-8
14.5.0818.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-8
14.5.0818.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-8
14.5.0818.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-8
14.5.0818.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-8
14.5.0818.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-8
14.5.0818.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-8
14.5.0818.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-8
14.5.0818.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-8
14.5.0818.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-8
14.5.0821.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-8
14.5.0821.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-8
14.5.0821.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-8
14.5.0821.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-8
14.5.0821.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-8
14.5.0821.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-8
14.5.0821.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0821.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-8
14.5.0821.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-8
14.5.0821.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-8
14.5.0821.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-8
14.5.0821.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-8
14.5.0821.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-8
14.5.0821.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-8
14.5.0821.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-8
14.5.0821.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-8
14.5.0823.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-8
14.5.0823.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-8
14.5.0823.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-8
14.5.0823.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-8
14.5.0823.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-8
14.5.0823.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-8
14.5.0823.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-8
14.5.0823.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-8
14.5.0823.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-8
14.5.0823.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-8
14.5.0823.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-8
14.5.0823.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-8
14.5.0823.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-8
14.5.0823.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-8
14.5.0823.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-8
14.5.0823.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-8
14.5.0825.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-8
14.5.0825.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-8
14.5.0825.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-8
14.5.0825.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-8
14.5.0825.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-8
14.5.0825.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-8
14.5.0825.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-8
14.5.0825.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-8
14.5.0825.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-8
14.5.0825.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-8
14.5.0825.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-8
14.5.0825.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-8
14.5.0825.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-8
14.5.0825.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-8
14.5.0825.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-8
14.5.0825.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-8
14.5.0827.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-8
14.5.0827.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-8
14.5.0827.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0827.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-8
14.5.0827.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-8
14.5.0827.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-8
14.5.0827.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-8
14.5.0827.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-8
14.5.0827.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-8
14.5.0827.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-8
14.5.0827.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-8
14.5.0827.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-8
14.5.0827.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-8
14.5.0827.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-8
14.5.0827.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-8
14.5.0827.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-8
14.5.0829.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-8
14.5.0829.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-8
14.5.0829.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-8
14.5.0829.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-8
14.5.0829.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-8
14.5.0829.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-8
14.5.0829.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-8
14.5.0829.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-8
14.5.0829.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-8
14.5.0829.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-8
14.5.0829.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-8
14.5.0829.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-8
14.5.0829.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-8
14.5.0829.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-8
14.5.0829.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-8
14.5.0829.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-8
14.5.0831.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-8
14.5.0831.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-8
14.5.0831.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-8
14.5.0831.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-8
14.5.0831.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-8
14.5.0831.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-8
14.5.0831.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-8
14.5.0831.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-8
14.5.0831.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-8
14.5.0831.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-8
14.5.0831.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-8
14.5.0831.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-8
14.5.0831.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-8
14.5.0831.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-8
14.5.0831.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0831.200E	Broca Cortante Ø 3,10 x 200,0 ER-8
14.5.0835.050E	Broca Cortante Ø 3,50 x 50,0 ER-8
14.5.0835.060E	Broca Cortante Ø 3,50 x 60,0 ER-8
14.5.0835.070E	Broca Cortante Ø 3,50 x 70,0 ER-8
14.5.0835.080E	Broca Cortante Ø 3,50 x 80,0 ER-8
14.5.0835.090E	Broca Cortante Ø 3,50 x 90,0 ER-8
14.5.0835.100E	Broca Cortante Ø 3,50 x 100,0 ER-8
14.5.0835.110E	Broca Cortante Ø 3,50 x 110,0 ER-8
14.5.0835.120E	Broca Cortante Ø 3,50 x 120,0 ER-8
14.5.0835.130E	Broca Cortante Ø 3,50 x 130,0 ER-8
14.5.0835.140E	Broca Cortante Ø 3,50 x 140,0 ER-8
14.5.0835.150E	Broca Cortante Ø 3,50 x 150,0 ER-8
14.5.0835.160E	Broca Cortante Ø 3,50 x 160,0 ER-8
14.5.0835.170E	Broca Cortante Ø 3,50 x 170,0 ER-8
14.5.0835.180E	Broca Cortante Ø 3,50 x 180,0 ER-8
14.5.0835.190E	Broca Cortante Ø 3,50 x 190,0 ER-8
14.5.0835.200E	Broca Cortante Ø 3,50 x 200,0 ER-8
14.5.0840.050E	Broca Cortante Ø 4,00 x 50,0 ER-8
14.5.0840.060E	Broca Cortante Ø 4,00 x 60,0 ER-8
14.5.0840.070E	Broca Cortante Ø 4,00 x 70,0 ER-8
14.5.0840.080E	Broca Cortante Ø 4,00 x 80,0 ER-8
14.5.0840.090E	Broca Cortante Ø 4,00 x 90,0 ER-8
14.5.0840.100E	Broca Cortante Ø 4,00 x 100,0 ER-8
14.5.0840.110E	Broca Cortante Ø 4,00 x 110,0 ER-8
14.5.0840.120E	Broca Cortante Ø 4,00 x 120,0 ER-8
14.5.0840.130E	Broca Cortante Ø 4,00 x 130,0 ER-8
14.5.0840.140E	Broca Cortante Ø 4,00 x 140,0 ER-8
14.5.0840.150E	Broca Cortante Ø 4,00 x 150,0 ER-8
14.5.0840.160E	Broca Cortante Ø 4,00 x 160,0 ER-8
14.5.0840.170E	Broca Cortante Ø 4,00 x 170,0 ER-8
14.5.0840.180E	Broca Cortante Ø 4,00 x 180,0 ER-8
14.5.0840.190E	Broca Cortante Ø 4,00 x 190,0 ER-8
14.5.0840.200E	Broca Cortante Ø 4,00 x 200,0 ER-8
14.5.0845.050E	Broca Cortante Ø 4,50 x 50,0 ER-8
14.5.0845.060E	Broca Cortante Ø 4,50 x 60,0 ER-8
14.5.0845.070E	Broca Cortante Ø 4,50 x 70,0 ER-8
14.5.0845.080E	Broca Cortante Ø 4,50 x 80,0 ER-8
14.5.0845.090E	Broca Cortante Ø 4,50 x 90,0 ER-8
14.5.0845.100E	Broca Cortante Ø 4,50 x 100,0 ER-8
14.5.0845.110E	Broca Cortante Ø 4,50 x 110,0 ER-8
14.5.0845.120E	Broca Cortante Ø 4,50 x 120,0 ER-8
14.5.0845.130E	Broca Cortante Ø 4,50 x 130,0 ER-8
14.5.0845.140E	Broca Cortante Ø 4,50 x 140,0 ER-8
14.5.0845.150E	Broca Cortante Ø 4,50 x 150,0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0845.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-8
14.5.0845.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-8
14.5.0845.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-8
14.5.0845.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-8
14.5.0845.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-8
14.5.0850.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-8
14.5.0850.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-8
14.5.0850.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-8
14.5.0850.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-8
14.5.0850.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-8
14.5.0850.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-8
14.5.0850.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-8
14.5.0850.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-8
14.5.0850.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-8
14.5.0850.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-8
14.5.0850.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-8
14.5.0850.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-8
14.5.0850.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-8
14.5.0850.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-8
14.5.0850.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-8
14.5.0850.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-8
14.5.0855.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-8
14.5.0855.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-8
14.5.0855.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-8
14.5.0855.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-8
14.5.0855.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-8
14.5.0855.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-8
14.5.0855.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-8
14.5.0855.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-8
14.5.0855.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-8
14.5.0855.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-8
14.5.0855.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-8
14.5.0855.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-8
14.5.0855.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-8
14.5.0855.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-8
14.5.0855.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-8
14.5.0855.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-8
14.5.0860.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-8
14.5.0860.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-8
14.5.0860.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-8
14.5.0860.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-8
14.5.0860.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-8
14.5.0860.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-8
14.5.0860.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-8

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0860.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-8
14.5.0860.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-8
14.5.0860.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-8
14.5.0860.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-8
14.5.0860.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-8
14.5.0860.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-8
14.5.0860.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-8
14.5.0860.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-8
14.5.0860.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-8
14.5.0870.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-8
14.5.0870.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-8
14.5.0870.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-8
14.5.0870.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-8
14.5.0870.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-8
14.5.0870.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-8
14.5.0870.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-8
14.5.0870.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-8
14.5.0870.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-8
14.5.0870.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-8
14.5.0870.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-8
14.5.0870.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-8
14.5.0870.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-8
14.5.0870.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-8
14.5.0870.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-8
14.5.0870.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-8
14.5.0906.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-9
14.5.0906.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-9
14.5.0906.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-9
14.5.0906.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-9
14.5.0906.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-9
14.5.0906.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-9
14.5.0906.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-9
14.5.0906.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-9
14.5.0906.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-9
14.5.0906.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-9
14.5.0906.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-9
14.5.0906.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-9
14.5.0906.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-9
14.5.0906.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-9
14.5.0906.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-9
14.5.0906.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-9
14.5.0907.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-9
14.5.0907.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-9
14.5.0907.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0907.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-9
14.5.0907.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-9
14.5.0907.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-9
14.5.0907.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-9
14.5.0907.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-9
14.5.0907.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-9
14.5.0907.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-9
14.5.0907.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-9
14.5.0907.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-9
14.5.0907.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-9
14.5.0907.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-9
14.5.0907.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-9
14.5.0907.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-9
14.5.0908.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-9
14.5.0908.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-9
14.5.0908.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-9
14.5.0908.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-9
14.5.0908.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-9
14.5.0908.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-9
14.5.0908.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-9
14.5.0908.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-9
14.5.0908.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-9
14.5.0908.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-9
14.5.0908.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-9
14.5.0908.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-9
14.5.0908.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-9
14.5.0908.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-9
14.5.0908.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-9
14.5.0908.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-9
14.5.0910.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-9
14.5.0910.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-9
14.5.0910.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-9
14.5.0910.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-9
14.5.0910.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-9
14.5.0910.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-9
14.5.0910.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-9
14.5.0910.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-9
14.5.0910.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-9
14.5.0910.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-9
14.5.0910.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-9
14.5.0910.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-9
14.5.0910.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-9
14.5.0910.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-9
14.5.0910.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0910.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-9
14.5.0912.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-9
14.5.0912.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-9
14.5.0912.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-9
14.5.0912.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-9
14.5.0912.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-9
14.5.0912.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-9
14.5.0912.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-9
14.5.0912.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-9
14.5.0912.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-9
14.5.0912.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-9
14.5.0912.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-9
14.5.0912.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-9
14.5.0912.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-9
14.5.0912.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-9
14.5.0912.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-9
14.5.0912.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-9
14.5.0914.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-9
14.5.0914.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-9
14.5.0914.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-9
14.5.0914.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-9
14.5.0914.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-9
14.5.0914.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-9
14.5.0914.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-9
14.5.0914.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-9
14.5.0914.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-9
14.5.0914.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-9
14.5.0914.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-9
14.5.0914.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-9
14.5.0914.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-9
14.5.0914.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-9
14.5.0914.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-9
14.5.0914.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-9
14.5.0916.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-9
14.5.0916.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-9
14.5.0916.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-9
14.5.0916.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-9
14.5.0916.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-9
14.5.0916.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-9
14.5.0916.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-9
14.5.0916.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-9
14.5.0916.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-9
14.5.0916.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-9
14.5.0916.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0916.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-9
14.5.0916.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-9
14.5.0916.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-9
14.5.0916.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-9
14.5.0916.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-9
14.5.0918.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-9
14.5.0918.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-9
14.5.0918.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-9
14.5.0918.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-9
14.5.0918.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-9
14.5.0918.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-9
14.5.0918.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-9
14.5.0918.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-9
14.5.0918.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-9
14.5.0918.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-9
14.5.0918.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-9
14.5.0918.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-9
14.5.0918.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-9
14.5.0918.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-9
14.5.0918.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-9
14.5.0918.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-9
14.5.0921.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-9
14.5.0921.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-9
14.5.0921.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-9
14.5.0921.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-9
14.5.0921.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-9
14.5.0921.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-9
14.5.0921.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-9
14.5.0921.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-9
14.5.0921.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-9
14.5.0921.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-9
14.5.0921.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-9
14.5.0921.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-9
14.5.0921.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-9
14.5.0921.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-9
14.5.0921.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-9
14.5.0921.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-9
14.5.0923.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-9
14.5.0923.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-9
14.5.0923.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-9
14.5.0923.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-9
14.5.0923.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-9
14.5.0923.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-9
14.5.0923.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0923.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-9
14.5.0923.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-9
14.5.0923.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-9
14.5.0923.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-9
14.5.0923.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-9
14.5.0923.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-9
14.5.0923.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-9
14.5.0923.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-9
14.5.0923.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-9
14.5.0925.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-9
14.5.0925.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-9
14.5.0925.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-9
14.5.0925.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-9
14.5.0925.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-9
14.5.0925.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-9
14.5.0925.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-9
14.5.0925.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-9
14.5.0925.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-9
14.5.0925.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-9
14.5.0925.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-9
14.5.0925.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-9
14.5.0925.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-9
14.5.0925.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-9
14.5.0925.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-9
14.5.0925.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-9
14.5.0927.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-9
14.5.0927.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-9
14.5.0927.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-9
14.5.0927.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-9
14.5.0927.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-9
14.5.0927.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-9
14.5.0927.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-9
14.5.0927.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-9
14.5.0927.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-9
14.5.0927.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-9
14.5.0927.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-9
14.5.0927.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-9
14.5.0927.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-9
14.5.0927.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-9
14.5.0927.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-9
14.5.0927.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-9
14.5.0929.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-9
14.5.0929.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-9
14.5.0929.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0929.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-9
14.5.0929.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-9
14.5.0929.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-9
14.5.0929.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-9
14.5.0929.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-9
14.5.0929.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-9
14.5.0929.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-9
14.5.0929.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-9
14.5.0929.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-9
14.5.0929.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-9
14.5.0929.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-9
14.5.0929.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-9
14.5.0929.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-9
14.5.0931.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-9
14.5.0931.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-9
14.5.0931.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-9
14.5.0931.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-9
14.5.0931.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-9
14.5.0931.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-9
14.5.0931.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-9
14.5.0931.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-9
14.5.0931.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-9
14.5.0931.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-9
14.5.0931.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-9
14.5.0931.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-9
14.5.0931.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-9
14.5.0931.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-9
14.5.0931.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-9
14.5.0931.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-9
14.5.0935.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-9
14.5.0935.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-9
14.5.0935.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-9
14.5.0935.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-9
14.5.0935.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-9
14.5.0935.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-9
14.5.0935.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-9
14.5.0935.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-9
14.5.0935.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-9
14.5.0935.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-9
14.5.0935.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-9
14.5.0935.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-9
14.5.0935.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-9
14.5.0935.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-9
14.5.0935.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0935.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-9
14.5.0940.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-9
14.5.0940.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-9
14.5.0940.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-9
14.5.0940.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-9
14.5.0940.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-9
14.5.0940.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-9
14.5.0940.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-9
14.5.0940.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-9
14.5.0940.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-9
14.5.0940.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-9
14.5.0940.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-9
14.5.0940.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-9
14.5.0940.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-9
14.5.0940.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-9
14.5.0940.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-9
14.5.0940.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-9
14.5.0945.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-9
14.5.0945.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-9
14.5.0945.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-9
14.5.0945.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-9
14.5.0945.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-9
14.5.0945.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-9
14.5.0945.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-9
14.5.0945.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-9
14.5.0945.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-9
14.5.0945.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-9
14.5.0945.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-9
14.5.0945.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-9
14.5.0945.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-9
14.5.0945.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-9
14.5.0945.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-9
14.5.0945.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-9
14.5.0950.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-9
14.5.0950.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-9
14.5.0950.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-9
14.5.0950.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-9
14.5.0950.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-9
14.5.0950.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-9
14.5.0950.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-9
14.5.0950.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-9
14.5.0950.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-9
14.5.0950.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-9
14.5.0950.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0950.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-9
14.5.0950.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-9
14.5.0950.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-9
14.5.0950.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-9
14.5.0950.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-9
14.5.0955.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-9
14.5.0955.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-9
14.5.0955.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-9
14.5.0955.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-9
14.5.0955.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-9
14.5.0955.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-9
14.5.0955.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-9
14.5.0955.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-9
14.5.0955.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-9
14.5.0955.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-9
14.5.0955.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-9
14.5.0955.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-9
14.5.0955.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-9
14.5.0955.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-9
14.5.0955.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-9
14.5.0955.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-9
14.5.0960.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-9
14.5.0960.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-9
14.5.0960.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-9
14.5.0960.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-9
14.5.0960.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-9
14.5.0960.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-9
14.5.0960.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-9
14.5.0960.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-9
14.5.0960.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-9
14.5.0960.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-9
14.5.0960.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-9
14.5.0960.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-9
14.5.0960.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-9
14.5.0960.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-9
14.5.0960.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-9
14.5.0960.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-9
14.5.0970.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-9
14.5.0970.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-9
14.5.0970.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-9
14.5.0970.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-9
14.5.0970.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-9
14.5.0970.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-9
14.5.0970.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-9

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.0970.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-9
14.5.0970.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-9
14.5.0970.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-9
14.5.0970.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-9
14.5.0970.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-9
14.5.0970.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-9
14.5.0970.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-9
14.5.0970.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-9
14.5.0970.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-9
14.5.1006.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-10
14.5.1006.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-10
14.5.1006.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-10
14.5.1006.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-10
14.5.1006.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-10
14.5.1006.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-10
14.5.1006.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-10
14.5.1006.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-10
14.5.1006.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-10
14.5.1006.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-10
14.5.1006.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-10
14.5.1006.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-10
14.5.1006.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-10
14.5.1006.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-10
14.5.1006.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-10
14.5.1006.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-10
14.5.1007.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-10
14.5.1007.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-10
14.5.1007.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-10
14.5.1007.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-10
14.5.1007.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-10
14.5.1007.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-10
14.5.1007.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-10
14.5.1007.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-10
14.5.1007.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-10
14.5.1007.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-10
14.5.1007.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-10
14.5.1007.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-10
14.5.1007.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-10
14.5.1007.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-10
14.5.1007.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-10
14.5.1007.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-10
14.5.1008.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-10
14.5.1008.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-10
14.5.1008.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1008.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-10
14.5.1008.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-10
14.5.1008.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-10
14.5.1008.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-10
14.5.1008.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-10
14.5.1008.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-10
14.5.1008.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-10
14.5.1008.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-10
14.5.1008.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-10
14.5.1008.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-10
14.5.1008.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-10
14.5.1008.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-10
14.5.1008.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-10
14.5.1010.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-10
14.5.1010.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-10
14.5.1010.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-10
14.5.1010.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-10
14.5.1010.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-10
14.5.1010.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-10
14.5.1010.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-10
14.5.1010.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-10
14.5.1010.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-10
14.5.1010.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-10
14.5.1010.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-10
14.5.1010.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-10
14.5.1010.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-10
14.5.1010.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-10
14.5.1010.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-10
14.5.1010.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-10
14.5.1012.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-10
14.5.1012.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-10
14.5.1012.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-10
14.5.1012.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-10
14.5.1012.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-10
14.5.1012.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-10
14.5.1012.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-10
14.5.1012.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-10
14.5.1012.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-10
14.5.1012.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-10
14.5.1012.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-10
14.5.1012.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-10
14.5.1012.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-10
14.5.1012.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-10
14.5.1012.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1012.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-10
14.5.1014.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-10
14.5.1014.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-10
14.5.1014.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-10
14.5.1014.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-10
14.5.1014.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-10
14.5.1014.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-10
14.5.1014.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-10
14.5.1014.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-10
14.5.1014.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-10
14.5.1014.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-10
14.5.1014.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-10
14.5.1014.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-10
14.5.1014.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-10
14.5.1014.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-10
14.5.1014.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-10
14.5.1014.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-10
14.5.1016.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-10
14.5.1016.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-10
14.5.1016.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-10
14.5.1016.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-10
14.5.1016.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-10
14.5.1016.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-10
14.5.1016.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-10
14.5.1016.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-10
14.5.1016.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-10
14.5.1016.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-10
14.5.1016.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-10
14.5.1016.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-10
14.5.1016.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-10
14.5.1016.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-10
14.5.1016.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-10
14.5.1016.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-10
14.5.1018.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-10
14.5.1018.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-10
14.5.1018.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-10
14.5.1018.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-10
14.5.1018.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-10
14.5.1018.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-10
14.5.1018.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-10
14.5.1018.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-10
14.5.1018.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-10
14.5.1018.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-10
14.5.1018.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1018.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-10
14.5.1018.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-10
14.5.1018.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-10
14.5.1018.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-10
14.5.1018.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-10
14.5.1021.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-10
14.5.1021.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-10
14.5.1021.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-10
14.5.1021.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-10
14.5.1021.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-10
14.5.1021.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-10
14.5.1021.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-10
14.5.1021.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-10
14.5.1021.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-10
14.5.1021.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-10
14.5.1021.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-10
14.5.1021.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-10
14.5.1021.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-10
14.5.1021.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-10
14.5.1021.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-10
14.5.1021.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-10
14.5.1023.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-10
14.5.1023.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-10
14.5.1023.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-10
14.5.1023.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-10
14.5.1023.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-10
14.5.1023.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-10
14.5.1023.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-10
14.5.1023.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-10
14.5.1023.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-10
14.5.1023.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-10
14.5.1023.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-10
14.5.1023.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-10
14.5.1023.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-10
14.5.1023.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-10
14.5.1023.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-10
14.5.1023.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-10
14.5.1025.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-10
14.5.1025.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-10
14.5.1025.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-10
14.5.1025.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-10
14.5.1025.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-10
14.5.1025.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-10
14.5.1025.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1025.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-10
14.5.1025.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-10
14.5.1025.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-10
14.5.1025.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-10
14.5.1025.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-10
14.5.1025.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-10
14.5.1025.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-10
14.5.1025.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-10
14.5.1025.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-10
14.5.1027.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-10
14.5.1027.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-10
14.5.1027.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-10
14.5.1027.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-10
14.5.1027.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-10
14.5.1027.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-10
14.5.1027.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-10
14.5.1027.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-10
14.5.1027.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-10
14.5.1027.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-10
14.5.1027.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-10
14.5.1027.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-10
14.5.1027.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-10
14.5.1027.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-10
14.5.1027.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-10
14.5.1027.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-10
14.5.1029.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-10
14.5.1029.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-10
14.5.1029.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-10
14.5.1029.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-10
14.5.1029.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-10
14.5.1029.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-10
14.5.1029.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-10
14.5.1029.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-10
14.5.1029.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-10
14.5.1029.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-10
14.5.1029.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-10
14.5.1029.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-10
14.5.1029.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-10
14.5.1029.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-10
14.5.1029.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-10
14.5.1029.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-10
14.5.1031.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-10
14.5.1031.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-10
14.5.1031.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1031.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-10
14.5.1031.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-10
14.5.1031.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-10
14.5.1031.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-10
14.5.1031.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-10
14.5.1031.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-10
14.5.1031.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-10
14.5.1031.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-10
14.5.1031.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-10
14.5.1031.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-10
14.5.1031.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-10
14.5.1031.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-10
14.5.1031.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-10
14.5.1035.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-10
14.5.1035.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-10
14.5.1035.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-10
14.5.1035.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-10
14.5.1035.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-10
14.5.1035.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-10
14.5.1035.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-10
14.5.1035.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-10
14.5.1035.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-10
14.5.1035.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-10
14.5.1035.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-10
14.5.1035.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-10
14.5.1035.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-10
14.5.1035.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-10
14.5.1035.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-10
14.5.1035.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-10
14.5.1040.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-10
14.5.1040.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-10
14.5.1040.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-10
14.5.1040.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-10
14.5.1040.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-10
14.5.1040.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-10
14.5.1040.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-10
14.5.1040.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-10
14.5.1040.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-10
14.5.1040.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-10
14.5.1040.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-10
14.5.1040.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-10
14.5.1040.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-10
14.5.1040.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-10
14.5.1040.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1040.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-10
14.5.1045.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-10
14.5.1045.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-10
14.5.1045.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-10
14.5.1045.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-10
14.5.1045.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-10
14.5.1045.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-10
14.5.1045.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-10
14.5.1045.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-10
14.5.1045.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-10
14.5.1045.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-10
14.5.1045.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-10
14.5.1045.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-10
14.5.1045.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-10
14.5.1045.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-10
14.5.1045.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-10
14.5.1045.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-10
14.5.1050.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-10
14.5.1050.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-10
14.5.1050.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-10
14.5.1050.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-10
14.5.1050.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-10
14.5.1050.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-10
14.5.1050.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-10
14.5.1050.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-10
14.5.1050.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-10
14.5.1050.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-10
14.5.1050.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-10
14.5.1050.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-10
14.5.1050.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-10
14.5.1050.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-10
14.5.1050.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-10
14.5.1050.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-10
14.5.1055.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-10
14.5.1055.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-10
14.5.1055.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-10
14.5.1055.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-10
14.5.1055.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-10
14.5.1055.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-10
14.5.1055.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-10
14.5.1055.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-10
14.5.1055.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-10
14.5.1055.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-10
14.5.1055.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1055.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-10
14.5.1055.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-10
14.5.1055.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-10
14.5.1055.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-10
14.5.1055.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-10
14.5.1060.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-10
14.5.1060.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-10
14.5.1060.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-10
14.5.1060.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-10
14.5.1060.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-10
14.5.1060.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-10
14.5.1060.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-10
14.5.1060.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-10
14.5.1060.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-10
14.5.1060.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-10
14.5.1060.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-10
14.5.1060.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-10
14.5.1060.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-10
14.5.1060.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-10
14.5.1060.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-10
14.5.1060.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-10
14.5.1070.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-10
14.5.1070.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-10
14.5.1070.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-10
14.5.1070.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-10
14.5.1070.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-10
14.5.1070.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-10
14.5.1070.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-10
14.5.1070.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-10
14.5.1070.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-10
14.5.1070.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-10
14.5.1070.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-10
14.5.1070.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-10
14.5.1070.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-10
14.5.1070.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-10
14.5.1070.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-10
14.5.1070.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-10
14.5.1106.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-11
14.5.1106.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-11
14.5.1106.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-11
14.5.1106.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-11
14.5.1106.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-11
14.5.1106.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-11
14.5.1106.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1106.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-11
14.5.1106.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-11
14.5.1106.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-11
14.5.1106.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-11
14.5.1106.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-11
14.5.1106.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-11
14.5.1106.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-11
14.5.1106.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-11
14.5.1106.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-11
14.5.1107.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-11
14.5.1107.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-11
14.5.1107.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-11
14.5.1107.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-11
14.5.1107.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-11
14.5.1107.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-11
14.5.1107.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-11
14.5.1107.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-11
14.5.1107.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-11
14.5.1107.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-11
14.5.1107.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-11
14.5.1107.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-11
14.5.1107.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-11
14.5.1107.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-11
14.5.1107.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-11
14.5.1107.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-11
14.5.1108.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-11
14.5.1108.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-11
14.5.1108.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-11
14.5.1108.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-11
14.5.1108.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-11
14.5.1108.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-11
14.5.1108.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-11
14.5.1108.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-11
14.5.1108.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-11
14.5.1108.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-11
14.5.1108.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-11
14.5.1108.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-11
14.5.1108.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-11
14.5.1108.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-11
14.5.1108.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-11
14.5.1108.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-11
14.5.1110.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-11
14.5.1110.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-11
14.5.1110.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1110.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-11
14.5.1110.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-11
14.5.1110.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-11
14.5.1110.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-11
14.5.1110.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-11
14.5.1110.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-11
14.5.1110.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-11
14.5.1110.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-11
14.5.1110.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-11
14.5.1110.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-11
14.5.1110.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-11
14.5.1110.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-11
14.5.1110.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-11
14.5.1112.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-11
14.5.1112.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-11
14.5.1112.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-11
14.5.1112.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-11
14.5.1112.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-11
14.5.1112.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-11
14.5.1112.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-11
14.5.1112.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-11
14.5.1112.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-11
14.5.1112.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-11
14.5.1112.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-11
14.5.1112.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-11
14.5.1112.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-11
14.5.1112.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-11
14.5.1112.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-11
14.5.1112.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-11
14.5.1114.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-11
14.5.1114.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-11
14.5.1114.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-11
14.5.1114.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-11
14.5.1114.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-11
14.5.1114.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-11
14.5.1114.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-11
14.5.1114.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-11
14.5.1114.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-11
14.5.1114.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-11
14.5.1114.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-11
14.5.1114.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-11
14.5.1114.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-11
14.5.1114.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-11
14.5.1114.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1114.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-11
14.5.1116.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-11
14.5.1116.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-11
14.5.1116.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-11
14.5.1116.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-11
14.5.1116.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-11
14.5.1116.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-11
14.5.1116.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-11
14.5.1116.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-11
14.5.1116.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-11
14.5.1116.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-11
14.5.1116.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-11
14.5.1116.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-11
14.5.1116.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-11
14.5.1116.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-11
14.5.1116.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-11
14.5.1116.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-11
14.5.1118.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-11
14.5.1118.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-11
14.5.1118.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-11
14.5.1118.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-11
14.5.1118.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-11
14.5.1118.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-11
14.5.1118.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-11
14.5.1118.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-11
14.5.1118.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-11
14.5.1118.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-11
14.5.1118.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-11
14.5.1118.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-11
14.5.1118.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-11
14.5.1118.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-11
14.5.1118.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-11
14.5.1118.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-11
14.5.1121.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-11
14.5.1121.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-11
14.5.1121.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-11
14.5.1121.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-11
14.5.1121.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-11
14.5.1121.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-11
14.5.1121.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-11
14.5.1121.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-11
14.5.1121.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-11
14.5.1121.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-11
14.5.1121.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1121.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-11
14.5.1121.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-11
14.5.1121.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-11
14.5.1121.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-11
14.5.1121.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-11
14.5.1123.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-11
14.5.1123.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-11
14.5.1123.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-11
14.5.1123.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-11
14.5.1123.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-11
14.5.1123.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-11
14.5.1123.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-11
14.5.1123.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-11
14.5.1123.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-11
14.5.1123.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-11
14.5.1123.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-11
14.5.1123.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-11
14.5.1123.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-11
14.5.1123.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-11
14.5.1123.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-11
14.5.1123.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-11
14.5.1125.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-11
14.5.1125.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-11
14.5.1125.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-11
14.5.1125.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-11
14.5.1125.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-11
14.5.1125.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-11
14.5.1125.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-11
14.5.1125.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-11
14.5.1125.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-11
14.5.1125.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-11
14.5.1125.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-11
14.5.1125.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-11
14.5.1125.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-11
14.5.1125.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-11
14.5.1125.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-11
14.5.1125.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-11
14.5.1127.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-11
14.5.1127.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-11
14.5.1127.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-11
14.5.1127.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-11
14.5.1127.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-11
14.5.1127.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-11
14.5.1127.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1127.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-11
14.5.1127.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-11
14.5.1127.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-11
14.5.1127.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-11
14.5.1127.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-11
14.5.1127.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-11
14.5.1127.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-11
14.5.1127.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-11
14.5.1127.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-11
14.5.1129.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-11
14.5.1129.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-11
14.5.1129.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-11
14.5.1129.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-11
14.5.1129.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-11
14.5.1129.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-11
14.5.1129.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-11
14.5.1129.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-11
14.5.1129.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-11
14.5.1129.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-11
14.5.1129.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-11
14.5.1129.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-11
14.5.1129.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-11
14.5.1129.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-11
14.5.1129.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-11
14.5.1129.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-11
14.5.1131.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-11
14.5.1131.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-11
14.5.1131.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-11
14.5.1131.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-11
14.5.1131.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-11
14.5.1131.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-11
14.5.1131.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-11
14.5.1131.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-11
14.5.1131.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-11
14.5.1131.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-11
14.5.1131.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-11
14.5.1131.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-11
14.5.1131.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-11
14.5.1131.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-11
14.5.1131.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-11
14.5.1131.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-11
14.5.1135.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-11
14.5.1135.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-11
14.5.1135.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1135.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-11
14.5.1135.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-11
14.5.1135.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-11
14.5.1135.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-11
14.5.1135.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-11
14.5.1135.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-11
14.5.1135.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-11
14.5.1135.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-11
14.5.1135.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-11
14.5.1135.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-11
14.5.1135.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-11
14.5.1135.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-11
14.5.1135.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-11
14.5.1140.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-11
14.5.1140.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-11
14.5.1140.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-11
14.5.1140.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-11
14.5.1140.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-11
14.5.1140.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-11
14.5.1140.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-11
14.5.1140.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-11
14.5.1140.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-11
14.5.1140.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-11
14.5.1140.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-11
14.5.1140.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-11
14.5.1140.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-11
14.5.1140.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-11
14.5.1140.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-11
14.5.1140.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-11
14.5.1145.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-11
14.5.1145.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-11
14.5.1145.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-11
14.5.1145.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-11
14.5.1145.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-11
14.5.1145.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-11
14.5.1145.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-11
14.5.1145.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-11
14.5.1145.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-11
14.5.1145.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-11
14.5.1145.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-11
14.5.1145.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-11
14.5.1145.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-11
14.5.1145.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-11
14.5.1145.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1145.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-11
14.5.1150.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-11
14.5.1150.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-11
14.5.1150.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-11
14.5.1150.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-11
14.5.1150.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-11
14.5.1150.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-11
14.5.1150.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-11
14.5.1150.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-11
14.5.1150.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-11
14.5.1150.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-11
14.5.1150.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-11
14.5.1150.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-11
14.5.1150.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-11
14.5.1150.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-11
14.5.1150.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-11
14.5.1150.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-11
14.5.1155.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-11
14.5.1155.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-11
14.5.1155.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-11
14.5.1155.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-11
14.5.1155.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-11
14.5.1155.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-11
14.5.1155.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-11
14.5.1155.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-11
14.5.1155.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-11
14.5.1155.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-11
14.5.1155.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-11
14.5.1155.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-11
14.5.1155.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-11
14.5.1155.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-11
14.5.1155.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-11
14.5.1155.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-11
14.5.1160.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-11
14.5.1160.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-11
14.5.1160.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-11
14.5.1160.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-11
14.5.1160.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-11
14.5.1160.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-11
14.5.1160.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-11
14.5.1160.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-11
14.5.1160.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-11
14.5.1160.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-11
14.5.1160.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-11

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1160.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-11
14.5.1160.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-11
14.5.1160.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-11
14.5.1160.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-11
14.5.1160.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-11
14.5.1170.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-11
14.5.1170.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-11
14.5.1170.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-11
14.5.1170.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-11
14.5.1170.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-11
14.5.1170.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-11
14.5.1170.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-11
14.5.1170.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-11
14.5.1170.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-11
14.5.1170.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-11
14.5.1170.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-11
14.5.1170.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-11
14.5.1170.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-11
14.5.1170.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-11
14.5.1170.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-11
14.5.1170.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-11
14.5.1206.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-12
14.5.1206.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-12
14.5.1206.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-12
14.5.1206.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-12
14.5.1206.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-12
14.5.1206.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-12
14.5.1206.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-12
14.5.1206.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-12
14.5.1206.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-12
14.5.1206.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-12
14.5.1206.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-12
14.5.1206.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-12
14.5.1206.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-12
14.5.1206.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-12
14.5.1206.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-12
14.5.1206.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-12
14.5.1207.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-12
14.5.1207.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-12
14.5.1207.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-12
14.5.1207.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-12
14.5.1207.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-12
14.5.1207.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-12
14.5.1207.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1207.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-12
14.5.1207.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-12
14.5.1207.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-12
14.5.1207.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-12
14.5.1207.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-12
14.5.1207.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-12
14.5.1207.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-12
14.5.1207.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-12
14.5.1207.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-12
14.5.1208.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-12
14.5.1208.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-12
14.5.1208.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-12
14.5.1208.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-12
14.5.1208.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-12
14.5.1208.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-12
14.5.1208.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-12
14.5.1208.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-12
14.5.1208.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-12
14.5.1208.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-12
14.5.1208.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-12
14.5.1208.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-12
14.5.1208.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-12
14.5.1208.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-12
14.5.1208.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-12
14.5.1208.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-12
14.5.1210.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-12
14.5.1210.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-12
14.5.1210.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-12
14.5.1210.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-12
14.5.1210.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-12
14.5.1210.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-12
14.5.1210.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-12
14.5.1210.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-12
14.5.1210.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-12
14.5.1210.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-12
14.5.1210.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-12
14.5.1210.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-12
14.5.1210.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-12
14.5.1210.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-12
14.5.1210.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-12
14.5.1210.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-12
14.5.1212.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-12
14.5.1212.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-12
14.5.1212.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1212.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-12
14.5.1212.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-12
14.5.1212.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-12
14.5.1212.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-12
14.5.1212.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-12
14.5.1212.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-12
14.5.1212.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-12
14.5.1212.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-12
14.5.1212.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-12
14.5.1212.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-12
14.5.1212.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-12
14.5.1212.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-12
14.5.1212.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-12
14.5.1214.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-12
14.5.1214.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-12
14.5.1214.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-12
14.5.1214.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-12
14.5.1214.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-12
14.5.1214.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-12
14.5.1214.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-12
14.5.1214.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-12
14.5.1214.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-12
14.5.1214.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-12
14.5.1214.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-12
14.5.1214.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-12
14.5.1214.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-12
14.5.1214.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-12
14.5.1214.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-12
14.5.1214.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-12
14.5.1216.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-12
14.5.1216.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-12
14.5.1216.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-12
14.5.1216.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-12
14.5.1216.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-12
14.5.1216.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-12
14.5.1216.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-12
14.5.1216.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-12
14.5.1216.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-12
14.5.1216.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-12
14.5.1216.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-12
14.5.1216.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-12
14.5.1216.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-12
14.5.1216.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-12
14.5.1216.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1216.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-12
14.5.1218.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-12
14.5.1218.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-12
14.5.1218.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-12
14.5.1218.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-12
14.5.1218.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-12
14.5.1218.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-12
14.5.1218.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-12
14.5.1218.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-12
14.5.1218.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-12
14.5.1218.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-12
14.5.1218.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-12
14.5.1218.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-12
14.5.1218.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-12
14.5.1218.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-12
14.5.1218.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-12
14.5.1218.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-12
14.5.1221.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-12
14.5.1221.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-12
14.5.1221.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-12
14.5.1221.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-12
14.5.1221.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-12
14.5.1221.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-12
14.5.1221.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-12
14.5.1221.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-12
14.5.1221.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-12
14.5.1221.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-12
14.5.1221.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-12
14.5.1221.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-12
14.5.1221.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-12
14.5.1221.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-12
14.5.1221.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-12
14.5.1221.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-12
14.5.1223.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-12
14.5.1223.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-12
14.5.1223.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-12
14.5.1223.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-12
14.5.1223.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-12
14.5.1223.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-12
14.5.1223.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-12
14.5.1223.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-12
14.5.1223.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-12
14.5.1223.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-12
14.5.1223.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1223.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-12
14.5.1223.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-12
14.5.1223.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-12
14.5.1223.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-12
14.5.1223.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-12
14.5.1225.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-12
14.5.1225.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-12
14.5.1225.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-12
14.5.1225.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-12
14.5.1225.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-12
14.5.1225.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-12
14.5.1225.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-12
14.5.1225.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-12
14.5.1225.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-12
14.5.1225.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-12
14.5.1225.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-12
14.5.1225.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-12
14.5.1225.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-12
14.5.1225.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-12
14.5.1225.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-12
14.5.1225.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-12
14.5.1227.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-12
14.5.1227.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-12
14.5.1227.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-12
14.5.1227.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-12
14.5.1227.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-12
14.5.1227.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-12
14.5.1227.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-12
14.5.1227.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-12
14.5.1227.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-12
14.5.1227.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-12
14.5.1227.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-12
14.5.1227.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-12
14.5.1227.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-12
14.5.1227.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-12
14.5.1227.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-12
14.5.1227.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-12
14.5.1229.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-12
14.5.1229.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-12
14.5.1229.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-12
14.5.1229.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-12
14.5.1229.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-12
14.5.1229.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-12
14.5.1229.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1229.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-12
14.5.1229.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-12
14.5.1229.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-12
14.5.1229.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-12
14.5.1229.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-12
14.5.1229.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-12
14.5.1229.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-12
14.5.1229.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-12
14.5.1229.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-12
14.5.1231.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-12
14.5.1231.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-12
14.5.1231.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-12
14.5.1231.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-12
14.5.1231.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-12
14.5.1231.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-12
14.5.1231.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-12
14.5.1231.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-12
14.5.1231.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-12
14.5.1231.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-12
14.5.1231.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-12
14.5.1231.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-12
14.5.1231.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-12
14.5.1231.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-12
14.5.1231.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-12
14.5.1231.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-12
14.5.1235.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-12
14.5.1235.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-12
14.5.1235.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-12
14.5.1235.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-12
14.5.1235.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-12
14.5.1235.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-12
14.5.1235.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-12
14.5.1235.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-12
14.5.1235.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-12
14.5.1235.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-12
14.5.1235.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-12
14.5.1235.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-12
14.5.1235.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-12
14.5.1235.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-12
14.5.1235.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-12
14.5.1235.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-12
14.5.1240.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-12
14.5.1240.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-12
14.5.1240.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1240.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-12
14.5.1240.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-12
14.5.1240.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-12
14.5.1240.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-12
14.5.1240.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-12
14.5.1240.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-12
14.5.1240.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-12
14.5.1240.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-12
14.5.1240.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-12
14.5.1240.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-12
14.5.1240.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-12
14.5.1240.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-12
14.5.1240.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-12
14.5.1245.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-12
14.5.1245.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-12
14.5.1245.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-12
14.5.1245.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-12
14.5.1245.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-12
14.5.1245.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-12
14.5.1245.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-12
14.5.1245.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-12
14.5.1245.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-12
14.5.1245.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-12
14.5.1245.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-12
14.5.1245.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-12
14.5.1245.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-12
14.5.1245.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-12
14.5.1245.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-12
14.5.1245.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-12
14.5.1250.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-12
14.5.1250.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-12
14.5.1250.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-12
14.5.1250.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-12
14.5.1250.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-12
14.5.1250.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-12
14.5.1250.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-12
14.5.1250.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-12
14.5.1250.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-12
14.5.1250.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-12
14.5.1250.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-12
14.5.1250.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-12
14.5.1250.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-12
14.5.1250.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-12
14.5.1250.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1250.200E	Broca Cortante Ø 5,00 x 200,0 ER-12
14.5.1255.050E	Broca Cortante Ø 5,50 x 50,0 ER-12
14.5.1255.060E	Broca Cortante Ø 5,50 x 60,0 ER-12
14.5.1255.070E	Broca Cortante Ø 5,50 x 70,0 ER-12
14.5.1255.080E	Broca Cortante Ø 5,50 x 80,0 ER-12
14.5.1255.090E	Broca Cortante Ø 5,50 x 90,0 ER-12
14.5.1255.100E	Broca Cortante Ø 5,50 x 100,0 ER-12
14.5.1255.110E	Broca Cortante Ø 5,50 x 110,0 ER-12
14.5.1255.120E	Broca Cortante Ø 5,50 x 120,0 ER-12
14.5.1255.130E	Broca Cortante Ø 5,50 x 130,0 ER-12
14.5.1255.140E	Broca Cortante Ø 5,50 x 140,0 ER-12
14.5.1255.150E	Broca Cortante Ø 5,50 x 150,0 ER-12
14.5.1255.160E	Broca Cortante Ø 5,50 x 160,0 ER-12
14.5.1255.170E	Broca Cortante Ø 5,50 x 170,0 ER-12
14.5.1255.180E	Broca Cortante Ø 5,50 x 180,0 ER-12
14.5.1255.190E	Broca Cortante Ø 5,50 x 190,0 ER-12
14.5.1255.200E	Broca Cortante Ø 5,50 x 200,0 ER-12
14.5.1260.050E	Broca Cortante Ø 6,00 x 50,0 ER-12
14.5.1260.060E	Broca Cortante Ø 6,00 x 60,0 ER-12
14.5.1260.070E	Broca Cortante Ø 6,00 x 70,0 ER-12
14.5.1260.080E	Broca Cortante Ø 6,00 x 80,0 ER-12
14.5.1260.090E	Broca Cortante Ø 6,00 x 90,0 ER-12
14.5.1260.100E	Broca Cortante Ø 6,00 x 100,0 ER-12
14.5.1260.110E	Broca Cortante Ø 6,00 x 110,0 ER-12
14.5.1260.120E	Broca Cortante Ø 6,00 x 120,0 ER-12
14.5.1260.130E	Broca Cortante Ø 6,00 x 130,0 ER-12
14.5.1260.140E	Broca Cortante Ø 6,00 x 140,0 ER-12
14.5.1260.150E	Broca Cortante Ø 6,00 x 150,0 ER-12
14.5.1260.160E	Broca Cortante Ø 6,00 x 160,0 ER-12
14.5.1260.170E	Broca Cortante Ø 6,00 x 170,0 ER-12
14.5.1260.180E	Broca Cortante Ø 6,00 x 180,0 ER-12
14.5.1260.190E	Broca Cortante Ø 6,00 x 190,0 ER-12
14.5.1260.200E	Broca Cortante Ø 6,00 x 200,0 ER-12
14.5.1270.050E	Broca Cortante Ø 7,00 x 50,0 ER-12
14.5.1270.060E	Broca Cortante Ø 7,00 x 60,0 ER-12
14.5.1270.070E	Broca Cortante Ø 7,00 x 70,0 ER-12
14.5.1270.080E	Broca Cortante Ø 7,00 x 80,0 ER-12
14.5.1270.090E	Broca Cortante Ø 7,00 x 90,0 ER-12
14.5.1270.100E	Broca Cortante Ø 7,00 x 100,0 ER-12
14.5.1270.110E	Broca Cortante Ø 7,00 x 110,0 ER-12
14.5.1270.120E	Broca Cortante Ø 7,00 x 120,0 ER-12
14.5.1270.130E	Broca Cortante Ø 7,00 x 130,0 ER-12
14.5.1270.140E	Broca Cortante Ø 7,00 x 140,0 ER-12
14.5.1270.150E	Broca Cortante Ø 7,00 x 150,0 ER-12

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1270.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-12
14.5.1270.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-12
14.5.1270.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-12
14.5.1270.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-12
14.5.1270.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-12
14.5.1306.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-13
14.5.1306.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-13
14.5.1306.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-13
14.5.1306.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-13
14.5.1306.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-13
14.5.1306.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-13
14.5.1306.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-13
14.5.1306.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-13
14.5.1306.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-13
14.5.1306.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-13
14.5.1306.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-13
14.5.1306.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-13
14.5.1306.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-13
14.5.1306.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-13
14.5.1306.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-13
14.5.1306.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-13
14.5.1307.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-13
14.5.1307.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-13
14.5.1307.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-13
14.5.1307.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-13
14.5.1307.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-13
14.5.1307.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-13
14.5.1307.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-13
14.5.1307.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-13
14.5.1307.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-13
14.5.1307.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-13
14.5.1307.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-13
14.5.1307.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-13
14.5.1307.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-13
14.5.1307.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-13
14.5.1307.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-13
14.5.1307.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-13
14.5.1308.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-13
14.5.1308.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-13
14.5.1308.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-13
14.5.1308.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-13
14.5.1308.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-13
14.5.1308.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-13
14.5.1308.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-13

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1308.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-13
14.5.1308.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-13
14.5.1308.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-13
14.5.1308.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-13
14.5.1308.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-13
14.5.1308.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-13
14.5.1308.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-13
14.5.1308.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-13
14.5.1308.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-13
14.5.1310.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-13
14.5.1310.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-13
14.5.1310.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-13
14.5.1310.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-13
14.5.1310.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-13
14.5.1310.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-13
14.5.1310.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-13
14.5.1310.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-13
14.5.1310.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-13
14.5.1310.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-13
14.5.1310.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-13
14.5.1310.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-13
14.5.1310.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-13
14.5.1310.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-13
14.5.1310.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-13
14.5.1310.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-13
14.5.1312.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-13
14.5.1312.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-13
14.5.1312.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-13
14.5.1312.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-13
14.5.1312.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-13
14.5.1312.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-13
14.5.1312.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-13
14.5.1312.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-13
14.5.1312.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-13
14.5.1312.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-13
14.5.1312.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-13
14.5.1312.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-13
14.5.1312.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-13
14.5.1312.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-13
14.5.1312.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-13
14.5.1312.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-13
14.5.1314.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-13
14.5.1314.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-13
14.5.1314.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-13

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1314.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-13
14.5.1314.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-13
14.5.1314.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-13
14.5.1314.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-13
14.5.1314.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-13
14.5.1314.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-13
14.5.1314.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-13
14.5.1314.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-13
14.5.1314.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-13
14.5.1314.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-13
14.5.1314.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-13
14.5.1314.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-13
14.5.1314.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-13
14.5.1316.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-13
14.5.1316.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-13
14.5.1316.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-13
14.5.1316.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-13
14.5.1316.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-13
14.5.1316.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-13
14.5.1316.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-13
14.5.1316.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-13
14.5.1316.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-13
14.5.1316.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-13
14.5.1316.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-13
14.5.1316.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-13
14.5.1316.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-13
14.5.1316.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-13
14.5.1316.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-13
14.5.1316.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-13
14.5.1318.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-13
14.5.1318.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-13
14.5.1318.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-13
14.5.1318.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-13
14.5.1318.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-13
14.5.1318.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-13
14.5.1318.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-13
14.5.1318.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-13
14.5.1318.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-13
14.5.1318.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-13
14.5.1318.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-13
14.5.1318.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-13
14.5.1318.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-13
14.5.1318.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-13
14.5.1318.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-13

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1318.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-13
14.5.1321.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-13
14.5.1321.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-13
14.5.1321.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-13
14.5.1321.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-13
14.5.1321.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-13
14.5.1321.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-13
14.5.1321.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-13
14.5.1321.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-13
14.5.1321.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-13
14.5.1321.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-13
14.5.1321.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-13
14.5.1321.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-13
14.5.1321.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-13
14.5.1321.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-13
14.5.1321.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-13
14.5.1321.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-13
14.5.1323.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-13
14.5.1323.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-13
14.5.1323.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-13
14.5.1323.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-13
14.5.1323.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-13
14.5.1323.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-13
14.5.1323.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-13
14.5.1323.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-13
14.5.1323.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-13
14.5.1323.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-13
14.5.1323.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-13
14.5.1323.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-13
14.5.1323.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-13
14.5.1323.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-13
14.5.1323.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-13
14.5.1323.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-13
14.5.1325.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-13
14.5.1325.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-13
14.5.1325.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-13
14.5.1325.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-13
14.5.1325.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-13
14.5.1325.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-13
14.5.1325.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-13
14.5.1325.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-13
14.5.1325.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-13
14.5.1325.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-13
14.5.1325.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-13

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1325.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-13
14.5.1325.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-13
14.5.1325.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-13
14.5.1325.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-13
14.5.1325.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-13
14.5.1327.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-13
14.5.1327.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-13
14.5.1327.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-13
14.5.1327.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-13
14.5.1327.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-13
14.5.1327.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-13
14.5.1327.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-13
14.5.1327.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-13
14.5.1327.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-13
14.5.1327.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-13
14.5.1327.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-13
14.5.1327.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-13
14.5.1327.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-13
14.5.1327.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-13
14.5.1327.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-13
14.5.1327.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-13
14.5.1329.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-13
14.5.1329.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-13
14.5.1329.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-13
14.5.1329.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-13
14.5.1329.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-13
14.5.1329.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-13
14.5.1329.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-13
14.5.1329.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-13
14.5.1329.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-13
14.5.1329.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-13
14.5.1329.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-13
14.5.1329.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-13
14.5.1329.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-13
14.5.1329.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-13
14.5.1329.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-13
14.5.1329.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-13
14.5.1331.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-13
14.5.1331.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-13
14.5.1331.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-13
14.5.1331.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-13
14.5.1331.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-13
14.5.1331.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-13
14.5.1331.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-13

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1331.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-13
14.5.1331.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-13
14.5.1331.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-13
14.5.1331.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-13
14.5.1331.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-13
14.5.1331.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-13
14.5.1331.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-13
14.5.1331.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-13
14.5.1331.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-13
14.5.1335.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-13
14.5.1335.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-13
14.5.1335.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-13
14.5.1335.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-13
14.5.1335.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-13
14.5.1335.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-13
14.5.1335.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-13
14.5.1335.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-13
14.5.1335.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-13
14.5.1335.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-13
14.5.1335.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-13
14.5.1335.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-13
14.5.1335.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-13
14.5.1335.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-13
14.5.1335.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-13
14.5.1335.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-13
14.5.1340.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-13
14.5.1340.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-13
14.5.1340.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-13
14.5.1340.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-13
14.5.1340.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-13
14.5.1340.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-13
14.5.1340.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-13
14.5.1340.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-13
14.5.1340.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-13
14.5.1340.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-13
14.5.1340.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-13
14.5.1340.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-13
14.5.1340.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-13
14.5.1340.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-13
14.5.1340.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-13
14.5.1340.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-13
14.5.1345.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-13
14.5.1345.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-13
14.5.1345.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-13

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1345.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-13
14.5.1345.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-13
14.5.1345.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-13
14.5.1345.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-13
14.5.1345.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-13
14.5.1345.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-13
14.5.1345.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-13
14.5.1345.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-13
14.5.1345.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-13
14.5.1345.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-13
14.5.1345.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-13
14.5.1345.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-13
14.5.1345.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-13
14.5.1350.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-13
14.5.1350.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-13
14.5.1350.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-13
14.5.1350.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-13
14.5.1350.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-13
14.5.1350.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-13
14.5.1350.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-13
14.5.1350.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-13
14.5.1350.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-13
14.5.1350.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-13
14.5.1350.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-13
14.5.1350.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-13
14.5.1350.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-13
14.5.1350.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-13
14.5.1350.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-13
14.5.1350.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-13
14.5.1355.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-13
14.5.1355.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-13
14.5.1355.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-13
14.5.1355.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-13
14.5.1355.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-13
14.5.1355.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-13
14.5.1355.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-13
14.5.1355.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-13
14.5.1355.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-13
14.5.1355.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-13
14.5.1355.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-13
14.5.1355.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-13
14.5.1355.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-13
14.5.1355.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-13
14.5.1355.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-13

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.1355.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-13
14.5.1360.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-13
14.5.1360.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-13
14.5.1360.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-13
14.5.1360.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-13
14.5.1360.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-13
14.5.1360.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-13
14.5.1360.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-13
14.5.1360.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-13
14.5.1360.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-13
14.5.1360.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-13
14.5.1360.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-13
14.5.1360.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-13
14.5.1360.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-13
14.5.1360.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-13
14.5.1360.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-13
14.5.1360.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-13
14.5.1370.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-13
14.5.1370.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-13
14.5.1370.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-13
14.5.1370.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-13
14.5.1370.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-13
14.5.1370.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-13
14.5.1370.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-13
14.5.1370.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-13
14.5.1370.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-13
14.5.1370.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-13
14.5.1370.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-13
14.5.1370.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-13
14.5.1370.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-13
14.5.1370.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-13
14.5.1370.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-13
14.5.1370.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-13
14.5.1406.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-14
14.5.1406.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-14
14.5.1406.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-14
14.5.1406.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-14
14.5.1406.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-14
14.5.1406.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-14
14.5.1406.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-14
14.5.1406.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-14
14.5.1406.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-14
14.5.1406.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-14
14.5.1406.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1406.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-14
14.5.1406.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-14
14.5.1406.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-14
14.5.1406.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-14
14.5.1406.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-14
14.5.1407.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-14
14.5.1407.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-14
14.5.1407.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-14
14.5.1407.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-14
14.5.1407.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-14
14.5.1407.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-14
14.5.1407.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-14
14.5.1407.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-14
14.5.1407.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-14
14.5.1407.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-14
14.5.1407.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-14
14.5.1407.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-14
14.5.1407.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-14
14.5.1407.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-14
14.5.1407.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-14
14.5.1407.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-14
14.5.1408.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-14
14.5.1408.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-14
14.5.1408.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-14
14.5.1408.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-14
14.5.1408.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-14
14.5.1408.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-14
14.5.1408.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-14
14.5.1408.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-14
14.5.1408.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-14
14.5.1408.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-14
14.5.1408.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-14
14.5.1408.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-14
14.5.1408.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-14
14.5.1408.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-14
14.5.1408.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-14
14.5.1408.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-14
14.5.1410.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-14
14.5.1410.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-14
14.5.1410.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-14
14.5.1410.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-14
14.5.1410.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-14
14.5.1410.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-14
14.5.1410.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1410.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-14
14.5.1410.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-14
14.5.1410.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-14
14.5.1410.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-14
14.5.1410.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-14
14.5.1410.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-14
14.5.1410.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-14
14.5.1410.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-14
14.5.1410.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-14
14.5.1412.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-14
14.5.1412.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-14
14.5.1412.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-14
14.5.1412.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-14
14.5.1412.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-14
14.5.1412.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-14
14.5.1412.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-14
14.5.1412.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-14
14.5.1412.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-14
14.5.1412.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-14
14.5.1412.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-14
14.5.1412.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-14
14.5.1412.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-14
14.5.1412.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-14
14.5.1412.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-14
14.5.1412.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-14
14.5.1414.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-14
14.5.1414.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-14
14.5.1414.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-14
14.5.1414.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-14
14.5.1414.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-14
14.5.1414.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-14
14.5.1414.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-14
14.5.1414.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-14
14.5.1414.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-14
14.5.1414.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-14
14.5.1414.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-14
14.5.1414.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-14
14.5.1414.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-14
14.5.1414.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-14
14.5.1414.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-14
14.5.1414.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-14
14.5.1416.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-14
14.5.1416.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-14
14.5.1416.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1416.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-14
14.5.1416.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-14
14.5.1416.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-14
14.5.1416.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-14
14.5.1416.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-14
14.5.1416.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-14
14.5.1416.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-14
14.5.1416.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-14
14.5.1416.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-14
14.5.1416.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-14
14.5.1416.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-14
14.5.1416.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-14
14.5.1416.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-14
14.5.1418.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-14
14.5.1418.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-14
14.5.1418.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-14
14.5.1418.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-14
14.5.1418.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-14
14.5.1418.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-14
14.5.1418.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-14
14.5.1418.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-14
14.5.1418.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-14
14.5.1418.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-14
14.5.1418.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-14
14.5.1418.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-14
14.5.1418.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-14
14.5.1418.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-14
14.5.1418.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-14
14.5.1418.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-14
14.5.1421.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-14
14.5.1421.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-14
14.5.1421.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-14
14.5.1421.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-14
14.5.1421.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-14
14.5.1421.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-14
14.5.1421.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-14
14.5.1421.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-14
14.5.1421.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-14
14.5.1421.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-14
14.5.1421.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-14
14.5.1421.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-14
14.5.1421.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-14
14.5.1421.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-14
14.5.1421.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1421.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-14
14.5.1423.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-14
14.5.1423.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-14
14.5.1423.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-14
14.5.1423.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-14
14.5.1423.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-14
14.5.1423.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-14
14.5.1423.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-14
14.5.1423.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-14
14.5.1423.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-14
14.5.1423.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-14
14.5.1423.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-14
14.5.1423.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-14
14.5.1423.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-14
14.5.1423.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-14
14.5.1423.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-14
14.5.1423.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-14
14.5.1425.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-14
14.5.1425.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-14
14.5.1425.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-14
14.5.1425.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-14
14.5.1425.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-14
14.5.1425.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-14
14.5.1425.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-14
14.5.1425.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-14
14.5.1425.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-14
14.5.1425.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-14
14.5.1425.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-14
14.5.1425.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-14
14.5.1425.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-14
14.5.1425.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-14
14.5.1425.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-14
14.5.1425.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-14
14.5.1427.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-14
14.5.1427.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-14
14.5.1427.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-14
14.5.1427.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-14
14.5.1427.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-14
14.5.1427.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-14
14.5.1427.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-14
14.5.1427.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-14
14.5.1427.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-14
14.5.1427.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-14
14.5.1427.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1427.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-14
14.5.1427.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-14
14.5.1427.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-14
14.5.1427.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-14
14.5.1427.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-14
14.5.1429.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-14
14.5.1429.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-14
14.5.1429.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-14
14.5.1429.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-14
14.5.1429.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-14
14.5.1429.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-14
14.5.1429.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-14
14.5.1429.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-14
14.5.1429.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-14
14.5.1429.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-14
14.5.1429.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-14
14.5.1429.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-14
14.5.1429.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-14
14.5.1429.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-14
14.5.1429.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-14
14.5.1429.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-14
14.5.1431.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-14
14.5.1431.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-14
14.5.1431.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-14
14.5.1431.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-14
14.5.1431.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-14
14.5.1431.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-14
14.5.1431.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-14
14.5.1431.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-14
14.5.1431.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-14
14.5.1431.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-14
14.5.1431.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-14
14.5.1431.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-14
14.5.1431.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-14
14.5.1431.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-14
14.5.1431.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-14
14.5.1431.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-14
14.5.1435.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-14
14.5.1435.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-14
14.5.1435.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-14
14.5.1435.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-14
14.5.1435.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-14
14.5.1435.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-14
14.5.1435.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1435.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-14
14.5.1435.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-14
14.5.1435.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-14
14.5.1435.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-14
14.5.1435.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-14
14.5.1435.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-14
14.5.1435.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-14
14.5.1435.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-14
14.5.1435.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-14
14.5.1440.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-14
14.5.1440.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-14
14.5.1440.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-14
14.5.1440.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-14
14.5.1440.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-14
14.5.1440.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-14
14.5.1440.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-14
14.5.1440.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-14
14.5.1440.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-14
14.5.1440.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-14
14.5.1440.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-14
14.5.1440.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-14
14.5.1440.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-14
14.5.1440.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-14
14.5.1440.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-14
14.5.1440.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-14
14.5.1445.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-14
14.5.1445.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-14
14.5.1445.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-14
14.5.1445.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-14
14.5.1445.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-14
14.5.1445.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-14
14.5.1445.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-14
14.5.1445.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-14
14.5.1445.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-14
14.5.1445.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-14
14.5.1445.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-14
14.5.1445.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-14
14.5.1445.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-14
14.5.1445.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-14
14.5.1445.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-14
14.5.1445.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-14
14.5.1450.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-14
14.5.1450.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-14
14.5.1450.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1450.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-14
14.5.1450.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-14
14.5.1450.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-14
14.5.1450.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-14
14.5.1450.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-14
14.5.1450.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-14
14.5.1450.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-14
14.5.1450.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-14
14.5.1450.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-14
14.5.1450.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-14
14.5.1450.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-14
14.5.1450.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-14
14.5.1450.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-14
14.5.1455.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-14
14.5.1455.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-14
14.5.1455.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-14
14.5.1455.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-14
14.5.1455.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-14
14.5.1455.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-14
14.5.1455.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-14
14.5.1455.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-14
14.5.1455.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-14
14.5.1455.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-14
14.5.1455.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-14
14.5.1455.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-14
14.5.1455.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-14
14.5.1455.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-14
14.5.1455.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-14
14.5.1455.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-14
14.5.1460.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-14
14.5.1460.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-14
14.5.1460.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-14
14.5.1460.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-14
14.5.1460.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-14
14.5.1460.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-14
14.5.1460.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-14
14.5.1460.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-14
14.5.1460.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-14
14.5.1460.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-14
14.5.1460.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-14
14.5.1460.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-14
14.5.1460.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-14
14.5.1460.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-14
14.5.1460.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1460.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-14
14.5.1470.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-14
14.5.1470.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-14
14.5.1470.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-14
14.5.1470.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-14
14.5.1470.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-14
14.5.1470.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-14
14.5.1470.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-14
14.5.1470.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-14
14.5.1470.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-14
14.5.1470.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-14
14.5.1470.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-14
14.5.1470.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-14
14.5.1470.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-14
14.5.1470.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-14
14.5.1470.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-14
14.5.1470.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-14
14.5.1506.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-15
14.5.1506.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-15
14.5.1506.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-15
14.5.1506.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-15
14.5.1506.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-15
14.5.1506.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-15
14.5.1506.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-15
14.5.1506.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-15
14.5.1506.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-15
14.5.1506.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-15
14.5.1506.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-15
14.5.1506.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-15
14.5.1506.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-15
14.5.1506.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-15
14.5.1506.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-15
14.5.1506.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-15
14.5.1507.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-15
14.5.1507.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-15
14.5.1507.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-15
14.5.1507.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-15
14.5.1507.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-15
14.5.1507.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-15
14.5.1507.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-15
14.5.1507.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-15
14.5.1507.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-15
14.5.1507.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-15
14.5.1507.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1507.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-15
14.5.1507.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-15
14.5.1507.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-15
14.5.1507.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-15
14.5.1507.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-15
14.5.1508.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-15
14.5.1508.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-15
14.5.1508.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-15
14.5.1508.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-15
14.5.1508.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-15
14.5.1508.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-15
14.5.1508.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-15
14.5.1508.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-15
14.5.1508.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-15
14.5.1508.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-15
14.5.1508.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-15
14.5.1508.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-15
14.5.1508.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-15
14.5.1508.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-15
14.5.1508.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-15
14.5.1508.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-15
14.5.1510.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-15
14.5.1510.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-15
14.5.1510.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-15
14.5.1510.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-15
14.5.1510.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-15
14.5.1510.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-15
14.5.1510.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-15
14.5.1510.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-15
14.5.1510.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-15
14.5.1510.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-15
14.5.1510.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-15
14.5.1510.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-15
14.5.1510.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-15
14.5.1510.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-15
14.5.1510.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-15
14.5.1510.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-15
14.5.1512.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-15
14.5.1512.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-15
14.5.1512.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-15
14.5.1512.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-15
14.5.1512.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-15
14.5.1512.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-15
14.5.1512.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1512.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-15
14.5.1512.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-15
14.5.1512.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-15
14.5.1512.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-15
14.5.1512.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-15
14.5.1512.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-15
14.5.1512.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-15
14.5.1512.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-15
14.5.1512.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-15
14.5.1514.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-15
14.5.1514.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-15
14.5.1514.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-15
14.5.1514.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-15
14.5.1514.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-15
14.5.1514.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-15
14.5.1514.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-15
14.5.1514.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-15
14.5.1514.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-15
14.5.1514.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-15
14.5.1514.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-15
14.5.1514.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-15
14.5.1514.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-15
14.5.1514.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-15
14.5.1514.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-15
14.5.1514.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-15
14.5.1516.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-15
14.5.1516.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-15
14.5.1516.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-15
14.5.1516.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-15
14.5.1516.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-15
14.5.1516.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-15
14.5.1516.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-15
14.5.1516.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-15
14.5.1516.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-15
14.5.1516.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-15
14.5.1516.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-15
14.5.1516.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-15
14.5.1516.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-15
14.5.1516.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-15
14.5.1516.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-15
14.5.1516.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-15
14.5.1518.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-15
14.5.1518.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-15
14.5.1518.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1518.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-15
14.5.1518.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-15
14.5.1518.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-15
14.5.1518.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-15
14.5.1518.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-15
14.5.1518.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-15
14.5.1518.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-15
14.5.1518.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-15
14.5.1518.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-15
14.5.1518.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-15
14.5.1518.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-15
14.5.1518.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-15
14.5.1518.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-15
14.5.1521.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-15
14.5.1521.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-15
14.5.1521.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-15
14.5.1521.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-15
14.5.1521.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-15
14.5.1521.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-15
14.5.1521.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-15
14.5.1521.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-15
14.5.1521.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-15
14.5.1521.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-15
14.5.1521.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-15
14.5.1521.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-15
14.5.1521.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-15
14.5.1521.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-15
14.5.1521.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-15
14.5.1521.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-15
14.5.1523.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-15
14.5.1523.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-15
14.5.1523.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-15
14.5.1523.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-15
14.5.1523.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-15
14.5.1523.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-15
14.5.1523.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-15
14.5.1523.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-15
14.5.1523.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-15
14.5.1523.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-15
14.5.1523.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-15
14.5.1523.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-15
14.5.1523.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-15
14.5.1523.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-15
14.5.1523.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1523.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-15
14.5.1525.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-15
14.5.1525.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-15
14.5.1525.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-15
14.5.1525.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-15
14.5.1525.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-15
14.5.1525.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-15
14.5.1525.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-15
14.5.1525.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-15
14.5.1525.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-15
14.5.1525.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-15
14.5.1525.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-15
14.5.1525.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-15
14.5.1525.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-15
14.5.1525.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-15
14.5.1525.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-15
14.5.1525.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-15
14.5.1527.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-15
14.5.1527.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-15
14.5.1527.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-15
14.5.1527.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-15
14.5.1527.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-15
14.5.1527.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-15
14.5.1527.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-15
14.5.1527.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-15
14.5.1527.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-15
14.5.1527.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-15
14.5.1527.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-15
14.5.1527.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-15
14.5.1527.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-15
14.5.1527.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-15
14.5.1527.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-15
14.5.1527.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-15
14.5.1529.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-15
14.5.1529.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-15
14.5.1529.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-15
14.5.1529.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-15
14.5.1529.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-15
14.5.1529.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-15
14.5.1529.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-15
14.5.1529.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-15
14.5.1529.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-15
14.5.1529.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-15
14.5.1529.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1529.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-15
14.5.1529.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-15
14.5.1529.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-15
14.5.1529.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-15
14.5.1529.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-15
14.5.1531.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-15
14.5.1531.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-15
14.5.1531.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-15
14.5.1531.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-15
14.5.1531.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-15
14.5.1531.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-15
14.5.1531.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-15
14.5.1531.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-15
14.5.1531.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-15
14.5.1531.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-15
14.5.1531.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-15
14.5.1531.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-15
14.5.1531.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-15
14.5.1531.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-15
14.5.1531.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-15
14.5.1531.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-15
14.5.1535.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-15
14.5.1535.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-15
14.5.1535.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-15
14.5.1535.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-15
14.5.1535.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-15
14.5.1535.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-15
14.5.1535.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-15
14.5.1535.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-15
14.5.1535.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-15
14.5.1535.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-15
14.5.1535.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-15
14.5.1535.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-15
14.5.1535.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-15
14.5.1535.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-15
14.5.1535.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-15
14.5.1535.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-15
14.5.1540.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-15
14.5.1540.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-15
14.5.1540.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-15
14.5.1540.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-15
14.5.1540.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-15
14.5.1540.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-15
14.5.1540.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1540.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-15
14.5.1540.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-15
14.5.1540.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-15
14.5.1540.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-15
14.5.1540.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-15
14.5.1540.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-15
14.5.1540.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-15
14.5.1540.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-15
14.5.1540.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-15
14.5.1545.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-15
14.5.1545.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-15
14.5.1545.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-15
14.5.1545.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-15
14.5.1545.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-15
14.5.1545.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-15
14.5.1545.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-15
14.5.1545.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-15
14.5.1545.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-15
14.5.1545.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-15
14.5.1545.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-15
14.5.1545.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-15
14.5.1545.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-15
14.5.1545.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-15
14.5.1545.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-15
14.5.1545.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-15
14.5.1550.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-15
14.5.1550.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-15
14.5.1550.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-15
14.5.1550.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-15
14.5.1550.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-15
14.5.1550.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-15
14.5.1550.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-15
14.5.1550.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-15
14.5.1550.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-15
14.5.1550.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-15
14.5.1550.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-15
14.5.1550.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-15
14.5.1550.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-15
14.5.1550.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-15
14.5.1550.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-15
14.5.1550.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-15
14.5.1555.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-15
14.5.1555.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-15
14.5.1555.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1555.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-15
14.5.1555.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-15
14.5.1555.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-15
14.5.1555.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-15
14.5.1555.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-15
14.5.1555.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-15
14.5.1555.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-15
14.5.1555.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-15
14.5.1555.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-15
14.5.1555.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-15
14.5.1555.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-15
14.5.1555.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-15
14.5.1555.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-15
14.5.1560.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-15
14.5.1560.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-15
14.5.1560.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-15
14.5.1560.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-15
14.5.1560.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-15
14.5.1560.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-15
14.5.1560.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-15
14.5.1560.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-15
14.5.1560.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-15
14.5.1560.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-15
14.5.1560.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-15
14.5.1560.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-15
14.5.1560.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-15
14.5.1560.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-15
14.5.1560.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-15
14.5.1560.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-15
14.5.1570.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-15
14.5.1570.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-15
14.5.1570.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-15
14.5.1570.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-15
14.5.1570.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-15
14.5.1570.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-15
14.5.1570.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-15
14.5.1570.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-15
14.5.1570.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-15
14.5.1570.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-15
14.5.1570.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-15
14.5.1570.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-15
14.5.1570.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-15
14.5.1570.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-15
14.5.1570.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-15

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1570.200E	Broca Cortante \varnothing 7,00 x 200,0 ER-15
14.5.1606.050E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 50,0 ER-16
14.5.1606.060E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 60,0 ER-16
14.5.1606.070E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 70,0 ER-16
14.5.1606.080E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 80,0 ER-16
14.5.1606.090E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 90,0 ER-16
14.5.1606.100E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 100,0 ER-16
14.5.1606.110E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 110,0 ER-16
14.5.1606.120E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 120,0 ER-16
14.5.1606.130E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 130,0 ER-16
14.5.1606.140E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 140,0 ER-16
14.5.1606.150E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 150,0 ER-16
14.5.1606.160E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 160,0 ER-16
14.5.1606.170E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 170,0 ER-16
14.5.1606.180E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 180,0 ER-16
14.5.1606.190E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 190,0 ER-16
14.5.1606.200E	Broca Cortante \varnothing 0,60 x 200,0 ER-16
14.5.1607.050E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 50,0 ER-16
14.5.1607.060E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 60,0 ER-16
14.5.1607.070E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 70,0 ER-16
14.5.1607.080E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 80,0 ER-16
14.5.1607.090E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 90,0 ER-16
14.5.1607.100E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 100,0 ER-16
14.5.1607.110E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 110,0 ER-16
14.5.1607.120E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 120,0 ER-16
14.5.1607.130E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 130,0 ER-16
14.5.1607.140E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 140,0 ER-16
14.5.1607.150E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 150,0 ER-16
14.5.1607.160E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 160,0 ER-16
14.5.1607.170E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 170,0 ER-16
14.5.1607.180E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 180,0 ER-16
14.5.1607.190E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 190,0 ER-16
14.5.1607.200E	Broca Cortante \varnothing 0,70 x 200,0 ER-16
14.5.1608.050E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 50,0 ER-16
14.5.1608.060E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 60,0 ER-16
14.5.1608.070E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 70,0 ER-16
14.5.1608.080E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 80,0 ER-16
14.5.1608.090E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 90,0 ER-16
14.5.1608.100E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 100,0 ER-16
14.5.1608.110E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 110,0 ER-16
14.5.1608.120E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 120,0 ER-16
14.5.1608.130E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 130,0 ER-16
14.5.1608.140E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 140,0 ER-16
14.5.1608.150E	Broca Cortante \varnothing 0,80 x 150,0 ER-16

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1608.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-16
14.5.1608.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-16
14.5.1608.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-16
14.5.1608.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-16
14.5.1608.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-16
14.5.1610.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-16
14.5.1610.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-16
14.5.1610.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-16
14.5.1610.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-16
14.5.1610.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-16
14.5.1610.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-16
14.5.1610.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-16
14.5.1610.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-16
14.5.1610.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-16
14.5.1610.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-16
14.5.1610.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-16
14.5.1610.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-16
14.5.1610.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-16
14.5.1610.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-16
14.5.1610.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-16
14.5.1610.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-16
14.5.1612.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-16
14.5.1612.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-16
14.5.1612.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-16
14.5.1612.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-16
14.5.1612.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-16
14.5.1612.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-16
14.5.1612.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-16
14.5.1612.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-16
14.5.1612.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-16
14.5.1612.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-16
14.5.1612.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-16
14.5.1612.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-16
14.5.1612.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-16
14.5.1612.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-16
14.5.1612.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-16
14.5.1612.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-16
14.5.1614.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-16
14.5.1614.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-16
14.5.1614.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-16
14.5.1614.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-16
14.5.1614.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-16
14.5.1614.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-16
14.5.1614.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-16

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1614.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-16
14.5.1614.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-16
14.5.1614.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-16
14.5.1614.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-16
14.5.1614.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-16
14.5.1614.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-16
14.5.1614.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-16
14.5.1614.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-16
14.5.1614.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-16
14.5.1616.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-16
14.5.1616.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-16
14.5.1616.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-16
14.5.1616.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-16
14.5.1616.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-16
14.5.1616.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-16
14.5.1616.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-16
14.5.1616.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-16
14.5.1616.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-16
14.5.1616.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-16
14.5.1616.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-16
14.5.1616.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-16
14.5.1616.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-16
14.5.1616.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-16
14.5.1616.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-16
14.5.1616.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-16
14.5.1618.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-16
14.5.1618.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-16
14.5.1618.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-16
14.5.1618.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-16
14.5.1618.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-16
14.5.1618.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-16
14.5.1618.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-16
14.5.1618.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-16
14.5.1618.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-16
14.5.1618.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-16
14.5.1618.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-16
14.5.1618.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-16
14.5.1618.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-16
14.5.1618.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-16
14.5.1618.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-16
14.5.1618.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-16
14.5.1621.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-16
14.5.1621.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-16
14.5.1621.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-16

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1621.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-16
14.5.1621.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-16
14.5.1621.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-16
14.5.1621.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-16
14.5.1621.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-16
14.5.1621.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-16
14.5.1621.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-16
14.5.1621.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-16
14.5.1621.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-16
14.5.1621.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-16
14.5.1621.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-16
14.5.1621.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-16
14.5.1621.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-16
14.5.1623.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-16
14.5.1623.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-16
14.5.1623.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-16
14.5.1623.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-16
14.5.1623.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-16
14.5.1623.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-16
14.5.1623.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-16
14.5.1623.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-16
14.5.1623.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-16
14.5.1623.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-16
14.5.1623.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-16
14.5.1623.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-16
14.5.1623.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-16
14.5.1623.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-16
14.5.1623.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-16
14.5.1623.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-16
14.5.1625.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-16
14.5.1625.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-16
14.5.1625.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-16
14.5.1625.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-16
14.5.1625.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-16
14.5.1625.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-16
14.5.1625.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-16
14.5.1625.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-16
14.5.1625.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-16
14.5.1625.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-16
14.5.1625.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-16
14.5.1625.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-16
14.5.1625.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-16
14.5.1625.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-16
14.5.1625.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-16

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1625.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-16
14.5.1627.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-16
14.5.1627.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-16
14.5.1627.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-16
14.5.1627.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-16
14.5.1627.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-16
14.5.1627.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-16
14.5.1627.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-16
14.5.1627.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-16
14.5.1627.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-16
14.5.1627.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-16
14.5.1627.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-16
14.5.1627.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-16
14.5.1627.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-16
14.5.1627.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-16
14.5.1627.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-16
14.5.1627.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-16
14.5.1629.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-16
14.5.1629.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-16
14.5.1629.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-16
14.5.1629.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-16
14.5.1629.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-16
14.5.1629.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-16
14.5.1629.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-16
14.5.1629.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-16
14.5.1629.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-16
14.5.1629.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-16
14.5.1629.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-16
14.5.1629.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-16
14.5.1629.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-16
14.5.1629.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-16
14.5.1629.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-16
14.5.1629.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-16
14.5.1631.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-16
14.5.1631.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-16
14.5.1631.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-16
14.5.1631.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-16
14.5.1631.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-16
14.5.1631.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-16
14.5.1631.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-16
14.5.1631.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-16
14.5.1631.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-16
14.5.1631.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-16
14.5.1631.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-16

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1631.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-16
14.5.1631.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-16
14.5.1631.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-16
14.5.1631.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-16
14.5.1631.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-16
14.5.1635.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-16
14.5.1635.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-16
14.5.1635.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-16
14.5.1635.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-16
14.5.1635.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-16
14.5.1635.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-16
14.5.1635.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-16
14.5.1635.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-16
14.5.1635.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-16
14.5.1635.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-16
14.5.1635.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-16
14.5.1635.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-16
14.5.1635.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-16
14.5.1635.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-16
14.5.1635.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-16
14.5.1635.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-16
14.5.1640.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-16
14.5.1640.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-16
14.5.1640.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-16
14.5.1640.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-16
14.5.1640.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-16
14.5.1640.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-16
14.5.1640.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-16
14.5.1640.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-16
14.5.1640.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-16
14.5.1640.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-16
14.5.1640.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-16
14.5.1640.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-16
14.5.1640.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-16
14.5.1640.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-16
14.5.1640.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-16
14.5.1640.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-16
14.5.1645.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-16
14.5.1645.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-16
14.5.1645.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-16
14.5.1645.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-16
14.5.1645.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-16
14.5.1645.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-16
14.5.1645.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-16

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1645.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-16
14.5.1645.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-16
14.5.1645.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-16
14.5.1645.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-16
14.5.1645.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-16
14.5.1645.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-16
14.5.1645.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-16
14.5.1645.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-16
14.5.1645.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-16
14.5.1650.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-16
14.5.1650.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-16
14.5.1650.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-16
14.5.1650.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-16
14.5.1650.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-16
14.5.1650.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-16
14.5.1650.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-16
14.5.1650.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-16
14.5.1650.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-16
14.5.1650.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-16
14.5.1650.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-16
14.5.1650.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-16
14.5.1650.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-16
14.5.1650.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-16
14.5.1650.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-16
14.5.1650.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-16
14.5.1655.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-16
14.5.1655.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-16
14.5.1655.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-16
14.5.1655.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-16
14.5.1655.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-16
14.5.1655.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-16
14.5.1655.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-16
14.5.1655.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-16
14.5.1655.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-16
14.5.1655.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-16
14.5.1655.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-16
14.5.1655.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-16
14.5.1655.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-16
14.5.1655.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-16
14.5.1655.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-16
14.5.1655.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-16
14.5.1660.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-16
14.5.1660.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-16
14.5.1660.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-16

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1660.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-16
14.5.1660.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-16
14.5.1660.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-16
14.5.1660.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-16
14.5.1660.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-16
14.5.1660.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-16
14.5.1660.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-16
14.5.1660.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-16
14.5.1660.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-16
14.5.1660.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-16
14.5.1660.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-16
14.5.1660.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-16
14.5.1660.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-16
14.5.1670.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-16
14.5.1670.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-16
14.5.1670.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-16
14.5.1670.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-16
14.5.1670.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-16
14.5.1670.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-16
14.5.1670.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-16
14.5.1670.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-16
14.5.1670.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-16
14.5.1670.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-16
14.5.1670.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-16
14.5.1670.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-16
14.5.1670.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-16
14.5.1670.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-16
14.5.1670.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-16
14.5.1670.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-16
14.5.1706.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-17
14.5.1706.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-17
14.5.1706.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-17
14.5.1706.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-17
14.5.1706.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-17
14.5.1706.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-17
14.5.1706.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-17
14.5.1706.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-17
14.5.1706.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-17
14.5.1706.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-17
14.5.1706.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-17
14.5.1706.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-17
14.5.1706.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-17
14.5.1706.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-17
14.5.1706.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.1706.200E	Broca Cortante \varnothing 0.60 x 200.0 ER-17
14.5.1707.050E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 50.0 ER-17
14.5.1707.060E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 60.0 ER-17
14.5.1707.070E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 70.0 ER-17
14.5.1707.080E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 80.0 ER-17
14.5.1707.090E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 90.0 ER-17
14.5.1707.100E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 100.0 ER-17
14.5.1707.110E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 110.0 ER-17
14.5.1707.120E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 120.0 ER-17
14.5.1707.130E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 130.0 ER-17
14.5.1707.140E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 140.0 ER-17
14.5.1707.150E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 150.0 ER-17
14.5.1707.160E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 160.0 ER-17
14.5.1707.170E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 170.0 ER-17
14.5.1707.180E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 180.0 ER-17
14.5.1707.190E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 190.0 ER-17
14.5.1707.200E	Broca Cortante \varnothing 0.70 x 200.0 ER-17
14.5.1708.050E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 50.0 ER-17
14.5.1708.060E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 60.0 ER-17
14.5.1708.070E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 70.0 ER-17
14.5.1708.080E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 80.0 ER-17
14.5.1708.090E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 90.0 ER-17
14.5.1708.100E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 100.0 ER-17
14.5.1708.110E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 110.0 ER-17
14.5.1708.120E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 120.0 ER-17
14.5.1708.130E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 130.0 ER-17
14.5.1708.140E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 140.0 ER-17
14.5.1708.150E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 150.0 ER-17
14.5.1708.160E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 160.0 ER-17
14.5.1708.170E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 170.0 ER-17
14.5.1708.180E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 180.0 ER-17
14.5.1708.190E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 190.0 ER-17
14.5.1708.200E	Broca Cortante \varnothing 0.80 x 200.0 ER-17
14.5.1710.050E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 50.0 ER-17
14.5.1710.060E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 60.0 ER-17
14.5.1710.070E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 70.0 ER-17
14.5.1710.080E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 80.0 ER-17
14.5.1710.090E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 90.0 ER-17
14.5.1710.100E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 100.0 ER-17
14.5.1710.110E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 110.0 ER-17
14.5.1710.120E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 120.0 ER-17
14.5.1710.130E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 130.0 ER-17
14.5.1710.140E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 140.0 ER-17
14.5.1710.150E	Broca Cortante \varnothing 1.00 x 150.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1710.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-17
14.5.1710.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-17
14.5.1710.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-17
14.5.1710.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-17
14.5.1710.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-17
14.5.1712.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-17
14.5.1712.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-17
14.5.1712.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-17
14.5.1712.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-17
14.5.1712.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-17
14.5.1712.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-17
14.5.1712.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-17
14.5.1712.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-17
14.5.1712.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-17
14.5.1712.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-17
14.5.1712.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-17
14.5.1712.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-17
14.5.1712.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-17
14.5.1712.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-17
14.5.1712.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-17
14.5.1712.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-17
14.5.1714.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-17
14.5.1714.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-17
14.5.1714.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-17
14.5.1714.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-17
14.5.1714.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-17
14.5.1714.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-17
14.5.1714.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-17
14.5.1714.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-17
14.5.1714.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-17
14.5.1714.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-17
14.5.1714.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-17
14.5.1714.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-17
14.5.1714.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-17
14.5.1714.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-17
14.5.1714.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-17
14.5.1714.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-17
14.5.1716.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-17
14.5.1716.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-17
14.5.1716.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-17
14.5.1716.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-17
14.5.1716.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-17
14.5.1716.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-17
14.5.1716.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.1716.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-17
14.5.1716.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-17
14.5.1716.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-17
14.5.1716.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-17
14.5.1716.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-17
14.5.1716.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-17
14.5.1716.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-17
14.5.1716.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-17
14.5.1716.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-17
14.5.1718.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-17
14.5.1718.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-17
14.5.1718.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-17
14.5.1718.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-17
14.5.1718.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-17
14.5.1718.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-17
14.5.1718.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-17
14.5.1718.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-17
14.5.1718.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-17
14.5.1718.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-17
14.5.1718.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-17
14.5.1718.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-17
14.5.1718.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-17
14.5.1718.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-17
14.5.1718.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-17
14.5.1718.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-17
14.5.1721.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-17
14.5.1721.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-17
14.5.1721.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-17
14.5.1721.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-17
14.5.1721.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-17
14.5.1721.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-17
14.5.1721.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-17
14.5.1721.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-17
14.5.1721.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-17
14.5.1721.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-17
14.5.1721.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-17
14.5.1721.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-17
14.5.1721.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-17
14.5.1721.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-17
14.5.1721.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-17
14.5.1721.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-17
14.5.1723.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-17
14.5.1723.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-17
14.5.1723.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1723.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-17
14.5.1723.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-17
14.5.1723.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-17
14.5.1723.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-17
14.5.1723.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-17
14.5.1723.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-17
14.5.1723.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-17
14.5.1723.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-17
14.5.1723.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-17
14.5.1723.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-17
14.5.1723.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-17
14.5.1723.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-17
14.5.1723.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-17
14.5.1725.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-17
14.5.1725.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-17
14.5.1725.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-17
14.5.1725.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-17
14.5.1725.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-17
14.5.1725.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-17
14.5.1725.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-17
14.5.1725.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-17
14.5.1725.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-17
14.5.1725.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-17
14.5.1725.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-17
14.5.1725.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-17
14.5.1725.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-17
14.5.1725.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-17
14.5.1725.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-17
14.5.1725.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-17
14.5.1727.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-17
14.5.1727.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-17
14.5.1727.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-17
14.5.1727.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-17
14.5.1727.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-17
14.5.1727.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-17
14.5.1727.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-17
14.5.1727.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-17
14.5.1727.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-17
14.5.1727.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-17
14.5.1727.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-17
14.5.1727.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-17
14.5.1727.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-17
14.5.1727.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-17
14.5.1727.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1727.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-17
14.5.1729.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-17
14.5.1729.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-17
14.5.1729.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-17
14.5.1729.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-17
14.5.1729.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-17
14.5.1729.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-17
14.5.1729.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-17
14.5.1729.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-17
14.5.1729.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-17
14.5.1729.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-17
14.5.1729.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-17
14.5.1729.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-17
14.5.1729.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-17
14.5.1729.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-17
14.5.1729.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-17
14.5.1729.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-17
14.5.1731.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-17
14.5.1731.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-17
14.5.1731.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-17
14.5.1731.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-17
14.5.1731.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-17
14.5.1731.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-17
14.5.1731.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-17
14.5.1731.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-17
14.5.1731.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-17
14.5.1731.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-17
14.5.1731.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-17
14.5.1731.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-17
14.5.1731.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-17
14.5.1731.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-17
14.5.1731.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-17
14.5.1731.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-17
14.5.1735.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-17
14.5.1735.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-17
14.5.1735.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-17
14.5.1735.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-17
14.5.1735.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-17
14.5.1735.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-17
14.5.1735.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-17
14.5.1735.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-17
14.5.1735.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-17
14.5.1735.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-17
14.5.1735.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.1735.160E	Broca Cortante \varnothing 3.50 x 160.0 ER-17
14.5.1735.170E	Broca Cortante \varnothing 3.50 x 170.0 ER-17
14.5.1735.180E	Broca Cortante \varnothing 3.50 x 180.0 ER-17
14.5.1735.190E	Broca Cortante \varnothing 3.50 x 190.0 ER-17
14.5.1735.200E	Broca Cortante \varnothing 3.50 x 200.0 ER-17
14.5.1740.050E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 50.0 ER-17
14.5.1740.060E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 60.0 ER-17
14.5.1740.070E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 70.0 ER-17
14.5.1740.080E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 80.0 ER-17
14.5.1740.090E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 90.0 ER-17
14.5.1740.100E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 100.0 ER-17
14.5.1740.110E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 110.0 ER-17
14.5.1740.120E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 120.0 ER-17
14.5.1740.130E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 130.0 ER-17
14.5.1740.140E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 140.0 ER-17
14.5.1740.150E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 150.0 ER-17
14.5.1740.160E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 160.0 ER-17
14.5.1740.170E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 170.0 ER-17
14.5.1740.180E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 180.0 ER-17
14.5.1740.190E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 190.0 ER-17
14.5.1740.200E	Broca Cortante \varnothing 4.00 x 200.0 ER-17
14.5.1745.050E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 50.0 ER-17
14.5.1745.060E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 60.0 ER-17
14.5.1745.070E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 70.0 ER-17
14.5.1745.080E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 80.0 ER-17
14.5.1745.090E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 90.0 ER-17
14.5.1745.100E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 100.0 ER-17
14.5.1745.110E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 110.0 ER-17
14.5.1745.120E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 120.0 ER-17
14.5.1745.130E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 130.0 ER-17
14.5.1745.140E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 140.0 ER-17
14.5.1745.150E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 150.0 ER-17
14.5.1745.160E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 160.0 ER-17
14.5.1745.170E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 170.0 ER-17
14.5.1745.180E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 180.0 ER-17
14.5.1745.190E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 190.0 ER-17
14.5.1745.200E	Broca Cortante \varnothing 4.50 x 200.0 ER-17
14.5.1750.050E	Broca Cortante \varnothing 5.00 x 50.0 ER-17
14.5.1750.060E	Broca Cortante \varnothing 5.00 x 60.0 ER-17
14.5.1750.070E	Broca Cortante \varnothing 5.00 x 70.0 ER-17
14.5.1750.080E	Broca Cortante \varnothing 5.00 x 80.0 ER-17
14.5.1750.090E	Broca Cortante \varnothing 5.00 x 90.0 ER-17
14.5.1750.100E	Broca Cortante \varnothing 5.00 x 100.0 ER-17
14.5.1750.110E	Broca Cortante \varnothing 5.00 x 110.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1750.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-17
14.5.1750.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-17
14.5.1750.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-17
14.5.1750.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-17
14.5.1750.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-17
14.5.1750.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-17
14.5.1750.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-17
14.5.1750.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-17
14.5.1750.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-17
14.5.1755.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-17
14.5.1755.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-17
14.5.1755.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-17
14.5.1755.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-17
14.5.1755.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-17
14.5.1755.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-17
14.5.1755.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-17
14.5.1755.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-17
14.5.1755.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-17
14.5.1755.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-17
14.5.1755.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-17
14.5.1755.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-17
14.5.1755.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-17
14.5.1755.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-17
14.5.1755.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-17
14.5.1755.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-17
14.5.1760.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-17
14.5.1760.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-17
14.5.1760.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-17
14.5.1760.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-17
14.5.1760.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-17
14.5.1760.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-17
14.5.1760.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-17
14.5.1760.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-17
14.5.1760.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-17
14.5.1760.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-17
14.5.1760.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-17
14.5.1760.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-17
14.5.1760.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-17
14.5.1760.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-17
14.5.1760.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-17
14.5.1760.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-17
14.5.1770.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-17
14.5.1770.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-17
14.5.1770.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-17

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1770.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-17
14.5.1770.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-17
14.5.1770.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-17
14.5.1770.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-17
14.5.1770.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-17
14.5.1770.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-17
14.5.1770.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-17
14.5.1770.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-17
14.5.1770.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-17
14.5.1770.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-17
14.5.1770.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-17
14.5.1770.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-17
14.5.1770.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-17
14.5.1806.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-18
14.5.1806.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-18
14.5.1806.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-18
14.5.1806.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-18
14.5.1806.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-18
14.5.1806.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-18
14.5.1806.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-18
14.5.1806.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-18
14.5.1806.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-18
14.5.1806.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-18
14.5.1806.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-18
14.5.1806.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-18
14.5.1806.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-18
14.5.1806.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-18
14.5.1806.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-18
14.5.1806.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-18
14.5.1807.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-18
14.5.1807.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-18
14.5.1807.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-18
14.5.1807.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-18
14.5.1807.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-18
14.5.1807.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-18
14.5.1807.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-18
14.5.1807.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-18
14.5.1807.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-18
14.5.1807.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-18
14.5.1807.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-18
14.5.1807.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-18
14.5.1807.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-18
14.5.1807.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-18
14.5.1807.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-18

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1807.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-18
14.5.1808.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-18
14.5.1808.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-18
14.5.1808.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-18
14.5.1808.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-18
14.5.1808.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-18
14.5.1808.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-18
14.5.1808.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-18
14.5.1808.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-18
14.5.1808.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-18
14.5.1808.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-18
14.5.1808.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-18
14.5.1808.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-18
14.5.1808.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-18
14.5.1808.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-18
14.5.1808.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-18
14.5.1808.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-18
14.5.1810.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-18
14.5.1810.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-18
14.5.1810.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-18
14.5.1810.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-18
14.5.1810.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-18
14.5.1810.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-18
14.5.1810.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-18
14.5.1810.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-18
14.5.1810.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-18
14.5.1810.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-18
14.5.1810.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-18
14.5.1810.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-18
14.5.1810.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-18
14.5.1810.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-18
14.5.1810.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-18
14.5.1810.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-18
14.5.1812.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-18
14.5.1812.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-18
14.5.1812.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-18
14.5.1812.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-18
14.5.1812.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-18
14.5.1812.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-18
14.5.1812.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-18
14.5.1812.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-18
14.5.1812.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-18
14.5.1812.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-18
14.5.1812.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-18

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1812.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-18
14.5.1812.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-18
14.5.1812.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-18
14.5.1812.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-18
14.5.1812.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-18
14.5.1814.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-18
14.5.1814.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-18
14.5.1814.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-18
14.5.1814.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-18
14.5.1814.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-18
14.5.1814.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-18
14.5.1814.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-18
14.5.1814.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-18
14.5.1814.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-18
14.5.1814.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-18
14.5.1814.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-18
14.5.1814.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-18
14.5.1814.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-18
14.5.1814.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-18
14.5.1814.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-18
14.5.1814.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-18
14.5.1816.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-18
14.5.1816.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-18
14.5.1816.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-18
14.5.1816.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-18
14.5.1816.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-18
14.5.1816.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-18
14.5.1816.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-18
14.5.1816.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-18
14.5.1816.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-18
14.5.1816.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-18
14.5.1816.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-18
14.5.1816.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-18
14.5.1816.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-18
14.5.1816.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-18
14.5.1816.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-18
14.5.1816.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-18
14.5.1818.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-18
14.5.1818.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-18
14.5.1818.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-18
14.5.1818.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-18
14.5.1818.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-18
14.5.1818.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-18
14.5.1818.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-18

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1818.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-18
14.5.1818.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-18
14.5.1818.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-18
14.5.1818.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-18
14.5.1818.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-18
14.5.1818.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-18
14.5.1818.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-18
14.5.1818.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-18
14.5.1818.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-18
14.5.1821.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-18
14.5.1821.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-18
14.5.1821.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-18
14.5.1821.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-18
14.5.1821.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-18
14.5.1821.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-18
14.5.1821.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-18
14.5.1821.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-18
14.5.1821.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-18
14.5.1821.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-18
14.5.1821.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-18
14.5.1821.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-18
14.5.1821.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-18
14.5.1821.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-18
14.5.1821.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-18
14.5.1821.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-18
14.5.1823.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-18
14.5.1823.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-18
14.5.1823.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-18
14.5.1823.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-18
14.5.1823.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-18
14.5.1823.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-18
14.5.1823.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-18
14.5.1823.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-18
14.5.1823.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-18
14.5.1823.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-18
14.5.1823.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-18
14.5.1823.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-18
14.5.1823.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-18
14.5.1823.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-18
14.5.1823.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-18
14.5.1823.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-18
14.5.1825.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-18
14.5.1825.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-18
14.5.1825.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-18

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1825.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-18
14.5.1825.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-18
14.5.1825.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-18
14.5.1825.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-18
14.5.1825.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-18
14.5.1825.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-18
14.5.1825.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-18
14.5.1825.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-18
14.5.1825.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-18
14.5.1825.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-18
14.5.1825.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-18
14.5.1825.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-18
14.5.1825.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-18
14.5.1827.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-18
14.5.1827.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-18
14.5.1827.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-18
14.5.1827.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-18
14.5.1827.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-18
14.5.1827.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-18
14.5.1827.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-18
14.5.1827.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-18
14.5.1827.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-18
14.5.1827.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-18
14.5.1827.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-18
14.5.1827.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-18
14.5.1827.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-18
14.5.1827.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-18
14.5.1827.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-18
14.5.1827.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-18
14.5.1829.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-18
14.5.1829.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-18
14.5.1829.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-18
14.5.1829.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-18
14.5.1829.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-18
14.5.1829.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-18
14.5.1829.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-18
14.5.1829.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-18
14.5.1829.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-18
14.5.1829.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-18
14.5.1829.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-18
14.5.1829.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-18
14.5.1829.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-18
14.5.1829.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-18
14.5.1829.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-18

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1829.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-18
14.5.1831.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-18
14.5.1831.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-18
14.5.1831.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-18
14.5.1831.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-18
14.5.1831.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-18
14.5.1831.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-18
14.5.1831.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-18
14.5.1831.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-18
14.5.1831.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-18
14.5.1831.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-18
14.5.1831.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-18
14.5.1831.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-18
14.5.1831.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-18
14.5.1831.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-18
14.5.1831.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-18
14.5.1831.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-18
14.5.1835.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-18
14.5.1835.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-18
14.5.1835.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-18
14.5.1835.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-18
14.5.1835.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-18
14.5.1835.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-18
14.5.1835.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-18
14.5.1835.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-18
14.5.1835.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-18
14.5.1835.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-18
14.5.1835.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-18
14.5.1835.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-18
14.5.1835.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-18
14.5.1835.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-18
14.5.1835.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-18
14.5.1835.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-18
14.5.1840.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-18
14.5.1840.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-18
14.5.1840.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-18
14.5.1840.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-18
14.5.1840.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-18
14.5.1840.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-18
14.5.1840.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-18
14.5.1840.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-18
14.5.1840.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-18
14.5.1840.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-18
14.5.1840.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-18

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1840.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-18
14.5.1840.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-18
14.5.1840.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-18
14.5.1840.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-18
14.5.1840.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-18
14.5.1845.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-18
14.5.1845.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-18
14.5.1845.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-18
14.5.1845.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-18
14.5.1845.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-18
14.5.1845.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-18
14.5.1845.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-18
14.5.1845.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-18
14.5.1845.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-18
14.5.1845.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-18
14.5.1845.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-18
14.5.1845.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-18
14.5.1845.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-18
14.5.1845.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-18
14.5.1845.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-18
14.5.1845.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-18
14.5.1850.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-18
14.5.1850.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-18
14.5.1850.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-18
14.5.1850.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-18
14.5.1850.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-18
14.5.1850.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-18
14.5.1850.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-18
14.5.1850.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-18
14.5.1850.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-18
14.5.1850.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-18
14.5.1850.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-18
14.5.1850.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-18
14.5.1850.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-18
14.5.1850.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-18
14.5.1850.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-18
14.5.1850.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-18
14.5.1855.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-18
14.5.1855.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-18
14.5.1855.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-18
14.5.1855.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-18
14.5.1855.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-18
14.5.1855.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-18
14.5.1855.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-18

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1855.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-18
14.5.1855.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-18
14.5.1855.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-18
14.5.1855.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-18
14.5.1855.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-18
14.5.1855.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-18
14.5.1855.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-18
14.5.1855.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-18
14.5.1855.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-18
14.5.1860.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-18
14.5.1860.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-18
14.5.1860.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-18
14.5.1860.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-18
14.5.1860.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-18
14.5.1860.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-18
14.5.1860.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-18
14.5.1860.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-18
14.5.1860.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-18
14.5.1860.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-18
14.5.1860.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-18
14.5.1860.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-18
14.5.1860.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-18
14.5.1860.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-18
14.5.1860.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-18
14.5.1860.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-18
14.5.1870.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-18
14.5.1870.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-18
14.5.1870.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-18
14.5.1870.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-18
14.5.1870.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-18
14.5.1870.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-18
14.5.1870.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-18
14.5.1870.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-18
14.5.1870.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-18
14.5.1870.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-18
14.5.1870.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-18
14.5.1870.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-18
14.5.1870.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-18
14.5.1870.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-18
14.5.1870.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-18
14.5.1870.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-18
14.5.1906.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-19
14.5.1906.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-19
14.5.1906.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1906.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-19
14.5.1906.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-19
14.5.1906.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-19
14.5.1906.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-19
14.5.1906.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-19
14.5.1906.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-19
14.5.1906.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-19
14.5.1906.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-19
14.5.1906.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-19
14.5.1906.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-19
14.5.1906.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-19
14.5.1906.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-19
14.5.1906.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-19
14.5.1907.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-19
14.5.1907.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-19
14.5.1907.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-19
14.5.1907.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-19
14.5.1907.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-19
14.5.1907.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-19
14.5.1907.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-19
14.5.1907.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-19
14.5.1907.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-19
14.5.1907.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-19
14.5.1907.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-19
14.5.1907.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-19
14.5.1907.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-19
14.5.1907.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-19
14.5.1907.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-19
14.5.1907.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-19
14.5.1908.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-19
14.5.1908.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-19
14.5.1908.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-19
14.5.1908.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-19
14.5.1908.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-19
14.5.1908.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-19
14.5.1908.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-19
14.5.1908.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-19
14.5.1908.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-19
14.5.1908.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-19
14.5.1908.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-19
14.5.1908.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-19
14.5.1908.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-19
14.5.1908.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-19
14.5.1908.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.1908.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-19
14.5.1910.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-19
14.5.1910.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-19
14.5.1910.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-19
14.5.1910.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-19
14.5.1910.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-19
14.5.1910.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-19
14.5.1910.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-19
14.5.1910.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-19
14.5.1910.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-19
14.5.1910.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-19
14.5.1910.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-19
14.5.1910.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-19
14.5.1910.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-19
14.5.1910.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-19
14.5.1910.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-19
14.5.1910.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-19
14.5.1912.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-19
14.5.1912.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-19
14.5.1912.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-19
14.5.1912.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-19
14.5.1912.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-19
14.5.1912.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-19
14.5.1912.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-19
14.5.1912.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-19
14.5.1912.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-19
14.5.1912.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-19
14.5.1912.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-19
14.5.1912.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-19
14.5.1912.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-19
14.5.1912.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-19
14.5.1912.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-19
14.5.1912.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-19
14.5.1914.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-19
14.5.1914.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-19
14.5.1914.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-19
14.5.1914.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-19
14.5.1914.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-19
14.5.1914.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-19
14.5.1914.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-19
14.5.1914.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-19
14.5.1914.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-19
14.5.1914.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-19
14.5.1914.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1914.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-19
14.5.1914.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-19
14.5.1914.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-19
14.5.1914.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-19
14.5.1914.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-19
14.5.1916.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-19
14.5.1916.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-19
14.5.1916.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-19
14.5.1916.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-19
14.5.1916.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-19
14.5.1916.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-19
14.5.1916.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-19
14.5.1916.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-19
14.5.1916.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-19
14.5.1916.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-19
14.5.1916.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-19
14.5.1916.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-19
14.5.1916.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-19
14.5.1916.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-19
14.5.1916.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-19
14.5.1916.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-19
14.5.1918.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-19
14.5.1918.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-19
14.5.1918.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-19
14.5.1918.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-19
14.5.1918.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-19
14.5.1918.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-19
14.5.1918.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-19
14.5.1918.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-19
14.5.1918.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-19
14.5.1918.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-19
14.5.1918.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-19
14.5.1918.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-19
14.5.1918.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-19
14.5.1918.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-19
14.5.1918.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-19
14.5.1918.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-19
14.5.1921.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-19
14.5.1921.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-19
14.5.1921.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-19
14.5.1921.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-19
14.5.1921.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-19
14.5.1921.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-19
14.5.1921.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1921.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-19
14.5.1921.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-19
14.5.1921.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-19
14.5.1921.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-19
14.5.1921.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-19
14.5.1921.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-19
14.5.1921.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-19
14.5.1921.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-19
14.5.1921.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-19
14.5.1923.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-19
14.5.1923.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-19
14.5.1923.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-19
14.5.1923.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-19
14.5.1923.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-19
14.5.1923.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-19
14.5.1923.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-19
14.5.1923.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-19
14.5.1923.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-19
14.5.1923.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-19
14.5.1923.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-19
14.5.1923.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-19
14.5.1923.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-19
14.5.1923.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-19
14.5.1923.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-19
14.5.1923.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-19
14.5.1925.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-19
14.5.1925.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-19
14.5.1925.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-19
14.5.1925.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-19
14.5.1925.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-19
14.5.1925.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-19
14.5.1925.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-19
14.5.1925.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-19
14.5.1925.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-19
14.5.1925.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-19
14.5.1925.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-19
14.5.1925.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-19
14.5.1925.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-19
14.5.1925.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-19
14.5.1925.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-19
14.5.1925.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-19
14.5.1927.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-19
14.5.1927.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-19
14.5.1927.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1927.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-19
14.5.1927.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-19
14.5.1927.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-19
14.5.1927.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-19
14.5.1927.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-19
14.5.1927.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-19
14.5.1927.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-19
14.5.1927.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-19
14.5.1927.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-19
14.5.1927.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-19
14.5.1927.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-19
14.5.1927.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-19
14.5.1927.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-19
14.5.1929.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-19
14.5.1929.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-19
14.5.1929.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-19
14.5.1929.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-19
14.5.1929.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-19
14.5.1929.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-19
14.5.1929.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-19
14.5.1929.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-19
14.5.1929.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-19
14.5.1929.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-19
14.5.1929.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-19
14.5.1929.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-19
14.5.1929.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-19
14.5.1929.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-19
14.5.1929.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-19
14.5.1929.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-19
14.5.1931.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-19
14.5.1931.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-19
14.5.1931.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-19
14.5.1931.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-19
14.5.1931.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-19
14.5.1931.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-19
14.5.1931.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-19
14.5.1931.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-19
14.5.1931.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-19
14.5.1931.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-19
14.5.1931.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-19
14.5.1931.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-19
14.5.1931.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-19
14.5.1931.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-19
14.5.1931.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1931.200E	Broca Cortante Ø 3,10 x 200,0 ER-19
14.5.1935.050E	Broca Cortante Ø 3,50 x 50,0 ER-19
14.5.1935.060E	Broca Cortante Ø 3,50 x 60,0 ER-19
14.5.1935.070E	Broca Cortante Ø 3,50 x 70,0 ER-19
14.5.1935.080E	Broca Cortante Ø 3,50 x 80,0 ER-19
14.5.1935.090E	Broca Cortante Ø 3,50 x 90,0 ER-19
14.5.1935.100E	Broca Cortante Ø 3,50 x 100,0 ER-19
14.5.1935.110E	Broca Cortante Ø 3,50 x 110,0 ER-19
14.5.1935.120E	Broca Cortante Ø 3,50 x 120,0 ER-19
14.5.1935.130E	Broca Cortante Ø 3,50 x 130,0 ER-19
14.5.1935.140E	Broca Cortante Ø 3,50 x 140,0 ER-19
14.5.1935.150E	Broca Cortante Ø 3,50 x 150,0 ER-19
14.5.1935.160E	Broca Cortante Ø 3,50 x 160,0 ER-19
14.5.1935.170E	Broca Cortante Ø 3,50 x 170,0 ER-19
14.5.1935.180E	Broca Cortante Ø 3,50 x 180,0 ER-19
14.5.1935.190E	Broca Cortante Ø 3,50 x 190,0 ER-19
14.5.1935.200E	Broca Cortante Ø 3,50 x 200,0 ER-19
14.5.1940.050E	Broca Cortante Ø 4,00 x 50,0 ER-19
14.5.1940.060E	Broca Cortante Ø 4,00 x 60,0 ER-19
14.5.1940.070E	Broca Cortante Ø 4,00 x 70,0 ER-19
14.5.1940.080E	Broca Cortante Ø 4,00 x 80,0 ER-19
14.5.1940.090E	Broca Cortante Ø 4,00 x 90,0 ER-19
14.5.1940.100E	Broca Cortante Ø 4,00 x 100,0 ER-19
14.5.1940.110E	Broca Cortante Ø 4,00 x 110,0 ER-19
14.5.1940.120E	Broca Cortante Ø 4,00 x 120,0 ER-19
14.5.1940.130E	Broca Cortante Ø 4,00 x 130,0 ER-19
14.5.1940.140E	Broca Cortante Ø 4,00 x 140,0 ER-19
14.5.1940.150E	Broca Cortante Ø 4,00 x 150,0 ER-19
14.5.1940.160E	Broca Cortante Ø 4,00 x 160,0 ER-19
14.5.1940.170E	Broca Cortante Ø 4,00 x 170,0 ER-19
14.5.1940.180E	Broca Cortante Ø 4,00 x 180,0 ER-19
14.5.1940.190E	Broca Cortante Ø 4,00 x 190,0 ER-19
14.5.1940.200E	Broca Cortante Ø 4,00 x 200,0 ER-19
14.5.1945.050E	Broca Cortante Ø 4,50 x 50,0 ER-19
14.5.1945.060E	Broca Cortante Ø 4,50 x 60,0 ER-19
14.5.1945.070E	Broca Cortante Ø 4,50 x 70,0 ER-19
14.5.1945.080E	Broca Cortante Ø 4,50 x 80,0 ER-19
14.5.1945.090E	Broca Cortante Ø 4,50 x 90,0 ER-19
14.5.1945.100E	Broca Cortante Ø 4,50 x 100,0 ER-19
14.5.1945.110E	Broca Cortante Ø 4,50 x 110,0 ER-19
14.5.1945.120E	Broca Cortante Ø 4,50 x 120,0 ER-19
14.5.1945.130E	Broca Cortante Ø 4,50 x 130,0 ER-19
14.5.1945.140E	Broca Cortante Ø 4,50 x 140,0 ER-19
14.5.1945.150E	Broca Cortante Ø 4,50 x 150,0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.1945.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-19
14.5.1945.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-19
14.5.1945.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-19
14.5.1945.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-19
14.5.1945.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-19
14.5.1950.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-19
14.5.1950.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-19
14.5.1950.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-19
14.5.1950.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-19
14.5.1950.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-19
14.5.1950.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-19
14.5.1950.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-19
14.5.1950.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-19
14.5.1950.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-19
14.5.1950.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-19
14.5.1950.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-19
14.5.1950.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-19
14.5.1950.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-19
14.5.1950.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-19
14.5.1950.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-19
14.5.1950.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-19
14.5.1955.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-19
14.5.1955.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-19
14.5.1955.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-19
14.5.1955.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-19
14.5.1955.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-19
14.5.1955.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-19
14.5.1955.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-19
14.5.1955.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-19
14.5.1955.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-19
14.5.1955.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-19
14.5.1955.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-19
14.5.1955.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-19
14.5.1955.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-19
14.5.1955.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-19
14.5.1955.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-19
14.5.1955.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-19
14.5.1960.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-19
14.5.1960.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-19
14.5.1960.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-19
14.5.1960.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-19
14.5.1960.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-19
14.5.1960.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-19
14.5.1960.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-19

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.1960.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-19
14.5.1960.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-19
14.5.1960.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-19
14.5.1960.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-19
14.5.1960.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-19
14.5.1960.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-19
14.5.1960.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-19
14.5.1960.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-19
14.5.1960.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-19
14.5.1970.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-19
14.5.1970.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-19
14.5.1970.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-19
14.5.1970.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-19
14.5.1970.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-19
14.5.1970.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-19
14.5.1970.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-19
14.5.1970.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-19
14.5.1970.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-19
14.5.1970.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-19
14.5.1970.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-19
14.5.1970.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-19
14.5.1970.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-19
14.5.1970.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-19
14.5.1970.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-19
14.5.1970.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-19
14.5.2006.050E	Broca Cortante Ø 0.60 x 50.0 ER-20
14.5.2006.060E	Broca Cortante Ø 0.60 x 60.0 ER-20
14.5.2006.070E	Broca Cortante Ø 0.60 x 70.0 ER-20
14.5.2006.080E	Broca Cortante Ø 0.60 x 80.0 ER-20
14.5.2006.090E	Broca Cortante Ø 0.60 x 90.0 ER-20
14.5.2006.100E	Broca Cortante Ø 0.60 x 100.0 ER-20
14.5.2006.110E	Broca Cortante Ø 0.60 x 110.0 ER-20
14.5.2006.120E	Broca Cortante Ø 0.60 x 120.0 ER-20
14.5.2006.130E	Broca Cortante Ø 0.60 x 130.0 ER-20
14.5.2006.140E	Broca Cortante Ø 0.60 x 140.0 ER-20
14.5.2006.150E	Broca Cortante Ø 0.60 x 150.0 ER-20
14.5.2006.160E	Broca Cortante Ø 0.60 x 160.0 ER-20
14.5.2006.170E	Broca Cortante Ø 0.60 x 170.0 ER-20
14.5.2006.180E	Broca Cortante Ø 0.60 x 180.0 ER-20
14.5.2006.190E	Broca Cortante Ø 0.60 x 190.0 ER-20
14.5.2006.200E	Broca Cortante Ø 0.60 x 200.0 ER-20
14.5.2007.050E	Broca Cortante Ø 0.70 x 50.0 ER-20
14.5.2007.060E	Broca Cortante Ø 0.70 x 60.0 ER-20
14.5.2007.070E	Broca Cortante Ø 0.70 x 70.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.2007.080E	Broca Cortante Ø 0.70 x 80.0 ER-20
14.5.2007.090E	Broca Cortante Ø 0.70 x 90.0 ER-20
14.5.2007.100E	Broca Cortante Ø 0.70 x 100.0 ER-20
14.5.2007.110E	Broca Cortante Ø 0.70 x 110.0 ER-20
14.5.2007.120E	Broca Cortante Ø 0.70 x 120.0 ER-20
14.5.2007.130E	Broca Cortante Ø 0.70 x 130.0 ER-20
14.5.2007.140E	Broca Cortante Ø 0.70 x 140.0 ER-20
14.5.2007.150E	Broca Cortante Ø 0.70 x 150.0 ER-20
14.5.2007.160E	Broca Cortante Ø 0.70 x 160.0 ER-20
14.5.2007.170E	Broca Cortante Ø 0.70 x 170.0 ER-20
14.5.2007.180E	Broca Cortante Ø 0.70 x 180.0 ER-20
14.5.2007.190E	Broca Cortante Ø 0.70 x 190.0 ER-20
14.5.2007.200E	Broca Cortante Ø 0.70 x 200.0 ER-20
14.5.2008.050E	Broca Cortante Ø 0.80 x 50.0 ER-20
14.5.2008.060E	Broca Cortante Ø 0.80 x 60.0 ER-20
14.5.2008.070E	Broca Cortante Ø 0.80 x 70.0 ER-20
14.5.2008.080E	Broca Cortante Ø 0.80 x 80.0 ER-20
14.5.2008.090E	Broca Cortante Ø 0.80 x 90.0 ER-20
14.5.2008.100E	Broca Cortante Ø 0.80 x 100.0 ER-20
14.5.2008.110E	Broca Cortante Ø 0.80 x 110.0 ER-20
14.5.2008.120E	Broca Cortante Ø 0.80 x 120.0 ER-20
14.5.2008.130E	Broca Cortante Ø 0.80 x 130.0 ER-20
14.5.2008.140E	Broca Cortante Ø 0.80 x 140.0 ER-20
14.5.2008.150E	Broca Cortante Ø 0.80 x 150.0 ER-20
14.5.2008.160E	Broca Cortante Ø 0.80 x 160.0 ER-20
14.5.2008.170E	Broca Cortante Ø 0.80 x 170.0 ER-20
14.5.2008.180E	Broca Cortante Ø 0.80 x 180.0 ER-20
14.5.2008.190E	Broca Cortante Ø 0.80 x 190.0 ER-20
14.5.2008.200E	Broca Cortante Ø 0.80 x 200.0 ER-20
14.5.2010.050E	Broca Cortante Ø 1.00 x 50.0 ER-20
14.5.2010.060E	Broca Cortante Ø 1.00 x 60.0 ER-20
14.5.2010.070E	Broca Cortante Ø 1.00 x 70.0 ER-20
14.5.2010.080E	Broca Cortante Ø 1.00 x 80.0 ER-20
14.5.2010.090E	Broca Cortante Ø 1.00 x 90.0 ER-20
14.5.2010.100E	Broca Cortante Ø 1.00 x 100.0 ER-20
14.5.2010.110E	Broca Cortante Ø 1.00 x 110.0 ER-20
14.5.2010.120E	Broca Cortante Ø 1.00 x 120.0 ER-20
14.5.2010.130E	Broca Cortante Ø 1.00 x 130.0 ER-20
14.5.2010.140E	Broca Cortante Ø 1.00 x 140.0 ER-20
14.5.2010.150E	Broca Cortante Ø 1.00 x 150.0 ER-20
14.5.2010.160E	Broca Cortante Ø 1.00 x 160.0 ER-20
14.5.2010.170E	Broca Cortante Ø 1.00 x 170.0 ER-20
14.5.2010.180E	Broca Cortante Ø 1.00 x 180.0 ER-20
14.5.2010.190E	Broca Cortante Ø 1.00 x 190.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.2010.200E	Broca Cortante Ø 1.00 x 200.0 ER-20
14.5.2012.050E	Broca Cortante Ø 1.20 x 50.0 ER-20
14.5.2012.060E	Broca Cortante Ø 1.20 x 60.0 ER-20
14.5.2012.070E	Broca Cortante Ø 1.20 x 70.0 ER-20
14.5.2012.080E	Broca Cortante Ø 1.20 x 80.0 ER-20
14.5.2012.090E	Broca Cortante Ø 1.20 x 90.0 ER-20
14.5.2012.100E	Broca Cortante Ø 1.20 x 100.0 ER-20
14.5.2012.110E	Broca Cortante Ø 1.20 x 110.0 ER-20
14.5.2012.120E	Broca Cortante Ø 1.20 x 120.0 ER-20
14.5.2012.130E	Broca Cortante Ø 1.20 x 130.0 ER-20
14.5.2012.140E	Broca Cortante Ø 1.20 x 140.0 ER-20
14.5.2012.150E	Broca Cortante Ø 1.20 x 150.0 ER-20
14.5.2012.160E	Broca Cortante Ø 1.20 x 160.0 ER-20
14.5.2012.170E	Broca Cortante Ø 1.20 x 170.0 ER-20
14.5.2012.180E	Broca Cortante Ø 1.20 x 180.0 ER-20
14.5.2012.190E	Broca Cortante Ø 1.20 x 190.0 ER-20
14.5.2012.200E	Broca Cortante Ø 1.20 x 200.0 ER-20
14.5.2014.050E	Broca Cortante Ø 1.40 x 50.0 ER-20
14.5.2014.060E	Broca Cortante Ø 1.40 x 60.0 ER-20
14.5.2014.070E	Broca Cortante Ø 1.40 x 70.0 ER-20
14.5.2014.080E	Broca Cortante Ø 1.40 x 80.0 ER-20
14.5.2014.090E	Broca Cortante Ø 1.40 x 90.0 ER-20
14.5.2014.100E	Broca Cortante Ø 1.40 x 100.0 ER-20
14.5.2014.110E	Broca Cortante Ø 1.40 x 110.0 ER-20
14.5.2014.120E	Broca Cortante Ø 1.40 x 120.0 ER-20
14.5.2014.130E	Broca Cortante Ø 1.40 x 130.0 ER-20
14.5.2014.140E	Broca Cortante Ø 1.40 x 140.0 ER-20
14.5.2014.150E	Broca Cortante Ø 1.40 x 150.0 ER-20
14.5.2014.160E	Broca Cortante Ø 1.40 x 160.0 ER-20
14.5.2014.170E	Broca Cortante Ø 1.40 x 170.0 ER-20
14.5.2014.180E	Broca Cortante Ø 1.40 x 180.0 ER-20
14.5.2014.190E	Broca Cortante Ø 1.40 x 190.0 ER-20
14.5.2014.200E	Broca Cortante Ø 1.40 x 200.0 ER-20
14.5.2016.050E	Broca Cortante Ø 1.60 x 50.0 ER-20
14.5.2016.060E	Broca Cortante Ø 1.60 x 60.0 ER-20
14.5.2016.070E	Broca Cortante Ø 1.60 x 70.0 ER-20
14.5.2016.080E	Broca Cortante Ø 1.60 x 80.0 ER-20
14.5.2016.090E	Broca Cortante Ø 1.60 x 90.0 ER-20
14.5.2016.100E	Broca Cortante Ø 1.60 x 100.0 ER-20
14.5.2016.110E	Broca Cortante Ø 1.60 x 110.0 ER-20
14.5.2016.120E	Broca Cortante Ø 1.60 x 120.0 ER-20
14.5.2016.130E	Broca Cortante Ø 1.60 x 130.0 ER-20
14.5.2016.140E	Broca Cortante Ø 1.60 x 140.0 ER-20
14.5.2016.150E	Broca Cortante Ø 1.60 x 150.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.2016.160E	Broca Cortante Ø 1.60 x 160.0 ER-20
14.5.2016.170E	Broca Cortante Ø 1.60 x 170.0 ER-20
14.5.2016.180E	Broca Cortante Ø 1.60 x 180.0 ER-20
14.5.2016.190E	Broca Cortante Ø 1.60 x 190.0 ER-20
14.5.2016.200E	Broca Cortante Ø 1.60 x 200.0 ER-20
14.5.2018.050E	Broca Cortante Ø 1.80 x 50.0 ER-20
14.5.2018.060E	Broca Cortante Ø 1.80 x 60.0 ER-20
14.5.2018.070E	Broca Cortante Ø 1.80 x 70.0 ER-20
14.5.2018.080E	Broca Cortante Ø 1.80 x 80.0 ER-20
14.5.2018.090E	Broca Cortante Ø 1.80 x 90.0 ER-20
14.5.2018.100E	Broca Cortante Ø 1.80 x 100.0 ER-20
14.5.2018.110E	Broca Cortante Ø 1.80 x 110.0 ER-20
14.5.2018.120E	Broca Cortante Ø 1.80 x 120.0 ER-20
14.5.2018.130E	Broca Cortante Ø 1.80 x 130.0 ER-20
14.5.2018.140E	Broca Cortante Ø 1.80 x 140.0 ER-20
14.5.2018.150E	Broca Cortante Ø 1.80 x 150.0 ER-20
14.5.2018.160E	Broca Cortante Ø 1.80 x 160.0 ER-20
14.5.2018.170E	Broca Cortante Ø 1.80 x 170.0 ER-20
14.5.2018.180E	Broca Cortante Ø 1.80 x 180.0 ER-20
14.5.2018.190E	Broca Cortante Ø 1.80 x 190.0 ER-20
14.5.2018.200E	Broca Cortante Ø 1.80 x 200.0 ER-20
14.5.2021.050E	Broca Cortante Ø 2.10 x 50.0 ER-20
14.5.2021.060E	Broca Cortante Ø 2.10 x 60.0 ER-20
14.5.2021.070E	Broca Cortante Ø 2.10 x 70.0 ER-20
14.5.2021.080E	Broca Cortante Ø 2.10 x 80.0 ER-20
14.5.2021.090E	Broca Cortante Ø 2.10 x 90.0 ER-20
14.5.2021.100E	Broca Cortante Ø 2.10 x 100.0 ER-20
14.5.2021.110E	Broca Cortante Ø 2.10 x 110.0 ER-20
14.5.2021.120E	Broca Cortante Ø 2.10 x 120.0 ER-20
14.5.2021.130E	Broca Cortante Ø 2.10 x 130.0 ER-20
14.5.2021.140E	Broca Cortante Ø 2.10 x 140.0 ER-20
14.5.2021.150E	Broca Cortante Ø 2.10 x 150.0 ER-20
14.5.2021.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-20
14.5.2021.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-20
14.5.2021.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-20
14.5.2021.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-20
14.5.2021.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-20
14.5.2023.050E	Broca Cortante Ø 2.30 x 50.0 ER-20
14.5.2023.060E	Broca Cortante Ø 2.30 x 60.0 ER-20
14.5.2023.070E	Broca Cortante Ø 2.30 x 70.0 ER-20
14.5.2023.080E	Broca Cortante Ø 2.30 x 80.0 ER-20
14.5.2023.090E	Broca Cortante Ø 2.30 x 90.0 ER-20
14.5.2023.100E	Broca Cortante Ø 2.30 x 100.0 ER-20
14.5.2023.110E	Broca Cortante Ø 2.30 x 110.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.2023.120E	Broca Cortante Ø 2.30 x 120.0 ER-20
14.5.2023.130E	Broca Cortante Ø 2.30 x 130.0 ER-20
14.5.2023.140E	Broca Cortante Ø 2.30 x 140.0 ER-20
14.5.2023.150E	Broca Cortante Ø 2.30 x 150.0 ER-20
14.5.2023.160E	Broca Cortante Ø 2.10 x 160.0 ER-20
14.5.2023.170E	Broca Cortante Ø 2.10 x 170.0 ER-20
14.5.2023.180E	Broca Cortante Ø 2.10 x 180.0 ER-20
14.5.2023.190E	Broca Cortante Ø 2.10 x 190.0 ER-20
14.5.2023.200E	Broca Cortante Ø 2.10 x 200.0 ER-20
14.5.2025.050E	Broca Cortante Ø 2.50 x 50.0 ER-20
14.5.2025.060E	Broca Cortante Ø 2.50 x 60.0 ER-20
14.5.2025.070E	Broca Cortante Ø 2.50 x 70.0 ER-20
14.5.2025.080E	Broca Cortante Ø 2.50 x 80.0 ER-20
14.5.2025.090E	Broca Cortante Ø 2.50 x 90.0 ER-20
14.5.2025.100E	Broca Cortante Ø 2.50 x 100.0 ER-20
14.5.2025.110E	Broca Cortante Ø 2.50 x 110.0 ER-20
14.5.2025.120E	Broca Cortante Ø 2.50 x 120.0 ER-20
14.5.2025.130E	Broca Cortante Ø 2.50 x 130.0 ER-20
14.5.2025.140E	Broca Cortante Ø 2.50 x 140.0 ER-20
14.5.2025.150E	Broca Cortante Ø 2.50 x 150.0 ER-20
14.5.2025.160E	Broca Cortante Ø 2.50 x 160.0 ER-20
14.5.2025.170E	Broca Cortante Ø 2.50 x 170.0 ER-20
14.5.2025.180E	Broca Cortante Ø 2.50 x 180.0 ER-20
14.5.2025.190E	Broca Cortante Ø 2.50 x 190.0 ER-20
14.5.2025.200E	Broca Cortante Ø 2.50 x 200.0 ER-20
14.5.2027.050E	Broca Cortante Ø 2.70 x 50.0 ER-20
14.5.2027.060E	Broca Cortante Ø 2.70 x 60.0 ER-20
14.5.2027.070E	Broca Cortante Ø 2.70 x 70.0 ER-20
14.5.2027.080E	Broca Cortante Ø 2.70 x 80.0 ER-20
14.5.2027.090E	Broca Cortante Ø 2.70 x 90.0 ER-20
14.5.2027.100E	Broca Cortante Ø 2.70 x 100.0 ER-20
14.5.2027.110E	Broca Cortante Ø 2.70 x 110.0 ER-20
14.5.2027.120E	Broca Cortante Ø 2.70 x 120.0 ER-20
14.5.2027.130E	Broca Cortante Ø 2.70 x 130.0 ER-20
14.5.2027.140E	Broca Cortante Ø 2.70 x 140.0 ER-20
14.5.2027.150E	Broca Cortante Ø 2.70 x 150.0 ER-20
14.5.2027.160E	Broca Cortante Ø 2.70 x 160.0 ER-20
14.5.2027.170E	Broca Cortante Ø 2.70 x 170.0 ER-20
14.5.2027.180E	Broca Cortante Ø 2.70 x 180.0 ER-20
14.5.2027.190E	Broca Cortante Ø 2.70 x 190.0 ER-20
14.5.2027.200E	Broca Cortante Ø 2.70 x 200.0 ER-20
14.5.2029.050E	Broca Cortante Ø 2.90 x 50.0 ER-20
14.5.2029.060E	Broca Cortante Ø 2.90 x 60.0 ER-20
14.5.2029.070E	Broca Cortante Ø 2.90 x 70.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.2029.080E	Broca Cortante Ø 2.90 x 80.0 ER-20
14.5.2029.090E	Broca Cortante Ø 2.90 x 90.0 ER-20
14.5.2029.100E	Broca Cortante Ø 2.90 x 100.0 ER-20
14.5.2029.110E	Broca Cortante Ø 2.90 x 110.0 ER-20
14.5.2029.120E	Broca Cortante Ø 2.90 x 120.0 ER-20
14.5.2029.130E	Broca Cortante Ø 2.90 x 130.0 ER-20
14.5.2029.140E	Broca Cortante Ø 2.90 x 140.0 ER-20
14.5.2029.150E	Broca Cortante Ø 2.90 x 150.0 ER-20
14.5.2029.160E	Broca Cortante Ø 2.90 x 160.0 ER-20
14.5.2029.170E	Broca Cortante Ø 2.90 x 170.0 ER-20
14.5.2029.180E	Broca Cortante Ø 2.90 x 180.0 ER-20
14.5.2029.190E	Broca Cortante Ø 2.90 x 190.0 ER-20
14.5.2029.200E	Broca Cortante Ø 2.90 x 200.0 ER-20
14.5.2031.050E	Broca Cortante Ø 3.10 x 50.0 ER-20
14.5.2031.060E	Broca Cortante Ø 3.10 x 60.0 ER-20
14.5.2031.070E	Broca Cortante Ø 3.10 x 70.0 ER-20
14.5.2031.080E	Broca Cortante Ø 3.10 x 80.0 ER-20
14.5.2031.090E	Broca Cortante Ø 3.10 x 90.0 ER-20
14.5.2031.100E	Broca Cortante Ø 3.10 x 100.0 ER-20
14.5.2031.110E	Broca Cortante Ø 3.10 x 110.0 ER-20
14.5.2031.120E	Broca Cortante Ø 3.10 x 120.0 ER-20
14.5.2031.130E	Broca Cortante Ø 3.10 x 130.0 ER-20
14.5.2031.140E	Broca Cortante Ø 3.10 x 140.0 ER-20
14.5.2031.150E	Broca Cortante Ø 3.10 x 150.0 ER-20
14.5.2031.160E	Broca Cortante Ø 3.10 x 160.0 ER-20
14.5.2031.170E	Broca Cortante Ø 3.10 x 170.0 ER-20
14.5.2031.180E	Broca Cortante Ø 3.10 x 180.0 ER-20
14.5.2031.190E	Broca Cortante Ø 3.10 x 190.0 ER-20
14.5.2031.200E	Broca Cortante Ø 3.10 x 200.0 ER-20
14.5.2035.050E	Broca Cortante Ø 3.50 x 50.0 ER-20
14.5.2035.060E	Broca Cortante Ø 3.50 x 60.0 ER-20
14.5.2035.070E	Broca Cortante Ø 3.50 x 70.0 ER-20
14.5.2035.080E	Broca Cortante Ø 3.50 x 80.0 ER-20
14.5.2035.090E	Broca Cortante Ø 3.50 x 90.0 ER-20
14.5.2035.100E	Broca Cortante Ø 3.50 x 100.0 ER-20
14.5.2035.110E	Broca Cortante Ø 3.50 x 110.0 ER-20
14.5.2035.120E	Broca Cortante Ø 3.50 x 120.0 ER-20
14.5.2035.130E	Broca Cortante Ø 3.50 x 130.0 ER-20
14.5.2035.140E	Broca Cortante Ø 3.50 x 140.0 ER-20
14.5.2035.150E	Broca Cortante Ø 3.50 x 150.0 ER-20
14.5.2035.160E	Broca Cortante Ø 3.50 x 160.0 ER-20
14.5.2035.170E	Broca Cortante Ø 3.50 x 170.0 ER-20
14.5.2035.180E	Broca Cortante Ø 3.50 x 180.0 ER-20
14.5.2035.190E	Broca Cortante Ø 3.50 x 190.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.2035.200E	Broca Cortante Ø 3.50 x 200.0 ER-20
14.5.2040.050E	Broca Cortante Ø 4.00 x 50.0 ER-20
14.5.2040.060E	Broca Cortante Ø 4.00 x 60.0 ER-20
14.5.2040.070E	Broca Cortante Ø 4.00 x 70.0 ER-20
14.5.2040.080E	Broca Cortante Ø 4.00 x 80.0 ER-20
14.5.2040.090E	Broca Cortante Ø 4.00 x 90.0 ER-20
14.5.2040.100E	Broca Cortante Ø 4.00 x 100.0 ER-20
14.5.2040.110E	Broca Cortante Ø 4.00 x 110.0 ER-20
14.5.2040.120E	Broca Cortante Ø 4.00 x 120.0 ER-20
14.5.2040.130E	Broca Cortante Ø 4.00 x 130.0 ER-20
14.5.2040.140E	Broca Cortante Ø 4.00 x 140.0 ER-20
14.5.2040.150E	Broca Cortante Ø 4.00 x 150.0 ER-20
14.5.2040.160E	Broca Cortante Ø 4.00 x 160.0 ER-20
14.5.2040.170E	Broca Cortante Ø 4.00 x 170.0 ER-20
14.5.2040.180E	Broca Cortante Ø 4.00 x 180.0 ER-20
14.5.2040.190E	Broca Cortante Ø 4.00 x 190.0 ER-20
14.5.2040.200E	Broca Cortante Ø 4.00 x 200.0 ER-20
14.5.2045.050E	Broca Cortante Ø 4.50 x 50.0 ER-20
14.5.2045.060E	Broca Cortante Ø 4.50 x 60.0 ER-20
14.5.2045.070E	Broca Cortante Ø 4.50 x 70.0 ER-20
14.5.2045.080E	Broca Cortante Ø 4.50 x 80.0 ER-20
14.5.2045.090E	Broca Cortante Ø 4.50 x 90.0 ER-20
14.5.2045.100E	Broca Cortante Ø 4.50 x 100.0 ER-20
14.5.2045.110E	Broca Cortante Ø 4.50 x 110.0 ER-20
14.5.2045.120E	Broca Cortante Ø 4.50 x 120.0 ER-20
14.5.2045.130E	Broca Cortante Ø 4.50 x 130.0 ER-20
14.5.2045.140E	Broca Cortante Ø 4.50 x 140.0 ER-20
14.5.2045.150E	Broca Cortante Ø 4.50 x 150.0 ER-20
14.5.2045.160E	Broca Cortante Ø 4.50 x 160.0 ER-20
14.5.2045.170E	Broca Cortante Ø 4.50 x 170.0 ER-20
14.5.2045.180E	Broca Cortante Ø 4.50 x 180.0 ER-20
14.5.2045.190E	Broca Cortante Ø 4.50 x 190.0 ER-20
14.5.2045.200E	Broca Cortante Ø 4.50 x 200.0 ER-20
14.5.2050.050E	Broca Cortante Ø 5.00 x 50.0 ER-20
14.5.2050.060E	Broca Cortante Ø 5.00 x 60.0 ER-20
14.5.2050.070E	Broca Cortante Ø 5.00 x 70.0 ER-20
14.5.2050.080E	Broca Cortante Ø 5.00 x 80.0 ER-20
14.5.2050.090E	Broca Cortante Ø 5.00 x 90.0 ER-20
14.5.2050.100E	Broca Cortante Ø 5.00 x 100.0 ER-20
14.5.2050.110E	Broca Cortante Ø 5.00 x 110.0 ER-20
14.5.2050.120E	Broca Cortante Ø 5.00 x 120.0 ER-20
14.5.2050.130E	Broca Cortante Ø 5.00 x 130.0 ER-20
14.5.2050.140E	Broca Cortante Ø 5.00 x 140.0 ER-20
14.5.2050.150E	Broca Cortante Ø 5.00 x 150.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.2050.160E	Broca Cortante Ø 5.00 x 160.0 ER-20
14.5.2050.170E	Broca Cortante Ø 5.00 x 170.0 ER-20
14.5.2050.180E	Broca Cortante Ø 5.00 x 180.0 ER-20
14.5.2050.190E	Broca Cortante Ø 5.00 x 190.0 ER-20
14.5.2050.200E	Broca Cortante Ø 5.00 x 200.0 ER-20
14.5.2055.050E	Broca Cortante Ø 5.50 x 50.0 ER-20
14.5.2055.060E	Broca Cortante Ø 5.50 x 60.0 ER-20
14.5.2055.070E	Broca Cortante Ø 5.50 x 70.0 ER-20
14.5.2055.080E	Broca Cortante Ø 5.50 x 80.0 ER-20
14.5.2055.090E	Broca Cortante Ø 5.50 x 90.0 ER-20
14.5.2055.100E	Broca Cortante Ø 5.50 x 100.0 ER-20
14.5.2055.110E	Broca Cortante Ø 5.50 x 110.0 ER-20
14.5.2055.120E	Broca Cortante Ø 5.50 x 120.0 ER-20
14.5.2055.130E	Broca Cortante Ø 5.50 x 130.0 ER-20
14.5.2055.140E	Broca Cortante Ø 5.50 x 140.0 ER-20
14.5.2055.150E	Broca Cortante Ø 5.50 x 150.0 ER-20
14.5.2055.160E	Broca Cortante Ø 5.50 x 160.0 ER-20
14.5.2055.170E	Broca Cortante Ø 5.50 x 170.0 ER-20
14.5.2055.180E	Broca Cortante Ø 5.50 x 180.0 ER-20
14.5.2055.190E	Broca Cortante Ø 5.50 x 190.0 ER-20
14.5.2055.200E	Broca Cortante Ø 5.50 x 200.0 ER-20
14.5.2060.050E	Broca Cortante Ø 6.00 x 50.0 ER-20
14.5.2060.060E	Broca Cortante Ø 6.00 x 60.0 ER-20
14.5.2060.070E	Broca Cortante Ø 6.00 x 70.0 ER-20
14.5.2060.080E	Broca Cortante Ø 6.00 x 80.0 ER-20
14.5.2060.090E	Broca Cortante Ø 6.00 x 90.0 ER-20
14.5.2060.100E	Broca Cortante Ø 6.00 x 100.0 ER-20
14.5.2060.110E	Broca Cortante Ø 6.00 x 110.0 ER-20
14.5.2060.120E	Broca Cortante Ø 6.00 x 120.0 ER-20
14.5.2060.130E	Broca Cortante Ø 6.00 x 130.0 ER-20
14.5.2060.140E	Broca Cortante Ø 6.00 x 140.0 ER-20
14.5.2060.150E	Broca Cortante Ø 6.00 x 150.0 ER-20
14.5.2060.160E	Broca Cortante Ø 6.00 x 160.0 ER-20
14.5.2060.170E	Broca Cortante Ø 6.00 x 170.0 ER-20
14.5.2060.180E	Broca Cortante Ø 6.00 x 180.0 ER-20
14.5.2060.190E	Broca Cortante Ø 6.00 x 190.0 ER-20
14.5.2060.200E	Broca Cortante Ø 6.00 x 200.0 ER-20
14.5.2070.050E	Broca Cortante Ø 7.00 x 50.0 ER-20
14.5.2070.060E	Broca Cortante Ø 7.00 x 60.0 ER-20
14.5.2070.070E	Broca Cortante Ø 7.00 x 70.0 ER-20
14.5.2070.080E	Broca Cortante Ø 7.00 x 80.0 ER-20
14.5.2070.090E	Broca Cortante Ø 7.00 x 90.0 ER-20
14.5.2070.100E	Broca Cortante Ø 7.00 x 100.0 ER-20
14.5.2070.110E	Broca Cortante Ø 7.00 x 110.0 ER-20

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.2070.120E	Broca Cortante Ø 7.00 x 120.0 ER-20
14.5.2070.130E	Broca Cortante Ø 7.00 x 130.0 ER-20
14.5.2070.140E	Broca Cortante Ø 7.00 x 140.0 ER-20
14.5.2070.150E	Broca Cortante Ø 7.00 x 150.0 ER-20
14.5.2070.160E	Broca Cortante Ø 7.00 x 160.0 ER-20
14.5.2070.170E	Broca Cortante Ø 7.00 x 170.0 ER-20
14.5.2070.180E	Broca Cortante Ø 7.00 x 180.0 ER-20
14.5.2070.190E	Broca Cortante Ø 7.00 x 190.0 ER-20
14.5.2070.200E	Broca Cortante Ø 7.00 x 200.0 ER-20
12.5.0116.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-1
12.5.0116.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-1
12.5.0116.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-1
12.5.0116.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-1
12.5.0116.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-1
12.5.0116.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-1
12.5.0216.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-2
12.5.0216.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-2
12.5.0216.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-2
12.5.0216.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-2
12.5.0216.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-2
12.5.0216.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-2
12.5.0316.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-3
12.5.0316.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-3
12.5.0316.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-3
12.5.0316.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-3
12.5.0316.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-3
12.5.0316.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-3
12.5.0416.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-4
12.5.0416.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-4
12.5.0416.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-4
12.5.0416.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-4
12.5.0416.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-4
12.5.0416.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-4
12.5.0516.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-5
12.5.0516.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-5
12.5.0516.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-5
12.5.0516.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-5
12.5.0516.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-5
12.5.0516.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-5
12.5.0616.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-6
12.5.0616.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-6
12.5.0616.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-6
12.5.0616.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-6
12.5.0616.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-6

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.0616.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-6
12.5.0716.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-7
12.5.0716.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-7
12.5.0716.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-7
12.5.0716.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-7
12.5.0716.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-7
12.5.0716.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-7
12.5.0816.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-8
12.5.0816.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-8
12.5.0816.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-8
12.5.0816.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-8
12.5.0816.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-8
12.5.0816.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-8
12.5.0916.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-9
12.5.0916.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-9
12.5.0916.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-9
12.5.0916.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-9
12.5.0916.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-9
12.5.0916.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-9
12.5.1016.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-10
12.5.1016.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-10
12.5.1016.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-10
12.5.1016.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-10
12.5.1016.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-10
12.5.1016.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-10
12.5.1116.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-11
12.5.1116.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-11
12.5.1116.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-11
12.5.1116.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-11
12.5.1116.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-11
12.5.1116.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-11
12.5.1216.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-12
12.5.1216.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-12
12.5.1216.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-12
12.5.1216.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-12
12.5.1216.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-12
12.5.1216.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-12
12.5.1316.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-13
12.5.1316.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-13
12.5.1316.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-13
12.5.1316.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-13
12.5.1316.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-13
12.5.1316.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-13
12.5.1416.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-14

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.1416.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-14
12.5.1416.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-14
12.5.1416.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-14
12.5.1416.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-14
12.5.1416.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-14
12.5.1516.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-15
12.5.1516.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-15
12.5.1516.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-15
12.5.1516.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-15
12.5.1516.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-15
12.5.1516.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-15
12.5.1616.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-16
12.5.1616.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-16
12.5.1616.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-16
12.5.1616.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-16
12.5.1616.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-16
12.5.1616.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-16
12.5.1716.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-17
12.5.1716.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-17
12.5.1716.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-17
12.5.1716.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-17
12.5.1716.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-17
12.5.1716.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-17
12.5.1816.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-18
12.5.1816.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-18
12.5.1816.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-18
12.5.1816.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-18
12.5.1816.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-18
12.5.1816.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-18
12.5.1916.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-19
12.5.1916.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-19
12.5.1916.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-19
12.5.1916.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-19
12.5.1916.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-19
12.5.1916.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-19
12.5.2016.012E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 12.00 ER-20
12.5.2016.013E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 13.00 ER-20
12.5.2016.016E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 16.00 ER-20
12.5.2016.020E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 20.00 ER-20
12.5.2016.022E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 22.00 ER-20
12.5.2016.025E	Fresa Craniotomo Ø1.60 x 25.00 ER-20
12.5.9965.029E	Fresa para Raspagem Ø 2,90 x 13,20 x 65,0
12.5.9965.043E	Fresa para Raspagem Ø 4,30 x 13,00 x 65,0
12.5.9970.050E	Fresa para Raspagem Ø 5,00 x 15,00 x 70,0

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.9965.020E	Fresa para Osteotomia Ø 2,00 x 8,00 x 65,0
12.5.9965.022E	Fresa para Osteotomia Ø 2,20 x 12,00 x 65,0
12.5.9965.120E	Fresa para Osteotomia Ø 2,00 x 13,00 x 65,0
12.5.9965.122E	Fresa para Osteotomia Ø 2,20 x 11,00 x 65,0
12.5.9980.029E	Fresa para Raspagem Ø 2,90 x 13,20 x 80,0
12.5.9980.043E	Fresa para Raspagem Ø 4,30 x 13,00 x 80,0
12.5.9980.050E	Fresa para Raspagem Ø 5,00 x 15,00 x 80,0
12.5.9980.020E	Fresa para Osteotomia Ø 2,00 x 8,00 x 80,0
12.5.9980.022E	Fresa para Osteotomia Ø 2,20 x 12,00 x 80,0
12.5.9980.120E	Fresa para Osteotomia Ø 2,00 x 13,00 x 80,0
12.5.9980.122E	Fresa para Osteotomia Ø 2,20 x 11,00 x 80,0
12.5.9850.008E	Broca de Corte Lateral Ø 0.80 x 4.60 x 50.8
12.5.9850.010E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 5.10 x 50.8
12.5.9850.015E	Broca de Corte Lateral Ø 1.50 x 10.20 x 50.8
12.5.9850.115E	Broca de Corte Lateral Ø 1.50 x 7.60 x 50.8
12.5.9850.020E	Broca de Corte Lateral Ø 2.00 x 7.60 x 50.8
12.5.9850.021E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 5.00 x 50.8
12.5.9844.016E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.60 x 44.5
12.5.9844.012E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.20 x 44.5
12.5.9850.011E	Broca de Corte Lateral Ø 1.10 x 4.30 x 50.8
12.5.9873.008E	Broca de Corte Lateral Ø 0.80 x 4.60 x 73.0
12.5.9873.010E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 5.10 x 73.0
12.5.9873.015E	Broca de Corte Lateral Ø 1.50 x 10.20 x 73.0
12.5.9873.115E	Broca de Corte Lateral Ø 1.50 x 7.60 x 73.0
12.5.9873.020E	Broca de Corte Lateral Ø 2.00 x 7.60 x 73.0
12.5.9873.021E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 5.00 x 73.0
12.5.9873.016E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.60 x 73.0
12.5.9873.012E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.20 x 73.0
12.5.9873.011E	Broca de Corte Lateral Ø 1.10 x 4.30 x 73.0
12.5.9895.008E	Broca de Corte Lateral Ø 0.80 x 4.60 x 95.0
12.5.9895.010E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 5.10 x 95.0
12.5.9895.015E	Broca de Corte Lateral Ø 1.50 x 10.20 x 95.0
12.5.9895.115E	Broca de Corte Lateral Ø 1.50 x 7.60 x 95.0
12.5.9895.020E	Broca de Corte Lateral Ø 2.00 x 7.60 x 95.0
12.5.9895.021E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 5.00 x 95.0
12.5.9895.016E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.60 x 95.0
12.5.9895.012E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.20 x 95.0
12.5.9895.011E	Broca de Corte Lateral Ø 1.10 x 4.30 x 95.0
12.5.0131.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-1
12.5.0131.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-1
12.5.0131.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-1
12.5.0131.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-1
12.5.0131.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-1
12.5.0131.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-1

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.0131.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-1
12.5.0131.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-1
12.5.0131.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-1
12.5.0131.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-1
12.5.0131.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-1
12.5.0131.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-1
12.5.0131.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-1
12.5.0131.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-1
12.5.0231.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-2
12.5.0231.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-2
12.5.0231.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-2
12.5.0231.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-2
12.5.0231.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-2
12.5.0231.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-2
12.5.0231.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-2
12.5.0231.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-2
12.5.0231.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-2
12.5.0231.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-2
12.5.0231.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-2
12.5.0231.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-2
12.5.0231.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-2
12.5.0231.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-2
12.5.0331.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-3
12.5.0331.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-3
12.5.0331.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-3
12.5.0331.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-3
12.5.0331.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-3
12.5.0331.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-3
12.5.0331.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-3
12.5.0331.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-3
12.5.0331.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-3
12.5.0331.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-3
12.5.0331.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-3
12.5.0331.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-3
12.5.0331.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-3
12.5.0331.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-3
12.5.0431.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-4
12.5.0431.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-4
12.5.0431.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-4
12.5.0431.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-4
12.5.0431.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-4
12.5.0431.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-4
12.5.0431.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-4
12.5.0431.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-4

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.0431.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-4
12.5.0431.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-4
12.5.0431.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-4
12.5.0431.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-4
12.5.0431.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-4
12.5.0431.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-4
12.5.0531.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-5
12.5.0531.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-5
12.5.0531.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-5
12.5.0531.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-5
12.5.0531.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-5
12.5.0531.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-5
12.5.0531.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-5
12.5.0531.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-5
12.5.0531.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-5
12.5.0531.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-5
12.5.0531.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-5
12.5.0531.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-5
12.5.0531.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-5
12.5.0531.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-5
12.5.0631.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-6
12.5.0631.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-6
12.5.0631.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-6
12.5.0631.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-6
12.5.0631.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-6
12.5.0631.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-6
12.5.0631.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-6
12.5.0631.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-6
12.5.0631.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-6
12.5.0631.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-6
12.5.0631.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-6
12.5.0631.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-6
12.5.0631.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-6
12.5.0631.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-6
12.5.0731.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-7
12.5.0731.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-7
12.5.0731.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-7
12.5.0731.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-7
12.5.0731.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-7
12.5.0731.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-7
12.5.0731.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-7
12.5.0731.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-7
12.5.0731.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-7
12.5.0731.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.0731.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-7
12.5.0731.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-7
12.5.0731.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-7
12.5.0731.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-7
12.5.0831.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-8
12.5.0831.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-8
12.5.0831.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-8
12.5.0831.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-8
12.5.0831.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-8
12.5.0831.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-8
12.5.0831.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-8
12.5.0831.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-8
12.5.0831.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-8
12.5.0831.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-8
12.5.0831.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-8
12.5.0831.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-8
12.5.0831.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-8
12.5.0831.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-8
12.5.0931.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-9
12.5.0931.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-9
12.5.0931.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-9
12.5.0931.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-9
12.5.0931.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-9
12.5.0931.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-9
12.5.0931.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-9
12.5.0931.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-9
12.5.0931.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-9
12.5.0931.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-9
12.5.0931.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-9
12.5.0931.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-9
12.5.0931.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-9
12.5.0931.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-9
12.5.1031.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 70,0 ER-10
12.5.1031.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 80,0 ER-10
12.5.1031.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 90,0 ER-10
12.5.1031.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 100,0 ER-10
12.5.1031.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 110,0 ER-10
12.5.1031.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 120,0 ER-10
12.5.1031.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 130,0 ER-10
12.5.1031.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 140,0 ER-10
12.5.1031.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 150,0 ER-10
12.5.1031.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 160,0 ER-10
12.5.1031.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 170,0 ER-10
12.5.1031.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 180,0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.1031.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 190,0 ER-10
12.5.1031.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 3.10 x 200,0 ER-10
12.5.0140.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-1
12.5.0140.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-1
12.5.0140.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-1
12.5.0140.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-1
12.5.0140.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-1
12.5.0140.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-1
12.5.0140.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-1
12.5.0140.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-1
12.5.0140.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-1
12.5.0140.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-1
12.5.0140.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-1
12.5.0140.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-1
12.5.0140.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-1
12.5.0140.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-1
12.5.0240.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-2
12.5.0240.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-2
12.5.0240.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-2
12.5.0240.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-2
12.5.0240.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-2
12.5.0240.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-2
12.5.0240.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-2
12.5.0240.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-2
12.5.0240.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-2
12.5.0240.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-2
12.5.0240.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-2
12.5.0240.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-2
12.5.0240.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-2
12.5.0240.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-2
12.5.0340.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-3
12.5.0340.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-3
12.5.0340.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-3
12.5.0340.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-3
12.5.0340.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-3
12.5.0340.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-3
12.5.0340.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-3
12.5.0340.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-3
12.5.0340.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-3
12.5.0340.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-3
12.5.0340.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-3
12.5.0340.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-3
12.5.0340.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-3
12.5.0340.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.0440.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-4
12.5.0440.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-4
12.5.0440.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-4
12.5.0440.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-4
12.5.0440.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-4
12.5.0440.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-4
12.5.0440.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-4
12.5.0440.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-4
12.5.0440.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-4
12.5.0440.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-4
12.5.0440.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-4
12.5.0440.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-4
12.5.0440.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-4
12.5.0440.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-4
12.5.0540.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-5
12.5.0540.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-5
12.5.0540.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-5
12.5.0540.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-5
12.5.0540.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-5
12.5.0540.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-5
12.5.0540.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-5
12.5.0540.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-5
12.5.0540.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-5
12.5.0540.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-5
12.5.0540.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-5
12.5.0540.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-5
12.5.0540.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-5
12.5.0540.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-5
12.5.0640.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-6
12.5.0640.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-6
12.5.0640.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-6
12.5.0640.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-6
12.5.0640.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-6
12.5.0640.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-6
12.5.0640.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-6
12.5.0640.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-6
12.5.0640.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-6
12.5.0640.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-6
12.5.0640.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-6
12.5.0640.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-6
12.5.0640.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-6
12.5.0640.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-6
12.5.0740.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-7
12.5.0740.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.0740.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-7
12.5.0740.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-7
12.5.0740.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-7
12.5.0740.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-7
12.5.0740.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-7
12.5.0740.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-7
12.5.0740.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-7
12.5.0740.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-7
12.5.0740.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-7
12.5.0740.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-7
12.5.0740.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-7
12.5.0740.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-7
12.5.0840.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-8
12.5.0840.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-8
12.5.0840.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-8
12.5.0840.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-8
12.5.0840.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-8
12.5.0840.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-8
12.5.0840.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-8
12.5.0840.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-8
12.5.0840.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-8
12.5.0840.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-8
12.5.0840.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-8
12.5.0840.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-8
12.5.0840.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-8
12.5.0840.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-8
12.5.0940.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-9
12.5.0940.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-9
12.5.0940.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-9
12.5.0940.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-9
12.5.0940.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-9
12.5.0940.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-9
12.5.0940.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-9
12.5.0940.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-9
12.5.0940.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-9
12.5.0940.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-9
12.5.0940.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-9
12.5.0940.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-9
12.5.0940.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-9
12.5.0940.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-9
12.5.1040.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 70,0 ER-10
12.5.1040.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 80,0 ER-10
12.5.1040.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 90,0 ER-10
12.5.1040.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 100,0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



12.5.1040.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 110,0 ER-10
12.5.1040.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 120,0 ER-10
12.5.1040.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 130,0 ER-10
12.5.1040.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 140,0 ER-10
12.5.1040.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 150,0 ER-10
12.5.1040.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 160,0 ER-10
12.5.1040.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 170,0 ER-10
12.5.1040.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 180,0 ER-10
12.5.1040.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 190,0 ER-10
12.5.1040.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 4.00 x 200,0 ER-10
12.5.0201.110E	Broca Automática para Trepanação Ø 14.00/11.00
12.5.0201.080E	Broca Automática para Trepanação Ø 11.00/8.00
12.5.0201.060E	Broca Automática para Trepanação Ø 9.00/6.00
12.5.0301.110E	Broca Automática para Trepanação Ø 14.00/11.00
12.5.0301.080E	Broca Automática para Trepanação Ø 11.00/8.00
12.5.0301.060E	Broca Automática para Trepanação Ø 9.00/6.00
03.5.3003.001E	Lâmina Percutânea Expansível 24.0 x 278.0
12.5.5104.145E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 14.50 ER-1
12.5.5114.145E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 14.50 ER-1
12.5.5106.145E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 14.50 ER-1
12.5.5104.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-1
12.5.5114.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-1
12.5.5106.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-1
12.5.5204.145E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 14.50 ER-2
12.5.5214.145E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 14.50 ER-2
12.5.5206.145E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 14.50 ER-2
12.5.5204.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-2
12.5.5214.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-2
12.5.5206.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-2
12.5.5304.145E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 14.50 ER-3
12.5.5314.145E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 14.50 ER-3
12.5.5306.145E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 14.50 ER-3
12.5.5304.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-3
12.5.5314.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-3
12.5.5306.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-3
12.5.6104.405E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 40.50 ER-1
12.5.6114.405E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 40.50 ER-1
12.5.6106.405E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 40.50 ER-1
12.5.6204.405E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 40.50 ER-2
12.5.6214.405E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 40.50 ER-2
12.5.6206.405E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 40.50 ER-2
12.5.6304.405E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 40.50 ER-3
12.5.6314.405E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 40.50 ER-3
12.5.6306.405E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 40.50 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.7104.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-1
12.5.7114.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-1
12.5.7106.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-1
12.5.7204.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-2
12.5.7214.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-2
12.5.7206.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-2
12.5.7304.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-3
12.5.7314.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-3
12.5.7306.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-3
12.5.8104.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-1
12.5.8114.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-1
12.5.8106.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-1
12.5.8204.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-2
12.5.8214.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-2
12.5.8206.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-2
12.5.8304.335E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 33.50 ER-3
12.5.8314.335E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 33.50 ER-3
12.5.8306.335E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 33.50 ER-3
12.5.4104.250E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 25.0 ER-1
12.5.4114.250E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 25.0 ER-1
12.5.4106.250E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 25.0 ER-1
12.5.4104.230E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 23.0 ER-1
12.5.4114.230E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 23.0 ER-1
12.5.4106.230E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 23.0 ER-1
12.5.4104.160E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 16.0 ER-1
12.5.4114.160E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 16.0 ER-1
12.5.4106.160E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 16.0 ER-1
12.5.4104.070E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 7.0 ER-1
12.5.4114.070E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 7.0 ER-1
12.5.4106.070E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 7.0 ER-1
12.5.4204.250E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 25.0 ER-2
12.5.4214.250E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 25.0 ER-2
12.5.4206.250E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 25.0 ER-2
12.5.4204.230E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 23.0 ER-2
12.5.4214.230E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 23.0 ER-2
12.5.4206.230E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 23.0 ER-2
12.5.4204.160E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 16.0 ER-2
12.5.4214.160E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 16.0 ER-2
12.5.4206.160E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 16.0 ER-2
12.5.4204.070E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 7.0 ER-2
12.5.4214.070E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 7.0 ER-2
12.5.4206.070E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 7.0 ER-2
12.5.4304.250E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 25.0 ER-3
12.5.4314.250E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 25.0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.4306.250E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 25.0 ER-3
12.5.4304.230E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 23.0 ER-3
12.5.4314.230E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 23.0 ER-3
12.5.4306.230E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 23.0 ER-3
12.5.4304.160E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 16.0 ER-3
12.5.4314.160E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 16.0 ER-3
12.5.4306.160E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 16.0 ER-3
12.5.4304.070E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 7.0 ER-3
12.5.4314.070E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 7.0 ER-3
12.5.4306.070E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 7.0 ER-3
12.5.9104.145E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 14.50 ER-1
12.5.9114.145E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 14.50 ER-1
12.5.9106.145E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 14.50 ER-1
12.5.9104.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-1
12.5.9114.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-1
12.5.9106.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-1
12.5.9204.145E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 14.50 ER-2
12.5.9214.145E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 14.50 ER-2
12.5.9206.145E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 14.50 ER-2
12.5.9204.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-2
12.5.9214.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-2
12.5.9206.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-2
12.5.9304.145E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 14.50 ER-3
12.5.9314.145E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 14.50 ER-3
12.5.9306.145E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 14.50 ER-3
12.5.9304.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-3
12.5.9314.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-3
12.5.9306.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-3
12.5.3104.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-1
12.5.3114.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-1
12.5.3106.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-1
12.5.3204.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-2
12.5.3214.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-2
12.5.3206.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-2
12.5.3304.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-3
12.5.3314.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-3
12.5.3306.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-3
12.5.2104.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-1
12.5.2114.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-1
12.5.2106.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-1
12.5.2104.225E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 22.5 ER-1
12.5.2114.225E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 22.5 ER-1
12.5.2106.225E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 22.5 ER-1
12.5.2204.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-2

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.2214.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-2
12.5.2206.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-2
12.5.2204.225E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 22.5 ER-2
12.5.2214.225E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 22.5 ER-2
12.5.2206.225E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 22.5 ER-2
12.5.2304.270E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 27.0 ER-3
12.5.2314.270E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 27.0 ER-3
12.5.2306.270E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 27.0 ER-3
12.5.2304.225E	Lâmina Reciprocante 0.40 x 22.5 ER-3
12.5.2314.225E	Lâmina Reciprocante Longa 0.40 x 22.5 ER-3
12.5.2306.225E	Lâmina Reciprocante 0.60 x 22.5 ER-3
13.5.0105.011E	Raspa Corte Cruzado 5.0 x 11.0 ER-01
13.5.0107.014E	Raspa Corte Cruzado 7.0 x 14.0 ER-01
13.5.0205.011E	Raspa Corte Cruzado 5.0 x 11.0 ER-02
13.5.0207.014E	Raspa Corte Cruzado 7.0 x 14.0 ER-02
13.5.0305.011E	Raspa Corte Cruzado 5.0 x 11.0 ER-03
13.5.0307.014E	Raspa Corte Cruzado 7.0 x 14.0 ER-03
13.5.1105.011E	Raspa Corte Reto 5.0 x 11.0 ER-01
13.5.1107.014E	Raspa Corte Reto 7.0 x 14.0 ER-01
13.5.1205.011E	Raspa Corte Reto 5.0 x 11.0 ER-02
13.5.1207.014E	Raspa Corte Reto 7.0 x 14.0 ER-02
13.5.1305.011E	Raspa Corte Reto 5.0 x 11.0 ER-03
13.5.1307.014E	Raspa Corte Reto 7.0 x 14.0 ER-03
13.5.2106.320E	Raspa Intramedular 6.5 x 32.0 ER-01
13.5.2105.245E	Raspa Intramedular 5.3 x 24.5 ER-01
13.5.2111.475E	Raspa Intramedular 11.0 x 47.5 ER-01
13.5.2109.305E	Raspa Intramedular 9.5 x 30.5 ER-01
13.5.2206.320E	Raspa Intramedular 6.5 x 32.0 ER-02
13.5.2205.245E	Raspa Intramedular 5.3 x 24.5 ER-02
13.5.2211.475E	Raspa Intramedular 11.0 x 47.5 ER-02
13.5.2209.305E	Raspa Intramedular 9.5 x 30.5 ER-02
13.5.2206.320E	Raspa Intramedular 6.5 x 32.0 ER-03
13.5.2205.245E	Raspa Intramedular 5.3 x 24.5 ER-03
13.5.2211.475E	Raspa Intramedular 11.0 x 47.5 ER-03
13.5.2209.305E	Raspa Intramedular 9.5 x 30.5 ER-03
CODIGO	DESCRIÇÃO
12.5.9414.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.40 ER-01
12.5.9416.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.60 ER-01
12.5.9424.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.40 ER-02
12.5.9426.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.60 ER-02
12.5.9434.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.40 ER-03
12.5.9436.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.60 ER-03
12.5.9514.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.40 ER-01
12.5.9516.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.60 ER-01

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.9524.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.40 ER-02
12.5.9526.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.60 ER-02
12.5.9534.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.40 ER-03
12.5.9536.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.60 ER-03
CODIGO	DESCRIÇÃO
12.5.9614.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.40 ER-01
12.5.9616.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.60 ER-01
12.5.9624.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.40 ER-02
12.5.9626.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.60 ER-02
12.5.9634.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.40 ER-03
12.5.9636.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA ESQUERDA 0.60 ER-03
12.5.9714.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.40 ER-01
12.5.9716.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.60 ER-01
12.5.9724.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.40 ER-02
12.5.9726.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.60 ER-02
12.5.9734.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.40 ER-03
12.5.9536.000E	SERRA MICRO-RECÍPROCA DIREITA 0.60 ER-03
16.5.0110.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-01
16.5.0112.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-01
16.5.0116.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-01
16.5.0121.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-01
16.5.0110.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-01
16.5.0112.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-01
16.5.0116.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-01
16.5.0121.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-01
16.5.0110.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-01
16.5.0112.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-01
16.5.0116.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-01
16.5.0121.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-01
16.5.0110.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-01
16.5.0112.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-01
16.5.0116.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-01
16.5.0121.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-01
16.5.0110.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-01
16.5.0112.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-01
16.5.0116.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-01
16.5.0121.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-01
16.5.0110.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-01
16.5.0112.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-01
16.5.0116.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-01
16.5.0121.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-01
16.5.0110.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-01
16.5.0112.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-01
16.5.0116.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-01

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.0121.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-01
16.5.0110.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-01
16.5.0112.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-01
16.5.0116.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-01
16.5.0121.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-01
16.5.0110.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-01
16.5.0112.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-01
16.5.0116.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-01
16.5.0121.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-01
16.5.0210.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-02
16.5.0212.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-02
16.5.0216.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-02
16.5.0221.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-02
16.5.0210.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-02
16.5.0212.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-02
16.5.0216.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-02
16.5.0221.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-02
16.5.0210.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-02
16.5.0212.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-02
16.5.0216.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-02
16.5.0221.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-02
16.5.0210.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-02
16.5.0212.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-02
16.5.0216.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-02
16.5.0221.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-02
16.5.0210.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-02
16.5.0212.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-02
16.5.0216.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-02
16.5.0221.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-02
16.5.0210.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-02
16.5.0212.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-02
16.5.0216.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-02
16.5.0221.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-02
16.5.0210.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-02
16.5.0212.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-02
16.5.0216.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-02
16.5.0221.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-02
16.5.0210.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-02
16.5.0212.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-02
16.5.0216.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-02
16.5.0221.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-02
16.5.0210.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-02
16.5.0212.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-02
16.5.0216.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-02

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.0221.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-02
16.5.0310.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-03
16.5.0312.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-03
16.5.0316.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-03
16.5.0321.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-03
16.5.0310.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-03
16.5.0312.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-03
16.5.0316.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-03
16.5.0321.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-03
16.5.0310.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-03
16.5.0312.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-03
16.5.0316.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-03
16.5.0321.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-03
16.5.0310.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-03
16.5.0312.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-03
16.5.0316.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-03
16.5.0321.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-03
16.5.0310.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-03
16.5.0312.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-03
16.5.0316.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-03
16.5.0321.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-03
16.5.0310.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-03
16.5.0312.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-03
16.5.0316.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-03
16.5.0321.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-03
16.5.0310.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-03
16.5.0312.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-03
16.5.0316.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-03
16.5.0321.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-03
16.5.0310.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-03
16.5.0312.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-03
16.5.0316.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-03
16.5.0321.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-03
16.5.0310.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-03
16.5.0312.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-03
16.5.0316.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-03
16.5.0321.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-03
16.5.0410.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-04
16.5.0412.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-04
16.5.0416.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-04
16.5.0421.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-04
16.5.0410.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-04
16.5.0412.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-04
16.5.0416.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-04

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.0421.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-04
16.5.0410.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-04
16.5.0412.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-04
16.5.0416.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-04
16.5.0421.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-04
16.5.0410.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-04
16.5.0412.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-04
16.5.0416.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-04
16.5.0421.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-04
16.5.0410.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-04
16.5.0412.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-04
16.5.0416.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-04
16.5.0421.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-04
16.5.0410.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-04
16.5.0412.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-04
16.5.0416.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-04
16.5.0421.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-04
16.5.0410.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-04
16.5.0412.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-04
16.5.0416.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-04
16.5.0421.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-04
16.5.0410.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-04
16.5.0412.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-04
16.5.0416.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-04
16.5.0421.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-04
16.5.0410.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-04
16.5.0412.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-04
16.5.0416.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-04
16.5.0421.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-04
16.5.0510.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-05
16.5.0512.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-05
16.5.0516.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-05
16.5.0521.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-05
16.5.0510.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-05
16.5.0512.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-05
16.5.0516.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-05
16.5.0521.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-05
16.5.0510.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-05
16.5.0512.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-05
16.5.0516.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-05
16.5.0521.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-05
16.5.0510.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-05
16.5.0512.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-05
16.5.0516.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.0521.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-05
16.5.0510.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-05
16.5.0512.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-05
16.5.0516.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-05
16.5.0521.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-05
16.5.0510.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-05
16.5.0512.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-05
16.5.0516.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-05
16.5.0521.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-05
16.5.0510.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-05
16.5.0512.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-05
16.5.0516.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-05
16.5.0521.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-05
16.5.0510.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-05
16.5.0512.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-05
16.5.0516.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-05
16.5.0521.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-05
16.5.0510.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-05
16.5.0512.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-05
16.5.0516.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-05
16.5.0521.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-05
16.5.0610.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-06
16.5.0612.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-06
16.5.0616.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-06
16.5.0621.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-06
16.5.0610.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-06
16.5.0612.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-06
16.5.0616.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-06
16.5.0621.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-06
16.5.0610.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-06
16.5.0612.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-06
16.5.0616.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-06
16.5.0621.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-06
16.5.0610.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-06
16.5.0612.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-06
16.5.0616.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-06
16.5.0621.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-06
16.5.0610.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-06
16.5.0612.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-06
16.5.0616.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-06
16.5.0621.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-06
16.5.0610.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-06
16.5.0612.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-06
16.5.0616.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-06

16.5.0621.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-06
16.5.0610.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-06
16.5.0612.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-06
16.5.0616.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-06
16.5.0621.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-06
16.5.0610.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-06
16.5.0612.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-06
16.5.0616.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-06
16.5.0621.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-06
16.5.0610.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-06
16.5.0612.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-06
16.5.0616.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-06
16.5.0621.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-06
16.5.0710.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-07
16.5.0712.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-07
16.5.0716.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-07
16.5.0721.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-07
16.5.0710.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-07
16.5.0712.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-07
16.5.0716.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-07
16.5.0721.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-07
16.5.0710.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-07
16.5.0712.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-07
16.5.0716.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-07
16.5.0721.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-07
16.5.0710.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-07
16.5.0712.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-07
16.5.0716.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-07
16.5.0721.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-07
16.5.0710.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-07
16.5.0712.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-07
16.5.0716.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-07
16.5.0721.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-07
16.5.0710.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-07
16.5.0712.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-07
16.5.0716.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-07
16.5.0721.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-07
16.5.0710.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-07
16.5.0712.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-07
16.5.0716.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-07
16.5.0721.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-07
16.5.0710.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-07
16.5.0712.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-07
16.5.0716.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-07

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.0721.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-07
16.5.0710.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-07
16.5.0712.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-07
16.5.0716.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-07
16.5.0721.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-07
16.5.0810.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 40.0 ER-08
16.5.0812.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 40.0 ER-08
16.5.0816.040E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 40.0 ER-08
16.5.0821.040E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 40.0 ER-08
16.5.0810.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 45.0 ER-08
16.5.0812.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 45.0 ER-08
16.5.0816.045E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 45.0 ER-08
16.5.0821.045E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 45.0 ER-08
16.5.0810.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 50.0 ER-08
16.5.0812.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 50.0 ER-08
16.5.0816.050E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 50.0 ER-08
16.5.0821.050E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 50.0 ER-08
16.5.0810.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 55.0 ER-08
16.5.0812.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 55.0 ER-08
16.5.0816.055E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 55.0 ER-08
16.5.0821.055E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 55.0 ER-08
16.5.0810.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 60.0 ER-08
16.5.0812.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 60.0 ER-08
16.5.0816.060E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 60.0 ER-08
16.5.0821.060E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 60.0 ER-08
16.5.0810.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 70.0 ER-08
16.5.0812.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 70.0 ER-08
16.5.0816.070E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 70.0 ER-08
16.5.0821.070E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 70.0 ER-08
16.5.0810.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 80.0 ER-08
16.5.0812.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 80.0 ER-08
16.5.0816.080E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 80.0 ER-08
16.5.0821.080E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 80.0 ER-08
16.5.0810.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 90.0 ER-08
16.5.0812.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 90.0 ER-08
16.5.0816.090E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 90.0 ER-08
16.5.0821.090E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 90.0 ER-08
16.5.0810.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.00 x 4.00 x 100.0 ER-08
16.5.0812.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.20 x 4.00 x 100.0 ER-08
16.5.0816.100E	Broca de Corte Lateral Ø 1.60 x 4.00 x 100.0 ER-08
16.5.0821.100E	Broca de Corte Lateral Ø 2.10 x 4.80 x 100.0 ER-08
16.5.2114.040E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 40.0 ER-01
16.5.2114.045E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 45.0 ER-01
16.5.2114.050E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 50.0 ER-01

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.2114.055E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 55.0 ER-01
16.5.2114.060E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 60.0 ER-01
16.5.2114.065E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 65.0 ER-01
16.5.2114.070E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 70.0 ER-01
16.5.2114.080E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 80.0 ER-01
16.5.2114.090E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 90.0 ER-01
16.5.2114.100E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 100.0 ER-01
16.5.2122.040E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 40.0 ER-01
16.5.2122.045E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 45.0 ER-01
16.5.2122.050E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 50.0 ER-01
16.5.2122.055E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 55.0 ER-01
16.5.2122.060E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 60.0 ER-01
16.5.2122.065E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 65.0 ER-01
16.5.2122.070E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 70.0 ER-01
16.5.2122.080E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 80.0 ER-01
16.5.2122.090E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 90.0 ER-01
16.5.2122.100E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 100.0 ER-01
16.5.2214.040E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 40.0 ER-02
16.5.2214.045E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 45.0 ER-02
16.5.2214.050E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 50.0 ER-02
16.5.2214.055E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 55.0 ER-02
16.5.2214.060E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 60.0 ER-02
16.5.2214.065E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 65.0 ER-02
16.5.2214.070E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 70.0 ER-02
16.5.2214.080E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 80.0 ER-02
16.5.2214.090E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 90.0 ER-02
16.5.2214.100E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 100.0 ER-02
16.5.2222.040E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 40.0 ER-02
16.5.2222.045E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 45.0 ER-02
16.5.2222.050E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 50.0 ER-02
16.5.2222.055E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 55.0 ER-02
16.5.2222.060E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 60.0 ER-02
16.5.2222.065E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 65.0 ER-02
16.5.2222.070E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 70.0 ER-02
16.5.2222.080E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 80.0 ER-02
16.5.2222.090E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 90.0 ER-02
16.5.2222.100E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 100.0 ER-02
16.5.2314.040E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 40.0 ER-03
16.5.2314.045E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 45.0 ER-03
16.5.2314.050E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 50.0 ER-03
16.5.2314.055E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 55.0 ER-03
16.5.2314.060E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 60.0 ER-03
16.5.2314.065E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 65.0 ER-03
16.5.2314.070E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 70.0 ER-03

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.2314.080E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 80.0 ER-03
16.5.2314.090E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 90.0 ER-03
16.5.2314.100E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 100.0 ER-03
16.5.2322.040E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 40.0 ER-03
16.5.2322.045E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 45.0 ER-03
16.5.2322.050E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 50.0 ER-03
16.5.2322.055E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 55.0 ER-03
16.5.2322.060E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 60.0 ER-03
16.5.2322.065E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 65.0 ER-03
16.5.2322.070E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 70.0 ER-03
16.5.2322.080E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 80.0 ER-03
16.5.2322.090E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 90.0 ER-03
16.5.2322.100E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 100.0 ER-03
16.5.2414.040E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 40.0 ER-04
16.5.2414.045E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 45.0 ER-04
16.5.2414.050E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 50.0 ER-04
16.5.2414.055E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 55.0 ER-04
16.5.2414.060E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 60.0 ER-04
16.5.2414.065E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 65.0 ER-04
16.5.2414.070E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 70.0 ER-04
16.5.2414.080E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 80.0 ER-04
16.5.2414.090E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 90.0 ER-04
16.5.2414.100E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 100.0 ER-04
16.5.2422.040E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 40.0 ER-04
16.5.2422.045E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 45.0 ER-04
16.5.2422.050E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 50.0 ER-04
16.5.2422.055E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 55.0 ER-04
16.5.2422.060E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 60.0 ER-04
16.5.2422.065E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 65.0 ER-04
16.5.2422.070E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 70.0 ER-04
16.5.2422.080E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 80.0 ER-04
16.5.2422.090E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 90.0 ER-04
16.5.2422.100E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 100.0 ER-04
16.5.2514.040E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 40.0 ER-05
16.5.2514.045E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 45.0 ER-05
16.5.2514.050E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 50.0 ER-05
16.5.2514.055E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 55.0 ER-05
16.5.2514.060E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 60.0 ER-05
16.5.2514.065E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 65.0 ER-05
16.5.2514.070E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 70.0 ER-05
16.5.2514.080E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 80.0 ER-05
16.5.2514.090E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 90.0 ER-05
16.5.2514.100E	BROCA LINDEMANN Ø 1.40 x 100.0 ER-05
16.5.2522.040E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 40.0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

16.5.2522.045E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 45.0 ER-05
16.5.2522.050E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 50.0 ER-05
16.5.2522.055E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 55.0 ER-05
16.5.2522.060E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 60.0 ER-05
16.5.2522.065E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 65.0 ER-05
16.5.2522.070E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 70.0 ER-05
16.5.2522.080E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 80.0 ER-05
16.5.2522.090E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 90.0 ER-05
16.5.2522.100E	BROCA LINDEMANN Ø 2.20 x 100.0 ER-05
14.5.5111.070E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 70.0 ER-01
14.5.5111.100E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 100.0 ER-01
14.5.5211.080E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 80.0 ER-02
14.5.5211.090E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 90.0 ER-02
14.5.5211.100E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 100.0 ER-02
14.5.5211.120E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 120.0 ER-02
14.5.5311.090E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 90.0 ER-03
14.5.5311.140E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 140.0 ER-03
14.5.5311.150E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 150.0 ER-03
14.5.5411.080E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 80.0 ER-04
14.5.5411.090E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 90.0 ER-04
14.5.5411.100E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 100.0 ER-04
14.5.5511.070E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 70.0 ER-05
14.5.5511.090E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 90.0 ER-05
14.5.5511.100E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 100.0 ER-05
14.5.5611.100E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 100.0 ER-06
14.5.5611.110E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 110.0 ER-06
14.5.5611.140E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 140.0 ER-06
14.5.5711.110E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 110.0 ER-07
14.5.5711.150E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 150.0 ER-07
14.5.5911.110E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 110.0 ER-09
14.5.6011.080E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 80.0 ER-10
14.5.6211.110E	BROCA Ø 1.10 x STOP 5.0 x 110.0 ER-12
14.5.3140.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 40,0 ER-01
14.5.3140.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 45,0 ER-01
14.5.3140.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 50,0 ER-01
14.5.3140.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 55,0 ER-01
14.5.3140.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 60,0 ER-01
14.5.3140.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 65,0 ER-01
14.5.3140.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 70,0 ER-01
14.5.3140.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 75,0 ER-01
14.5.3140.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 80,0 ER-01
14.5.3140.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 85,0 ER-01
14.5.3140.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 90,0 ER-01
14.5.3140.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 95,0 ER-01

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.3140.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 100,0 ER-01
14.5.3240.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 40,0 ER-02
14.5.3240.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 45,0 ER-02
14.5.3240.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 50,0 ER-02
14.5.3240.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 55,0 ER-02
14.5.3240.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 60,0 ER-02
14.5.3240.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 65,0 ER-02
14.5.3240.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 70,0 ER-02
14.5.3240.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 75,0 ER-02
14.5.3240.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 80,0 ER-02
14.5.3240.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 85,0 ER-02
14.5.3240.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 90,0 ER-02
14.5.3240.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 95,0 ER-02
14.5.3240.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 100,0 ER-02
14.5.3340.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 40,0 ER-03
14.5.3340.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 45,0 ER-03
14.5.3340.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 50,0 ER-03
14.5.3340.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 55,0 ER-03
14.5.3340.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 60,0 ER-03
14.5.3340.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 65,0 ER-03
14.5.3340.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 70,0 ER-03
14.5.3340.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 75,0 ER-03
14.5.3340.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 80,0 ER-03
14.5.3340.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 85,0 ER-03
14.5.3340.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 90,0 ER-03
14.5.3340.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 95,0 ER-03
14.5.3340.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 100,0 ER-03
14.5.3440.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 40,0 ER-04
14.5.3440.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 45,0 ER-04
14.5.3440.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 50,0 ER-04
14.5.3440.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 55,0 ER-04
14.5.3440.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 60,0 ER-04
14.5.3440.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 65,0 ER-04
14.5.3440.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 70,0 ER-04
14.5.3440.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 75,0 ER-04
14.5.3440.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 80,0 ER-04
14.5.3440.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 85,0 ER-04
14.5.3440.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 90,0 ER-04
14.5.3440.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 95,0 ER-04
14.5.3440.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 100,0 ER-04
14.5.3540.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 40,0 ER-05
14.5.3540.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 45,0 ER-05
14.5.3540.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 50,0 ER-05
14.5.3540.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 55,0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.3540.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 60,0 ER-05
14.5.3540.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 65,0 ER-05
14.5.3540.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 70,0 ER-05
14.5.3540.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 75,0 ER-05
14.5.3540.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 80,0 ER-05
14.5.3540.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 85,0 ER-05
14.5.3540.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 90,0 ER-05
14.5.3540.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 95,0 ER-05
14.5.3540.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,0 x 100,0 ER-05
14.5.3145.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 40,0 ER-01
14.5.3145.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 45,0 ER-01
14.5.3145.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 50,0 ER-01
14.5.3145.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 55,0 ER-01
14.5.3145.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 60,0 ER-01
14.5.3145.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 65,0 ER-01
14.5.3145.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 70,0 ER-01
14.5.3145.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 75,0 ER-01
14.5.3145.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 80,0 ER-01
14.5.3145.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 85,0 ER-01
14.5.3145.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 90,0 ER-01
14.5.3145.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 95,0 ER-01
14.5.3145.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 100,0 ER-01
14.5.3245.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 40,0 ER-02
14.5.3245.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 45,0 ER-02
14.5.3245.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 50,0 ER-02
14.5.3245.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 55,0 ER-02
14.5.3245.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 60,0 ER-02
14.5.3245.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 65,0 ER-02
14.5.3245.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 70,0 ER-02
14.5.3245.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 75,0 ER-02
14.5.3245.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 80,0 ER-02
14.5.3245.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 85,0 ER-02
14.5.3245.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 90,0 ER-02
14.5.3245.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 95,0 ER-02
14.5.3245.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 100,0 ER-02
14.5.3345.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 40,0 ER-03
14.5.3345.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 45,0 ER-03
14.5.3345.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 50,0 ER-03
14.5.3345.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 55,0 ER-03
14.5.3345.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 60,0 ER-03
14.5.3345.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 65,0 ER-03
14.5.3345.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 70,0 ER-03
14.5.3345.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 75,0 ER-03
14.5.3345.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 80,0 ER-03

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.3345.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 85,0 ER-03
14.5.3345.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 90,0 ER-03
14.5.3345.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 95,0 ER-03
14.5.3345.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 100,0 ER-03
14.5.3445.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 40,0 ER-04
14.5.3445.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 45,0 ER-04
14.5.3445.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 50,0 ER-04
14.5.3445.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 55,0 ER-04
14.5.3445.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 60,0 ER-04
14.5.3445.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 65,0 ER-04
14.5.3445.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 70,0 ER-04
14.5.3445.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 75,0 ER-04
14.5.3445.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 80,0 ER-04
14.5.3445.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 85,0 ER-04
14.5.3445.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 90,0 ER-04
14.5.3445.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 95,0 ER-04
14.5.3445.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 100,0 ER-04
14.5.3545.040E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 40,0 ER-05
14.5.3545.045E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 45,0 ER-05
14.5.3545.050E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 50,0 ER-05
14.5.3545.055E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 55,0 ER-05
14.5.3545.060E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 60,0 ER-05
14.5.3545.065E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 65,0 ER-05
14.5.3545.070E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 70,0 ER-05
14.5.3545.075E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 75,0 ER-05
14.5.3545.080E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 80,0 ER-05
14.5.3545.085E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 85,0 ER-05
14.5.3545.090E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 90,0 ER-05
14.5.3545.095E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 95,0 ER-05
14.5.3545.100E	Broca Cortante BUD Ø 4,5 x 100,0 ER-05
14.5.3150.040E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 40,0 ER-01
14.5.3150.045E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 45,0 ER-01
14.5.3150.050E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 50,0 ER-01
14.5.3150.055E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 55,0 ER-01
14.5.3150.060E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 60,0 ER-01
14.5.3150.065E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 65,0 ER-01
14.5.3150.070E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 70,0 ER-01
14.5.3150.075E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 75,0 ER-01
14.5.3150.080E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 80,0 ER-01
14.5.3150.085E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 85,0 ER-01
14.5.3150.090E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 90,0 ER-01
14.5.3150.095E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 95,0 ER-01
14.5.3150.100E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 100,0 ER-01
14.5.3250.040E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 40,0 ER-02

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.3250.045E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 45,0 ER-02
14.5.3250.050E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 50,0 ER-02
14.5.3250.055E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 55,0 ER-02
14.5.3250.060E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 60,0 ER-02
14.5.3250.065E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 65,0 ER-02
14.5.3250.070E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 70,0 ER-02
14.5.3250.075E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 75,0 ER-02
14.5.3250.080E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 80,0 ER-02
14.5.3250.085E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 85,0 ER-02
14.5.3250.090E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 90,0 ER-02
14.5.3250.095E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 95,0 ER-02
14.5.3250.100E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 100,0 ER-02
14.5.3350.040E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 40,0 ER-03
14.5.3350.045E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 45,0 ER-03
14.5.3350.050E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 50,0 ER-03
14.5.3350.055E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 55,0 ER-03
14.5.3350.060E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 60,0 ER-03
14.5.3350.065E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 65,0 ER-03
14.5.3350.070E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 70,0 ER-03
14.5.3350.075E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 75,0 ER-03
14.5.3350.080E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 80,0 ER-03
14.5.3350.085E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 85,0 ER-03
14.5.3350.090E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 90,0 ER-03
14.5.3350.095E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 95,0 ER-03
14.5.3350.100E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 100,0 ER-03
14.5.3450.040E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 40,0 ER-04
14.5.3450.045E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 45,0 ER-04
14.5.3450.050E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 50,0 ER-04
14.5.3450.055E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 55,0 ER-04
14.5.3450.060E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 60,0 ER-04
14.5.3450.065E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 65,0 ER-04
14.5.3450.070E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 70,0 ER-04
14.5.3450.075E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 75,0 ER-04
14.5.3450.080E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 80,0 ER-04
14.5.3450.085E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 85,0 ER-04
14.5.3450.090E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 90,0 ER-04
14.5.3450.095E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 95,0 ER-04
14.5.3450.100E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 100,0 ER-04
14.5.3550.040E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 40,0 ER-05
14.5.3550.045E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 45,0 ER-05
14.5.3550.050E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 50,0 ER-05
14.5.3550.055E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 55,0 ER-05
14.5.3550.060E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 60,0 ER-05
14.5.3550.065E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 65,0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.3550.070E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 70,0 ER-05
14.5.3550.075E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 75,0 ER-05
14.5.3550.080E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 80,0 ER-05
14.5.3550.085E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 85,0 ER-05
14.5.3550.090E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 90,0 ER-05
14.5.3550.095E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 95,0 ER-05
14.5.3550.100E	Broca Cortante BUD Ø 5,0 x 100,0 ER-05
14.5.4140.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 40,0 ER-01
14.5.4140.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 45,0 ER-01
14.5.4140.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 50,0 ER-01
14.5.4140.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 55,0 ER-01
14.5.4140.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 60,0 ER-01
14.5.4140.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 65,0 ER-01
14.5.4140.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 70,0 ER-01
14.5.4140.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 75,0 ER-01
14.5.4140.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 80,0 ER-01
14.5.4140.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 85,0 ER-01
14.5.4140.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 90,0 ER-01
14.5.4140.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 95,0 ER-01
14.5.4140.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 100,0 ER-01
14.5.4240.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 40,0 ER-02
14.5.4240.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 45,0 ER-02
14.5.4240.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 50,0 ER-02
14.5.4240.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 55,0 ER-02
14.5.4240.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 60,0 ER-02
14.5.4240.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 65,0 ER-02
14.5.4240.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 70,0 ER-02
14.5.4240.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 75,0 ER-02
14.5.4240.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 80,0 ER-02
14.5.4240.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 85,0 ER-02
14.5.4240.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 90,0 ER-02
14.5.4240.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 95,0 ER-02
14.5.4240.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 100,0 ER-02
14.5.4340.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 40,0 ER-03
14.5.4340.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 45,0 ER-03
14.5.4340.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 50,0 ER-03
14.5.4340.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 55,0 ER-03
14.5.4340.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 60,0 ER-03
14.5.4340.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 65,0 ER-03
14.5.4340.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 70,0 ER-03
14.5.4340.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 75,0 ER-03
14.5.4340.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 80,0 ER-03
14.5.4340.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 85,0 ER-03
14.5.4340.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 90,0 ER-03

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.4340.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 95,0 ER-03
14.5.4340.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 100,0 ER-03
14.5.4440.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 40,0 ER-04
14.5.4440.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 45,0 ER-04
14.5.4440.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 50,0 ER-04
14.5.4440.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 55,0 ER-04
14.5.4440.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 60,0 ER-04
14.5.4440.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 65,0 ER-04
14.5.4440.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 70,0 ER-04
14.5.4440.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 75,0 ER-04
14.5.4440.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 80,0 ER-04
14.5.4440.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 85,0 ER-04
14.5.4440.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 90,0 ER-04
14.5.4440.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 95,0 ER-04
14.5.4440.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 100,0 ER-04
14.5.4540.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 40,0 ER-05
14.5.4540.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 45,0 ER-05
14.5.4540.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 50,0 ER-05
14.5.4540.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 55,0 ER-05
14.5.4540.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 60,0 ER-05
14.5.4540.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 65,0 ER-05
14.5.4540.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 70,0 ER-05
14.5.4540.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 75,0 ER-05
14.5.4540.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 80,0 ER-05
14.5.4540.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 85,0 ER-05
14.5.4540.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 90,0 ER-05
14.5.4540.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 95,0 ER-05
14.5.4540.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,0 x 100,0 ER-05
14.5.4145.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 40,0 ER-01
14.5.4145.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 45,0 ER-01
14.5.4145.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 50,0 ER-01
14.5.4145.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 55,0 ER-01
14.5.4145.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 60,0 ER-01
14.5.4145.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 65,0 ER-01
14.5.4145.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 70,0 ER-01
14.5.4145.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 75,0 ER-01
14.5.4145.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 80,0 ER-01
14.5.4145.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 85,0 ER-01
14.5.4145.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 90,0 ER-01
14.5.4145.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 95,0 ER-01
14.5.4145.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 100,0 ER-01
14.5.4245.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 40,0 ER-02
14.5.4245.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 45,0 ER-02
14.5.4245.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 50,0 ER-02

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.4245.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 55,0 ER-02
14.5.4245.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 60,0 ER-02
14.5.4245.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 65,0 ER-02
14.5.4245.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 70,0 ER-02
14.5.4245.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 75,0 ER-02
14.5.4245.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 80,0 ER-02
14.5.4245.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 85,0 ER-02
14.5.4245.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 90,0 ER-02
14.5.4245.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 95,0 ER-02
14.5.4245.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 100,0 ER-02
14.5.4345.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 40,0 ER-03
14.5.4345.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 45,0 ER-03
14.5.4345.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 50,0 ER-03
14.5.4345.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 55,0 ER-03
14.5.4345.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 60,0 ER-03
14.5.4345.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 65,0 ER-03
14.5.4345.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 70,0 ER-03
14.5.4345.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 75,0 ER-03
14.5.4345.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 80,0 ER-03
14.5.4345.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 85,0 ER-03
14.5.4345.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 90,0 ER-03
14.5.4345.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 95,0 ER-03
14.5.4345.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 100,0 ER-03
14.5.4445.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 40,0 ER-04
14.5.4445.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 45,0 ER-04
14.5.4445.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 50,0 ER-04
14.5.4445.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 55,0 ER-04
14.5.4445.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 60,0 ER-04
14.5.4445.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 65,0 ER-04
14.5.4445.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 70,0 ER-04
14.5.4445.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 75,0 ER-04
14.5.4445.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 80,0 ER-04
14.5.4445.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 85,0 ER-04
14.5.4445.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 90,0 ER-04
14.5.4445.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 95,0 ER-04
14.5.4445.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 100,0 ER-04
14.5.4545.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 40,0 ER-05
14.5.4545.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 45,0 ER-05
14.5.4545.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 50,0 ER-05
14.5.4545.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 55,0 ER-05
14.5.4545.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 60,0 ER-05
14.5.4545.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 65,0 ER-05
14.5.4545.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 70,0 ER-05
14.5.4545.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 75,0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.4545.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 80,0 ER-05
14.5.4545.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 85,0 ER-05
14.5.4545.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 90,0 ER-05
14.5.4545.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 95,0 ER-05
14.5.4545.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 4,5 x 100,0 ER-05
14.5.4150.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 40,0 ER-01
14.5.4150.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 45,0 ER-01
14.5.4150.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 50,0 ER-01
14.5.4150.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 55,0 ER-01
14.5.4150.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 60,0 ER-01
14.5.4150.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 65,0 ER-01
14.5.4150.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 70,0 ER-01
14.5.4150.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 75,0 ER-01
14.5.4150.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 80,0 ER-01
14.5.4150.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 85,0 ER-01
14.5.4150.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 90,0 ER-01
14.5.4150.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 95,0 ER-01
14.5.4150.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 100,0 ER-01
14.5.4250.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 40,0 ER-02
14.5.4250.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 45,0 ER-02
14.5.4250.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 50,0 ER-02
14.5.4250.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 55,0 ER-02
14.5.4250.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 60,0 ER-02
14.5.4250.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 65,0 ER-02
14.5.4250.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 70,0 ER-02
14.5.4250.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 75,0 ER-02
14.5.4250.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 80,0 ER-02
14.5.4250.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 85,0 ER-02
14.5.4250.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 90,0 ER-02
14.5.4250.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 95,0 ER-02
14.5.4250.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 100,0 ER-02
14.5.4350.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 40,0 ER-03
14.5.4350.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 45,0 ER-03
14.5.4350.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 50,0 ER-03
14.5.4350.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 55,0 ER-03
14.5.4350.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 60,0 ER-03
14.5.4350.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 65,0 ER-03
14.5.4350.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 70,0 ER-03
14.5.4350.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 75,0 ER-03
14.5.4350.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 80,0 ER-03
14.5.4350.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 85,0 ER-03
14.5.4350.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 90,0 ER-03
14.5.4350.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 95,0 ER-03
14.5.4350.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 100,0 ER-03

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.4450.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 40,0 ER-04
14.5.4450.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 45,0 ER-04
14.5.4450.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 50,0 ER-04
14.5.4450.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 55,0 ER-04
14.5.4450.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 60,0 ER-04
14.5.4450.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 65,0 ER-04
14.5.4450.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 70,0 ER-04
14.5.4450.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 75,0 ER-04
14.5.4450.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 80,0 ER-04
14.5.4450.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 85,0 ER-04
14.5.4450.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 90,0 ER-04
14.5.4450.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 95,0 ER-04
14.5.4450.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 100,0 ER-04
14.5.4550.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 40,0 ER-05
14.5.4550.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 45,0 ER-05
14.5.4550.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 50,0 ER-05
14.5.4550.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 55,0 ER-05
14.5.4550.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 60,0 ER-05
14.5.4550.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 65,0 ER-05
14.5.4550.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 70,0 ER-05
14.5.4550.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 75,0 ER-05
14.5.4550.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 80,0 ER-05
14.5.4550.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 85,0 ER-05
14.5.4550.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 90,0 ER-05
14.5.4550.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 95,0 ER-05
14.5.4550.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 5,0 x 100,0 ER-05
14.5.4160.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 40,0 ER-01
14.5.4160.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 45,0 ER-01
14.5.4160.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 50,0 ER-01
14.5.4160.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 55,0 ER-01
14.5.4160.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 60,0 ER-01
14.5.4160.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 65,0 ER-01
14.5.4160.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 70,0 ER-01
14.5.4160.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 75,0 ER-01
14.5.4160.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 80,0 ER-01
14.5.4160.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 85,0 ER-01
14.5.4160.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 90,0 ER-01
14.5.4160.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 95,0 ER-01
14.5.4160.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 100,0 ER-01
14.5.4260.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 40,0 ER-02
14.5.4260.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 45,0 ER-02
14.5.4260.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 50,0 ER-02
14.5.4260.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 55,0 ER-02
14.5.4260.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 60,0 ER-02

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.4260.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 65,0 ER-02
14.5.4260.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 70,0 ER-02
14.5.4260.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 75,0 ER-02
14.5.4260.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 80,0 ER-02
14.5.4260.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 85,0 ER-02
14.5.4260.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 90,0 ER-02
14.5.4260.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 95,0 ER-02
14.5.4260.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 100,0 ER-02
14.5.4360.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 40,0 ER-03
14.5.4360.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 45,0 ER-03
14.5.4360.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 50,0 ER-03
14.5.4360.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 55,0 ER-03
14.5.4360.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 60,0 ER-03
14.5.4360.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 65,0 ER-03
14.5.4360.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 70,0 ER-03
14.5.4360.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 75,0 ER-03
14.5.4360.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 80,0 ER-03
14.5.4360.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 85,0 ER-03
14.5.4360.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 90,0 ER-03
14.5.4360.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 95,0 ER-03
14.5.4360.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 100,0 ER-03
14.5.4460.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 40,0 ER-04
14.5.4460.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 45,0 ER-04
14.5.4460.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 50,0 ER-04
14.5.4460.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 55,0 ER-04
14.5.4460.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 60,0 ER-04
14.5.4460.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 65,0 ER-04
14.5.4460.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 70,0 ER-04
14.5.4460.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 75,0 ER-04
14.5.4460.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 80,0 ER-04
14.5.4460.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 85,0 ER-04
14.5.4460.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 90,0 ER-04
14.5.4460.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 95,0 ER-04
14.5.4460.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 100,0 ER-04
14.5.4560.040E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 40,0 ER-05
14.5.4560.045E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 45,0 ER-05
14.5.4560.050E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 50,0 ER-05
14.5.4560.055E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 55,0 ER-05
14.5.4560.060E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 60,0 ER-05
14.5.4560.065E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 65,0 ER-05
14.5.4560.070E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 70,0 ER-05
14.5.4560.075E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 75,0 ER-05
14.5.4560.080E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 80,0 ER-05
14.5.4560.085E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 85,0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.4560.090E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 90,0 ER-05
14.5.4560.095E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 95,0 ER-05
14.5.4560.100E	Broca Cortante CILINDRICA Ø 6,0 x 100,0 ER-05
12.5.0118.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-1
12.5.0118.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-1
12.5.0118.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-1
12.5.0118.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-1
12.5.0118.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-1
12.5.0118.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-1
12.5.0118.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-1
12.5.0118.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-1
12.5.0118.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-1
12.5.0118.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-1
12.5.0118.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-1
12.5.0118.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-1
12.5.0118.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-1
12.5.0118.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-1
12.5.0218.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-2
12.5.0218.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-2
12.5.0218.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-2
12.5.0218.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-2
12.5.0218.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-2
12.5.0218.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-2
12.5.0218.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-2
12.5.0218.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-2
12.5.0218.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-2
12.5.0218.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-2
12.5.0218.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-2
12.5.0218.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-2
12.5.0218.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-2
12.5.0218.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-2
12.5.0318.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-3
12.5.0318.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-3
12.5.0318.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-3
12.5.0318.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-3
12.5.0318.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-3
12.5.0318.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-3
12.5.0318.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-3
12.5.0318.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-3
12.5.0318.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-3
12.5.0318.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-3
12.5.0318.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-3
12.5.0318.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-3
12.5.0318.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-3

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

12.5.0318.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-3
12.5.0418.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-4
12.5.0418.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-4
12.5.0418.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-4
12.5.0418.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-4
12.5.0418.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-4
12.5.0418.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-4
12.5.0418.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-4
12.5.0418.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-4
12.5.0418.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-4
12.5.0418.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-4
12.5.0418.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-4
12.5.0418.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-4
12.5.0418.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-4
12.5.0418.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-4
12.5.0518.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-5
12.5.0518.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-5
12.5.0518.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-5
12.5.0518.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-5
12.5.0518.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-5
12.5.0518.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-5
12.5.0518.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-5
12.5.0518.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-5
12.5.0518.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-5
12.5.0518.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-5
12.5.0518.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-5
12.5.0518.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-5
12.5.0518.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-5
12.5.0518.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-5
12.5.0618.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-6
12.5.0618.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-6
12.5.0618.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-6
12.5.0618.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-6
12.5.0618.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-6
12.5.0618.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-6
12.5.0618.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-6
12.5.0618.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-6
12.5.0618.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-6
12.5.0618.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-6
12.5.0618.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-6
12.5.0618.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-6
12.5.0618.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-6
12.5.0618.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-6
12.5.0718.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-7

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



12.5.0718.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-7
12.5.0718.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-7
12.5.0718.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-7
12.5.0718.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-7
12.5.0718.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-7
12.5.0718.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-7
12.5.0718.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-7
12.5.0718.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-7
12.5.0718.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-7
12.5.0718.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-7
12.5.0718.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-7
12.5.0718.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-7
12.5.0718.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-7
12.5.0818.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-8
12.5.0818.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-8
12.5.0818.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-8
12.5.0818.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-8
12.5.0818.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-8
12.5.0818.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-8
12.5.0818.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-8
12.5.0818.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-8
12.5.0818.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-8
12.5.0818.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-8
12.5.0818.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-8
12.5.0818.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-8
12.5.0818.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-8
12.5.0818.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-8
12.5.0918.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-9
12.5.0918.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-9
12.5.0918.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-9
12.5.0918.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-9
12.5.0918.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-9
12.5.0918.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-9
12.5.0918.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-9
12.5.0918.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-9
12.5.0918.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-9
12.5.0918.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-9
12.5.0918.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-9
12.5.0918.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-9
12.5.0918.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-9
12.5.0918.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-9
12.5.1018.070E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 70,0 ER-10
12.5.1018.080E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 80,0 ER-10
12.5.1018.090E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 90,0 ER-10

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



12.5.1018.100E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 100,0 ER-10
12.5.1018.110E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 110,0 ER-10
12.5.1018.120E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 120,0 ER-10
12.5.1018.130E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 130,0 ER-10
12.5.1018.140E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 140,0 ER-10
12.5.1018.150E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 150,0 ER-10
12.5.1018.160E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 160,0 ER-10
12.5.1018.170E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 170,0 ER-10
12.5.1018.180E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 180,0 ER-10
12.5.1018.190E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 190,0 ER-10
12.5.1018.200E	Broca Cabeça de Fosforo Ø 1.80 x 200,0 ER-10
14.5.7140.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 40,0 ER-01
14.5.7140.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 45,0 ER-01
14.5.7140.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 50,0 ER-01
14.5.7140.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 55,0 ER-01
14.5.7140.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 60,0 ER-01
14.5.7140.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 65,0 ER-01
14.5.7140.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 70,0 ER-01
14.5.7140.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 75,0 ER-01
14.5.7140.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 80,0 ER-01
14.5.7140.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 85,0 ER-01
14.5.7140.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 90,0 ER-01
14.5.7140.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 95,0 ER-01
14.5.7140.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 100,0 ER-01
14.5.7240.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 40,0 ER-02
14.5.7240.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 45,0 ER-02
14.5.7240.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 50,0 ER-02
14.5.7240.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 55,0 ER-02
14.5.7240.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 60,0 ER-02
14.5.7240.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 65,0 ER-02
14.5.7240.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 70,0 ER-02
14.5.7240.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 75,0 ER-02
14.5.7240.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 80,0 ER-02
14.5.7240.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 85,0 ER-02
14.5.7240.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 90,0 ER-02
14.5.7240.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 95,0 ER-02
14.5.7240.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 100,0 ER-02
14.5.7340.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 40,0 ER-03
14.5.7340.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 45,0 ER-03
14.5.7340.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 50,0 ER-03
14.5.7340.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 55,0 ER-03
14.5.7340.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 60,0 ER-03
14.5.7340.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 65,0 ER-03
14.5.7340.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 70,0 ER-03

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.7340.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 75,0 ER-03
14.5.7340.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 80,0 ER-03
14.5.7340.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 85,0 ER-03
14.5.7340.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 90,0 ER-03
14.5.7340.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 95,0 ER-03
14.5.7340.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 100,0 ER-03
14.5.7440.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 40,0 ER-04
14.5.7440.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 45,0 ER-04
14.5.7440.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 50,0 ER-04
14.5.7440.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 55,0 ER-04
14.5.7440.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 60,0 ER-04
14.5.7440.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 65,0 ER-04
14.5.7440.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 70,0 ER-04
14.5.7440.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 75,0 ER-04
14.5.7440.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 80,0 ER-04
14.5.7440.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 85,0 ER-04
14.5.7440.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 90,0 ER-04
14.5.7440.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 95,0 ER-04
14.5.7440.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 100,0 ER-04
14.5.7540.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 40,0 ER-05
14.5.7540.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 45,0 ER-05
14.5.7540.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 50,0 ER-05
14.5.7540.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 55,0 ER-05
14.5.7540.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 60,0 ER-05
14.5.7540.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 65,0 ER-05
14.5.7540.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 70,0 ER-05
14.5.7540.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 75,0 ER-05
14.5.7540.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 80,0 ER-05
14.5.7540.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 85,0 ER-05
14.5.7540.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 90,0 ER-05
14.5.7540.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 95,0 ER-05
14.5.7540.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,0 x 100,0 ER-05
14.5.7145.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 40,0 ER-01
14.5.7145.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 45,0 ER-01
14.5.7145.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 50,0 ER-01
14.5.7145.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 55,0 ER-01
14.5.7145.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 60,0 ER-01
14.5.7145.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 65,0 ER-01
14.5.7145.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 70,0 ER-01
14.5.7145.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 75,0 ER-01
14.5.7145.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 80,0 ER-01
14.5.7145.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 85,0 ER-01
14.5.7145.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 90,0 ER-01
14.5.7145.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 95,0 ER-01

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



14.5.7145.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 100,0 ER-01
14.5.7245.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 40,0 ER-02
14.5.7245.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 45,0 ER-02
14.5.7245.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 50,0 ER-02
14.5.7245.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 55,0 ER-02
14.5.7245.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 60,0 ER-02
14.5.7245.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 65,0 ER-02
14.5.7245.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 70,0 ER-02
14.5.7245.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 75,0 ER-02
14.5.7245.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 80,0 ER-02
14.5.7245.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 85,0 ER-02
14.5.7245.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 90,0 ER-02
14.5.7245.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 95,0 ER-02
14.5.7245.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 100,0 ER-02
14.5.7345.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 40,0 ER-03
14.5.7345.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 45,0 ER-03
14.5.7345.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 50,0 ER-03
14.5.7345.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 55,0 ER-03
14.5.7345.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 60,0 ER-03
14.5.7345.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 65,0 ER-03
14.5.7345.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 70,0 ER-03
14.5.7345.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 75,0 ER-03
14.5.7345.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 80,0 ER-03
14.5.7345.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 85,0 ER-03
14.5.7345.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 90,0 ER-03
14.5.7345.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 95,0 ER-03
14.5.7345.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 100,0 ER-03
14.5.7445.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 40,0 ER-04
14.5.7445.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 45,0 ER-04
14.5.7445.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 50,0 ER-04
14.5.7445.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 55,0 ER-04
14.5.7445.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 60,0 ER-04
14.5.7445.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 65,0 ER-04
14.5.7445.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 70,0 ER-04
14.5.7445.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 75,0 ER-04
14.5.7445.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 80,0 ER-04
14.5.7445.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 85,0 ER-04
14.5.7445.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 90,0 ER-04
14.5.7445.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 95,0 ER-04
14.5.7445.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 100,0 ER-04
14.5.7545.040E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 40,0 ER-05
14.5.7545.045E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 45,0 ER-05
14.5.7545.050E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 50,0 ER-05
14.5.7545.055E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 55,0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.7545.060E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 60,0 ER-05
14.5.7545.065E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 65,0 ER-05
14.5.7545.070E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 70,0 ER-05
14.5.7545.075E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 75,0 ER-05
14.5.7545.080E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 80,0 ER-05
14.5.7545.085E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 85,0 ER-05
14.5.7545.090E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 90,0 ER-05
14.5.7545.095E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 95,0 ER-05
14.5.7545.100E	Broca Cortante OVAL Ø 4,5 x 100,0 ER-05
14.5.7150.040E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 40,0 ER-01
14.5.7150.045E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 45,0 ER-01
14.5.7150.050E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 50,0 ER-01
14.5.7150.055E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 55,0 ER-01
14.5.7150.060E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 60,0 ER-01
14.5.7150.065E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 65,0 ER-01
14.5.7150.070E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 70,0 ER-01
14.5.7150.075E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 75,0 ER-01
14.5.7150.080E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 80,0 ER-01
14.5.7150.085E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 85,0 ER-01
14.5.7150.090E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 90,0 ER-01
14.5.7150.095E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 95,0 ER-01
14.5.7150.100E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 100,0 ER-01
14.5.7250.040E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 40,0 ER-02
14.5.7250.045E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 45,0 ER-02
14.5.7250.050E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 50,0 ER-02
14.5.7250.055E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 55,0 ER-02
14.5.7250.060E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 60,0 ER-02
14.5.7250.065E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 65,0 ER-02
14.5.7250.070E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 70,0 ER-02
14.5.7250.075E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 75,0 ER-02
14.5.7250.080E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 80,0 ER-02
14.5.7250.085E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 85,0 ER-02
14.5.7250.090E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 90,0 ER-02
14.5.7250.095E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 95,0 ER-02
14.5.7250.100E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 100,0 ER-02
14.5.7350.040E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 40,0 ER-03
14.5.7350.045E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 45,0 ER-03
14.5.7350.050E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 50,0 ER-03
14.5.7350.055E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 55,0 ER-03
14.5.7350.060E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 60,0 ER-03
14.5.7350.065E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 65,0 ER-03
14.5.7350.070E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 70,0 ER-03
14.5.7350.075E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 75,0 ER-03
14.5.7350.080E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 80,0 ER-03

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.7350.085E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 85,0 ER-03
14.5.7350.090E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 90,0 ER-03
14.5.7350.095E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 95,0 ER-03
14.5.7350.100E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 100,0 ER-03
14.5.7450.040E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 40,0 ER-04
14.5.7450.045E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 45,0 ER-04
14.5.7450.050E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 50,0 ER-04
14.5.7450.055E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 55,0 ER-04
14.5.7450.060E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 60,0 ER-04
14.5.7450.065E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 65,0 ER-04
14.5.7450.070E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 70,0 ER-04
14.5.7450.075E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 75,0 ER-04
14.5.7450.080E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 80,0 ER-04
14.5.7450.085E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 85,0 ER-04
14.5.7450.090E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 90,0 ER-04
14.5.7450.095E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 95,0 ER-04
14.5.7450.100E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 100,0 ER-04
14.5.7550.040E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 40,0 ER-05
14.5.7550.045E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 45,0 ER-05
14.5.7550.050E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 50,0 ER-05
14.5.7550.055E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 55,0 ER-05
14.5.7550.060E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 60,0 ER-05
14.5.7550.065E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 65,0 ER-05
14.5.7550.070E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 70,0 ER-05
14.5.7550.075E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 75,0 ER-05
14.5.7550.080E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 80,0 ER-05
14.5.7550.085E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 85,0 ER-05
14.5.7550.090E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 90,0 ER-05
14.5.7550.095E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 95,0 ER-05
14.5.7550.100E	Broca Cortante OVAL Ø 5,0 x 100,0 ER-05
14.5.8140.040E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 40,0 ER-01
14.5.8140.045E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 45,0 ER-01
14.5.8140.050E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 50,0 ER-01
14.5.8140.055E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 55,0 ER-01
14.5.8140.060E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 60,0 ER-01
14.5.8140.065E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 65,0 ER-01
14.5.8140.070E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 70,0 ER-01
14.5.8140.075E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 75,0 ER-01
14.5.8140.080E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 80,0 ER-01
14.5.8140.085E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 85,0 ER-01
14.5.8140.090E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 90,0 ER-01
14.5.8140.095E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 95,0 ER-01
14.5.8140.100E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 100,0 ER-01
14.5.8240.040E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 40,0 ER-02

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.8240.045E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 45,0 ER-02
14.5.8240.050E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 50,0 ER-02
14.5.8240.055E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 55,0 ER-02
14.5.8240.060E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 60,0 ER-02
14.5.8240.065E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 65,0 ER-02
14.5.8240.070E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 70,0 ER-02
14.5.8240.075E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 75,0 ER-02
14.5.8240.080E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 80,0 ER-02
14.5.8240.085E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 85,0 ER-02
14.5.8240.090E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 90,0 ER-02
14.5.8240.095E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 95,0 ER-02
14.5.8240.100E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 100,0 ER-02
14.5.8340.040E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 40,0 ER-03
14.5.8340.045E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 45,0 ER-03
14.5.8340.050E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 50,0 ER-03
14.5.8340.055E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 55,0 ER-03
14.5.8340.060E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 60,0 ER-03
14.5.8340.065E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 65,0 ER-03
14.5.8340.070E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 70,0 ER-03
14.5.8340.075E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 75,0 ER-03
14.5.8340.080E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 80,0 ER-03
14.5.8340.085E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 85,0 ER-03
14.5.8340.090E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 90,0 ER-03
14.5.8340.095E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 95,0 ER-03
14.5.8340.100E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 100,0 ER-03
14.5.8440.040E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 40,0 ER-04
14.5.8440.045E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 45,0 ER-04
14.5.8440.050E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 50,0 ER-04
14.5.8440.055E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 55,0 ER-04
14.5.8440.060E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 60,0 ER-04
14.5.8440.065E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 65,0 ER-04
14.5.8440.070E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 70,0 ER-04
14.5.8440.075E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 75,0 ER-04
14.5.8440.080E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 80,0 ER-04
14.5.8440.085E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 85,0 ER-04
14.5.8440.090E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 90,0 ER-04
14.5.8440.095E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 95,0 ER-04
14.5.8440.100E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 100,0 ER-04
14.5.8540.040E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 40,0 ER-05
14.5.8540.045E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 45,0 ER-05
14.5.8540.050E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 50,0 ER-05
14.5.8540.055E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 55,0 ER-05
14.5.8540.060E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 60,0 ER-05
14.5.8540.065E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 65,0 ER-05

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.8540.070E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 70,0 ER-05
14.5.8540.075E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 75,0 ER-05
14.5.8540.080E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 80,0 ER-05
14.5.8540.085E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 85,0 ER-05
14.5.8540.090E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 90,0 ER-05
14.5.8540.095E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 95,0 ER-05
14.5.8540.100E	Broca Cortante PEAR Ø 4,0 x 100,0 ER-05
14.5.8145.040E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 40,0 ER-01
14.5.8145.045E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 45,0 ER-01
14.5.8145.050E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 50,0 ER-01
14.5.8145.055E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 55,0 ER-01
14.5.8145.060E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 60,0 ER-01
14.5.8145.065E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 65,0 ER-01
14.5.8145.070E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 70,0 ER-01
14.5.8145.075E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 75,0 ER-01
14.5.8145.080E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 80,0 ER-01
14.5.8145.085E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 85,0 ER-01
14.5.8145.090E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 90,0 ER-01
14.5.8145.095E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 95,0 ER-01
14.5.8145.100E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 100,0 ER-01
14.5.8245.040E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 40,0 ER-02
14.5.8245.045E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 45,0 ER-02
14.5.8245.050E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 50,0 ER-02
14.5.8245.055E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 55,0 ER-02
14.5.8245.060E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 60,0 ER-02
14.5.8245.065E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 65,0 ER-02
14.5.8245.070E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 70,0 ER-02
14.5.8245.075E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 75,0 ER-02
14.5.8245.080E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 80,0 ER-02
14.5.8245.085E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 85,0 ER-02
14.5.8245.090E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 90,0 ER-02
14.5.8245.095E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 95,0 ER-02
14.5.8245.100E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 100,0 ER-02
14.5.8345.040E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 40,0 ER-03
14.5.8345.045E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 45,0 ER-03
14.5.8345.050E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 50,0 ER-03
14.5.8345.055E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 55,0 ER-03
14.5.8345.060E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 60,0 ER-03
14.5.8345.065E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 65,0 ER-03
14.5.8345.070E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 70,0 ER-03
14.5.8345.075E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 75,0 ER-03
14.5.8345.080E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 80,0 ER-03
14.5.8345.085E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 85,0 ER-03
14.5.8345.090E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 90,0 ER-03

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.8345.095E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 95,0 ER-03
14.5.8345.100E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 100,0 ER-03
14.5.8445.040E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 40,0 ER-04
14.5.8445.045E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 45,0 ER-04
14.5.8445.050E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 50,0 ER-04
14.5.8445.055E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 55,0 ER-04
14.5.8445.060E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 60,0 ER-04
14.5.8445.065E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 65,0 ER-04
14.5.8445.070E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 70,0 ER-04
14.5.8445.075E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 75,0 ER-04
14.5.8445.080E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 80,0 ER-04
14.5.8445.085E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 85,0 ER-04
14.5.8445.090E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 90,0 ER-04
14.5.8445.095E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 95,0 ER-04
14.5.8445.100E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 100,0 ER-04
14.5.8545.040E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 40,0 ER-05
14.5.8545.045E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 45,0 ER-05
14.5.8545.050E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 50,0 ER-05
14.5.8545.055E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 55,0 ER-05
14.5.8545.060E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 60,0 ER-05
14.5.8545.065E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 65,0 ER-05
14.5.8545.070E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 70,0 ER-05
14.5.8545.075E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 75,0 ER-05
14.5.8545.080E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 80,0 ER-05
14.5.8545.085E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 85,0 ER-05
14.5.8545.090E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 90,0 ER-05
14.5.8545.095E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 95,0 ER-05
14.5.8545.100E	Broca Cortante PEAR Ø 6,0 x 100,0 ER-05
14.5.8150.040E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 40,0 ER-01
14.5.8150.045E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 45,0 ER-01
14.5.8150.050E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 50,0 ER-01
14.5.8150.055E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 55,0 ER-01
14.5.8150.060E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 60,0 ER-01
14.5.8150.065E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 65,0 ER-01
14.5.8150.070E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 70,0 ER-01
14.5.8150.075E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 75,0 ER-01
14.5.8150.080E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 80,0 ER-01
14.5.8150.085E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 85,0 ER-01
14.5.8150.090E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 90,0 ER-01
14.5.8150.095E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 95,0 ER-01
14.5.8150.100E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 100,0 ER-01
14.5.8250.040E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 40,0 ER-02
14.5.8250.045E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 45,0 ER-02
14.5.8250.050E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 50,0 ER-02

INSTRUÇÃO DE USO



BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025

14.5.8250.055E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 55,0 ER-02
14.5.8250.060E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 60,0 ER-02
14.5.8250.065E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 65,0 ER-02
14.5.8250.070E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 70,0 ER-02
14.5.8250.075E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 75,0 ER-02
14.5.8250.080E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 80,0 ER-02
14.5.8250.085E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 85,0 ER-02
14.5.8250.090E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 90,0 ER-02
14.5.8250.095E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 95,0 ER-02
14.5.8250.100E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 100,0 ER-02
14.5.8350.040E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 40,0 ER-03
14.5.8350.045E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 45,0 ER-03
14.5.8350.050E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 50,0 ER-03
14.5.8350.055E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 55,0 ER-03
14.5.8350.060E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 60,0 ER-03
14.5.8350.065E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 65,0 ER-03
14.5.8350.070E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 70,0 ER-03
14.5.8350.075E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 75,0 ER-03
14.5.8350.080E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 80,0 ER-03
14.5.8350.085E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 85,0 ER-03
14.5.8350.090E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 90,0 ER-03
14.5.8350.095E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 95,0 ER-03
14.5.8350.100E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 100,0 ER-03
14.5.8450.040E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 40,0 ER-04
14.5.8450.045E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 45,0 ER-04
14.5.8450.050E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 50,0 ER-04
14.5.8450.055E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 55,0 ER-04
14.5.8450.060E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 60,0 ER-04
14.5.8450.065E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 65,0 ER-04
14.5.8450.070E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 70,0 ER-04
14.5.8450.075E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 75,0 ER-04
14.5.8450.080E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 80,0 ER-04
14.5.8450.085E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 85,0 ER-04
14.5.8450.090E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 90,0 ER-04
14.5.8450.095E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 95,0 ER-04
14.5.8450.100E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 100,0 ER-04
14.5.8550.040E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 40,0 ER-05
14.5.8550.045E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 45,0 ER-05
14.5.8550.050E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 50,0 ER-05
14.5.8550.055E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 55,0 ER-05
14.5.8550.060E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 60,0 ER-05
14.5.8550.065E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 65,0 ER-05
14.5.8550.070E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 70,0 ER-05
14.5.8550.075E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 75,0 ER-05

14.5.8550.080E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 80,0 ER-05
14.5.8550.085E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 85,0 ER-05
14.5.8550.090E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 90,0 ER-05
14.5.8550.095E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 95,0 ER-05
14.5.8550.100E	Broca Cortante PEAR Ø 5,0 x 100,0 ER-05

IMPORTANTE

As BROCAS, FRESAS E LÂMINAS ESTÉREIS da BIOMETAL devem ser conectadas motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião as respectivas modalidades de uso.

Durante seu uso, o desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso fora do especificado, podem prejudicar a evolução do procedimento e danos aos instrumentos e/ou paciente.

As instrumentais cortantes são componentes metálicos que estão sujeitas a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessário a inspeção e revisão das condições de uso durante o procedimento cirúrgico.

Esteja alerta a caso ocorra variações no desempenho pretendido, como: perda de precisão, instabilidade ou falta de corte.

Caso ocorra estas negativas variações no desempenho, o material deve imediatamente ser substituído por outra unidade.

Assegure-se de que seu instrumental cirúrgico esteja devidamente encaixado e travado na peça de mão antes de acionar o motor cirúrgico.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

As BROCAS, FRESAS E LÂMINAS cirúrgicas somente devem ser utilizadas por profissionais capacitados e após uma análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura completa destas INSTRUÇÕES DE USO do produto.

Sempre verificar se a esterilização se encontra dentro do prazo de validade, no rótulo do produto. Caso a mesma não esteja dentro do período de validade, não utilizar.

A esterilização será garantida somente se a embalagem não estiver danificada, em caso de danos não utilizar o produto.

A vida útil dos instrumentais está diretamente relacionada ao número de vezes que são utilizados e da maneira como são conservados, para isso são necessários alguns cuidados conforme descritos abaixo:

- ✓ Os instrumentos cirúrgicos devem ser conectados motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião as respectivas modalidades de uso – por isso realize o planejamento prévio antes do procedimento cirúrgico.
- ✓ Os instrumentos cirúrgicos devem ser utilizados especificamente para os fins propostos;
- ✓ Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgaste ao longo de sua utilização normal, portanto o uso inapropriado, abuso ou força excessiva dos instrumentos pode causar a quebra deles em procedimentos;
- ✓ O instrumental deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenas porções, evitando-se batidas ou quedas;
- ✓ O uso de irrigação durante a operação reduzirá a possibilidade à necrose térmica;
- ✓ O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do material;
- ✓ Deve-se evitar inclinar ou efetuar movimento de avalanche durante a cirurgia;
- ✓ Manipule com cuidado;
- ✓ A má seleção, colocação, posicionamento e acoplamento dos instrumentos cirúrgicos em motores cirúrgicos podem acarretar resultados indesejados. O cirurgião responsável deve se familiarizar com o produto, sua técnica de manuseio em cirurgia antes de sua utilização.
- ✓ Este é um produto não biocompatível, não absorvente, que tem como finalidade auxiliar procedimentos e/ou a implantação cirúrgica de implantes;
- ✓ Para manuseio e descarte dos instrumentos após uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais locais do país para manuseio de produtos potencialmente contaminantes.

MANIPULAÇÃO

Manipular os instrumentos cirúrgicos esterilizados de acordo com procedimentos assépticos adequados.

Proteger os itens de contato acidental, quebras, sobreposição com outros materiais – visando evitar danos a superfície que podem gerar desvios no momento do uso.

Inspeccionar visualmente todo instrumento cirúrgico antes da sua utilização clínica.

TRANSPORTE

Os Instrumentais devem ser transportados com cuidado, evitando-se danos ao sistema de embalagem estéril, quedas e atritos que possam causar a perda da condição estéril, e até defeitos no acabamento da superfície da peça.

Manter o instrumental sempre nas embalagens originais, até o momento de sua utilização, sob a responsabilidade da equipe médico/hospitalar designada para este fim, lembrando-se que essa deve sempre se atentar para a integridade da embalagem.

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide rótulo.

ARMAZENAMENTO

Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, à umidade ou a substâncias contaminantes.

Os instrumentos cirúrgicos não devem ser armazenados diretamente ao chão (altura mínima = 20 cm), assim, recomenda-se a utilização de prateleiras.

O armazenamento em prateleiras altas e próximas de lâmpadas não deve ser realizado (para não ressecar a embalagem ou apagar o rótulo), além de não poderem ser armazenados em áreas onde sejam utilizadas substâncias contaminantes como inseticidas, pesticidas ou materiais de limpeza.

Cuidados no recebimento, estocagem e transporte devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos estabelecidos pela ANVISA.

INSTRUÇÕES DE USO

As BROCAS, FRESAS E LÂMINAS ESTÉREIS da BIOMETAL são material para saúde destinados ao uso temporário.

Remover o instrumental de sua embalagem somente no momento da sua utilização clínica e manusear em campos estéreis para assegurar a esterilidade.

Após abrir a embalagem, inserir o INSTRUMENTAL CIRÚRGICO somente em peça de mão que atendam aos requisitos das normas aplicáveis para produtos para saúde.

Durante o uso, movimente o INSTRUMENTAL CIRÚRGICO continuamente de modo a evitar o aquecimento localizado e consequente quebra e riscos ao paciente.

Não há contra indicações e nem efeitos colaterais.

Pode ocorrer quebra do instrumental devido ao excesso de força ou rotação empregada, assim como partículas metálicas podem se soltar. Em caso de reações alérgicas, o paciente deve passar por acompanhamento clínico periódico para verificar possíveis efeitos adversos.

RESTRIÇÕES DE USO

Não utilizar o INSTRUMENTAL CIRÚRGICO se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Não utilizar o INSTRUMENTAL CIRÚRGICO se houver sinais de danos.

O produto somente deve ser utilizado por profissional habilitado, recomenda-se médico cirurgião.

Quaisquer complicações devidas a indicações erradas, a uma seleção incorreta da técnica operatória, assim como complicações devidas a limites do método de tratamento aplicado ou a falta de assepsia clínica não são responsabilidade desta fabricante.

DESCARTE DO PRODUTO

A BIOMETAL recomenda o descarte após o uso.

Para manuseio dos instrumentos após uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais vigentes do país para manuseio de produtos potencialmente contaminantes.

RASTREABILIDADE

Para garantir a rastreabilidade, recomenda-se ao cirurgião ou sua Equipe o registro no prontuário do paciente das informações acerca do INSTRUMENTAL CIRÚRGICO estéril utilizado.

As informações necessárias para rastreabilidade são as relativas ao produto utilizado, cirurgia e paciente, conforme abaixo:

- ✓ Nome do paciente;
- ✓ Nome do cirurgião;
- ✓ Nome do Hospital;
- ✓ Nome do Fabricante;
- ✓ Nome do Fornecedor;
- ✓ Data da cirurgia;
- ✓ Código do produto;

INSTRUÇÃO DE USO

BROCAS DIAMANTADAS ESTÉREIS – CADASTRO ANVISA nº 80482490025



- ✓ Número de lote do produto;
- ✓ Quantidades utilizadas;
- ✓ Registro do produto na ANVISA

As informações necessárias para a rastreabilidade do produto, a seguir, encontram-se gravadas na peça e/ou podem ser obtidas através da ETIQUETA DE RASTREABILIDADE e RÓTULO FIXADO NA EMBALAGEM DO PRODUTO.

A BIOMETAL disponibiliza de forma adicional 3 VIAS da ETIQUETA DE RASTREABILIDADES autoadesiva e avulsas, com as mesmas informações do rótulo aprovado pela ANVISA, destinados à rastreabilidade do produto.

Os rótulos autoadesivos devem ser devidamente distribuídos de forma a garantir a rastreabilidade do produto.

Caso seja observado algum EVENTO ADVERSO ou haja necessidade de realização de QUEIXA TÉCNICA deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA, que pode ser encontrado no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no endereço www.anvisa.gov.br, link NOTIVISA.

Nota: Se algum instrumento objeto de desvios de qualidade necessitar e for devolvido ao fabricante BIOMETAL e/ou as Empresas Distribuidoras, este item deve ser descontaminado e esterilizado, e ser acompanhado com a evidência relevante destes processos.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

BIOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.165.928/0001-75

Endereço: V LUIZ VARGA 2010 - GLEBA BEATRIZ

Cidade/UF: LIMEIRA/SP

CEP: 13.486-606

Fones: (19) 3495-2485 / (19) 3495 3296

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA VICELLI – CREA/SP 5063105420

CADASTRO ANVISA Nº: 80482490025

REVISÃO: 02