
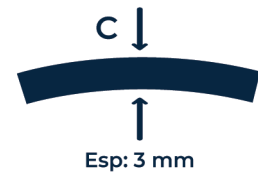
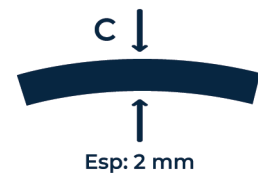
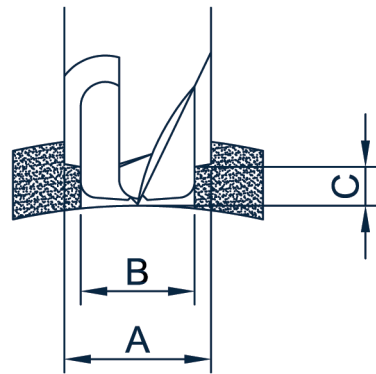


**Linha Descartável**

**Broca Automática (Trepanação)**

**!** A Broca Automática é indicada para realização do primeiro acesso em procedimentos de craniotomia através de orifícios de trepanação, tendo sua ação interrompida automaticamente ao entrar em contato com tecidos moles.


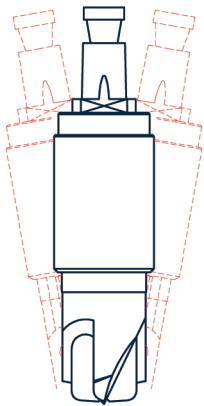


**MODO DE USO (IMPORTÂNCIA DO POSICIONAMENTO CORRETO):**

A fim de assegurar uma operação segura e eficaz, é de suma importância manter a posição precisa (90°) do perfurador em relação ao crânio. Essa posição deve ser constantemente mantida em mente durante todo o processo de perfuração.

A - Diâmetro Externo de Perfuração  
 B - Diâmetro Interno de Perfuração  
 C - Espessura mínima do crânio necessária para o sistema de parada automática atuar.

**Tipos de Engates**

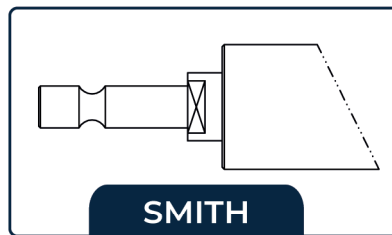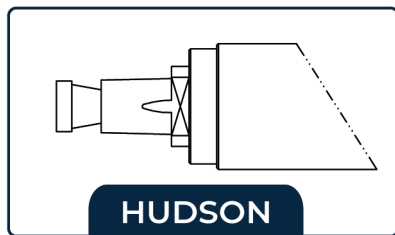

**Informações Técnicas**



**REGISTRO ANVISA**  
 HUDSON: 80482490025  
 SMITH: 80482490003



**MATERIAL**  
 INOX



**ESTERELIZAÇÃO**  
 ÓXIDO DE ETILENO



**VALIDADE**  
 5 ANOS

