


Linha Descartável


Lâmina Microcirurgia




As Lâminas para microcirurgia se destinam a procedimentos que exigem extrema precisão e controle. O material utilizado e processo de afiação de alta precisão garante a segurança e minimiza o risco de lesões nos tecidos durante a incisão, o design das lâminas proporciona facilidade de uso e eficácia, características que dificilmente são alcançadas por bisturis convencionais.

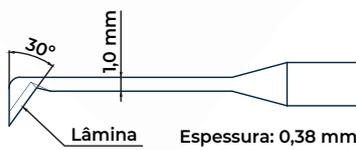


Lâmina Gancho: Esta lâmina possui uma geometria de corte com o formato de gancho em L facilitando pequenas perfurações e cortes precisos e geralmente é utilizada em cirurgias para remoção de tumor cerebral, separação de tecidos moles e descompressão microvascular.

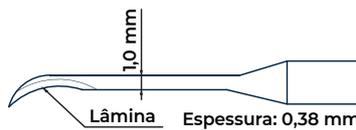



Lâmina Curva: Esta lâmina possui uma geometria de corte em arco facilitando fisgar tecidos para corte e geralmente é utilizada em cirurgias transesfenoidais e em incisões de tecidos moles.

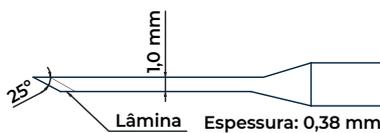

Lâmina Reta: Esta Lâmina possui uma afiação na extremidade em ângulo (25°), sua geometria pontiaguda facilita a punção e incisões em locais estreitos.

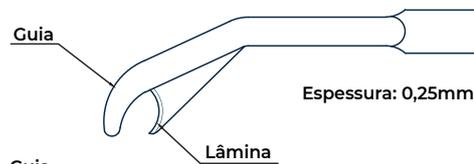

Lâmina Dura-Máter: Estas Lâminas foram projetadas especialmente para corte da dura-máter, sua proteção curvada e sem corte protege os tecidos subjacentes enquanto sua lâmina ultra afiada promove um corte seguro e minimiza os riscos de lesões.

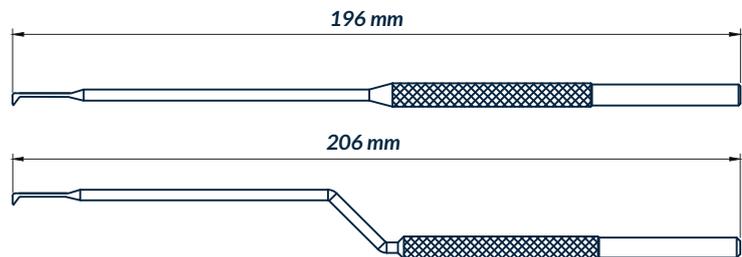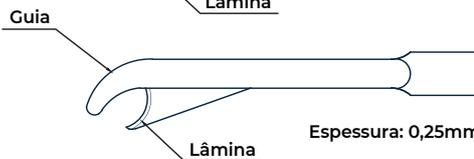

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499010



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

