



Línea Desechable

Perforador Craneal Auto Stop (Trepanación)

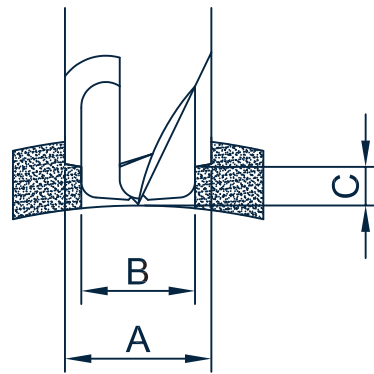



El Perforador Craneal Auto Stop es indicado para realizar el acceso inicial en procedimientos de craniotomía a través de orificios de trepanación, con su acción interrumpida automáticamente al contacto con tejidos blandos.

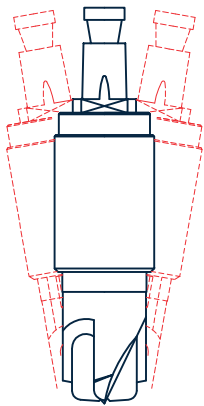

A ϕ 11 mm



A ϕ 14 mm

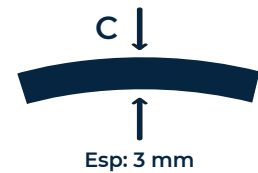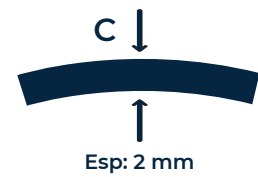


INSTRUCCIONES DE USO (IMPORTANCIA DEL POSICIONAMIENTO CORRECTO):


Para garantizar una operación segura y efectiva, es extremadamente importante mantener la posición precisa (90°) del perforador con respecto al cráneo. Esta posición debe mantenerse constantemente durante todo el proceso de perforación.

A - Diámetro de perforación externa
B - Diámetro de perforación interna
C - Espesor mínimo de cráneo requerido para activar el sistema de parada automática

Tipos de Acoplamiento

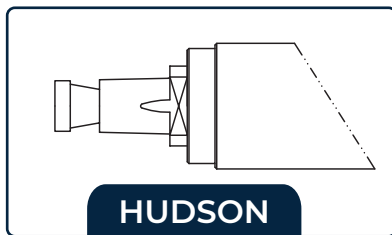

HUDSON

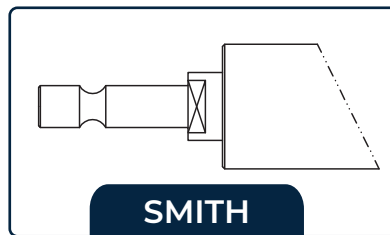

SMITH

Información Técnica



REGISTRO ANVISA
HUDSON: 80482490025
SMITH: 80482490003



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

